



# Zen-O<sup>lite</sup>™

**Portable Oxygen Concentrator**

**Model: RS - 00600**

**User Manual**



**OXYGENConcentratorStore**

FROM AMERICAN MEDICAL SALES & RENTALS

1-877-774-9271 | [www.oxygenconcentratorstore.com](http://www.oxygenconcentratorstore.com)





# Zen-O™

|                         |            |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| <b>English</b> .....    | <b>2</b>   | <b>EN</b> |
| <b>Deutsch</b> .....    | <b>36</b>  | <b>DE</b> |
| <b>Français</b> .....   | <b>74</b>  | <b>FR</b> |
| <b>Nederlands</b> ..... | <b>110</b> | <b>NL</b> |
| <b>Español</b> .....    | <b>148</b> | <b>ES</b> |
| <b>Português</b> .....  | <b>184</b> | <b>PT</b> |
| <b>Italiano</b> .....   | <b>222</b> | <b>IT</b> |
| <b>Svenska</b> .....    | <b>258</b> | <b>SV</b> |

# English

## User manual: Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator (Model: RS-00600)

### CONTENT

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Foreword</b> .....                        | <b>4</b>  |
| 1.1. General Information .....                  | 4         |
| 1.2. Classification .....                       | 4         |
| 1.3. Typographical Conventions .....            | 5         |
| <b>2. Intended Use</b> .....                    | <b>5</b>  |
| <b>3. Safety Instructions</b> .....             | <b>6</b>  |
| 3.1. Warnings Overview .....                    | 6         |
| 3.2. Cautions Overview .....                    | 7         |
| 3.3. Overview of Important Information: .....   | 9         |
| <b>4. Instructions and Training</b> .....       | <b>9</b>  |
| <b>5. Product Description</b> .....             | <b>10</b> |
| 5.1. Schematic Description .....                | 10        |
| <b>6. General Instructions Before Use</b> ..... | <b>11</b> |
| 6.1. Accessories List .....                     | 11        |
| 6.2. Battery .....                              | 11        |
| 6.3. Nasal Cannula .....                        | 13        |
| <b>7. Operating Zen-O lite™</b> .....           | <b>14</b> |
| 7.1. Connecting a Nasal Cannula .....           | 14        |
| 7.2. Turning On .....                           | 15        |
| 7.3. Choosing a Preferred Language .....        | 15        |
| 7.4. Adjusting Setting .....                    | 15        |
| 7.5. Battery Button .....                       | 16        |
| 7.6. Responding to Alarms .....                 | 16        |
| 7.7. Turning Off .....                          | 16        |

EN

- 8. Traveling with the Zen-O lite™ POC by Air ..... 17
  - 8.1. Passenger Pre-flight Preparation ..... 17
  - 8.2. Boarding and In-flight Information ..... 19
  - 8.3. Transportation Security Administration (TSA) Requirements ..... 20
- 9. Alarm Indicators..... 21
  - 9.1. Alarms ..... 22
- 10. Troubleshooting ..... 25
- 11. Maintenance and Cleaning ..... 26
  - 11.1. Routine Maintenance..... 26
  - 11.2. Cleaning ..... 26
  - 11.3. Service Life ..... 26
  - 11.4. Service Connector..... 26
- 12. Device Repair and Disposal ..... 27
  - 12.1. Repair ..... 27
  - 12.2. Sieve Modules Replacement Instructions: ..... 27
  - 12.3. Disposal ..... 28
- 13. Warranty ..... 28
- 14. Trademarks and Disclaimer ..... 28
  - 14.1. Trademark ..... 28
  - 14.2. Disclaimer ..... 28
- 15. Technical Description..... 29
  - 15.1. Electromagnetic Compatibility (EMC) Information ..... 31
- 16. Glossary - Explanation of Packaging and Labelling Symbols ..... 34

# 1. Foreword

Please refer to this manual for detailed instructions on warnings, cautions, specifications, and additional information.

*Important: Users should read this entire manual before operating the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator. Failure to do so could result in personal injury and/or death. If you have questions about the information in this user manual or about the safe operation of this system, contact your distributor.*

EN

## 1.1. General Information

This user manual provides information for users of the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator. For the sake of brevity, the terms "concentrator," "POC," "unit," or "device" are sometimes used in this document to refer to the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator. "Patient" and "User" are used interchangeably.

## 1.2. Classification

This device is listed with an internationally recognised testing laboratory and classified with respect to electric shock, fire, and mechanical hazards in accordance with the following standards:

- IEC/EN 60601-1:2012, Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance.
- IEC/EN 60601-1-2:2014, Part 1-2: General Requirements for Safety – Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests.
- IEC/EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Medical Electrical Equipment – Part 1-6: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance – Collateral Standard: Usability.
- IEC/60601-1-8:2006 Medical Electrical Equipment – Part 1-8: General Requirements for Safety – Collateral Standard: General Requirements, Tests and Guidance for Alarm Systems in Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems.
- IEC/60601-1-11:2011 Medical Electrical Equipment - Part 1-11: General Requirements for Safety - Collateral Standard: Requirements for Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems Used in the Home Healthcare Environment.
- ISO 80601-2-67:2014, Medical Electrical Equipment - Part 2-67: Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Oxygen Conserving Equipment.
- ISO 80601-2-69:2014, Medical Electrical Equipment - Part 2-69: Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Oxygen Concentrator Equipment.
- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Canadian Standard, Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance.
- Medical Device Directive 93/42/EEC.


### This equipment is classified as:

- Class II
- Class IIa according to the MDD 93/42/EEC
- Type BF
- IP22 with the carry bag

### 1.3. Typographical Conventions

This user manual contains warnings, cautions, and notes to help call attention to the most important safety and operational aspects of the device. To help identify these items when they occur in the text, they are shown using the following typographical conventions:

 **WARNING:** Statements that describe serious adverse reactions and potential safety hazards.

 **CAUTION:** Statements that call attention to information regarding any special care to be exercised by the practitioner and/ or patient for the safe and effective use of the device.

*IMPORTANT: Statements calling attention to additional significant information about the device or a procedure.*

## 2. Intended Use

Zen-O lite™ portable oxygen concentrator is intended to provide supplemental oxygen to patients with chronic pulmonary diseases and any patient requiring supplemental oxygen.

The device is portable, enabling patients who need an oxygen device to be treated at home according to a clinician's prescription or direction.

Zen-O lite™ is not intended for use in life supporting or life sustaining situations, and is provided non-sterile. It is a prescription only device, and designed for indoor and outdoor use. For correct operational conditions see Chapter 15. Technical Description.

### Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator is not intended to be used:

- in life-supporting or life-sustaining situations
- in an operating or surgical environment
- with a non-adult population
- in conjunction with flammable anaesthetic or flammable materials

## **3. Safety Instructions**



### **3.1. Warnings Overview**

- 1. The device must be used in the carry bag to provide protection from liquid intrusion from rain and/or spills.**
- 2. There is a risk of fire associated with oxygen equipment and therapy. Do not use near sparks or open flames.**
- 3. The settings of Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator RS-00600 might not correspond with continuous flow oxygen.**
- 4. The settings of other models or brands of portable oxygen concentrators do not correspond with the settings of Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator RS-00600.**
- 5. Wind or strong drafts can adversely affect accurate delivery of oxygen therapy.**
- 6. Geriatrics or any other patient unable to communicate discomfort can require additional monitoring to avoid harm.**
- 7. Smoking (including e-cigarettes) during oxygen therapy is dangerous and is likely to result in facial burns, serious injury or death of the patient and others from fire. Do not allow smoking or open flames within the same room as the portable oxygen concentrator or any oxygen carrying accessories. If you smoke, you must always turn the oxygen concentrator off, remove the cannula and leave the room where either the cannula or the concentrator is located. If unable to leave the room, you must wait 10 minutes after the flow of oxygen has been stopped.**
- 8. Use only water based lotions that are oxygen compatible, before and during oxygen therapy. Never use petroleum or oil based lotions or salves when operating the device to avoid the risk of fire and burns.**
- 9. Open flames during oxygen therapy are dangerous and are likely to result in fire or death. Do not allow open flames within 2 metres of the oxygen concentrator or any oxygen carrying accessory.**
- 10. Oxygen makes it easier for a fire to start and spread. Do not leave the nasal cannula on bed coverings or chair cushions with the concentrator on, but not in use; the oxygen will make the materials flammable. Turn the concentrator off when not in use to prevent oxygen enrichment.**
- 11. Explosion hazard. Do not use in the presence of flammable anaesthetics!**
- 12. Do not use this device in the presence of pollutants or fumes.**
- 13. Do not submerge this device in liquid. Do not expose to water or precipitation. Do not expose to dusty conditions.**
- 14. Do not use a device or any accessory that shows any sign of damage.**



15. Do not use lubricants on this device or any of its accessories.
16. Use of this device at an altitude above 4,000 m (13,000 feet), or outside the temperature range of 5°C (41°F) to 40°C (104°F), or outside the humidity range of 5% to 93% may adversely affect the flowrate and percentage of oxygen and consequently the quality of therapy. When not in use, the device should be stored in a clean, dry environment between -20°C and 60°C (-4°F and 140°F). Use and/or storage outside of the valid conditions may damage the product. For more technical details see Chapter 1515. Technical Description.
17. Always ensure the battery is inserted before using this device.
18. If feeling ill or experiencing discomfort while using this device, contact your clinician or seek medical assistance immediately to avoid harm.
19. Your home oxygen provider must verify the compatibility of the device and all accessories used prior to use. To ensure you are receiving the therapeutic amount of oxygen for your medical condition, the device and accessories must only be used after one of more settings have been determined or prescribed for you at your specific activity levels by a healthcare professional.
20. The electrical cord and tubing could present a tripping or strangulation hazard. Keep away from children and pets.
21. Do not disassemble or modify this device or any of its accessories. Do not attempt any maintenance other than tasks described in Chapter 1010. Troubleshooting. Disassembly can create an electric shock hazard and will void the warranty. Contact your distributor for servicing by authorised personnel.
22. Use only spare parts recommended by the manufacturer to ensure proper function and to avoid the risk of fire and burns.
23. Do not repair or perform service work while the device is in use by the patient.



### 3.2. Cautions Overview

1. Keep away from heat sources (fireplaces, radiant heaters, etc.) that could cause the operating temperature at or near the device to exceed 40°C (104°F).
2. The display may be difficult to read under bright lighting conditions (sunlight, interior lights, etc.), move away from direct light for viewing the display.
3. Keep away from lint or other loose material that could block the air intake vents.
4. Some countries restrict this device to be sold by or on an order of a prescribing clinician. Please ensure you comply with relevant local laws.
5. Non-prescribed oxygen therapy can be hazardous under certain circumstances. Use this device only when prescribed by a clinician.

6. Patients with a fast breathing rate setting may require more oxygen than this device can produce - see Chapter 15 - Technical Description. This device may not be appropriate in that case. Consult your clinician for alternative treatment.
7. Always operate the device at the setting prescribed by a clinician. Do not alter the setting unless prescribed by a clinician. Periodic reassessment of the flow settings should be done by a clinician.
8. Do not use this device while sleeping unless prescribed by your clinician.
9. It is recommended for an alternate source of oxygen to be made available in the event of power outage or mechanical failure. Consult your home oxygen provider or clinician for an appropriate backup system.
10. This device may not reach specified oxygen concentration purity until it has been in use for up to 2 minutes at set flowrate.
11. This device is designed for use by one patient at a time.
12. If you are unable to hear or see alarms, do not have normal tactile sensitivity, or cannot communicate discomfort, consult a clinician before using this device.
13. If oxygen concentration drops below the specified level, an alarm will indicate this condition. If alarm persists, stop using this device, switch to an alternate source of oxygen, and contact your home oxygen provider.
14. Only use approved accessories with this device. See approved accessories list in section 6.1 and cannula approved for use with this device. Using unapproved accessories or cannula may impair the performance of this device.
15. This device is not designed for use with a humidifier or nebuliser. If a humidifier or nebuliser is used with this device, performance may be diminished and the device may be damaged.
16. Always follow the cannula manufacturer's instructions for proper use.
17. Replace the cannula on a regular basis. Check with your home oxygen provider or clinician to determine how often the cannula should be replaced.
18. Check that this device operates on battery after disconnecting from the power source.
19. Only charge battery in this device or in an approved charger. (See approved accessories list.)
20. Remove battery if this device is not going to be used for more than seven days. Store battery in a cool, dry place.
21. Do not use cleaning agents other than those specified in this manual. Allow the cleaning solution to dry from the cleaned surface before use.
22. Always turn off this device when not in use.

23. Always disconnect power and turn off this device before cleaning, see Chapter 11 - Maintenance and Cleaning
24. Do not obstruct air intake or exhaust vents when operating this device. Blockage can cause buildup of internal heat and shut down or damage this device.
25. Do not place objects on top of this device.
26. Keep away from children and pets to prevent damage to the device and accessories and/or inadvertent setting changes.
27. Keep the device away from pets and pests.
28. This device is rated IP22 while used in the carry bag. Do not use in dusty or wet conditions.
29. Always use in a well ventilated location.
30. Always follow the maintenance schedule as specified in section 11.1 - 11.1. Routine Maintenance.
31. If this device indicates an abnormal condition, see Chapter 10 - 10. Troubleshooting.
32. Use caution when touching this device in high ambient temperatures.
33. The device can be re-used by a new patient. The device should be cleaned as indicated in section 11.2 of this user manual and, according to local laws and prescriptions prior to delivering to a new patient.
34. The device can be isolated from power by disconnecting the power supply from the input connector, see fig. 1, position the device for easy access to the power supply input connector.

### 3.3. Overview of Important Information:

1. *If an extension cord is necessary, use a UL listed 15 amp or higher cord. Do not connect any other devices on the same extension cord. Do not use a multisoletted extension cord.*
2. *Inhale through the nose for the concentrator to work most effectively. Inhaling through the mouth may result in less effective oxygen therapy.*

## 4. Instructions and Training

The Medical Devices Directive 93/42/EEC states that the product provider must ensure that all users of this device are provided with the user manual and are fully trained in the use of the equipment.



**WARNING: Do not use the product without proper training! Patients and care givers must be trained by an experienced person who has been authorised by the manufacturer and has appropriate training, knowledge and experience.**

For further information about training contact your home oxygen provider.

## 5. Product Description

### 5.1. Schematic Description



Fig. 1

## 6. General Instructions Before Use

A variety of accessories can enhance the portability and use of the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator. In addition to the device, the package contains accessories to get started and a user manual. Contact your home oxygen provider for a complete list of available accessories.

Always inspect the device and its accessories for any sign of damage before use.

*Important: While the box or packaging may exhibit some damage, e.g., tears or dents, the device may still be in a usable condition. If the device or any accessory shows any sign of damage, contact your home oxygen provider.*

Before you get started, check to make sure you have the following:

- Concentrator
- Battery
- Carry bag
- AC power supply
- DC power supply

### 6.1. Accessories List

Only use power supplies/adapters or accessories specified in this manual. Using accessories that are not specified may create a hazard and/or negatively affect the performance of the device.

- Rechargeable battery (RS-00601)
- AC power supply – European cord (RS-00602)
- AC power supply – United Kingdom cord (RS-00603)
- AC power supply – North America cord (RS-00604)
- DC power supply (RS-00605)
- Carry bag (RS-00606)
- European power cord (RS-00504)
- United Kingdom cord (RS-00506)
- North America cord (RS-00503)
- External battery charger - EU (RS-00516)
- External battery charger - US (RS-00515)
- External battery charger - UK (RS-00517)

 **WARNING: Do not use the device or any accessory that shows any sign of damage.**

### 6.2. Battery


Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator can always be used when directly connected to a power source. However, to enhance its portability, the concentrator is equipped with a rechargeable lithium-ion internal battery.

 **WARNING: Always ensure the battery is inserted before using this device.**

*IMPORTANT: Optional power cords are available for various global use and travel (see Section 6.1 - 6.1. Accessories List).*

### 6.2.1. Charging the Battery

**⚠ CAUTION:** Only charge the battery in this device or in an approved charger section 6.1 - 6.1. Accessories List.).

- Prior to using the device for the first time, install the battery as shown in Fig. 2. the battery will latch when fully seated.
- Close the battery compartment ensuring the cover latches to the device.
- Connect the AC/DC power supply by plugging the round connector into the receptacle on the side of the concentrator Fig. 3.
- Plug the other end of the AC/DC power supply into a power outlet. Always use caution when inserting the power supply to a wall outlet.
- The display shows **Charging NN%** .

The charger is universal and supports a wide variety of international markets, so it can be plugged into an outlet with 100-240V AC, 50-60 Hz.

Allow the battery to charge for a minimum of three hours before use. Once completely charged, the device can run for up to 4 hours on battery power, at 18 breaths per minute.

*IMPORTANT: Battery run time may vary based on breathing rate, age of battery, and environmental conditions. See displayed text on device for battery charge status.*

*IMPORTANT: Ensure power status icon (see Fig. 7) indicates power is connected. If not, check that cord is plugged in completely (see Chapter 10 - Trouble shooting for more information)*

To maximise battery life and run time, avoid letting the battery deplete and use while connected to a power source whenever possible. The internal battery will automatically charge whenever the concentrator is connected to a power source. You can use the device while the battery is charging. The LCD panel will indicate whether the device is operating on battery or external AC power.

The fully charged battery will retain some level of charge for up to thirty days in this device when not in use - see Caution below for battery removal/storage recommendation.



Fig. 2




Fig. 3


*IMPORTANT: Battery damage may result if the concentrator's battery is allowed to discharge completely.*

*IMPORTANT: After 300 charge/discharge cycles, the battery capacity will be at least 80% of its original capacity. Replace the battery when the reduced battery life is affecting your mobility.*

*IMPORTANT: The DC power supply should be utilized on vehicles with the proper power output rating.*

*IMPORTANT: The vehicle should be running while utilizing the DC adapter to power the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator.*

 **CAUTION:** Remove battery if this device is not going to be used for more than seven days. Store battery in a cool, dry place.


 **CAUTION:** Check that this device operates on battery after disconnecting from the power source.

*IMPORTANT: When not using the battery inside the unit, be sure to store it in the protective sleeve that was provided with the original package. If the battery will not be utilised for long durations, charge the battery fully at a minimum of once per year.*

### 6.3. Nasal Cannula

**Only use a nasal cannula with the following specifications:**

- 7ft (2.1 m) or 25ft (7.6 m) long
- High flow
- Crush resistant
- Large internal diameter bore
- Straight non-tapered tips
- Suitable for up to 15 litres per minute (lpm) at a max. pressure of 3.6 psi
- Meets substance compatibility of IEC/EN 60601-1

 **CAUTION:** Only use approved accessories with this device. Refer to the approved accessories guide for a complete list of accessories and cannula approved for use with this device. Using unapproved accessories or cannula may impair the performance of this device, including flow rate or oxygen purity.

Contact your distributor for updated information and accessories or if additional, optional, or replacement accessories are needed.



## 7. Operating Zen-O lite™

**IMPORTANT:** Read Chapter 3. Safety Instructions before using this device.

Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator is designed for ease of use, with all functions accessed through just a few keys on the control panel.

The device should be carried in its carry bag and used when positioned upright on a flat surface or on the floor while in the carry bag. The patient should be within the recommended cannula length during use.

EN

**IMPORTANT:** Except during startup and shutdown sequences, the backlight on the display screen will remain off. Pressing any key will turn the backlight on briefly. The backlight will also remain activated during an un-muted alarm condition.

### 7.1. Connecting a Nasal Cannula

**⚠ CAUTION:** Replace the cannula on a regular basis. Check with your home oxygen provider or clinician to determine how often the cannula should be replaced.

**⚠ CAUTION:** Always follow the cannula manufacturer's instructions for proper use.

Connect the tubing to the cannula port as shown in Fig. 5.

To connect the cannula to the patient, position the cannula tips in patient's nostrils and pass tubing over both ears and under chin. Follow manufacturer's instructions.

Slide adapter up tubing to adjust for comfort and fit.

Once the cannula is secured, breathe normally through the nose. Zen-O lite™ will detect a breath and deliver the oxygen during inhalation.

**IMPORTANT:** Improper cannula placement may result in the device being unable to detect all respiratory efforts of the patient. Ensure cannula is connected securely and it has been fully inserted.

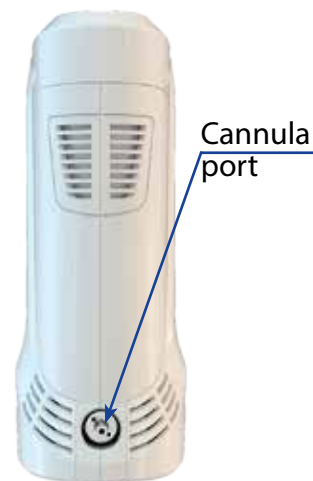



Fig. 5



Fig. 6



## 7.2. Turning On

- To turn the device on, press the power key .
- The concentrator will chirp and the green, yellow, and red LEDs will flash once, while the screen displays the device name.



Red LED - indicates a warning danger and/or a need for urgent action








Yellow LED - indicates caution or attention required



Flashing green LED - indicates oxygen is being delivered.



*IMPORTANT: No adjustments can be made until the startup sequence is completed.*

## 7.3. Choosing a Preferred Language

- While the device is on, hold down the plus  and mute  buttons together for approximately four seconds until it says "Language:".
- Next cycle through the available languages using the plus  or minus  buttons.
- When the desired language is shown, press the battery button  to select. The device will change the language and go back to the normal flow screen.

## 7.4. Adjusting Setting

*IMPORTANT: After powering on Zen-O lite™, the startup sequence will take approximately 35 seconds. Specified oxygen level will be reached within 2 minutes of use.*

- The device starts working in the previous setting.
- The device will deliver a pulse of oxygen at the beginning of each of your inhalation.
- Pulse mode of operation can be adjusted from 1.0 to 5.0 in 0.5 increments with the  and  keys.

*IMPORTANT: If an air leak is suspected, leaks can be detected with a solution of soap and water applied to the cannula-concentrator connection point and looking for bubbles.*

The current setting and power source (external power or battery; battery icon also shows approximate level of charge remaining) are shown on the display screen as shown in Fig. 7.









Zen-O lite™ operating on battery power.



Zen-O lite™ running on external power.

## 7.5. Battery Button

The battery button  allows you to check the status of the battery. Repeatedly pushing the button will cycle through all the information.


- First, the gauge information will be shown **Charging NN%**  or **Batt.1: NN%** .
- Next **Batt1: NN%**  the number of charge cycles will be shown **Batt.1: N cycles**  or **Batt: cycles** .

After the third push of the battery button, the display will alternate back to the main screen showing the current flow setting. It will also automatically exit the battery status menu and go back to the main flow setting display after approximately 15 seconds of no buttons being pushed.

## 7.6. Responding to Alarms



**CAUTION:** If you are unable to hear or see alarms, do not have normal tactile sensitivity, or cannot communicate discomfort, consult your clinician before using this device.

Pressing the alarm mute button  at any time will silence the buzzer. The length of the mute period depends on the severity of the alarm (see Chapter 99. Alarm Indicators). During this mute period, the mute LED will remain illuminated, indicating the alarm buzzer is muted. Push the mute key again to un-mute alarms. Pressing the mute key when there is no active alarm will mute any future medium or low priority alarms for eight hours. See Chapter 9 9. Alarm Indicators and Chapter 1010. Troubleshooting for additional information on alarms.

*IMPORTANT: The alarm system is tested during the startup sequence. You should see all alarm lights briefly turn on and the audible alarm indicator chirp. If alarms are suspected of mis-operating, contact your distributor for verification that alarms are working correctly.*

## 7.7. Turning Off



**CAUTION:** Always turn off this device when not in use.

To turn the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator off, press and hold the power key. The device will chirp and the screen will display a shutdown message **Shutting off** for approximately five seconds, then go into low-power mode.

*IMPORTANT: Do not disconnect the AC power supply and remove the battery at the same time while the unit is running. Always use the power key to turn the device off. Wait until the device has completely shut down before disconnecting from power and removing the battery.*

## 8. Traveling with the Zen-O lite™ POC by Air

### 8.1. Passenger Pre-flight Preparation

#### 8.1.1. Required Labeling

Your Zen-O lite™ POC is suitable for aircraft use and has met all acceptance criteria of the United States Federal Aviation Administration (FAA). This is verified by the statement on the back of the POC that states, in red text, “The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft”. Prior to the flight, you may be asked to show this text on the POC to the Flight Attendant.

EN

#### 8.1.2. Healthcare Provider Consultation

The FAA does not require a passenger to consult with a healthcare provider prior to using a Zen-O lite™ POC on board an aircraft. However, you, together with your healthcare provider, may wish to discuss the following:

- The effects of a pressurised cabin (cabin pressure altitude can reach 8,000 feet) on your oxygen needs.
  - Some Zen-O lite™ POC users need higher litre flow or litre per minute (LPM) setting for the Zen-O lite™ POC in the air because of cabin pressure altitude.
  - Some Zen-O lite™ POC users who use a Zen-O lite™ POC occasionally on the ground may need to use their Zen-O lite™ POC for the entire flight because of cabin pressure altitude.
- Your oxygen needs at the time of travel and whether your needs have changed since the Zen-O lite™ POC was first prescribed or during the most recent consultation with a healthcare professional.
- Certain key provisions in the Zen-O lite™ POC operating manual regarding oxygen delivery, indicators, warnings, and alerts, as well as setting/changing litre flow or LPM.
- All crewmembers (pilots and flight attendants (F/A)) receive training regarding the handling of in-flight medical events. However, the FAA does not require that air carriers or crewmembers provide medical assistance to passengers.

*IMPORTANT: Additional information regarding passenger health and safety can be found at [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

#### 8.1.3. Determine a Sufficient Number of Batteries

You are responsible for bringing a sufficient number of batteries to power the Zen-O lite™ POC for the duration of the expected use of your Zen-O lite™ POC. You should consider at least the following in determining a sufficient number of batteries:

- Healthcare professional advice regarding duration of Zen-O lite™ POC use.
- Air carrier information regarding duration of the expected flight as well as any layovers and unanticipated delays.

*IMPORTANT: You may be flying on multiple flights or multiple airlines, which could also involve extended periods of Zen-O lite™ POC use on the ground between flights.*

- Zen-O lite™ owner's manual information regarding expected duration of battery power.  
*IMPORTANT: You should never rely upon available onboard aircraft electrical power during a flight.*
- Air carrier requirements to carry a certain amount of batteries are typically available on each airline's web site.

*IMPORTANT: Air carriers may require you to bring enough batteries to power the device for at least 150% of the expected maximum flight duration.*

#### **8.1.4. Documentation**

You are responsible for the operation of the Zen-O lite™ POC on board the aircraft. For this reason, the FAA recommends that passengers carry with them, at minimum, this User Manual and any other written information provided by your healthcare professional regarding the Zen-O lite™ POC and its use.

#### **8.1.5. Physician's Statement**

An air carrier may require a medical certificate from a passenger with a disability if there is reasonable doubt that the individual can complete the flight safely without requiring extraordinary medical assistance during the flight. Also, an air carrier may require a medical certificate from a person who needs medical oxygen during a flight. The FAA does **not** require passengers to obtain a physician's statement and present such statement to the operator or pilot in command (PIC) prior to Zen-O lite™ POC use on board the aircraft.

#### **8.1.6. Spare Batteries**

Battery damage and battery short circuit can result in battery overheating and fire. These events, in turn, can result in personal injury to passengers, and in the worst case for certain types of batteries, a catastrophic passenger compartment fire. Thus, spare lithium batteries carried on board aircraft must be individually protected from short circuit by placement in original retail packaging, by taping over exposed terminals, or by placing each battery in a separate plastic bag / protective pouch.

*IMPORTANT: Spare lithium batteries are prohibited from being carried in checked baggage on an aircraft.*

You are responsible for ensuring that all spare batteries carried in carry-on baggage are properly packaged. Zen-O lite™ POC equipment providers, some airlines, and freight forwarders specialising in small package shipments may provide this packaging service for you.

## 8.2. Boarding and In-flight Information

### 8.2.1. Carry-on baggage

Your Zen-O lite™ POC is an assistive device. In this case, carriers shall not, in implementing their carry-on baggage policy, count the Zen-O lite™ POC toward a limit on carry-on items brought into the cabin by a qualified individual with a disability.

*IMPORTANT: A bag with additional batteries that is required to power the Zen-O lite™ POC during the flight could also be considered an assistive device. However, there are restrictions on the Watt Hour (Wh) rating of the battery which is limited to 100Wh per battery. For your Zen-O lite™ POC, the Watt Hour (Wh) rating is less than 100Wh per battery maximum, therefore no limitation will be imposed.*

### 8.2.2. Zen-O lite™ POC as Checked Luggage

Your Zen-O lite™ POC may be carried on aircraft as a carry-on or as checked baggage. However, spare lithium batteries are prohibited from being carried in checked baggage on an aircraft.

### 8.2.3. Considerations Regarding Placement and Stowage of your Zen-O lite™ POC

In order for a Zen-O lite™ POC to work efficiently, the air/intake vents must not be blocked during use. Therefore, the area around the Zen-O lite™ POC should be clear of blankets, coats, and other pieces of carry-on baggage that may block the air/intake vents. If the air/intake vents are blocked, two things will occur. First, you will be alerted by warning lights and/or audible alerts that the oxygen concentration in the Zen-O lite™ POC output is insufficient. Second, when the temperature of the Zen-O lite™ POC internal components increases to a certain limit because the Zen-O lite™ POC is still trying to dispense oxygen, the Zen-O lite™ POC will automatically shut down to prevent overheating of the Zen-O lite™ POC and you will be alerted by warning lights and/or audible alerts.

**Placement of Zen-O lite™** - Onboard an aircraft the Zen-O lite™ POC should be placed underneath the seat in front of you so that you or the flight attendant can see the warning lights and/or hear the audible warning. Placement directly under your seat and placement in a closed compartment would prohibit you from seeing the warning lights, as well as possibly prohibiting you from hearing audible warnings. Other placement locations may be acceptable as deemed acceptable by the flight attendant.

### 8.2.4. Seating Restrictions for Passengers who Plan to use a Zen-O lite™ POC On Board an Aircraft

**Exit Row Seating** - The FAA prohibits passengers that use any assistive device including Zen-O lite™ from occupying an exit seat.

**Stowage during Aircraft Movement** - During movement on the surface (pushback from the gate and taxi), take-off, and landing, the Zen-O lite™ POC must be stowed properly and in such a manner that it does not restrict passenger access to any exit or the aisle in the passenger compartment. Additional seating restrictions may be necessary to comply with these

FAA safety rules. For example:

1. Some seats on an aircraft, such as bulkhead seats, may or may not have approved stowage space to accommodate a Zen-O lite™ POC during movement on the surface, take-off, and landing. Therefore, the Zen-O lite™ POC may not be able to be stowed properly during these phases of flight if the Zen-O lite™ user occupies those seats. In this case, a seating restriction may apply.
2. During movement on the surface, take-off, and landing, the nasal cannula tubing that is used to dispense oxygen from your properly stowed Zen-O lite™ POC may not stretch across the row in such a way as to restrict passenger access or become a tripping hazard in an evacuation. You must not restrict another passenger's access during these phases of flight. In this case, a seating restriction may be required to comply with an FAA safety rule. For example, if all seats in the row are occupied, the appropriate seat for the Zen-O lite™ POC user would be a window seat.
3. An operator can only establish seating restrictions based on FAA safety rules. The examples above represent some, but not all, scenarios to consider.

*IMPORTANT: A general airline policy that all passengers who board the aircraft with a Zen-O lite™ POC must occupy a window seat, without regard to the specifics of the individual situation, would be inconsistent with FAA requirements.*

### 8.2.5. Cabin Depressurisation

There is no danger posed by a Zen-O lite™ POC that is operating during a loss of cabin pressure. However, in the case of loss of cabin pressure (rapid or slow), you should use the oxygen masks that deploy until the aircraft stabilises.

### 8.2.6. Use of Aircraft Electrical Power

There is no requirement for operators to provide aircraft electrical power to a Zen-O lite™ POC user. Electrical outlets on board aircraft are considered nonessential equipment and are not required by the applicable certification or operational rules. In addition, electrical malfunctions in aircraft systems may require the power source to these outlets to be deactivated on the ground or in flight for the safety of the flight. Due to this statement, the Zen-O lite™ POC should only be operated off battery power while on board aircraft. **You should never rely upon onboard aircraft electrical power being available during a flight**

### 8.2.7. Smoking

Smoking (including e-cigarettes) during oxygen therapy is dangerous and is likely to result in serious injury or death of the patient and others from fire. Do not allow smoking or open flames within 10 feet of the portable oxygen concentrator or any oxygen carrying accessories.

## 8.3. Transportation Security Administration (TSA) Requirements

Detailed information that is pertinent to passengers using respiratory devices, including Zen-O lite™ POCs, may be obtained from the TSA at <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

### The following general security screening considerations apply to Zen-O lite™ POCs:

1. The limit of one carry-on and one personal item (e.g., purse, briefcase, or computer case) does not apply to medical supplies, equipment, mobility aids, and/or assistive devices carried by and/or used by a person with a disability.
2. If a person has medical documentation regarding their medical condition or disability, they can present this information to the screener to help inform him or her of the person's situation. This documentation is not required and will not exempt a person from the security screening process.

## 9. Alarm Indicators

If the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator detects an alarm condition, it will indicate the alarm visually and audibly within 10 seconds. There are four levels of alarms: critical high priority, high priority, medium priority, and low priority.

Each is indicated differently by the backlit display; yellow, and red LEDs; and buzzer, as indicated below. In each case, the alarm message and power status will override the current display.

*IMPORTANT: All alarm conditions and parameters are factory preset; conditions and parameters cannot be changed or adjusted by the user.*

*IMPORTANT: The alarm system is tested during the startup sequence. You should see all alarm lights briefly turn on and the audible alarm indicator chirp.*

| Alarm status                  | Audible Tone  | Visual Indicator                                       | Mute Time  |
|-------------------------------|---|--|------------|
| <b>Critical high priority</b> | Ten beeps per burst, burst repeats every 3 seconds.   | Solid red LED and the device is automatically disabled | 20 minutes |
| <b>High priority</b>          | Ten beeps per burst, burst repeats every 3 seconds.   | Flashing red LED                                       | 20 minutes |
| <b>Medium priority</b>        | Three beeps per burst, burst repeats every 8 seconds  | Flashing yellow LED                                    | 8 hours    |
| <b>Low priority</b>           | Three beeps per burst, burst repeats every 10 minutes | Solid yellow LED                                       | 24 hours   |

*IMPORTANT: If two alarm conditions exist at the same time, the highest priority alarm is indicated. If two or more alarm conditions of equal priority exist at the same time, the most recent one will be displayed.*



**IMPORTANT:** The most recent alarms indicated by the device are logged for reference by service personnel. This log is maintained even if the device is powered down or if power is lost for any other reason.

**IMPORTANT:** If the mute key is pressed prior to an alarm condition (for example, to mute the device in a movie theatre), critical high priority and high priority alarms will override the mute function; medium and low priority alarms will be muted for eight hours from the time the key was pressed. Press the mute key off to display the last highest priority alarm. Press the mute key on again to reset the eight-hour timer.

## 9.1. Alarms

When the concentrator sounds an alarm, a corresponding message will be displayed on the screen. Take appropriate action as directed in the charts below.

### 9.1.1. Critical High Priority Alarms

**IMPORTANT:** These alarms will disable the device immediately.

| Alarm message         | Description                        | Action  |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| <b>Charge battery</b> | Battery needs charging.            | Recharge the battery pack by plugging in to the power supply. Ensure all connections are made securely. |
| <b>Invalid batt.</b>  | Battery is not an approved battery | Replace battery with an approved battery.   |
| <b>XX: Service!*</b>  | Service required.                  | Contact your distributor.   |

\*Value: 01-20



### 9.1.2. High Priority Alarms

*IMPORTANT: These alarms will allow the device to continue operating.*

| Alarm message        | Description                                  | Action  |
|----------------------|--|---|
| <b>Check Vents</b>   | Device is unable to maintain oxygen purity.  | Be sure air inlet/outlet has not been blocked. If alarm persists, contact your distributor.   |
| <b>Low Battery</b>   | Estimated battery life less than 17 minutes. | Charge the battery pack by plugging in to power supply.<br><i>Important: The message will be automatically cleared when plugged in to power supply.</i> |
| <b>XX: Service!*</b> | Service required.                            | Contact your distributor.   |

\*Value: 21-50

### 9.1.3. Medium Priority Alarms

| Alarm message        | Description                       | Action   |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Check Cannula</b> | No breath detected for 15 seconds | Check the cannula connection. Be sure to breathe through nose. If alarm persists, contact your distributor.<br><i>IMPORTANT: The message will be automatically cleared when breathing is detected.</i> |
| <b>XX: Service!*</b> | Service required.                 | Contact your distributor.  |

\*Value: 51-70

### 9.1.4. Low Priority Alarms

| Alarm message        | Description       | Action                    |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>XX: Service!*</b> | Service required. | Contact your distributor. |

\*Value: 71-99



EN

### 9.1.5. Other Messages

EN

| Message               | Description  | Action   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Power removed</b>  | External power has been disconnected; unit is now running on battery.  | No action is required.   |
| <b>Shutting off</b>   | Displayed while unit goes through its power-down sequence.   | No action is required.   |
| <b>No battery</b>     | Displayed as the battery menu item when there are no communications with the battery.  | Verify that the battery pack is correctly installed. Contact your distributor if the battery is fully inserted and the message continues to be displayed longer than 30 seconds. |
| <b>Batt NN%</b>       | Displayed percentage of battery charge if at least 10% and there is no external power connected.   | Message is displayed when battery key is pressed.  |
| <b>Charging: NN%</b>  | NN% displays the current battery charge level.<br>Displayed when battery charge is greater than 10% but less than 100% and there is external power connected.                            | Message is displayed when battery key is pressed.  |
| <b>Charging</b>       | Battery charge is less than 10% and there is external power connected.   | Message is displayed when battery key is pressed.  |
| <b>Breath rate XX</b> | The patient's average breath rate when the device is delivering the maximum amount of oxygen and the bolus is reduced. If no breaths are detected, the most recent breath rate is shown. | Reduced activity level. Be sure air inlet/outlet has not been blocked.<br><i>IMPORTANT: The message will automatically clear when the device returns to normal operation.</i>    |
| <b>Alarm cleared</b>  | A previously set alarm has been automatically cleared.   | No action required.  |

## 10. Troubleshooting

| Problem  | Possible Cause   | Troubleshooting   |
|--|--|---|
| System becomes inoperative   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System may be disconnected from the power source.</li> <li>• System may be turned off.</li> <li>• Critical high priority alarm has occurred.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the system is connected securely to the power source.</li> <li>• Ensure the system is powered on.</li> <li>• Examine the system for damage or exposure to liquids.</li> <li>• If problem persists, contact your distributor.</li> </ul>   |
| Any alarm sound or either<br> or<br> LED lit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• See Chapter 99. Alarm Indicators.</li> </ul>  | See Chapter 99. Alarm Indicators.   |
| Battery not charging   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power is not connected.</li> <li>• Battery is not fully inserted.</li> <li>• Battery is inoperable.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check connections to ensure:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Round receptacles are secure in unit.</li> <li>• Power cord is connected to AC/DC supply or automotive DC adapter is connected, if applicable.</li> <li>• Power cord is connected to wall outlet, if applicable.</li> <li>• Wall outlet has power.</li> </ul> </li> <li>• Ensure battery is fully seated and battery cover is secure.</li> <li>• If problem persists, contact your distributor.</li> </ul> |

## 11 Maintenance and Cleaning

### 11.1. Routine Maintenance

**⚠ WARNING:** Do not use lubricants on this device or any of its accessories.

**⚠ CAUTION:** Replace the cannula on a regular basis. Check with your distributor or clinician to determine how often the cannula should be replaced.

Device will indicate with an alarm when a filter or component needs to be cleaned or changed. (Also, see Chapter 1010. Troubleshooting.)

*IMPORTANT: The cannula and patient filter can be contaminated from the patient, care in handling these components should be taken.*

### 11.2. Cleaning

**⚠ WARNING:** Do not submerge this device in liquid. Do not expose to water or precipitation. Do not expose to dusty conditions.

**⚠ CAUTION:** Do not use cleaning agents other than those specified in this manual. Allow the cleaning solution to dry from the cleaned surface before use.

**⚠ CAUTION:** Always disconnect power and turn off this device before cleaning.

Clean the exterior with a soft cloth slightly dampened with soapy water or with anti-bacterial wipes (Isopropyl alcohol 70% solution).

*Important: The device should receive an external cleaning weekly, accessories should be cleaned as needed. The device exterior should be cleaned and the patient filter replaced prior to delivering to a new patient..*

Nasal cannula: Refer to the original manufacturer's instructions for cleaning the nasal cannula.

### 11.3. Service Life

The expected service life of the device is 5 years, except for the sieve beds. The service life of the sieve beds will depend on the operating conditions. Replace them as needed, indicated by the check vents alarm. If intake and exhaust vents are not blocked and the check vents alarm persists, contact your distributor for instructions on replacing the sieve beds.

### 11.4. Service Connector

The service connector mates with service harness TF-02091 (5.1 Vdc maximum) and is utilised for service only.



Fig. 8

## 12 Device Repair and Disposal

### 12.1. Repair

Do not attempt to repair the device. Contact your home oxygen provider or distributor for assistance (see Chapter 1010. Troubleshooting).

The sieve modules may be replaced by the patient as determined by the home oxygen provider or distributor. All other maintenance or repair must be performed by trained service personnel.

### 12.2. Sieve Modules Replacement Instructions:

1. Turn off the device and disconnect AC or DC power source (if connected).
2. Remove the device from the carry bag.
3. Remove the battery from the device.
4. Press the four release buttons located at the top of the device to remove the top cover of the device as shown in Fig. 9.
5. Use the tool included with the replacement sieve modules package to rotate the sieve counter clockwise 3 - 4 turns until it can be removed by pulling up towards the top of the device.
6. Repeat for the second sieve module.
7. Remove the replacement sieves from the packaging, remove the air plug on the sieve module and immediately install the replacement sieve module. **Caution:** Do not leave the replacement sieve exposed.
8. Install the replacement sieve, with thread at the top of the device as shown in Fig. 10.
9. Hand tighten the sieve.
10. Use the tool to finish installing.
11. Repeat steps 8 - 10 for the second replacement sieve.
12. Re-install the top cover to the device by pushing down over the top of the device until the four buttons snap into place.
13. Re-insert the battery into the device.
14. Connect the device to an AC or DC power source.

#### **DO NOT POWER ON!**











15. Press the alarm mute  and battery  buttons simultaneously until the displays shows "Leak Test".
  - a. The device will indicate progress by decimals right of the "Leak test" text.



Fig. 9



Fig. 10

- b. When completed, the device will indicate "Test Passed" or "Test Failed".
  - i. Test Passed - Press battery button  to exit, continue to step 16.
  - ii. Test Failed - Press battery button  to exit, then repeat steps 4-15.
16. If the leak test has passed, then clear the device sieve hour counter.
  - a. Turn on your Zen-O lite portable oxygen concentrator.
  - b. Simultaneously press the  and  buttons until "Diagnostics" is displayed.
  - c. Press the  or  button to navigate the diagnostic menu until "XXXXH Sieve" is displayed, where XXXX = number of hours for the old sieve was utilised.
  - d. Press the alarm mute button  until the sieve hour counter shows "0H Sieve".
  - e. Press the battery button  to exit the diagnostic mode.
  - f. The device is now ready to be used.

*Important: Contact your home oxygen provider or distributor if the device does not pass after multiple attempts.*

### 12.3. Disposal

- Contact your distributor regarding disposal of the device.
- Dispose of battery according to local regulations or contact your distributor.

## 13 Warranty

The device warranty is limited to three (3) years from date of manufacture, this excludes the sieve modules which have only one year warranty. All accessories including batteries are limited to one (1) year warranty.

The standard warranty is only valid for products handled as stated in the user manual and in accordance with general industry good practice and standards.

## 14 Trademarks and Disclaimer

### 14.1. Trademark

All trademarks are the property of their respective owners.

### 14.2. Disclaimer

The information in this document has been carefully examined and is believed to be reliable. Furthermore, the manufacturer reserves the right to make changes to any products herein to improve readability, function, or design. The manufacturer does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it cover any license under its patent rights nor the rights of others.

### 14.2.1. This Document

The information in this document is subject to change without notice. This document contains proprietary information that is protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any manner, in whole or in part (except for brief excerpts in reviews and scientific papers), without the prior written consent of the manufacturer. Be sure to read carefully and understand all manuals provided with the product.

#### For Help

If you have questions about the information in these instructions or about the safe operation of this device, contact your home oxygen provider or distributor.

EN

## 15 Technical Description

|   |   |
|---|---|
| <b>Size:</b>                              | 249 mm (W), 97 mm (D), 231 mm (H)<br>9.8" (W), 3.8" (D), 9.1" (H)   |
| <b>Unit weight:</b>                       | 2.5 kg (5.5 lbs) (without carry bag)  |
| <b>Power requirements:</b>                | AC adaptor: 100-240V AC (+/- 10%), 50-60 Hz in, 24V DC, 5.0A out.<br>DC adaptor: 11.5-16V DC in, 24V, 5.0A out<br><i>(Important: see accessories list for model and part numbers for AC and DC power supply packs.)</i> |
| <b>Purity:</b>                            | 87% - 96% at all flow rates, over operating conditions  |
| <b>Setting:</b>                           | User adjustable in 0.5 increments from 1.0 to 5.0.  |
| <b>Inspiratory trigger sensitivity:</b>   | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O   |
| <b>Setting indicator:</b>                 | LCD   |
| <b>Maximum oxygen discharge pressure:</b> | 20.5 psi  |
| <b>Humidity range:</b>                    | 5% to 93% ± 2% non-condensing   |
| <b>Disconnect Device:</b>                 | Power supply input connector  |
| <b>Operating altitude:</b>                | 0' to 13,000' (0m to 4,000m) relative to sea level,<br>1060 down to 575 mbar  |
| <b>Sound pressure level:</b>              | 44dBA at setting 2 and 18 BPM:<br>(when measured at 1 m from front of device)   |

Maximum Sound Pressure level of 52.5dBA per ISO 80601-2-69

## Technical Description (continued)

|  |  |
|--|--|
| <b>Type of protection (electrical):</b>                  | Class II   |
| <b>Degree of protection (electrical):</b>                | Type BF  |
| <b>Degree of protection (water):</b>                     | IP22 in carry bag (protection against small objects and tilted dripping water)<br>IP20 out of carry bag (protection against small objects and no protection against water entering the concentrator) |
| <b>Degree of safety (flammable anaesthetic mixture):</b> | Not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture  |
| <b>Operating temperature:</b>                            | Continuous operation at temperatures between 5°C (41°F) and 40°C (104°F).  |
| <b>Storage temperature:</b>                              | Between -20°C (-4°F) and 60°C (140°F).   |
| <b>Alarm sound pressure range:</b>                       | 65 to 85 dB(A)   |
| <b>Alarm system delays:</b>                              | Less than 10 seconds after detection (low oxygen alarms if oxygen is less than 82% volume fraction at specified environmental conditions)  |
| <b>Oxygen concentrator status indicator:</b>             | High priority alarm that indicates when oxygen concentration drops below 82%   |

## Pulse mode bolus size (ml/breath) versus setting and breath rate

|                   | Setting |    |      |      |      |
|-------------------|---------|----|------|------|------|
| Breath per minute | 1       | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                | 11      | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                | 11      | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                | 11      | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                | 11      | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                | 11      | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                | 11      | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*All values +/- 15% over all operating conditions*



## 15.1. Electromagnetic Compatibility (EMC) Information

Medical electrical equipment requires special cautions regarding electromagnetic compatibility (EMC). Portable and mobile radio frequency (RF) communications equipment can affect devices such as the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator. As such, the device should not be used adjacent to other equipment. If this is not practical, then observe the device to make sure it is operating properly at all times.

### 15.1.1. Guidance and manufacturer's declaration: electromagnetic emissions

The Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the concentrator should assure that it is used in such an environment.


EN

| Emission test   | Compliance | Electromagnetic environment/guidance  |
|---|------------|---|
| RF emissions<br>CISPR 11                                    | Group 1    | The Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.             |
| RF emissions<br>CISPR 11                                    | Class B    | The concentrator is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |
| Harmonic emissions<br>IEC 61000-3-2                         | Class A    |   |
| Voltage fluctuations/<br>flicker emissions<br>IEC 61000-3-3 | Complies   |   |

### 15.1.2. Guidance and Manufacturer's Declaration: Electromagnetic Immunity

Zen-O lite™ is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the concentrator should assure that it is used in such an environment.

| Immunity test   | IEC 60601 test level   | Compliance level   | Electromagnetic environment/guidance  |
|---|--|--|---|
| Electrostatic discharge (ESD)<br>IEC 61000-4-2  | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air  | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air  | Floors should be wood, concrete, or ceramic tile.<br>If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.   |
| Electric fast transient/burst<br>IEC 61000-4-4  | ± 2kV for power supply lines<br>± 1kV for input/output lines   | ± 2kV for power supply lines<br>± 1kV for input/output lines   | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.   |
| Surge<br>IEC 61000-4-5  | ± 1kV differential mode<br>± 2kV common mode   | ± 1kV differential mode<br>± 2kV common mode   | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.   |
| Voltage dips, short interruptions, and voltage variations on power supply input lines<br>IEC 61000-4-11 | < 5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle<br>40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles<br>70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles<br><5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec | < 5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle<br>40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles<br>70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles<br><5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator required continued operation during power main interruptions, it is recommended that the concentrator be powered from an uninterruptible power supply or battery. |
| Power frequency (50/60 Hz) magnetic field<br>IEC 61000-4-8  | 30 A/m   | 30 A/m   | Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical commercial or hospital environment.   |

| Immunity test  | IEC 60601 test level                          | Compliance level            | Electromagnetic environment/guidance   |
|--|---|-----------------------------|--|
| Conducted RF<br>IEC 61000-4-6  | 3 Vrms 150 kHz to 80 Mhz ;<br>6Vrms ISM Bands | 3 Vrms<br>(6Vrms ISM Bands) | <p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the device, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance:</p> <p><math>d = 1.2 \sqrt{P}</math> 150 kHz to 80 MHz<br/> <math>d = 1.2 \sqrt{P}</math> 80 MHz to 800 MHz<br/> <math>d = 2.3 \sqrt{P}</math> 800 MHz to 2.5 GHz</p> <p>where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey<sup>a</sup> should be less than the compliance level in each frequency range<sup>b</sup>. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: </p> |
| Radiated RF<br>IEC 61000-4-3   | 10 V/m 80 Mhz to 2.5 Ghz                      | 10 V/m                      |  |
| <p><i>IMPORTANT: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.</i></p> <p><i>IMPORTANT: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.</i></p> <p><sup>a</sup>Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast, and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Zen-O lite™ is used exceeds the applicable RF compliance level above, the concentrator should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the concentrator.</p> <p><sup>b</sup>Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 6 V/m.</p> |   |                             |  |

### 15.1.3. Recommended Separation Distances between Portable and Mobile RF Communications Equipment and the Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator

The Zen-O lite™ Portable Oxygen Concentrator is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The monitor user can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the monitor as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.









| Rated max. output power of transmitter (W) | Separation distance (m) according to frequency of transmitter |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                       | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01                                       | 0.12  | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1  | 0.38  | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10   | 3.8   | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100  | 12  | 12                                      | 23                                       |

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance (d) in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.





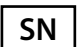







*Important: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.*

*Important: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by the absorption and reflection from structures, objects, and people.*
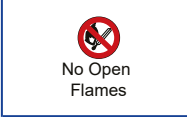
## 16 Glossary - Explanation of Packaging and Labelling Symbols

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | See Instructions Before Use                         |  | Operating atmospheric pressure limitation 0' to 13,000'      |
|  | Type BF according to electrical safety requirements |  | Storage temperature limitation -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|  | Serial Number                                       |  | Humidity limitation 5% to 93% ± 2% non-condensing            |
|  | Catalogue Number                                    |  | Handle with care   |
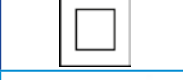
## Glossary - Explanation of Packaging and Labelling Symbols

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician |  | Date of manufacture  |
|  | Do not use if packaging is damaged (See Chapter 6)                               |  | Manufacturer   |
|  | No open flame when device is in use or do not incinerate                         |  | Keep dry (This symbol refers to the IPX2 classification of the device) |
|  | No smoking   |  | Dispose of used battery properly                                       |
|  | Separate collection for electrical and electronic equipment                      |  | Class II symbol  |
|  | Complies with applicable EU Directives including Medical Device Directive        |  | Suitable for home care use   |

EN



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



[www.oxygenconcentratorstore.com](http://www.oxygenconcentratorstore.com)

35/292

Manufactured for: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



877-774-9271

# Deutsch

## Benutzerhandbuch: Zen-O lite™ lite Mobiler Sauerstoffkonzentrator (Modell: RS - 00600)

### Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Vorwort</b> .....                                   | <b>38</b> |
| 1.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....                       | 38        |
| 1.2. KLASSIFIZIERUNG .....                                | 38        |
| 1.3. Typografische Konventionen .....                     | 39        |
| <b>2. Zweckbestimmung</b> .....                           | <b>39</b> |
| <b>3. Sicherheitshinweise</b> .....                       | <b>40</b> |
| 3.1. Übersicht der Warnungen .....                        | 40        |
| 3.2. Übersicht der Vorsichtsmassnahmen .....              | 42        |
| 3.3. Übersicht der Wichtigen Informationen .....          | 44        |
| <b>4. Anweisungen und Schulung</b> .....                  | <b>44</b> |
| <b>5. Produktbeschreibung</b> .....                       | <b>45</b> |
| 5.1. Schematische Beschreibung .....                      | 45        |
| <b>6. Allgemeine Anweisungen vor der Verwendung</b> ..... | <b>46</b> |
| 6.1. Zubehörliste .....                                   | 46        |
| 6.2. Akku .....   | 46        |
| 6.3. Nasenkanüle .....                                    | 48        |
| <b>7. Bedienung des Konzentrators</b> .....               | <b>49</b> |
| 7.1. Anschliessen der Nasenkanüle .....                   | 49        |
| 7.2. Einschalten .....                                    | 50        |
| 7.3. Auswählen der Bevorzugten Sprache .....              | 50        |
| 7.4. Anpassen der Einstellungen .....                     | 50        |
| 7.5. Batterietaste .....                                  | 51        |
| 7.6. Reagieren auf Alarme .....                           | 51        |
| 7.7. Ausschalten .....                                    | 52        |

DE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>8. Flugreisen mit dem mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator</b> .....      | <b>52</b> |
| 8.1. Flugvorbereitungen für den Fluggast.....                                      | 52        |
| 8.2. Boarding und In-Fluginformationen .....                                       | 54        |
| 8.3. Anforderungen der Transportsicherheitsbehörde (TSA) .....                     | 56        |
| <b>9. Alarmanzeigen</b> .....  | <b>57</b> |
| 9.1. Alarme.....   | 59        |
| <b>10. Fehlerbehebung</b> .....  | <b>62</b> |
| <b>11. Wartung und Reinigung</b> .....   | <b>63</b> |
| 11.1. Routinewartung .....   | 63        |
| 11.2. Außenreinigung .....   | 63        |
| 11.3. Gebrauchsdauer .....   | 64        |
| 11.4. Service Anschluss .....  | 64        |
| <b>12. Reparatur und Entsorgung des Geräts</b> .....                               | <b>64</b> |
| 12.1. Reparatur.....   | 64        |
| 12.2. Anweisung zum Wechseln der Molekularsiebe: .....                             | 64        |
| 12.3. Entsorgung .....   | 65        |
| <b>13. Gewährleistung</b> .....  | <b>66</b> |
| <b>14. Marken und Haftungsausschluss</b> .....                                     | <b>66</b> |
| 14.1. Marken .....   | 66        |
| 14.2. Haftungsausschluss .....   | 66        |
| <b>15. Technische Beschreibung</b> .....   | <b>67</b> |
| 15.1. Informationen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) .....            | 69        |
| <b>16. Glossar – Erläuterung von Verpackungs- und Kennzeichnungssymbolen</b> ..... | <b>72</b> |

# 1. Vorwort

*In diesem Handbuch finden Sie ausführliche Anleitungen zu Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und technischen Daten sowie weitere Informationen.*

*WICHTIG: Benutzer sollten dieses Handbuch lesen, bevor sie den mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator in Betrieb nehmen. Andernfalls kann es zu Verletzungen und/oder zum Tod kommen. Wenn Sie Fragen zu den Informationen in diesem Benutzerhandbuch oder zum sicheren Betrieb dieses Geräts haben, wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler.*

## 1.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen für Benutzer des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators. Aus Gründen der Effizienz werden in diesem Handbuch gelegentlich die Begriffe „Konzentrator“, „POC“, „Einheit“ oder „Gerät“ stellvertretend für den Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator verwendet. Die Begriffe „Patient“ und „Benutzer“ werden gleichwertig verwendet.

## 1.2. KLASSIFIZIERUNG

Dieses Gerät wurde bei einem international anerkannten Testlabor geprüft und nach den folgenden Normen im Hinblick auf Stromschlag-, Brand- und mechanische Gefahren zertifiziert:

- IEC/EN 60601-1:2012, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- IEC/EN 60601-1-2:2014, Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen und Prüfungen
- IEC/EN 60601-1-6:2010+A1:2013, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1–6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
- IEC/60601-1-8:2006, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1–8: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – Ergänzungsnorm: Alarmsysteme – Allgemeine Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme in medizinischen elektrischen Geräten und in medizinischen elektrischen Systemen
- IEC/60601-1-11:2011 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1–11: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme für die medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung
- ISO 80601-2-67:2014, Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-67: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für sauerstoffsparende Geräte.
- ISO 80601-2-69:2014, Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-69: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für Sauerstoffkonzentratoren.



- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Kanadische Norm, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

#### **Dieses Gerät wurde wie folgt klassifiziert:**

- Klasse II
- Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG
- Typ BF
- IP22 mit Tragetasche

### **1.3. Typografische Konventionen**

Diese Anweisungen enthalten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise, um die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Sicherheits- und Bedingungsaspekte des Geräts zu lenken. Um die Identifikation dieser Aspekte bei ihrem Auftreten im Text zu vereinfachen, werden sie mit den folgenden typografischen Konventionen betont:

 **WARNUNG:** Aussagen, die ernste negative Reaktionen und potentielle Sicherheitsrisiken beschreiben.

 **VORSICHT:** Aussagen, die die Aufmerksamkeit auf Informationen zu besonderer Sorgfalt durch den Arzt und/oder den Patienten lenken, um das Gerät sicher nutzen zu können.

*WICHTIG: Aussagen, die die Aufmerksamkeit auf weitere signifikante Informationen zum Gerät oder zu einem Verfahren lenken.*

## **2. Zweckbestimmung**

Der mobile Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator stellt Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen oder für Patienten, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen, konzentrierten Sauerstoff zur Verfügung.

Das Gerät ist mobil, sodass Patienten, die ein Sauerstoffgerät benötigen, auf Anweisung eines Arztes oder nach Verordnung zu Hause behandelt werden können.

Der Zen-O lite™ ist nicht zur Verwendung im Bereich der Lebensunterstützung oder Lebenserhaltung vorgesehen und wird nicht steril ausgeliefert. Dieses Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien vorgesehen. Informationen zu den korrekten Betriebsbedingungen finden Sie im Kapitel 15. Technische Beschreibung.

**Der mobile Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator ist nicht für die Verwendung in folgenden Situationen vorgesehen:**

- Lebensunterstützung oder Lebenserhaltung
- Operations- oder chirurgische Umgebung
- Für Minderjährige
- Kombination mit brennbaren Anästhesie- oder entzündlichen Materialien

### 3. Sicherheitshinweise

#### 3.1. Übersicht der Warnungen

1. Das Gerät muss in seiner Tragetasche verwendet werden, um es vor dem Eindringen von Flüssigkeit, vor Regen und/oder vor Spritzwasser zu schützen.
2. Im Zusammenhang mit Sauerstoffausrüstung und Sauerstofftherapien besteht Brandgefahr. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funken oder offenem Feuer.
3. Die Einstellungen des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators RS-00600 sind möglicherweise nicht auf einen konstanten Sauerstofffluss abgestimmt.
4. Die Einstellungen anderer Modelle oder Marken von Sauerstofftherapie-Geräten entsprechen nicht den Einstellungen des mobilen Zen™-O-Sauerstoffkonzentrators RS-00600.
5. Wind oder starke Zugluft können sich negativ auf die angemessene Bereitstellung einer Sauerstofftherapie auswirken.
6. Geriatrische oder andere Patienten, die Unwohlsein nicht kommunizieren können, benötigen möglicherweise eine zusätzliche Form der Überwachung, um negative Folgen zu vermeiden.
7. Das Rauchen (auch von E-Zigaretten) während einer Sauerstofftherapie ist gefährlich und führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Gesichtsverbrennungen oder zum Tod. Lassen Sie nicht zu, dass in einem Raum, in dem der mobile Sauerstoffkonzentrator oder sauerstoffführendes Zubehör verwendet wird, geraucht wird und vermeiden Sie auch unbedingt offenes Feuer. Wenn Sie rauchen, müssen Sie stets den Sauerstoffkonzentrator ausschalten, die Kanüle entfernen und den Raum verlassen, in dem sich entweder die Kanüle oder der Konzentrator befindet. Wenn Sie den Raum nicht verlassen können, müssen Sie nach dem Stoppen des Sauerstoffflusses mindestens 10 Minuten warten.
8. Verwenden Sie vor und während der Sauerstofftherapie nur sauerstoffverträgliche, auf Wasser basierende Lotionen. Verwenden Sie während des Betriebs dieses Geräts niemals auf Petroleum oder Öl basierende Lotionen oder Salben, um das Risiko von Bränden oder Verbrennungen zu minimieren.
9. Offenes Feuer während einer Sauerstofftherapie ist gefährlich und führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Brand oder zum Tod. Lassen Sie in einem Umkreis von 2 m um den Sauerstoffkonzentrator oder um sauerstoffführendes Zubehör kein offenes Feuer zu.
10. Sauerstoff unterstützt das Entstehen eines Brands und dessen Verbreitung. Lassen Sie die Nasenkanüle bei eingeschaltetem Konzentrator niemals auf dem Bettbezug oder auf einem Sitzkissen liegen. Diese Materialien werden durch den Sauerstoff brennbar.

Schalten Sie den Konzentrator aus, wenn Sie diesen nicht benötigen, um die Anreicherung der Umgebung mit Sauerstoff zu verhindern.

11. **Kritisch! Explosionsgefahr. Nicht in der Nähe brennbarer Anästhesiemittel verwenden!**
12. **Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Schadstoffen oder Dämpfen.**
13. **Tauchen Sie das Gerät nicht in eine Flüssigkeit ein. Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keiner staubigen Umgebung aus.**
14. **Verwenden Sie ein Gerät oder das Zubehör nicht, wenn dieses Anzeichen von Beschädigungen aufweist.**
15. **Verwenden Sie für dieses Gerät und für dessen Zubehör keine Schmiermittel.**
16. **Die Verwendung dieses Geräts in einer Höhe von über 4 000 m (13 000 Fuß) oder außerhalb des Temperaturbereichs von 5 °C (41 °F) bis 40 °C (104 °F) bzw. außerhalb des Feuchtigkeitsbereichs von 5 % bis 93 % kann sich negativ auf die Flussrate und auf den Sauerstoffanteil auswirken. In diesem Fall wird die Qualität der Therapie beeinträchtigt. Wird das Gerät nicht verwendet, muss es in einer sauberen, trockenen Umgebung zwischen –20 °C und 60 °C (–4 °F und 140 °F) gelagert werden. Die Verwendung und/oder Lagerung außerhalb der zulässigen Bedingungen können zu Schäden am Produkt führen. Für weitere technische Details siehe Kapitel 15. Technische Beschreibung.**
17. **Stellen Sie stets sicher, dass vor der Verwendung dieses Geräts mindestens ein Akku eingesetzt wurde.**
18. **Wenn Sie sich bei der Verwendung dieses Geräts krank oder unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder fordern Sie sofort medizinische Unterstützung an, um negative Folgen zu vermeiden.**
19. **Ihr Dienstleistungsanbieter muss die Kompatibilität des Geräts und dessen Zubehörs vor der Verwendung überprüfen. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Sauerstoffanteil für Ihren medizinischen Zustand erhalten, darf das überprüfte kompatible Gerät und dessen Zubehör nur nach Ermittlung und Verschreibung von einer oder mehreren Sitzungen gemäß Ihres Aktivitätsniveaus verwendet werden. Diese Sitzungen müssen durch Ihren Dienstleistungsanbieter (verantwortliche Organisation) durchgeführt werden.**
20. **Das elektrische Anschlusskabel und die Schläuche können ein Stolper- oder Strangulationsrisiko mit sich bringen. Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von Kindern und Haustieren fern.**
21. **Weder das Gerät noch dessen Zubehör darf zerlegt oder in irgendeiner Form modifiziert werden. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die über jene Aufgaben hinaus gehen, die in Kapitel 10. Fehlerbehebung beschrieben werden. Das Zerlegen des Geräts kann zu einem Stromschlag führen. Außerdem erlischt in diesem Fall die Ge-**

**währleistung. Wenden Sie sich bei Fragen zur Wartung durch autorisiertes Personal an Ihren Vertriebs Händler.**

- 22. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile, um die korrekte Funktion sicherzustellen. Außerdem vermeiden Sie auf diese Weise das Brand- und Verbrennungsrisiko.**
- 23. Führen Sie keine Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten durch, während das Gerät vom Patienten benutzt wird.**

### **3.2. Übersicht der Vorsichtsmassnahmen**

1. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (Öfen, Heizstrahlern etc.) fern, die die Betriebstemperatur am Gerät oder in dessen Nähe auf mehr als 40 °C (104 °F) erhöhen könnten.
2. Die Anzeige lässt sich bei hellem Licht (Sonnenlicht, Innenbeleuchtung etc.) möglicherweise nur schwer ablesen. Bringen Sie das Gerät daher zum Ablesen aus dem direkten Licht heraus.
3. Halten Sie das Gerät von Fusseln und anderem losen Material fern, das die Lufteinlässe blockieren könnte.
4. In einigen Ländern darf dieses Gerät nur durch einen Arzt verkauft oder verordnet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die lokale Gesetzgebung beachten.
5. Eine nicht verordnete Sauerstofftherapie kann unter bestimmten Umständen gefährlich sein. Verwenden Sie dieses Gerät nur nach einer Verordnung durch einen Arzt.
6. Patienten mit einer hohen Atemfrequenz, die eine höhere Sauerstoffeinstellung benötigen, müssen möglicherweise mit mehr Sauerstoff versorgt werden, als dieses Gerät bereitstellen kann. Siehe hierzu Kapitel 15. Technische Beschreibung. Die Verwendung dieses Geräts ist in einem solchen Fall möglicherweise nicht angemessen. Fragen Sie Ihren Arzt nach einer alternativen Behandlung.
7. Verwenden Sie das Gerät stets mit der von einem Arzt verordneten Einstellung. Verändern Sie die Einstellung nur auf Anweisung eines Arztes. Die Flusseinstellung muss regelmäßig von einem Arzt überprüft werden.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nur dann im Schlaf, wenn dies von einem Arzt verordnet wurde.
9. Es wird empfohlen, für den Fall eines Stromausfalls oder eines mechanischen Fehlers eine alternative Sauerstoffquelle zur Verfügung zu stellen. Wenden Sie sich bei Fragen zu einem angemessenen Zweitsystem an Ihren Dienstleistungsanbieter oder Arzt.
10. Das Gerät kann erst dann die angegebene Reinheit der Sauerstoffkonzentration erreichen, wenn es mindestens 2 Minuten lang mit der eingestellten Flussrate betrieben wurde.
11. Das Gerät ist für die Nutzung durch jeweils nur einen Patienten vorgesehen.

12. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Alarme zu hören oder zu sehen, wenn Sie nicht über eine normale Oberflächensensibilität verfügen, oder wenn Sie Unwohlsein nicht kommunizieren können, lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts von einem Arzt beraten.
13. Fällt die Sauerstoffkonzentration unter den angegebenen Wert, weist ein Alarm auf diesen Zustand hin. Bleibt der Alarm bestehen, verwenden Sie dieses Gerät nicht mehr, wechseln Sie zu einer alternativen Sauerstoffquelle, und verständigen Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.
14. Verwenden Sie nur das für dieses Gerät freigegebene Zubehör. Abschnitt 6.1. Zubehörliste enthält eine Liste der freigegebenen Zubehörteile und Kanülen für dieses Gerät. Die Verwendung nicht freigegebener Zubehörteile oder Kanülen kann die Leistungsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen.
15. Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Befeuchter oder Vernebler vorgesehen. Wird ein Befeuchter oder Vernebler zusammen mit diesem Gerät verwendet, kann dessen Leistung beeinträchtigt und das Gerät selbst beschädigt werden.
16. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Kanülenherstellers zur korrekten Anwendung.
17. Tauschen Sie die Kanüle regelmäßig aus. Fragen Sie Ihren Dienstleistungsanbieter oder Arzt, wie oft die Kanüle ausgetauscht werden muss.
18. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über den Akku betrieben wird, nachdem Sie es von der Stromversorgung getrennt haben.
19. Laden Sie den Akku nur in diesem Gerät oder in einem freigegebenen Ladegerät. (Siehe hierzu die Liste der freigegebenen Zubehörteile.)
20. Entfernen Sie den Akku, wenn dieses Gerät für mehr als sieben Tage nicht verwendet wird. Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort.
21. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Reinigungsmittel. Lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf der gereinigten Oberfläche trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.
22. Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn dieses nicht verwendet wird.
23. Unterbrechen Sie vor dem Reinigen stets die Stromversorgung, und schalten Sie das Gerät aus. Siehe Kapitel 11. Wartung und Reinigung.
24. Achten Sie beim Betrieb des Geräts darauf, dass die Lufteinlässe und Luftauslässe nicht blockiert sind. Durch die Blockierung kann sich im Gerät Wärme stauen, sodass das Gerät deaktiviert oder beschädigt wird.
25. Legen Sie keine Objekte auf diesem Gerät ab.
26. Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern, um Schäden am Gerät, bzw. am Zubehör und/oder Veränderungen der Einstellungen mit negativen Folgen zu vermeiden.
27. Halten Sie das Gerät von Haustieren und Schädlingen fern.

28. Bei Verwendung in der zugehörigen Tragetasche ist dieses Gerät gemäß IP22 eingestuft. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen oder feuchten Umgebung.
29. Verwenden Sie das Gerät stets in einer gut belüfteten Umgebung.
30. Halten Sie sich stets an den Wartungsplan gemäß Kapitel 11.1. Routinewartung.
31. Weist dieses Gerät einen nicht normalen Betriebszustand auf, lesen Sie die Informationen in Kapitel 10. Fehlerbehebung.
32. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät bei hoher Umgebungstemperatur berühren.
33. Das Gerät kann von einem neuen Patienten wieder verwendet werden, nachdem eine Reinigung durchgeführt wurde, wie in Abschnitt 11.2 dieser Gebrauchsanweisung beschrieben und gemäß lokaler Vorschriften und Verordnungen, den Wiedereinsatz betreffend.
34. Das Gerät kann von der Stromzufuhr getrennt werden, indem man das Netzkabel zieht, siehe Abb. 1, platzieren Sie das Gerät so, dass ein leichter Zugang zum Eingangsanschluss möglich ist.

### 3.3. Übersicht der Wichtigen Informationen

1. *Muss ein Verlängerungskabel verwendet werden, verwenden Sie ein UL-Kabel für mindestens 15 A. Schließen Sie keine weiteren Geräte an diesem Kabel an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit Mehrfachstecker.*
2. *Atmen Sie durch die Nase ein, damit der Konzentrator möglichst effizient funktioniert. Wenn Sie durch den Mund einatmen, kann dies die Effizienz der Sauerstofftherapie herabsetzen.*

## 4. Anweisungen und Schulung

Die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte besagt, dass der Produktanbieter sicherstellen muss, dass alle Benutzer dieses Geräts ein Benutzerhandbuch erhalten und dass sie vollständig im Umgang mit der Ausrüstung geschult wurden.




**WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht ohne angemessene Schulung! Patienten und Dienstleistungsanbieter müssen durch eine erfahrene Person geschult werden, die vom Hersteller autorisiert wurde und die ihrerseits über eine angemessene Ausbildung, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.**

Weitere Informationen zu einer Schulung erhalten Sie von Ihrem Dienstleistungsanbieter.

## 5. Produktbeschreibung

### 5.1. Schematische Beschreibung

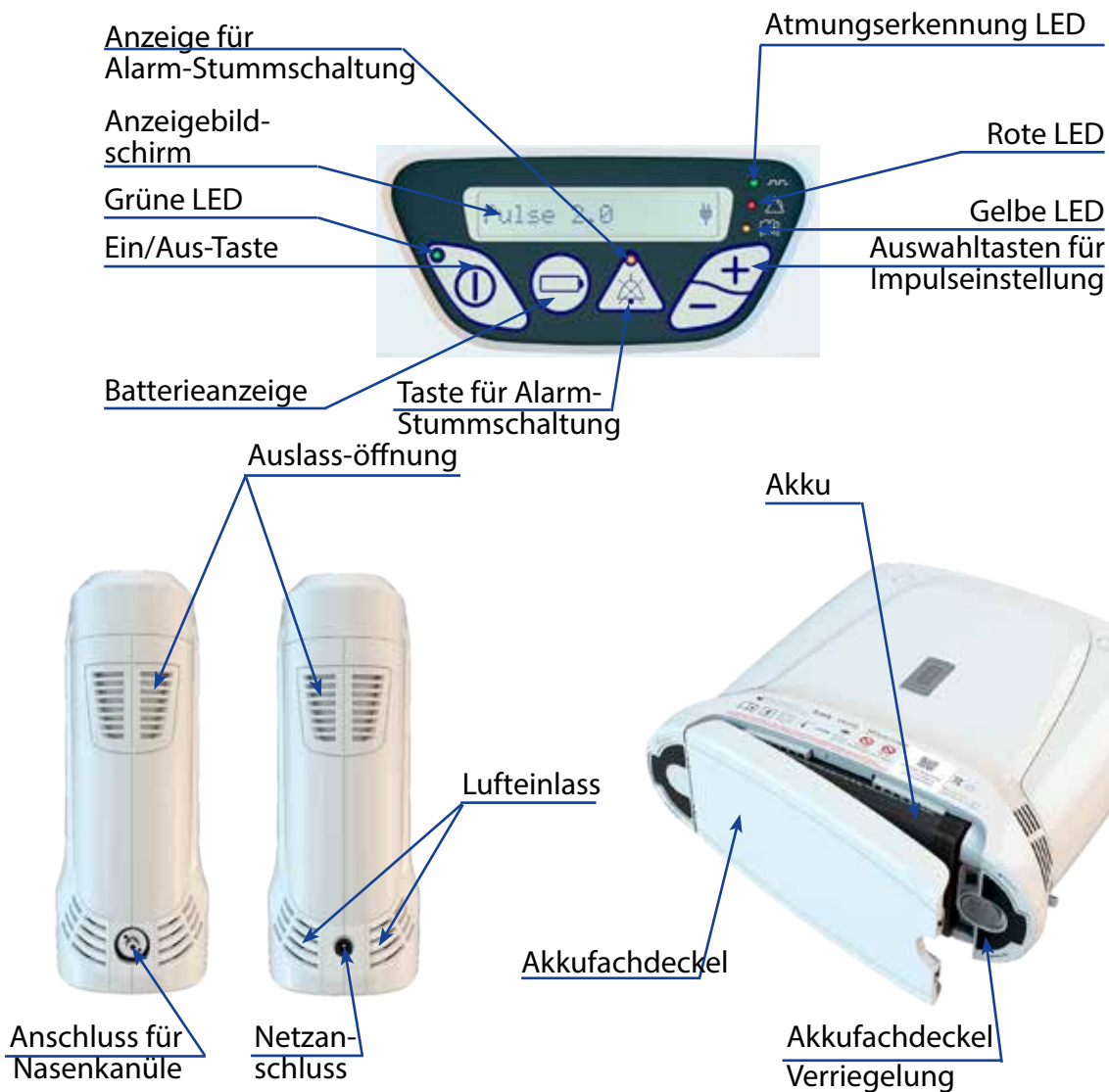

DE

Fig. 1



## 6. Allgemeine Anweisungen vor der Verwendung

Die Mobilität und Einsatzmöglichkeiten des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators können mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden. Neben diesem Gerät enthält das Paket auch Zubehör für die ersten Schritte und ein Benutzerhandbuch.

Prüfen Sie das Gerät und die Zubehörteile vor der Verwendung stets auf Anzeichen von Beschädigungen.

*WICHTIG: Auch wenn der Karton oder die Verpackung eine Beschädigung aufweist (beispielsweise Risse oder Dellen), kann das Gerät dennoch betriebsbereit sein. Weisen das Gerät oder die Zubehörteile Beschädigungen auf, wenden Sie sich an Ihren Dienstleistungsanbieter.*

Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass Sie über die folgenden Komponenten verfügen:

- Konzentrator
- Akku
- Tragetasche
- Wechselstromnetzteil
- Gleichstromnetzteil

### 6.1. Zubehörliste

Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Netzteile/Adapter und Zubehörteile. Die Verwendung von Zubehörteilen, die in diesem Handbuch nicht angegeben werden, kann eine Gefahr darstellen und/oder die Leistung des Geräts negativ beeinflussen.

- Aufladbare Akku (RS-00601)
- Wechselstromnetzteil – Netzkabel für Europa (RS-00602)
- Wechselstromnetzteil – Netzkabel für Großbritannien (RS-00603)
- Wechselstromnetzteil – Netzkabel für Nordamerika (RS-00604)
- Gleichstromnetzteil (RS-00605)
- Tragetasche (RS-00606)
- Netzkabel für Europa (RS-00504)
- Netzkabel für Großbritannien (RS-00506)
- Netzkabel für Nordamerika (RS-00503)
- Externes Ladegerät - EU (RS-00516)
- Externes Ladegerät - US (RS-00515)
- Externes Ladegerät - UK (RS-00517)

 **WARNUNG: Verwenden Sie ein Gerät oder ein Zubehörteil nicht, wenn dieses Anzeichen von Beschädigungen aufweist.**

### 6.2. Akku

Der mobile Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator kann stets benutzt werden, wenn dieser direkt mit einer Stromquelle verbunden ist. Zur Verbesserung der Mobilität ist der Konzentrator jedoch mit einer internen Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet.


 **WARNUNG: Versichern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme, dass der Akku eingesetzt ist.**

*WICHTIG: Für die weltweite Anwendung des Geräts und für die Reise stehen optionale Netzteile zur Verfügung. Siehe hierzu die Liste der freigegebenen Zubehörteile in Kapitel 6.1. Zubehörliste.*



## 6.2.1. Laden des Akku

**⚠ VORSICHT:** Laden Sie den Akku nur in diesem Gerät oder in einem freigegebenen Ladegerät. (Siehe hierzu die Liste der freigegebenen Zubehörteile in Kapitel 6.1. Zubehörliste).

- Vor dem ersten Gebrauch, setzen Sie den Akku wie in Abb. 2 beschrieben ein. Die Arretierung rastet ein, wenn der Akku vollständig eingesetzt ist.
- Schließen Sie das Akkufach und achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.
- Schließen Sie das Netzteil an, in dem Sie den runden Stecker in die Buchse an der Seite des Konzentrators einstecken. Siehe Fig. 3.
- Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit einer Netzsteckdose. Gehen Sie stets mit Vorsicht vor, wenn Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Auf der Anzeige erscheint **Laden: NN%**  .

Das Ladegerät ist universell einsetzbar und unterstützt eine Vielzahl internationaler Märkte. Daher kann es mit einer Netzsteckdose für 100–240 V AC und 50–60 Hz verbunden werden.

Laden Sie den Akku vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf.

Nach einer vollständigen Ladung kann das Gerät bis zu vier Stunden lang mit dem Akku betrieben werden (18 Atemzüge pro Minute).

*WICHTIG: Die Akkulaufzeit kann je nach Atemfrequenz, Alter des Akkus und Umgebungsbedingungen variieren.*

*Den Ladezustand des Akkus können Sie anhand der Textanzeige am Gerät ablesen.*

*WICHTIG: Stellen Sie sicher, das Symbol für den Ladezustand (siehe Fig. 7) anzeigt, dass die Stromversorgung aktiv ist. Stellen Sie ansonsten sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt wurde. (Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel 10. Fehlerbehebung.)*

Wenn Sie die Gebrauchsdauer und Laufzeit des Akku maximieren möchten, vermeiden Sie es, die gesamte Akkuladung aufzubreuchen. Verwenden Sie das Gerät nach Möglichkeit immer in Verbindung mit dem Netzteil. Der integrierte Akku wird immer dann aufgeladen, wenn der Konzentrator mit dem Netzstrom verbunden ist. Sie können das Gerät verwenden, während der Akku geladen wird. Auf der LCD-Anzeige können Sie ablesen, ob das Gerät mit dem Akku oder mit externen Wechselstrom betrieben wird..



Fig. 2



Fig. 3

DE

Der vollständig aufgeladene Akku behält bis zu 30 Tage im Gerät einen gewissen Ladezustand bei, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Siehe hierzu auch die folgende Vorsichtsmaßnahme mit Empfehlungen zum Entfernen/Lagern des Akkus.


*WICHTIG: Der Akku kann beschädigt werden, wenn er vollständig entladen wird.*


*WICHTIG: Nach 300 Lade-/Entladezyklen beträgt die Batteriekapazität mindestens noch 80 % der ursprünglichen Kapazität. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die verringerte Akkulaufzeit Auswirkungen auf Ihre Mobilität hat.*

*WICHTIG: Die DC-Stromversorgung darf nur in Fahrzeugen mit der korrekten Ausgangsleistung verwendet werden.*

DE

*WICHTIG: Das Fahrzeug muss laufen, während der DC-Adapter verwendet wird, da ansonsten der mobile Zen-O-Sauerstoffkonzentrator nicht mit Strom gespeist wird.*

 **VORSICHT:** Entfernen Sie den Akku, wenn dieses Gerät für mehr als sieben Tage nicht verwendet wird. Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort.


 **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät über den Akku betrieben wird, nachdem Sie es von der Stromversorgung getrennt haben.

*WICHTIG: Wenn Sie den Akku nicht im Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass diese in der Schutzhülle aufbewahrt wird, die der Originalpackung beigelegt wurde. Falls das Gerät nicht über längere Laufzeiten betrieben wird, laden Sie den Akku mindestens einmal im Jahr komplett auf.*

### 6.3. Nasenkanüle

**Verwenden Sie nur eine Nasenkanüle mit den folgenden Spezifikationen:**

- Länge von 2,1 m (7 Fuß) oder 7,6 m (25 Fuß)
- Hohe Flussrate
- Großer Innendurchmesser
- Gerade, nicht konische Spitzen
- Geeignet für bis zu 15 l/Minute bei einer max. Druck von 3,6 psi
- Erfüllung der Materialkompatibilität gemäß IEC/EN 60601-1

 **VORSICHT:** Verwenden Sie nur das für dieses Gerät freigegebene Zubehör. Eine umfassende Liste des für dieses Gerät freigegebenen Zubehörs und der passenden Kanülen finden Sie im Zubehörleitfaden. Die Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör oder nicht passenden Kanülen kann die Leistung dieses Geräts beeinträchtigen, darunter auch die Flussrate oder die Sauerstoffreinheit.

Aktuelle Informationen und Zubehör, sowie Angaben zu weiteren, optionalen oder Austauschkomponenten erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vertriebshändler.

## 7. Bedienung des Konzentrators

**WICHTIG:** Lesen Sie den Abschnitt 3.1. Übersicht der Warnungen und Abschnitt 3.2. Übersicht der Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Der mobile Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Alle Funktionen können mit nur wenigen Tasten über das Bedienfeld aufgerufen werden.

Benutzen Sie das Gerät in der dafür vorgesehenen Tragetasche und in aufrechter Position. Der Patient muss sich während der Verwendung im Bereich der empfohlenen Kanülenlänge befinden.

**WICHTIG:** Mit Ausnahme des Ein- und Ausschaltens bleibt die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige deaktiviert. Durch Drücken einer Taste wird die Hintergrundbeleuchtung kurzzeitig aktiviert. Die Hintergrundbeleuchtung wird auch dann aktiviert, wenn eine nicht stummgeschaltete Alarmbedingung auftritt.

DE

### 7.1. Anschliessen der Nasenkanüle

**⚠ VORSICHT:** Tauschen Sie die Kanüle regelmäßig aus. Fragen Sie Ihren Dienstleistungsanbieter oder Arzt, wie oft die Kanüle ausgetauscht werden muss.

**⚠ VORSICHT:** Befolgen Sie stets die Anweisungen des Kanülenherstellers zur korrekten Anwendung. Verbinden Sie die Schläuche mit dem Kanülenanschluss, wie in Fig. 5 dargestellt.

Um die Kanüle am Patienten zu befestigen, positionieren Sie die Kanülenspitzen in den Nasenlöchern des Patienten und leiten Sie die Schläuche über die Ohren unter dem Kinn hindurch. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Schieben Sie den Adapter die Schläuche hinauf, um diese für einen komfortablen Sitz anzupassen.

Ist die Kanüle gesichert, atmen Sie normal durch die Nase ein. Der Zen-O lite™ erkennt das Einatmen und stellt dabei den erforderlichen Sauerstoff bereit.

**WICHTIG:** Eine unzureichende Platzierung der Kanüle kann dazu führen, dass das Gerät die Atembewegungen des Patienten nicht richtig erkennt. Stellen Sie sicher, dass die Kanüle richtig verbunden und vollständig eingesetzt wurde.




Fig. 5



Fig. 6

## 7.2. Einschalten

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Netztaste  ein.
- Der Konzentrator gibt ein akustisches Signal aus, und die grüne, gelbe und rote LED blinken einmal; gleichzeitig erscheinen in der Anzeige den Gerätenamen.



Rote LED – zeigt eine Gefahrenwarnung und/oder den Bedarf einer dringenden Aktion an.



Gelbe LED – mahnt zur Vorsicht oder zur Aufmerksamkeit.








Grün blinkende LED – zeigt an, dass Sauerstoff fließt.

DE



**WICHTIG:** Änderungen können erst nach Abschluss der Einschaltsequenz vorgenommen werden.

## 7.3. Auswählen der Bevorzugten Sprache

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die Taste  und  ca. vier Sekunden lang gedrückt, bis in der Anzeige die Meldung „Sprache:“ erscheint.
- Blättern Sie nun mithilfe der Tasten  oder  durch die verfügbaren Sprachen.
- Wird die gewünschte Sprache angezeigt, drücken Sie die Taste (Akku) , um diese auszuwählen. Das Gerät wechselt die Sprache und kehrt wieder zur normalen Anzeige zurück.

## 7.4. Anpassen der Einstellungen

**WICHTIG:** Nach dem Einschalten des Zen-O lite™ wird für ca. 35 Sekunden die Einschaltsequenz ausgeführt. Der angegebene Sauerstoffanteil wird innerhalb von zwei Minuten Betrieb erreicht.

- Das Gerät nimmt die Arbeit mit den zuvor ausgewählten Einstellungen auf.
- The device will deliver a pulse of oxygen at the beginning of each of your inhalation.
- Der Impulsmodus kann mithilfe der Tasten  und  in Schritten von 0,5 von 1,0–6,0 eingestellt werden.

**WICHTIG:** Wird eine Undichtigkeit vermutet, lässt sich diese mit einer Lösung aus Seife und Wasser nachweisen, indem die Lösung auf den Anschluss der Kanüle am Konzentrator aufgetragen wird. Achten Sie hier auf Blasenbildung.

Die Stromeinstellung und die Stromquellen (externe Stromversorgung oder Akku, das Akkusymbol zeigt auch die geschätzte Restladung) werden in der Anzeige gemäß Fig. 7 angezeigt.




Zen-O lite™ im Batteriebetrieb.








Zen-O lite™ mit externer Stromversorgung.

Fig. 7


## 7.5. Batterietaste


Die Batterietaste  ermöglicht das Überprüfen des Ladezustands des Akku. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie durch alle Informationen blättern.

- Zunächst wird die Ladezustandsanzeige angezeigt **Laden NN%**  oder **Batt.1: NN%** 
- Anschließend **Batt1: NN%**  wird nur die Ladezustandsanzeige für den Akku angezeigt **Batt.1: N Zykl.**  oder **Batt: Zykl.** .

Nach dem dritten Drücken der Akkutaste wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Flusseinstellung. Wird 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt, wechselt die Anzeige ebenfalls automatisch wieder zur Flussanzeige.

## 7.6. Reagieren auf Alarme

 **VORSICHT:** Wenn Sie nicht in der Lage sind, Alarme zu hören oder zu sehen, wenn Sie nicht über eine normale Oberflächensensibilität verfügen, oder wenn Sie Unwohlsein nicht kommunizieren können, lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts von einem Arzt beraten.

Sie können jederzeit die Taste zum Stummschalten von Alarmen  drücken, um den Signaltonger zu deaktivieren. Die Dauer der Stummschaltung hängt vom Schweregrad des Alarms ab (siehe Kapitel 9. Alarmanzeigen). Während dieser Zeit leuchtet die Stummschaltungs-LED und weist darauf hin, dass der Signaltonger deaktiviert wurde. Drücken Sie die Taste zum Stummschalten erneut, um die Alarme wieder zu aktivieren. Wenn Sie die Taste zum Stummschalten drücken, wenn kein aktiver Alarm vorliegt, werden alle zukünftigen Alarme mit mittlerer oder geringer Priorität für die nächsten acht Stunden deaktiviert. Siehe Kapitel 9. Alarmanzeigen und Kapitel 10. Fehlerbehebung. Hier finden Sie weitere Informationen zu Alarmen.

**WICHTIG:** Das Alarmsystem wird während der Einschaltsequenz getestet. Hierbei sehen Sie, dass alle Alarmleuchten kurzzeitig aktiviert werden. Außerdem können Sie einen akustischen Alarm hören. Wenn Sie vermuten, dass Alarme nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler, damit dieser die Alarme überprüfen kann.

## 7.7. Ausschalten



**VORSICHT:** Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn dieses nicht verwendet wird.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator auszuschalten. Das Gerät gibt ein Geräusch aus, und in der Anzeige erscheint **Abschalten** für ca. fünf Sekunden eine Deaktivierungsmeldung. Anschließend wechselt das Gerät in den Energiesparmodus.

*WICHTIG: Während das Gerät in Betrieb ist, dürfen sie nicht gleichzeitig die Verbindung zum Wechselstromnetzteil unterbrechen und den Akku entfernen. Verwenden Sie stets die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Warten Sie, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet wurde, bevor Sie die Verbindung zur Stromversorgung unterbrechen und den Akku entfernen.*

DE

## 8. Flugreisen mit dem mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator

### 8.1. Flugvorbereitungen für den Fluggast

#### 8.1.1. Erforderliche Kennzeichnung

Ihr mobiler Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator eignet sich für Flugreisen und erfüllt alle Abnahmekriterien der US-amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde (United States Federal Aviation Administration, FAA). Dies wird durch die in Rotschrift gedruckte Erklärung auf der Rückseite des mobilen Sauerstoffkonzentrators belegt, die besagt „The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft“ (Der Hersteller dieses mobilen Sauerstoffkonzentrators hat ermittelt, dass dieses Gerät alle geltenden Abnahmekriterien der FAA für die Mitnahme und Verwendung eines mobilen Sauerstoffkonzentrators an Bord eines Flugzeuges erfüllt). Vor dem Flug werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, dem Flugpersonal diese Kennzeichnung auf dem mobilen Sauerstoffkonzentrator vorzuzeigen.

#### 8.1.2. Vorherige Beratung durch einen Facharzt

Die FAA verlangt nicht, dass ein Passagier vor der Verwendung des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators an Bord eines Flugzeuges einen Arzt konsultiert. Jedoch sollten Sie im Vorfeld mit Ihrem Arzt die folgenden Punkte besprechen:

- Die Auswirkungen einer Druckkabine (Kabinendruck im Flugzeug kann einer Flughöhe von bis zu 8000 Fuß entsprechen) auf Ihren Sauerstoffbedarf.
  - Einige Anwender des Zen-O lite™ benötigen aufgrund des Kabinendrucks bei einer gewissen Flughöhe einen höheren Literdurchsatz oder eine höhere Liter/Minute-Einstellung (l/min) für den Zen-O lite™.
  - Einige Anwender des Zen-O lite™, die das Gerät nur gelegentlich verwenden, müssen ihren Zen-O lite™ möglicherweise aufgrund des Kabinendrucks während des gesamten Fluges verwenden.
- Ihren Sauerstoffbedarf während der Reise und ob sich Ihr Bedarf seit der ersten Verschreibung von Zen-O lite™ oder seit der letzten Untersuchung durch einen Arzt geändert hat.



- Einige zentrale Bestimmungen im Benutzerhandbuch des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators, welche die Sauerstoffversorgung, Indikatoren, Warnungen und Alarmer sowie die Einstellung/Änderung des Literdurchsatzes oder der l/min betreffen.
- Alle Besatzungsmitglieder (Piloten und Flugpersonal) werden im Umgang mit medizinischen Zwischenfällen während des Fluges geschult. Jedoch verlangt die FAA nicht, dass Fluggesellschaften oder Besatzungsmitglieder die Passagiere medizinisch versorgen.

*WICHTIG: Weitere Informationen über die Gesundheit und Sicherheit von Passagieren finden sich unter [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Ermittlung der notwendigen Anzahl an Akkus**

Sie sind selbst für die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Akkus zur Versorgung Ihres mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators verantwortlich. Sie sollten bei der Ermittlung der notwendigen Anzahl an Akkus mindestens die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Beratung durch einen Arzt hinsichtlich der Verwendungsdauer des Zen-O lite™.
- Informationen der Fluggesellschaft hinsichtlich der erwarteten Flugdauer sowie jeglicher Zwischenlandungen und unvorhergesehener Verspätungen.

*WICHTIG: Ihre Flugreise umfasst möglicherweise mehrere Flüge oder mehrere Fluggesellschaften, wodurch Sie Ihren Zen-O lite™ gegebenenfalls für einen längeren Zeitraum zwischen den Flügen am Boden verwenden müssen.*

- Die Informationen im Benutzerhandbuch des Zen-O lite™ hinsichtlich der erwarteten Batterienutzungsdauer.

*WICHTIG: Sie sollten sich während eines Fluges niemals nur auf die an Bord verfügbare Stromversorgung verlassen.*

- Die Anforderungen einer Fluggesellschaft an die Mitnahme einer bestimmten Anzahl an Akkus können in der Regel auf der Internetseite der jeweiligen Airline eingesehen werden.

*WICHTIG: Fluggesellschaften fordern Sie möglicherweise dazu auf, genügend Akkus bei sich zu tragen, mit denen das Gerät für mindestens 150 % der erwarteten maximalen Flugdauer gespeist werden kann.*

### **8.1.4. Dokumentation**

Sie sind für den Betrieb des Zen-O lite™ an Bord des Flugzeuges verantwortlich. Aus diesem Grund empfiehlt die FAA, dass Passagiere mindestens dieses Benutzerhandbuch und jegliche andere schriftliche, von ihrem Arzt hinsichtlich dem Zen-O lite™ und dessen Verwendung ausgestellte Unterlagen mit sich führen.

### 8.1.5. Ärztliches Attest

Eine Fluggesellschaft kann gegebenenfalls ein ärztliches Attest von einem Passagier mit einer Behinderung verlangen, falls begründete Zweifel bestehen, dass die Person den Flug ohne außerordentliche medizinische Betreuung während des Fluges sicher hinter sich bringen kann. Des Weiteren kann eine Fluggesellschaft ein ärztliches Attest von einer Person verlangen, die während des Fluges medizinischen Sauerstoff zuführen muss. Die FAA verlangt jedoch **nicht**, dass sich Passagiere ein ärztliches Attest ausstellen lassen und dieses der Fluggesellschaft oder dem Piloten vor der Verwendung des Zen-O lite™ an Bord des Flugzeuges vorlegen.

### 8.1.6. Ersatzakkus

Akkuschäden und Batteriekurzschlüsse können eine Überhitzung der Akku und einen Brand zur Folge haben. Dies kann wiederum Personenschäden und bei bestimmten Akkutypen im schlimmsten Falle sogar einen katastrophalen Brand in der Passagierkabine verursachen. Daher müssen Ersatzakkus auf Lithiumbasis an Bord eines Flugzeuges einzeln vor Kurzschlüssen geschützt werden, indem sie in der Originalverpackung aufbewahrt, freiliegende Polklemmen abgeklebt oder die Akkus einzeln in Kunststoffbeutel / Schutzhüllen verstaut werden.

*WICHTIG: Ersatzakkus auf Lithiumbasis dürfen bei einer Flugreise nicht als aufgegebenes Gepäck mitgeführt werden.*

Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Ersatzakkus im Handgepäck mitgeführt und ordnungsgemäß verpackt werden. Zen-O lite™-Händler, einige Fluggesellschaften und Spediteure, die auf den Transport kleinerer Sendungen spezialisiert sind, bieten diesen Verpackungsservice möglicherweise an.

## 8.2. Boarding und In-Fluginformationen

### 8.2.1. Handgepäck

Bei Ihrem Zen-O lite™ handelt es sich um ein Hilfsgerät. Daher dürfen Fluggesellschaften den Zen-O lite™ nicht im Rahmen ihrer Handgepäckvorschriften als Gegenstand zählen, der die festgelegte Grenze für Handgepäck beeinflusst.

*WICHTIG: Eine Tasche mit zusätzlichen Akkus, die zur Speisung des ZEN-O™ während des Flug-es erforderlich sind, könnte ebenfalls als Hilfsgerät erachtet werden. Jedoch gibt es Einschränkungen bezüglich der Nennenergie in Wattstunden (Wh), die auf 100 Wh pro Akku beschränkt ist. Bei Ihrem ZEN-O™ wird es keine Beschränkungen geben, da die Nennenergie in Wattstunden (Wh) unter 100 Wh pro Akku liegt.*

### 8.2.2. Zen-O lite™ als aufgegebenes Gepäck

Sie können Ihren Zen-O lite™ bei einer Flugreise als Handgepäck oder als aufgegebenes Gepäck mitführen. Jedoch **dürfen Ersatzakkus auf Lithiumbasis bei einer Flugreise nicht als aufgegebenes Gepäck mitgeführt werden.**



### 8.2.3. Überlegungen hinsichtlich der Platzierung und des Verstauens Ihres Zen-O lite™

Um die effiziente und ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators zu gewährleisten, darf der Lufteinlassfilter während dem Gebrauch nicht blockiert sein. Daher muss der Bereich rund um den Zen-O lite™ frei von Decken, Jacken und anderen Handgepäckstücken sein, die den Lufteinlassfilter möglicherweise blockieren könnten. Wenn der Lufteinlassfilter blockiert ist, reagiert das Gerät wie folgt. Zunächst werden Sie durch Warnleuchten und/oder akustische Alarmer darauf aufmerksam gemacht, dass die Sauerstoffkonzentration im Zen-O lite™-Auslass zu gering ist. Wenn die Temperatur der internen Komponenten des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators einen bestimmten Grenzwert übersteigt schaltet sich das Gerät automatisch aus, um einer Überhitzung des Gerätes vorzubeugen. Sie werden durch Warnleuchten und/oder akustische Alarmer auf diese Situation hingewiesen.

**Platzierung des Zen-O lite™** An Bord des Flugzeuges muss der Zen-O lite™ unter den Sitz vor Ihnen gestellt werden, damit Sie oder Ihr Begleiter die Warnleuchten am Gerät sehen und/oder den akustischen Alarm hören können. Durch das Verstauen direkt unter Ihrem eigenen Sitz oder in einem geschlossenen Gepäckfach sind die Warnleuchten nicht sichtbar. Auch die akustischen Alarmer können dadurch möglicherweise nicht gehört werden. Je nach Einschätzung des Flugpersonals gibt es möglicherweise noch andere Orte, an denen Sie das Gerät verstauen können.

### 8.2.4. Sitzplatzbeschränkungen für Passagiere, die einen Zen-O lite™ an Bord eines Flugzeuges mit sich führen möchten

**Sitzplatz in einer Notausgangsreihe** – Die FAA untersagt Passagieren, die Hilfsgeräte wie beispielsweise einen Zen-O lite™ verwenden, einen Sitz am Notausgang zu belegen.

**Verstauen bei Bewegung** – In Bewegung, sprich während am Boden (Zurücksetzen vom Gate), dem Start und der Landung muss der Zen-O lite™ ordnungsgemäß verstaut werden. Dabei darf er den Passagierzugang zu jeglichen Ausgängen oder zum Gang in der Passagierkabine nicht behindern. Zur Einhaltung der FAA-Sicherheitsbestimmungen gelten möglicherweise noch weitere Sitzplatzbeschränkungen.

Zum Beispiel:

1. Einige Sitzplätze in einem Flugzeug, beispielsweise Plätze an der Schottwand, verfügen möglicherweise nicht über einen zulässigen Stauraum, in dem der Zen-O lite™ während des Rangieren am Boden, dem Start und der Landung untergebracht werden kann. Daher kann der Zen-O lite™ während dieser Phasen gegebenenfalls nicht korrekt verstaut werden. In solchen Fällen kann eine Sitzplatzbeschränkung gelten.
2. Beim Rangieren am Boden, während dem Start und während der Landung darf der Schlauch der Nasenkanüle, durch den der Sauerstoff aus Ihrem ordnungsgemäß verstauten Zen-O lite™ abgegeben wird, nicht in den Gang ragen, damit keine Behinderungen und Stolpergefahren entstehen. Während dieser Phasen dürfen Sie den Zugang für andere Passagiere keinesfalls behindern. In solchen Fällen gilt zur Einhaltung der FAA-Sicherheitsbestimmungen möglicherweise eine Sitzplatzbeschränkung. Sollten beispielsweise

alle Sitzplätze in einer Reihe belegt sein, so wäre der geeignete Sitz für den Verwender des Zen-O lite™ in dieser Reihe ein Fensterplatz.

3. Eine Fluggesellschaft kann Sitzplatzbeschränkungen ausschließlich auf Grundlage der FAA-Sicherheitsregelungen etablieren. Die oben stehenden Beispiele sind unvollständig und nennen nur einige Szenarien, die berücksichtigt werden müssen.

*WICHTIG: Eine allgemein geltende Richtlinie einer Fluggesellschaft, die besagt, dass alle Passagiere, die mit einem Zen-O lite™ an Bord des Flugzeuges gehen, einen Fensterplatz einnehmen müssen, ohne dabei die Aspekte der individuellen Situation zu berücksichtigen, würde den FAA-Anforderungen widersprechen.*

### 8.2.5. Druckabfall in der Kabine

Von einem Zen-O lite™, der während eines Druckabfalls in der Kabine verwendet wird, geht keinerlei Gefahr aus. Im Falle eines Druckabfalls in der Kabine (schnell oder langsam) müssen Sie jedoch die herabfallenden Sauerstoffmasken verwenden, bis sich das Flugzeug stabilisiert hat.

### 8.2.6. Verwendung der flugzeugeigenen Stromversorgung

Betreiber bzw. Fluggesellschaften sind nicht dazu verpflichtet, einem Verwender von Zen-O lite™ eine flugzeugeigene Stromversorgung bereitzustellen. Steckdosen an Bord des Flugzeuges gelten als zusätzliche Annehmlichkeit und müssen gemäß geltender Zertifizierungen oder betrieblicher Regelungen nicht zwingend vorhanden sein. Des Weiteren kann es aufgrund elektrischer Störungen in den Systemen des Flugzeuges möglicherweise notwendig sein, die Stromversorgung zu diesen Steckdosen am Boden oder während des Fluges zu unterbrechen, um die Flugsicherheit zu gewährleisten. Daher sollte der Zen-O lite™ an Bord eines Flugzeuges ausschließlich über Akkuleistung betrieben werden. **Sie sollten sich während eines Fluges niemals darauf verlassen, dass an Bord eine flugzeugeigene Stromversorgung verfügbar ist.**

### 8.2.7. Rauchen

Das Rauchen (auch von E-Zigaretten) während einer Sauerstofftherapie ist gefährlich und führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten und anderer Personen durch Feuer. Lassen Sie in einem Umkreis von 3 Metern rund um den mobilen Sauerstoffkonzentrator oder um sauerstoffführendes Zubehör nicht zu, dass geraucht wird und vermeiden Sie auch unbedingt offenes Feuer.

## 8.3. Anforderungen der Transportsicherheitsbehörde (TSA)

Detaillierte Informationen für Passagiere, die Atemtherapiegeräte wie den mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator verwenden, sind auf der Internetseite der Transportsicherheitsbehörde (Transportation Security Administration; TSA) zu finden: <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

## Für den Zen-O lite™ gelten die folgenden allgemeinen Überlegungen bei der Sicherheitskontrolle:

1. *Die Mitnahmegrenze von einem Handgepäckstück und einem persönlichen Gegenstand (z. B. Handtasche, Tasche oder Laptoptasche) gilt nicht für Arzneiwaren, Medizingeräte, Mobilitätshilfen und/oder Hilfsgeräte, die von einer Person mit einer Behinderung mitgeführt bzw. verwendet werden.*
2. *Wenn eine Person medizinische Unterlagen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Verfassung oder Behinderung besitzt, können diese dem Sicherheitspersonal zur Aufklärung der Situation vorgelegt werden. Diese Unterlagen sind nicht zwingend erforderlich und befreien eine Person nicht von der Sicherheitskontrolle.*

## 9. Alarmanzeigen

Erkennt der mobile Zen-O lite™ -Sauerstoffkonzentrator einen technischen Fehler, wird der Alarm visuell und akustisch innerhalb von 10 Sekunden ausgegeben. Es existieren vier verschiedene Alarmstufen: kritische Alarmer mit hoher Priorität, Alarmer mit hoher Priorität, Alarmer mit mittlerer Priorität und Alarmer mit geringer Priorität.

Jede dieser Stufen wird mithilfe der Hintergrundbeleuchtung, der gelben und der roten LED, sowie mit einem Signalton wie nachfolgend beschrieben angezeigt. In jedem Fall haben die Alarmmeldung und der Stromversorgungsstatus Vorrang vor der aktuellen Anzeige.

*WICHTIG: Für alle Alarmbedingungen und -parameter existiert eine Werkseinstellung. Die Bedingungen und Parameter können vom Benutzer nicht verändert oder angepasst werden.*

*WICHTIG: Das Alarmsystem wird während der Einschaltsequenz getestet. Hierbei sehen Sie, dass alle Alarmleuchten kurzzeitig aktiviert werden. Außerdem können Sie einen akustischen Alarm hören.*

| Alarmstatus                                  | Hörbarer Ton   | Visuelle Anzeige   | Stummschaltung Dauer |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Kritische Alarmer mit hoher Priorität</b> | Jeweils zehn Signaltöne, Wiederholung alle 3 Sekunden. | Die rote LED leuchtet dauerhaft, und das Gerät wird automatisch deaktiviert. | 20 Minuten           |
| <b>Alarmer mit hoher Priorität</b>           | Jeweils zehn Signaltöne, Wiederholung alle 3 Sekunden. | Die rote LED blinkt.   | 20 Minuten           |
| <b>Alarmer mit mittlerer Priorität</b>       | Jeweils drei Signaltöne, Wiederholung alle 8 Sekunden. | Die gelbe LED blinkt.  | 8 Stunden            |
| <b>Alarmer mit geringer Priorität</b>        | Jeweils drei Signaltöne, Wiederholung alle 10 Minuten. | Die gelbe LED leuchtet dauerhaft.  | 24 Stunden           |

**WICHTIG:** Treten zwei Alarmer gleichzeitig auf, wird der Alarm mit der höheren Priorität angezeigt. Treten zwei oder mehr Alarmer mit gleicher Priorität gleichzeitig auf, wird der neueste Alarm ausgegeben.

**WICHTIG:** Die neuesten vom Gerät ausgegebenen Alarmer werden zur Überprüfung durch das Wartungspersonal protokolliert. Dieses Protokoll wird auch dann beibehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder wenn die Stromversorgung aus einem anderen Grund unterbrochen wird.

**WICHTIG:** Wird die Taste zur Stummschaltung gedrückt, bevor ein Alarm auftritt (beispielsweise um das Gerät in einem Kino stumm zu schalten), haben kritische Alarmer mit hoher Priorität und Alarmer mit hoher Priorität Vorrang vor der Stummschaltung. Alarmer mit mittlerer und geringer Priorität werden ab dem Drücken der Taste für acht Stunden deaktiviert. Drücken Sie die Taste zur Stummschaltung erneut, um den letzten Alarm mit der höchsten Priorität anzuzeigen. Drücken Sie die Taste zur Stummschaltung erneut, um den Acht-Stunden-Zähler zurückzusetzen.

## 9.1. Alarme

Gibt der Konzentrator einen Alarm aus, wird die entsprechende Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben. Ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen gemäß der folgenden Übersichten.

### 9.1.1. Kritische Alarme mit Hoher Priorität

*WICHTIG: Bei diesen Alarmen wird das Gerät sofort deaktiviert.*

| Alarmmeldung          | Beschreibung                                    | Maßnahme   |
|-----------------------|---|--|
| <b>Batt. aufladen</b> | Der Akku muss aufgeladen werden.                | Laden Sie der Akku(n) auf, indem Sie das Gerät mit Strom versorgen. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind. |
| <b>Falsche Bat.</b>   | Es wird ein nicht freigegebener Akku verwendet. | Ersetzen Sie den Akku durch einen freigegebenen Akku.  |
| <b>XX: Service!*</b>  | Technisches problem.                            | Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler.  |

\*Wert: 01–20

### 9.1.2. Alarme mit Hoher Priorität

*WICHTIG: Beim Auftreten dieser Alarme kann das Gerät weiter betrieben werden.*

| Alarm message         | Description  | Action   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Auslass kontr.</b> | Das Gerät kann die Sauerstoffreinheit nicht mehr aufrechterhalten. | Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass/-auslass nicht blockiert ist. Besteht der Alarm weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler.                            |
| <b>Schwache Batt.</b> | Die geschätzte Batterielaufzeit beträgt weniger als 17 Minuten.    | Laden Sie den Akku auf, indem Sie das Gerät mit Strom versorgen.<br><i>WICHTIG: Diese Meldung wird automatisch ausgeblendet, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird.</i> |
| <b>XX: Service!*</b>  | Technisches problem.   | Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler.  |

\*Wert: 01–20

### 9.1.3. Alarmer mit Mittlerer Priorität

| Alarmermeldung       | Beschreibung                                      | Maßnahme   |
|----------------------|---|--|
| <b>Kanüle prüfen</b> | Keine Atemzüge seit mehr als 15 Sekunden erkannt. | Prüfen Sie die Kanülenverbindung. Atmen Sie durch die Nase. Besteht der Alarm weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler.<br><i>WICHTIG: Diese Meldung wird automatisch ausgeblendet, sobald ein Atemzug erkannt wurde.</i> |
| <b>XX: Service!*</b> | Technisches Problem                               | Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler.  |

\*Wert: 51–70


### 9.1.4. Alarmer mit Geringer Priorität

| Alarmermeldung       | Beschreibung        | Maßnahme                                    |
|----------------------|---------------------|---|
| <b>XX: Service!*</b> | Technisches Problem | Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler. |

\*Wert: 71–99

### 9.1.5. Sonstige Meldungen

| Meldung               | Beschreibung   | Maßnahme   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Kein Strom</b>     | Die externe Stromversorgung wurde unterbrochen. Die Einheit läuft nun im Akkubetrieb.  | Keine Maßnahme erforderlich.   |
| <b>Abschalten</b>     | Wird angezeigt, während das Gerät ausgeschaltet wird.                                  | Keine Maßnahme erforderlich.   |
| <b>Keine Batterie</b> | Wird als Element im Akkumenü angezeigt, wenn keine Kommunikation mit dem Akku besteht. | Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt installiert ist. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler, wenn der Akku vollständig eingesetzt ist und die Meldung länger als 30 Sekunden angezeigt wird. |

| Meldung   | Beschreibung   | Maßnahme   |
|---|--|--|
| <b>Batt NN%</b>   | Anzeige der Akkuladung in Prozent, wenn mindestens 10 % Restladung verbleiben und keine externe Stromversorgung vorhanden ist.   | Die Meldung wird angezeigt, wenn die Akkutaste gedrückt wurde.   |
| <b>Laden: NN%</b>  | NN% zeigt den aktuellen Ladezustand des Akku. Wird angezeigt, wenn der Ladezustand des Akku mehr als 10 %, aber weniger als 100 % beträgt und wenn eine externe Stromversorgung vorliegt.                                | Die Meldung wird angezeigt, wenn die Akkutaste gedrückt wurde.   |
| <b>Aufladen</b>   | Die Batterieladung beträgt weniger als 10 %, und es besteht eine externe Stromversorgung.  | Die Meldung wird angezeigt, wenn die Akkutaste gedrückt wurde.   |
| <b>Atemfreque. XX</b>   | Die durchschnittliche Atemfrequenz des Patienten, wenn das Gerät die maximale Sauerstoffmenge bereitstellt und der Bolus reduziert ist. Werden keine Atemzüge erkannt, wird die zuletzt erkannte Atemfrequenz angezeigt. | Verringertes Aktivitätsniveau. Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass/-auslass nicht blockiert ist.<br><i>WICHTIG: Diese Meldung wird automatisch ausblendet, wenn das Gerät wieder zum Normalbetrieb zurückkehrt.</i> |
| <b>Alarm gelöscht</b>   | Ein zuvor eingestellter Alarm wurde automatisch gelöscht.  | Keine Maßnahme erforderlich.   |

## 10 Fehlerbehebung

DE


| Problem  | Mögliche Ursache   | Fehlerbehebung   |
|--|--|--|
| Das System kann nicht mehr betrieben werden.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System wurde möglicherweise von der Stromversorgung getrennt.</li> <li>• Das System ist möglicherweise ausgeschaltet.</li> <li>• Ein kritischer Alarm mit hoher Priorität ist eingetreten.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das System dauerhaft mit Strom versorgt wird.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das System eingeschaltet ist.</li> <li>• Untersuchen Sie das System auf Schäden oder auf Kontakt mit einer Flüssigkeit.</li> <li>• Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler.</li> </ul>  |
| Ein Alarmton wird ausgegeben oder die LED  oder  leuchtet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Kapitel 9. Alarmanzeigen.</li> </ul>  | Siehe Kapitel 9. Alarmanzeigen.  |
| Der Akku wird nicht aufgeladen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Stromversorgung.</li> <li>• Der Akku ist nicht vollständig eingesetzt.</li> <li>• Der Akku ist nicht betriebsbereit.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Verbindungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die runden Anschlüsse sind am Gerät gesichert.</li> <li>• Das Netzkabel ist mit dem Stromnetz (Gleichstrom/Wechselstrom) oder bei Bedarf mit einem Gleichstrom-Adapter in einem Fahrzeug verbunden.</li> <li>• Das Netzkabel ist an eine Netzsteckdose angeschlossen.</li> <li>• Die Netzsteckdose wird mit Strom versorgt.</li> </ul> </li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig eingesetzt wurde und dass die Akkufachabdeckung gesichert ist.</li> <li>• Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler.</li> </ul> |



## 11 **Wartung und Reinigung**

### 11.1. Routinewartung


 **WARNUNG:** Verwenden Sie für dieses Gerät und für dessen Zubehör keine Schmiermittel.


 **VORSICHT:** Tauschen Sie die Kanüle regelmäßig aus. Fragen Sie Ihren Vertriebshändler oder Arzt, wie oft die Kanüle ausgetauscht werden muss.


Das Gerät gibt einen Alarm aus, wenn ein Filter oder das Gerät gereinigt oder ausgetauscht werden muss. (Siehe Kapitel 1010. Fehlerbehebung.)

*WICHTIG: Die Kanüle und der Patientenfilter können durch den Patienten selbst kontaminiert werden. Gehen Sie vorsichtig mit diesen Komponenten um.*

### 11.2. Außenreinigung

 **WARNUNG:** Tauchen Sie das Gerät nicht in eine Flüssigkeit ein. Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keiner staubigen Umgebung aus.

 **VORSICHT:** Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Reinigungsmittel. Lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf der gereinigten Oberfläche trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.

 **VORSICHT:** Unterbrechen Sie vor dem Reinigen stets die Stromversorgung, und schalten Sie das Gerät aus.

Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen Tuch, das leicht mit Seifenwasser befeuchtet wurde. Sie können auch antibakterielle Reinigungstücher verwenden (Isopropylalkohol in einer Lösung von 70 %).

*WICHTIG: Das Gerät muss wöchentlich außen gereinigt werden. Zubehörteile sind nach Bedarf zu reinigen. Das Gerät soll eine äußerliche Reinigung erhalten, zwischen Patientenwechsel. Vor der Lieferung an den Patienten sollte auch die Geräteoberfläche gereinigt werden; des Weiteren wird empfohlen, den Patienten-Ausgangfilter zu ersetzen.*

Nasenbrille: Beachten Sie die Reinigungsanleitung des Herstellers

### 11.3. Gebrauchsdauer

Die erwartete Gebrauchsdauer des Geräts beträgt fünf Jahre (hiervon ausgenommen sind die Molekularsiebe). Die Gebrauchsdauer der Siebträger variiert je nach den Betriebsbedingungen. Tauschen Sie diese nach Bedarf aus. Achten Sie auf den Alarm zur Überprüfung der Belüftungsöffnungen. Sind Lufteinlass und -auslässe nicht blockiert, und besteht der Alarm zur Überprüfung der Auslässe weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler, um Anweisungen zum Austauschen der Siebträger zu erhalten.

### 11.4. Service Anschluss

Der Service-Anschluss passt zum Service-Kabel TF-02091 (5.1 Vdc maximum) und wird nur für den Service verwendet.



Fig. 8

DE

## 12 Reparatur und Entsorgung des Geräts

### 12.1. Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Bitten Sie Ihren Dienstleistungsanbieter oder Vertriebshändler um Unterstützung (siehe Kapitel 1010. Fehlerbehebung).

Die Molekularsiebe können vom Patienten selbst getauscht werden nach Anweisung des Händlers/Versorgers. Alle anderen Wartungen und Reparaturen müssen von geschulten Service Mitarbeitern durchgeführt werden.

### 12.2. Anweisung zum Wechseln der Molekularsiebe:

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom AC oder DC Netzteil (falls angeschlossen)
2. Entnehmen Sie das Gerät aus der Tragetasche.
3. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
4. Um die obere Abdeckung des Gerätes zu entfernen, drücken Sie die vier Entriegelungsknöpfe, die sich oben am Gerät befinden, siehe Abb. 9
5. Benutzen Sie das Werkzeug, das den Ersatz Molekularsieben beiliegt um die Siebe zu entnehmen. Drehen Sie es 3-4 mal gegen den Uhrzeigersinn, bis sie das Sieb aus dem Gerät herausziehen können.
6. Entnehmen Sie das zweite Sieb auf die gleiche Weise.
7. Entnehmen Sie die Ersatz-Molekularsiebe aus der Packung, entfernen Sie die Luftpolsterfolie und setzen Sie die Siebe umgehend in das Gerät ein. ACHTUNG: Lassen Sie die Ersatzsiebe nicht offen liegen!
8. Setzen Sie die Ersatz-Siebe mit dem Gewinde nach oben ein, siehe Abb. 10
9. Ziehen Sie die Siebe von Hand fest.

10. Benutzen Sie das Werkzeug um den Vorgang abzuschließen.

### **ACHTUNG: Nicht zu fest anziehen!**

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 – 10 für das zweite Sieb.

12. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gerät, indem Sie ihn auf die Geräteoberseite drücken, bis die vier Knöpfe einrasten.

13. Setzen Sie den Akku wieder in das Gerät ein.


14. Verbinden Sie das Gerät mit einem AC oder DC Netzteil


### **SCHALTEN SIE NICHT EIN!**

15. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Alarmstummschaltung  und Akku  bis das Display "Leak Test" anzeigt.

a. Das Fortschreiten des Tests wird rechts neben dem Text „Leak Test“ in Form von Dezimalpunkten angezeigt.



b. Nach dem Test wird das Gerät "Test Passed" (Test erfolgreich) oder "Test Failed" (Test fehlgeschlagen) anzeigen.



i Test Passed - Drücken Sie die Taste Akku , und fahren Sie mit Punkt 16 fort.


ii Test Failed - Drücken Sie die Taste Akku  und wiederholen Sie die Schritte 4 – 15.


16. Wenn der Test erfolgreich verlaufen ist, löschen Sie den Siebbetriebsstundenzähler durch Aufrufen des Diagnosemodus.

a. Schalten Sie das Gerät ein.

b. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  bis "Diagnostics" angezeigt wird..

c. Drücken Sie die  oder  Taste, um zum Betriebsstundenzähler „xxxxH sieve“ zu gelangen.

d. Halten Sie die Taste für die Stummschaltung  solange gedrückt, bis der Betriebsstundenzähler auf Null zurückgesetzt ist (=0H Sieve).

e. Verlassen Sie den Diagnosemodus durch Drücken der Akku Taste  .

f. Das Gerät ist betriebsbereit.

*Wichtig: Kontaktieren Sie Ihren Versorger oder Händler, falls das Gerät auch nach mehreren Versuchen nicht funktioniert*

### **12.3. Entsorgung**

- Bei Fragen zur Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler.
- Entsorgen Sie die Batterie gemäß der lokalen Bestimmungen, oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler.



Fig. 9



Fig. 10

DE

## 13 Gewährleistung

Die Gerätegarantie ist auf drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum begrenzt, ausschließlich die Molekularsiebe, die nur ein Jahr Garantie haben. Auf alle Zubehörteile einschließlich Akkus gewähren wir ein Jahr Garantie.

Die Standardgarantie ist nur gültig für Geräte die gemäß der Gebrauchsanweisung gehandhabt wurden.

## 14. Marken und Haftungsausschluss

### 14.1. Marken

Alle Marken sind Eigentum der entsprechenden Inhaber.

### 14.2. Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig überprüft und für zuverlässig befunden. Der Hersteller behält sich Änderungen an den hier aufgeführten Produkten vor, um die Lesbarkeit, die Funktion oder das Design zu verbessern. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Anwendung oder Nutzung der hier beschriebenen Produkte oder Schaltungen entstehen. Außerdem werden keine Lizenzen im Rahmen seiner Patentrechte und auch keine Rechte Dritter wahrgenommen.

#### 14.2.1. Dieses Dokument

Änderungen an den Informationen in diesem Dokument bleiben vorbehalten. Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die durch Copyright-Gesetze geschützt sind. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers auf irgendeine Weise ganz oder teilweise (mit Ausnahme kurzer Auszüge in Artikeln oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen) reproduziert werden. Lesen Sie sorgfältig alle Handbücher, die zusammen mit dem Produkt geliefert werden.

#### Unterstützung

Sollten Sie Fragen zu den Informationen in diesen Anweisungen oder zum sicheren Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstleistungsanbieter oder Vertriebshändler.

## Technische Beschreibung (Forsetzung)

### 15. Technische Beschreibung

|   |  |
|---|--|
| <b>Größe:</b>                             | Breite 249 mm, Tiefe 97 mm, Höhe 231 mm<br>Breite 9.8 Zoll, Tiefe 3.8 Zoll, Höhe 9.1 Zoll  |
| <b>Gewicht der Einheit:</b>               | 2.5 kg (5.5 lb)(ohne Tragetasche)  |
| <b>Stromversorgung:</b>                   | Wechselstromnetzteil: 100-240V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Eingang, 24V DC, 5.0A Ausgang. Gleichstromnetzteil: 11.5-16V DC Eingang, 24V, 5.0A Ausgang<br><i>(Wichtig: siehe Zubehörliste für das Modell und die Ersatzteilnummern für AC und DC Netzteile.)</i> |
| <b>Reinheit:</b>                          | 87–96 % bei allen Flussraten, im Bereich der Betriebsbedingungen   |
| <b>Einstellung:</b>                       | Durch den Benutzer in Schritten von 0,5 von 1,0–5,0  |
| <b>Empfindlichkeit des Atemauslösers:</b> | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O  |
| <b>Einstellungsanzeige:</b>               | LCD-Anzeige  |
| <b>Maximaler Sauerstoff-Ausgabedruck:</b> | 1,4 bar  |
| <b>Feuchtigkeitsbereich:</b>              | 5% to 93% ± 2% nicht kondensierend   |
| <b>Geräteanschluss:</b>                   | Netzteil Eingangsanschluss   |
| <b>Betriebshöhe:</b>                      | 0– 4 000 m (0' bis 13 000 Fuß) über Meereshöhe, von 1 060–575 mbar   |
| <b>Schalldruckpegel:</b>                  | 44dBA bei Einstellung 2 und 18 BPM:<br>(bei Messung im Abstand von 1 Meter zum Gerät)  |
|   | Maximaler Schalldruckpegel von 52,5 dBA nach ISO 80601-2-69  |
| <b>Schutzart (elektrisch):</b>            | Klasse II  |
| <b>Schutzgrad (elektrisch):</b>           | Typ BF   |
| <b>Schutzgrad (Wasser):</b>               | IP22 in Tragetasche (Schutz vor kleinen Objekten und Tropfwasser im geneigten Zustand)<br>IP20 bei Verwendung außerhalb der Tragetasche (Schutz vor kleinen Objekten und kein Schutz vor Wasser, das in den Konzentrator eindringt)                        |

DE

## Technical Description (continued)

|  |  |
|--|--|
| <b>Sicherheitsgrad (entflammare Anästhesiemischung):</b> | Nicht geeignet zur Verwendung in der Nähe einer entflammaren Anästhesiemischung  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                               | Dauerbetrieb bei einer Temperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 40 °C (104 °F)   |
| <b>Lagertemperatur:</b>                                  | Zwischen -20 °C (-4 °F) und 60 °C (140 °F)   |
| <b>Schalldruckbereich Alarmton:</b>                      | 65 to 85 dB(A)   |
| <b>Verzögerungen des Alarmsystems:</b>                   | Weniger als 10 Sekunden nach der Erkennung (Alarme zu geringem Sauerstoffpegel, wenn der Sauerstoffgehalt weniger als 82 % bei definierten Umgebungsbedingungen beträgt) |
| <b>Statusanzeige Sauerstoffkonzentration:</b>            | Alarm mit hoher Priorität, der angibt, dass die Sauerstoffkonzentration unter 82 % gefallen ist  |

## Bolus-Größe Impulsmodus (Milliliter/Atemzug) gegenüber Einstellung und Atemfrequenz

|                     | Einstellung |    |      |      |      |
|---------------------|-------------|----|------|------|------|
| Atemzüge pro Minute | 1           | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                  | 11          | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                  | 11          | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                  | 11          | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                  | 11          | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                  | 11          | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                  | 11          | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*Alle Werte ± 15 % bei allen Betriebsbedingungen*

## 15.1. Informationen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Medizinische elektrische Geräte erfordern spezielle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Tragbare und mobile Geräte für die Funkkommunikation können Geräte wie den mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator beeinflussen. Daher dürfen Geräte dieser Art nicht in der Nähe des Konzentrators verwendet werden. Ist dies in der Praxis nicht möglich, beobachten Sie das Gerät, um sicherzustellen, dass dieses jederzeit korrekt funktioniert.

### 15.1.1. Anleitung Und Erklärung des Herstellers: Elektromagnetische Emissionen

Der mobile Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator ist für die Verwendung in der nachfolgend definierten elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Käufer oder der Benutzer des Konzentrators muss sicherstellen, dass dieser in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

| Emissionsprüfung   | Verträglichkeit | Elektromagnetische Umgebung/Anleitung   |
|--|-----------------|---|
| Funkemissionen<br>CISPR 11                                     | Gruppe 1        | Der mobile Zen-O lite™ -Sauerstoffkonzentrator verwendet Funkwellen nur für interne Funktionen.<br>Aus diesem Grund sind die Funkemissionen sehr gering und führen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur Störung von elektronischer Ausrüstung in der Nähe. |
| Funkemissionen<br>CISPR 11                                     | Klasse B        | Der Konzentrator eignet sich für den Einsatz in allen Arten von Einrichtungen, darunter Wohnbereiche und jene Bereiche, die direkt mit dem öffentlichen Niederspannungsnetz verbunden sind, mit dem Gebäude versorgt werden.                                  |
| Oberwellen<br>Emissionen<br>IEC 61000-3-2                      | Klasse A        |   |
| Spannungsfluktuationen/Störstrahlmissionen gemäß IEC 61000-3-3 | Entspricht      |   |


## 15.1.2. Anleitung und Erklärung des Herstellers: Elektromagnetische Störfestigkeit

Der Zen-O lite™ ist für den Einsatz in der nachfolgend definierten elektromagnetischen Umgebung geeignet. Der Käufer oder der Benutzer des Konzentrators muss sicherstellen, dass dieser in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

DE

| Störfestigkeitsprüfung  | Testwert gemäß IEC 60601   | Verträglichkeitswert   | Elektromagnetische Umgebung/Anleitung  |
|---|--|--|--|
| Elektrostatische Entladung gemäß (ESD) IEC 61000-4-2  | ± 2, 4, 6, 8kV Kontakt<br>± 2, 4, 8, 10, 15 kV Luft  | ± 2, 4, 6, 8kV Kontakt<br>± 2, 4, 8, 10, 15 kV Luft  | Böden müssen aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen.<br>Sind Böden mit synthetischem Material bedeckt, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.  |
| Elektrisches schnelles Störsignal / transiente Störgröße gemäß IEC 61000-4-4                              | ± 2kV für Stromversorgungsleitungen<br>± 1kV für Eingang/Ausgang   | ± 2kV für Stromversorgungsleitungen<br>± 1kV für Eingang/Ausgang   | Die Leitungsqualität muss der einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.  |
| Stoßspannung gemäß IEC 61000-4-5  | ± 1 kV im differentiellen Modus<br>± 2 kV im gemeinsamen Modus   | ± 1 kV im differentiellen Modus<br>± 2 kV im gemeinsamen Modus   | Die Leitungsqualität muss der einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.  |
| Spannungsabfälle, Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen in Eingangsleitungen gemäß IEC 61000-4-11 | < 5 % UT<br>(> 95 % Abfall in UT) für 0,5 Zyklen<br>< 40 % UT<br>(60 % Abfall in UT) für 5 Zyklen<br>< 70 % UT<br>(30 % Abfall in UT) für 25 Zyklen<br>< 5 % UT<br>(> 95 % Abfall in UT) für 5 s | < 5 % UT<br>(> 95 % Abfall in UT) für 0,5 Zyklen<br>< 40 % UT<br>(60 % Abfall in UT) für 5 Zyklen<br>< 70 % UT<br>(30 % Abfall in UT) für 25 Zyklen<br>< 5 % UT<br>(> 95 % Abfall in UT) für 5 s | Die Leitungsqualität muss der einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.<br>Benötigt der Benutzer des mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrators den unterbrechungsfreien Betrieb bei einem Stromausfall, wird empfohlen, dass der Konzentrator über eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsquelle oder einen Akku betrieben wird. |



| Störfestigkeit-<br>sprüfung   | Testwert gemäß<br>IEC 60601                      | Verträgli-<br>chkeitswert      | Elektromagnetische Umgebung/<br>Anleitung   |
|---|--|--------------------------------|---|
| Stromfrequenz-<br>Magnetfeld (50/60<br>Hz) gemäß<br>IEC 61000-4-8   | 3 A/m  | 3 A/m                          | Stromfrequenz-Magnetfelder müssen dem Niveau entsprechen, das für eine typische kommerzielle oder Krankenhausumgebung angenommen werden kann.   |
| Funkstrahlung<br>gemäß<br>IEC 61000-4-6   | 3 Vrms 150 kHz<br>to 80 MHz ;<br>6Vrms ISM Bands | 3 Vrms<br>(6Vrms ISM<br>Bands) | Tragbare und mobile Ausrüstung für die Funkkommunikation darf nicht in der Nähe des Geräts (einschließlich der Kabel) verwendet werden. Mit Nähe ist der empfohlene Trennabstand gleichzusetzen, der mithilfe der Gleichung für die Senderfrequenz ermittelt wurde.<br>Empfohlener Trennabstand:<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz bis 80 MHz<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz<br>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz<br>Hierbei entspricht P dem maximalen Nennwert der Ausgabeleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Sendeherstellers, und d ist der empfohlene Trennabstand in Metern (m).<br>Feldstärken fest installierter Funk-<br>sender, wie mithilfe einer elek-<br>tromagnetischen Vor-Ort-Studie<br>ermittelt <sup>a</sup> , müssen kleiner sein als<br>das Verträglichkeitsniveau in jedem<br>Frequenzbereich <sup>b</sup> .<br>In der Nähe von Ausrüstung, die mit<br>dem folgenden Symbol gekennzeich-<br>net ist, kann es zu Störungen<br>kommen:  |
| Funkstrahlung<br>gemäß<br>IEC 61000-4-3   | 10 V/m 80 MHz<br>to 2.5 Ghz                      | 10 V/m                         |   |
| <p><i>WICHTIG: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.</i></p> <p><i>WICHTIG: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion durch Strukturen, Objekte und Personen beeinflusst.</i></p> <p><sup>a</sup>Die Feldstärken fest installierter Sender, darunter Basisstationen für Funktelefone (Mobil/schnurlos) und landgestützte mobile Funkgeräte, Amateurfunk, Mittelwellen- und UKW-Radio sowie Fernsehsendungen können theoretisch nicht mit hoher Genauigkeit vorhergesagt werden. Zur Bewertung der elektromagnetischen Umgebung durch fest installierte Funksender muss eine elektromagnetische Begehung der betreffenden Umgebung erfolgen. Übertrifft die gemessene Feldstärke in der Umgebung, in der der Zen-O lite™ verwendet wird, das geltende Funkverträglichkeitsniveau, muss der Konzentrador beobachtet werden, um den Normalbetrieb sicherzustellen. Wird eine nicht normale Leistung beobachtet, sind gegebenenfalls weitere Maßnahmen erforderlich, darunter die Neuausrichtung oder neue Platzierung des Konzentrators. Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz müssen die Feldstärken kleiner als 3 V/m sein.</p> |  |                                |   |

### 15.1.3. Empfohlene Trennabstände zwischen Tragbaren und Mobilen Funkgeräten und dem Mobilen Zen-O lite™-Sauerstoffkonzentrator

Der mobile Zen-O lite™ -Sauerstoffkonzentrator ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung ausgelegt, in der ausgestrahlte Funkstörungen kontrolliert werden. Der Benutzer des Monitors kann zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er einen Mindestabstand zwischen der tragbaren und mobilen Funkkommunikationsausrüstung (Sender) und dem Monitor gemäß der nachfolgenden Empfehlung einhält (gemäß der maximalen Ausgabeleistung der Kommunikationsausrüstung).





| Nennwert der maximalen Ausgabeleistung des Senders (W) | Trennabstand (m) gemäß Senderfrequenz   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01   | 0.12                                    | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1  | 0.38                                    | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10   | 3.8                                     | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100  | 12                                      | 12                                      | 23                                       |

Für Sender mit einer maximalen Ausgabeleistung, die oben nicht aufgeführt wurde, kann der empfohlene Trennabstand (d) in Metern (m) mithilfe der Gleichung eingeschätzt werden, die für die Sendefrequenz gilt. Hierbei ist P der maximale Nennwert der Ausgabeleistung des Senders in Watt (W) nach den Angaben des Senderherstellers.

**WICHTIG:** Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennabstand für den höheren Frequenzbereich.

**WICHTIG:** Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion durch Strukturen, Objekte und Personen beeinflusst.

## 16 Glossar – Erläuterung von Verpackungs- und Kennzeichnungssymbolen

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Siehe Anweisungen vor der Verwendung                         |  | Begrenzung des Umgebungsdrucks im Betrieb 0 bis 4 000 m (0 bis 13 000 Fuß) |
|  | Typ BF gemäß der Anforderungen an die elektrische Sicherheit |  | Begrenzung der Lagerungstemperatur auf -20-60 °C (-4-140°F)                |

## Glossar – Erläuterung von Verpackungs- und Kennzeichnungssymbolen (Fortsetzung)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|                       | Seriennummer   |    | Begrenzung der Feuchtigkeit auf 5–93 % ± 2 % nicht kondensierend                    |
|                       | Katalognummer  |    | Vorsichtig handhaben  |
|                       | Bundesgesetze der USA schreiben vor, dass dieses Gerät nur von einem Arzt verkauft oder von diesem verordnet werden darf |    | Herstellungsdatum   |
|                       | Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Siehe Kapitel 6.  |    | Hersteller  |
| <br>No Open<br>Flames | Kein offenes Feuer, wenn das Gerät verwendet wird oder nicht   |    | Trocken halten (dieses Symbol bezieht sich auf die IPX2-Klassifizierung des Geräts) |
| <br>No<br>Smoking     | Rauchverbot  |    | Gebrauchte Batterien korrekt entsorgen  |
|                       | Separate Sammlung von elektrischen und elektronischen Teilen   |    | Symbol Klasse II  |
|                     | Entspricht den geltenden EU-Richtlinien, darunter der Richtlinie über Medizinprodukte                                    |  | Einsatzbereich Homecare   |

DE



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Hergestellt für: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Français

## Manuel de l'utilisateur: Zen-O lite™ Concentrateur D'oxygène Portable; Modèle : RS-00600

### Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Avant-Propos</b> .....                             | <b>76</b> |
| 1.1. Informations Générales .....                        | 76        |
| 1.2. Classification .....                                | 76        |
| 1.3. Conventions Typographiques .....                    | 77        |
| <b>2. Utilisation Prévue</b> .....                       | <b>77</b> |
| <b>3. Consignes de Sécurité</b> .....                    | <b>78</b> |
| 3.1. Vue D'ensemble des Avertissements .....             | 78        |
| 3.2. Vue D'ensemble des Précautions .....                | 79        |
| 3.3. Vue D'ensemble des Informations Importantes .....   | 81        |
| <b>4. Instructions et Formation</b> .....                | <b>82</b> |
| <b>5. Description du Produit</b> .....                   | <b>82</b> |
| 5.1. Description Schématique .....                       | 82        |
| <b>6. Instructions Générales Avant Utilisation</b> ..... | <b>83</b> |
| 6.1. Liste des Accessoires .....                         | 83        |
| 6.2. Batterie .....                                      | 83        |
| 6.3. Canule Nasale .....                                 | 85        |
| <b>7. Utilisation du Concentrateur</b> .....             | <b>86</b> |
| 7.1. Branchement de la Canule Nasale .....               | 86        |
| 7.2. Mise Sous Tension .....                             | 87        |
| 7.3. Choix de la Langue Préférée .....                   | 87        |
| 7.4. Réglages des Paramètres .....                       | 87        |
| 7.5. Bouton de la Batterie .....                         | 88        |
| 7.6. Réponse aux Alarmes .....                           | 88        |
| 7.7. Mise Hors Tension .....                             | 89        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>8. Voyager en avion avec le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™</b> .....                           | <b>89</b>  |
| 8.1. Préparation du passager avant le vol .....   | 89         |
| 8.2. Informations d'embarquement et en vol .....  | 91         |
| 8.3. Règlementations de l'agence de sécurité des transports (TSA, Transportation Security Administration) ..... | 94         |
| <b>9. Témoins de L'alarme</b> .....   | <b>94</b>  |
| 9.1. Alarmes .....  | 95         |
| <b>10. Dépannage</b> .....  | <b>98</b>  |
| <b>11. Entretien et Nettoyage</b> .....   | <b>99</b>  |
| 11.1. Entretien Ordinaire .....   | 99         |
| 11.2. Nettoyage de L'extérieur .....  | 99         |
| 11.3. Durée de Vie .....  | 100        |
| 11.4. Connecteur de maintenance .....   | 100        |
| <b>12. Réparation et Élimination de L'appareil</b> .....  | <b>100</b> |
| 12.1. Réparation .....  | 100        |
| 12.2. Instructions pour le remplacement des tamis : .....   | 100        |
| 12.3. Élimination .....   | 102        |
| <b>13. Garantie</b> .....   | <b>102</b> |
| <b>14. Marques</b> .....  | <b>102</b> |
| 14.1. Marques de Commerce .....   | 102        |
| 14.2. Clause de Non-Responsabilité .....  | 102        |
| <b>15. Description Technique</b> .....  | <b>103</b> |
| 15.1. Informations sur la Compatibilité Électromagnétique (CEM) .....   | 105        |
| <b>16. Glossaire — Explication des Symboles Présents sur L'emballage ou L'étiquette</b> .....                   | <b>108</b> |

# 1. Avant-Propos

*Veillez consulter ce manuel pour obtenir des informations détaillées sur les avertissements, les précautions, les caractéristiques et des informations supplémentaires.*

*Important : Les utilisateurs doivent consulter l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. Autrement, ils s'exposent à des risques de blessure et/ou de mort. Pour toute question concernant les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur ou l'utilisation sécurisée de l'appareil, veuillez contacter votre distributeur.*

## 1.1. Informations Générales

Ce manuel de l'utilisateur fournit des informations aux utilisations concernant le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. Par souci de brièveté, les termes « concentrateur », « POC », « unité » ou « appareil » sont parfois utilisés dans ce document pour faire référence au concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. « Patient » et « Utilisateur » sont utilisés indifféremment.

## 1.2. Classification

Cet appareil est répertorié par un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle internationale et classifié selon les risques de choc électrique, d'incendie et risques mécaniques conformément aux normes suivantes :

- CEI/EN60601-1:2012, Appareils Électromédicaux — Partie 1 : Exigences Générales pour la Sécurité de Base et les Performances Essentielles
- CEI/EN60601-1-2:2014, Partie 1-2 : Exigences Générales pour la Sécurité — Norme Collatérale : Compatibilité Électromagnétique — Exigences et Tests.
- CEI/EN60601-1-6:2010+A1:2013, Appareils Électromédicaux — Partie 1-6 : Exigences Générales pour la Sécurité de Base et les Performances Essentielles — Norme Collatérale : Aptitude à L'utilisation
- CEI/60601-1-8:2006, Appareils Électromédicaux — Partie 1-8 : Exigences Générales pour la Sécurité — Norme Collatérale : Exigences Générales, Essais et Guides pour les Systèmes D'alarme des Appareils et des Systèmes Électromédicaux
- CEI/60601-1-11:2011, Appareils Électromédicaux — Partie 1-11 : Exigences Générales pour la Sécurité — Norme Collatérale : Exigences pour les Appareils Électromédicaux et les Systèmes Électromédicaux Utilisés dans L'environnement des Soins à Domicile
- ISO 80601-2-67:2014, Equipement Médical Electrique - Partie 2-67: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles de l'équipement de conservation de l'oxygène.
- ISO 80601-2-69:2014, Equipement Médical Electrique - Partie 2-69: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles de l'équipement de conservation de l'oxygène.

- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Norme Canadienne, Appareils Électromédicaux – Partie 1: Exigences Générales pour la Sécurité de Base et les Performances Essentielles
- Directive 93/42/CEE Relative aux Dispositifs Médicaux


#### **Cet appareil est classifié :**

- Classe II
- Classe IIa selon le MDD 93/42/CEE
- Type BF
- IP22 avec le Sac de Transport

### **1.3. Conventions Typographiques**

Ces instructions contiennent des avertissements, des précautions et des remarques afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les aspects les plus importants pour la sécurité et le fonctionnement de l'appareil. Pour l'aider à identifier ces éléments lorsqu'ils apparaissent dans le texte, ils sont utilisés selon les conventions typographiques suivantes :

 **Avertissement** : Décrit des réactions indésirables graves et des risques de sécurité potentiels.

 **Précaution** : Attire l'attention sur des informations concernant une précaution spéciale à effectuer par le praticien et/ou le patient pour une utilisation sécurisée et efficace de l'appareil.

*Important : Attire l'attention sur des informations importantes supplémentaires concernant l'appareil ou la procédure.*

## **2. Utilisation Prévue**

Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est conçu pour délivrer de l'oxygène supplémentaire aux patients souffrant de maladies pulmonaires chroniques ou ceux ayant besoin d'un supplément d'oxygène.

Cet appareil est portable, ce qui permet aux patients ayant besoin d'un apport d'oxygène d'être traités à domicile conformément aux recommandations d'un médecin.

Zen-O lite™ n'est pas conçu pour être utilisé dans des situations de maintien des fonctions vitales ou de survie et il est fourni non stérile. Il s'agit d'un appareil fourni sur ordonnance uniquement, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Pour connaître les conditions de fonctionnement optimales, consultez le chapitre 15. Description Technique.

#### **Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ n'est pas conçu pour être utilisé :**

- Dans des situations de maintien des fonctions vitales ou de survie
- Dans des environnements opératoires et chirurgicaux
- Sur des patients non adultes
- Avec des anesthésiques ou des matériaux inflammables

### **3. Consignes de Sécurité**

#### **3.1. Vue D'ensemble des Avertissements**

1. L'appareil doit être utilisé dans son sac de transport qui le protège de toute intrusion de liquide (pluie et/ou renversement de liquide).
2. Il existe un risque d'incendie associé au matériel d'oxygénothérapie. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'étincelles ou de flammes nues.
3. Les réglages du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ RS-00600 peuvent ne pas correspondre à un apport en oxygène continu.
4. Les réglages des autres modèles ou autres marques de matériel d'oxygénothérapie ne correspondent pas à ceux du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ RS-00600.
5. Le vent ou les forts courants d'air peuvent affecter la précision de l'apport d'oxygène.
6. Les patients en gériatrie ou tout autre patient incapable de communiquer la gêne peuvent avoir besoin d'une surveillance supplémentaire pour éviter tout dommage.
7. Fumer (y compris des cigarettes électroniques) pendant une oxygénothérapie est dangereux et pourrait entraîner des brûlures faciales ou même la mort. Ne fumez pas et n'utilisez pas de flammes nues dans la même pièce que le concentrateur d'oxygène portable ou que tout autre accessoire de l'appareil. Si vous fumez, vous devez toujours mettre le concentrateur d'oxygène hors tension, retirer la canule et quitter la pièce dans laquelle se trouve le concentrateur ou la canule. Si vous ne pouvez pas quitter la pièce, vous devez attendre au minimum 10 minutes après l'arrêt du flot d'oxygène.
8. Avant et pendant l'oxygénothérapie, n'utilisez que des lotions à base d'eau compatibles avec l'oxygène. N'utilisez jamais de lotions ou de crèmes à base de pétrole ou d'huile lorsque l'appareil fonctionne, pour éviter tout risque d'incendie et de brûlures.
9. Pendant l'oxygénothérapie, les flammes nues sont dangereuses et peuvent entraîner un incendie ou la mort. N'approchez pas le concentrateur d'oxygène ou tout autre accessoire pour le transfert de l'oxygène à moins de 2 m d'une flamme nue.
10. L'oxygène facilite les débuts et les propagations d'incendies. Ne laissez pas la canule nasale sur les draps de lit ou les coussins de chaise lorsque le concentrateur est activé mais pas utilisé, l'oxygène rendrait ces matières inflammables. Mettez le concentrateur hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas, pour éviter tout enrichissement de l'air en oxygène.
11. Attention ! Risque d'explosion. N'utilisez pas l'appareil en présence d'anesthésiques inflammables.
12. N'utilisez pas cet appareil en présence de polluants ou d'émanations.
13. N'immergez pas l'appareil. Ne l'exposez pas à l'eau ou à des précipitations. N'exposez pas l'appareil à des environnements poussiéreux.



14. N'utilisez pas un appareil ou un accessoire présentant des dommages.
15. N'utilisez pas de lubrifiant sur l'appareil ou sur ses accessoires.
16. L'utilisation de l'appareil à une altitude supérieure à 4 000 m (13 000 pieds), ou hors de la plage de température de 5 °C (41 °F) à 40 °C (104 °F), ou encore hors de la plage d'humidité de 5 % à 93 % peut affecter le débit et le pourcentage d'oxygène et, par conséquent, la qualité de la thérapie. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'appareil dans un environnement propre et sec à une température entre -20 °C et 60 °C (-4 °F et 140 °F). N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des conditions autres, cela pourrait endommager le produit. Pour plus de détails techniques, consultez le chapitre "15. Description Technique".
17. Assurez-vous qu'une batterie est insérée dans l'appareil avant de l'utiliser.
18. Si vous sentez malade ou sentez une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, contactez votre médecin ou demandez immédiatement une assistance médicale pour éviter toute blessure.
19. Votre prestataire de l'oxygène à domicile doit vérifier la compatibilité de l'appareil et de tous les accessoires avant utilisation. Pour vous assurer de recevoir la quantité thérapeutique d'oxygène correspondant à votre condition médicale, l'appareil vérifié compatible et ses accessoires ne doivent être utilisés qu'après que votre prestataire de l'oxygène à domicile a déterminé ou prescrit quelques réglages correspondant à vos niveaux d'activité spécifiques.
20. Le câble électrique et le tube présentent un risque de chute ou d'étranglement. Veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.
21. Ne désassemblez ou ne modifiez pas l'appareil ou ses accessoires. N'effectuez pas d'entretien autre que les tâches décrites au chapitre "10. Dépannage". Le désassemblage de l'appareil entraîne un risque de choc électrique et annulera la garantie. Contactez votre distributeur pour faire entretenir votre appareil par du personnel agréé.
22. N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant pour vous assurer du fonctionnement correct de l'appareil et éviter tout risque d'incendie et de brûlure.
23. Ne pas réparer ou effectuer des travaux de maintenance alors que le dispositif est en cours d'utilisation par le patient.



### 3.2. Vue D'ensemble des Précautions

1. Conservez l'appareil éloigné des sources de chaleur (cheminées, chauffages par rayonnement, etc.) qui risqueraient de faire augmenter la température de fonctionnement au niveau de l'appareil ou dans ses environs au-delà de 40 °C (104 °F).
2. Il est possible que l'écran devienne difficile à lire dans des conditions d'éclairage intenses (lumière du soleil, éclairages intérieurs, etc.). Dans ce cas, déplacez l'appareil hors de cette lumière pour pouvoir lire l'écran.

3. Garder le dispositif loin des peluches ou autres matériaux en vrac qui pourraient obstruer les orifices d'entrée de l'air.
4. Certains pays limitent la vente de cet appareil par ou sur l'ordre d'un médecin. Assurez-vous de respecter les lois locales en vigueur.
5. Une oxygénothérapie non prescrite peut s'avérer risquée sous certaines circonstances. N'utilisez cet appareil que sur la prescription d'un médecin.
6. Les patients présentant un taux de respiration rapide nécessitant un apport d'oxygène plus élevé peuvent avoir besoin de davantage d'oxygène que cet appareil peut fournir, cf. chapitre "15. Description Technique". Cet appareil peut ne pas être approprié dans ce cas. Consultez votre médecin pour trouver un traitement alternatif.
7. Faites toujours fonctionner l'appareil avec les réglages prescrits par le médecin. Ne modifiez pas les réglages si le médecin ne vous l'a pas conseillé. La réévaluation périodique des réglages du débit d'oxygène doit être effectuée par un médecin.
8. N'utilisez pas l'appareil pendant votre sommeil si votre médecin ne vous le conseille pas.
9. Il est recommandé de garder à disposition une autre source d'oxygène en cas de coupure de courant ou de panne mécanique. Consultez votre prestataire de l'oxygène à domicile ou votre médecin pour connaître les systèmes d'assistance appropriés.
10. Cet appareil peut ne pas atteindre la pureté de concentration en oxygène spécifiée avant d'avoir fonctionné pendant 2 minutes à un débit donné.
11. Cet appareil est conçu pour être utilisé par un seul patient à la fois.
12. Si vous ne pouvez pas entendre ou voir les alarmes, si vous n'avez pas de sensibilité tactile ou que vous ne pouvez pas ressentir la gêne, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
13. Si la concentration en oxygène passe sous le niveau spécifié, une alarme se déclenchera. Si l'alarme persiste, cessez d'utiliser l'appareil, changez de source d'oxygène et contactez votre prestataire de l'oxygène à domicile.
14. N'utilisez que des accessoires approuvés avec cet appareil. Vous pouvez consulter la liste des accessoires approuvés et la canule adaptée à l'appareil à la section 6.1. L'utilisation d'accessoires ou d'une canule inappropriés peut altérer les performances de l'appareil.
15. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un humidificateur ou un nébuliseur. Si vous utilisez l'un de ces appareils avec le concentrateur d'oxygène, les performances de ce dernier pourraient être altérées et l'appareil endommagé.
16. Lors de l'utilisation de la canule, suivez toujours les instructions du fabricant.
17. Remplacez régulièrement la canule. Consultez votre prestataire d'oxygène à domicile ou votre médecin pour déterminer la fréquence à laquelle la canule doit être remplacée.
18. Vérifiez que l'appareil fonctionne sur batterie après l'avoir débranché de l'alimentation.

19. Ne chargez la batterie que dans l'appareil ou à l'aide d'un chargeur approuvé. (cf. liste des accessoires approuvés)
20. Retirez la batterie de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus de sept jours. Conservez-la dans un endroit frais et sec.
21. N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que ceux indiqués dans ce manuel. Laissez sécher les surfaces nettoyées avant de réutiliser l'appareil.
22. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
23. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le toujours avant de le nettoyer. Consultez le chapitre 11. Entretien et Nettoyage.
24. Ne bouchez pas les événements d'entrée ou de sortie lorsque vous utilisez l'appareil. Leur blocage pourrait causer une accumulation de chaleur à l'intérieur et l'arrêt ou l'endommagement de l'appareil.
25. Ne posez pas d'objets au-dessus de l'appareil.
26. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout dommage à l'appareil et à ses accessoires et/ou toute modification des réglages par inadvertance.
27. Conservez l'appareil hors de portée des animaux et des vermines.
28. Cet appareil est classé IP22 lorsqu'il se trouve dans son sac de transport. Ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux ou humides.
29. Utilisez toujours l'appareil dans des endroits correctement ventilés.
30. Suivez toujours le programme d'entretien spécifié au chapitre 11.1. Entretien Ordinaire.
31. Si l'appareil indique un état anormal, consultez le chapitre 10. Dépannage.
32. Faites attention lorsque vous manipulez l'appareil à des températures élevées.
33. Le dispositif peut être réutilisé par un nouveau patient. Il doit être nettoyé comme indiqué dans la section 11.2 de ce manuel utilisateur, conformément aux lois et prescriptions locales, avant de le remettre à un nouveau patient.
34. Le dispositif peut être isolé de l'alimentation en débranchant l'alimentation du connecteur d'entrée, voir fig. 1, positionner le dispositif pour faciliter l'accès au connecteur d'entrée d'alimentation.

### **3.3. Vue D'ensemble des Informations Importantes**

1. *Si vous avez besoin d'une rallonge, utilisez un câble UL de 15 amp ou plus. Ne branchez pas d'autres appareils sur la même rallonge. N'utilisez pas de rallonge multiprise.*
2. *Pour que le concentrateur fonctionne au mieux, inhalez par le nez. Si vous inhalez par la bouche, l'oxygénothérapie pourrait se révéler moins efficace.*

## 4. Instructions et Formation

La directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux prévoit que le fournisseur du produit doit veiller à ce qu'un manuel de l'utilisateur soit fourni à tous les utilisateurs de cet appareil et que ceux-ci soient formés à utiliser l'équipement.

**⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil sans formation suffisante ! Les patients et le personnel de soin doivent être formés par une personne expérimentée, autorisée par le fabricant, disposant de la formation, des connaissances et de l'expérience nécessaires.**

Pour plus d'informations sur la formation, contactez votre prestataire d'oxygène à domicile.

## 5. Description du Produit

### 5.1. Description Schématique

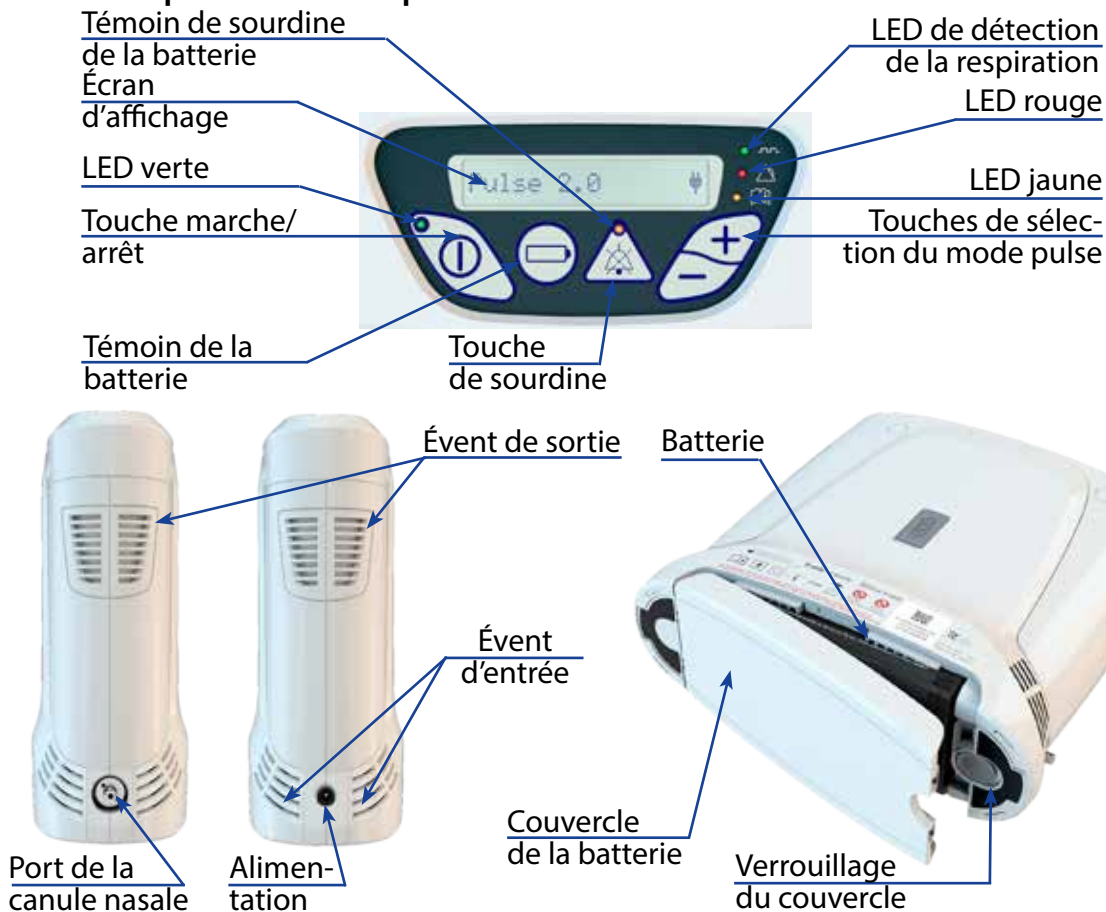


Fig. 1

## 6. Instructions Générales Avant Utilisation

Divers accessoires peuvent améliorer la portabilité et l'utilisation du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. En plus de l'appareil, l'emballage contient les accessoires nécessaires à l'utilisation de l'appareil et un manuel de l'utilisateur.

Inspectez toujours l'appareil et ses accessoires avant utilisation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

*Important : Même si l'emballage est abîmé (par ex., déchiré ou bosselé), l'appareil peut être toujours opérationnel. Si l'appareil ou un de ses accessoires est endommagé, contactez votre prestataire de l'oxygène à domicile.*

Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez que vous disposez des pièces suivantes :

- concentrateur
- batterie
- sac de transport
- alimentation AC
- alimentation DDC

### 6.1. Liste des Accessoires

N'utilisez que des alimentations/adaptateurs ou des accessoires spécifiés dans ce manuel. L'utilisation d'accessoires non spécifiés pourrait engendrer un risque et/ou altérer les performances de l'appareil.

- Batterie rechargeable (RS-00601)
- Alimentation AC - avec câble EU (RS-00602)
- Alimentation AC - avec câble UK (RS-00603)
- Alimentation AC - avec câble US (RS-00604)
- Alimentation DC (RS-00605)
- Sac de transport (RS-00509)
- Câble d'alimentation EU (RS-00504)
- Câble d'alimentation UK (RS-00506)
- Câble d'alimentation US (RS-00503)
- Chargeur de batterie externe - EU (RS-00516)
- ECâble d'alimentation EU - US (RS-00515)
- Câble d'alimentation EU - UK (RS-00517)

 **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil ou un accessoire s'il présente des dommages.**

### 6.2. Batterie

Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ peut être utilisé toujours branché au secteur. Cependant, pour améliorer sa portabilité, il est équipé d'une batterie interne au lithium-ion rechargeable.

 **AVERTISSEMENT: Toujours s'assurer que la batterie est insérée avant d'utiliser cet appareil.**

*Important : Des alimentations sont disponibles en option pour une utilisation dans le monde entier et en voyage. Consultez la liste des accessoires approuvés au chapitre 6.1. Liste des Accessoires.*

## 6.2.1. Charge de la Batterie

**⚠ PRÉCAUTION : Ne chargez la batterie que dans l'appareil ou à l'aide d'un chargeur approuvé. (Consultez la liste des accessoires approuvés au chapitre 6.1. Liste des Accessoires.)**

- Avant d'utiliser le dispositif pour la première fois, installez la batterie comme indiqué sur la Fig 2. la batterie se verrouille lorsqu'elle est complètement insérée.
- Fermer le compartiment de la batterie et s'assurer que le couvercle se verrouille correctement au dispositif.
- Connectez l'alimentation AD/DC en branchant le connecteur rond dans le réceptacle sur le côté du concentrateur. (Fig.3)
- Branchez l'autre extrémité de l'alimentation AD/DC dans une prise. Faites toujours attention lors de l'insertion de la fiche dans la prise.
- L'écran affiche **En Charge NN% 🔋** .

Le chargeur est universel et prend en charge de nombreux marchés internationaux, il peut donc être branché dans une prise 100–240 V CA, 50–60 Hz.

Faites charger une batterie au moins trois heures avant utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'appareil peut fonctionner pendant 4 heures avec une batterie, à 18 respirations par minutes.

*IMPORTANT : L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la fréquence respiratoire, de l'âge de la batterie et des conditions environnementales. Consultez le texte affiché sur l'appareil pour connaître l'état de charge de la batterie.*

*IMPORTANT : Assurez-vous que l'icône de mode de fonctionnement (cf. Fig. 7) indique que l'alimentation est bien connectée. Au cas contraire, vérifiez que le câble est branché correctement. Consultez le chapitre 10. Dépannage pour obtenir davantage d'informations.*

Pour optimiser la durée et l'autonomie de la batterie, évitez de laisser la batterie se vider complètement et utilisez l'appareil branché dès que possible. La batterie interne se rechargera automatiquement dès que le concentrateur sera connecté à une source d'alimentation. Vous



Fig. 2



Fig. 3

pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge. L'écran LCD indiquera si l'appareil fonctionne sur la batterie ou sur le secteur.

La batterie complètement chargée conservera un certain niveau de charge jusqu'à trente jours lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Consultez le paragraphe PRÉCAUTION ci-dessous pour connaître les recommandations de retrait/stockage de la batterie.


*IMPORTANT : La batterie peut être endommagée si vous la laissez se décharger complètement lors de l'utilisation du concentrateur.*


*IMPORTANT : Après 300 cycles de recharge/décharge, la capacité de la batterie sera d'au moins 80% de sa capacité originale. Remplacez la batterie lorsque son autonomie réduite nuit à votre mobilité.*

*IMPORTANT : L'alimentation électrique DC doit être utilisée sur des appareils ayant la puissance nominale de sortie qui convient.*

*IMPORTANT : L'appareil doit être en fonctionnement pour que l'adaptateur DC alimente le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite.*

FR

 **PRÉCAUTION :** Retirez la batterie de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus de sept jours. Conservez-la dans un endroit frais et sec.


 **PRÉCAUTION :** Vérifiez que l'appareil fonctionne sur batterie après l'avoir débranché de l'alimentation.

*IMPORTANT : Lorsque vous n'utilisez pas la batterie dans l'unité, assurez-vous de la conserver dans la pochette fournie dans l'emballage original.*

### 6.3. Canule Nasale

**N'utilisez qu'une canule nasale présentant les caractéristiques suivantes :**

- longueur de 2,1 m (7 pi) ou 7,6 m (25 pi)
- haut débit
- diamètre interne large
- extrémités droites non effilées
- adaptée jusqu'à 15 l/min par minute à un max. pression de 3,6 psi
- compatible avec la norme CEI/EN 60601-1

 **PRÉCAUTION :** N'utilisez que des accessoires approuvés avec cet appareil. Consultez le guide des accessoires approuvés pour connaître la liste des accessoires et des canules approuvés pour une utilisation avec cet appareil. L'utilisation d'accessoires ou d'une canule non approuvés peut nuire aux performances de l'appareil, notamment son débit et la pureté de l'oxygène délivré.

Pour obtenir des informations mises à jour sur les accessoires ou savoir si des accessoires supplémentaires, en option ou de rechange sont nécessaires, contactez votre distributeur.




## 7. Utilisation du Concentrateur


**IMPORTANT :** Consultez les sections 3.1. Vue D'ensemble des Avertissements et 3.2. Vue D'ensemble des Précautions avant d'utiliser l'appareil.

Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est conçu pour être simple à utiliser, en permettant l'accès à toutes les fonctions grâce aux quelques touches du panneau de commande. Le dispositif devrait être transporté dans son sac de transport et utilisé lorsqu'il est positionné à la verticale sur une surface plane ou sur le sol dans son sac de transport. Le patient doit respecter la longueur de canule recommandée lors de l'utilisation.

**IMPORTANT :** Le rétroéclairage de l'écran d'affichage reste éteint excepté pendant la séquence d'allumage/de mise hors tension. Pour activer le rétroéclairage brièvement, appuyez sur une touche. Il restera également activé pendant une alarme non désactivée.

### 7.1. Branchement de la Canule Nasale

**FR**  **PRÉCAUTION :** Remplacez régulièrement la canule. Consultez votre prestataire d'oxygène à domicile ou votre médecin pour déterminer la fréquence à laquelle la canule doit être remplacée.

 **PRÉCAUTION :** Lors de l'utilisation de la canule, suivez toujours les instructions du fabricant.

Connectez le tube au port de la canule comme indiqué à la Fig. 5.

Pour connecter la canule au patient, positionnez les extrémités dans les narines du patient et passez le tube au-dessus des oreilles et sous le menton. Suivez toujours les instructions du fabricant.

Ajustez l'adaptateur sur le tube pour un meilleur confort.

Lorsque la canule est en place, respirez normalement par le nez. Zen-O lite™ détectera les respirations et apportera de l'oxygène pendant l'inhalation.

**IMPORTANT :** Un mauvais positionnement de la canule peut empêcher l'appareil de détecter les efforts respiratoires du patient. Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'elle a été insérée correctement.

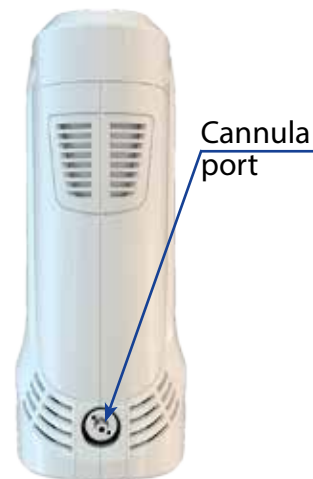



Fig. 5



Fig. 6



## 7.2. Mise Sous Tension

- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche marche/arrêt .
- Le concentrateur émet alors un pépiement et les LED verte, jaune et rouge s'allument une fois, alors que l'écran affiche le nom du périphérique.



LED rouge — indique un danger ou la nécessité d'une action urgente





LED jaune — indique un avertissement ou une attention particulière






Voyant (LED) vert clignotant - indique que l'oxygène est bien distribué.

*IMPORTANT : Aucun réglage ne peut être effectué tant que la séquence de mise sous tension n'est pas terminée.*

## 7.3. Choix de la Langue Préférée



Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez simultanément les boutons plus  et sourdine  pendant environ quatre secondes, jusqu'à ce que « Langue : » s'affiche.

Naviguez ensuite parmi les langues disponibles en utilisant les boutons plus  ou moins .

- Lorsque la langue désirée est affichée, appuyer sur le bouton de la batterie  pour la sélectionner.

## 7.4. Réglages des Paramètres

*Important : Après la mise sous tension du Zen-O lite™, la séquence d'allumage dure environ 35 secondes. L'appareil atteint le niveau d'oxygène spécifié après environ 2 minutes d'utilisation.*

- L'appareil commence à fonctionner selon les réglages précédents.
- L'appareil délivre une impulsion d'oxygène au début de chacune de vos inhalations.
- le mode pulse peut être réglé de 1,0 à 6,0 par graduations de 0,5 grâce aux touches  et .

*IMPORTANT : Si vous pensez qu'il existe une fuite d'air, passez une solution d'eau savonneuse sur le point de connexion entre le concentrateur et la canule pour vérifier la présence de bulles.*

Les réglages actuels et la source d'alimentation (secteur ou batterie ; l'icône de la batterie indique également le niveau de charge approximatif restant) sont indiqués sur l'écran d'affichage comme indiqué à la Fig. 7.



Zen-O lite™ fonctionnant sur batterie.



Zen-O lite™ fonctionnant sur secteur.

Fig. 7

## 7.5. Bouton de la Batterie

Le bouton de la batterie (🔋) vous permet de vérifier l'état de la ou des batteries. Pour faire défiler les informations, appuyez plusieurs fois sur le bouton.

- Tout d'abord, les informations de charge seront affichées **En Charge NN%** 🔌 ou **Batt:1: NN%** 🔋.
- Ensuite **Batt1: NN%** 🔌 le nombre de cycles de charge sera affiché **Batt1: N Cycles** 🔌 ou **Batt: cycles** 🔋.

Après avoir appuyé 3 fois sur le bouton de la batterie, l'affichage retournera au menu principal affichant le réglage de débit en cours. Si vous n'actionnez aucun bouton pendant environ 15 secondes, l'affichage reviendra automatiquement à l'écran principal.

## 7.6. Réponse aux Alarmes

**⚠️ PRÉCAUTION** : Si vous ne pouvez pas entendre ou voir les alarmes, si vous n'avez pas de sensibilité tactile ou que vous ne pouvez pas ressentir la gêne, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.

Appuyez à tout moment sur la touche de sourdine de l'alarme (🔔) pour mettre la sonnerie en sourdine. La durée des périodes de sourdine dépend de l'importance de l'alarme (cf. chapitre « 9. Témoins de L'alarme »). Pendant cette période de sourdine, la LED restera allumée pour indiquer que la sonnerie de l'alarme est en sourdine. Appuyez à nouveau sur la touche de sourdine pour annuler la sourdine. Si vous appuyez sur la touche de sourdine alors qu'aucune alarme n'est active, cela mettra en sourdine toutes les futures alarmes de moyenne ou de faible priorité pendant huit heures. Consultez les chapitres "9. Témoins de L'alarme" et "10. Dépannage" pour en savoir plus sur les alarmes.

**IMPORTANT** : Le système d'alarme est testé pendant la séquence d'allumage. Vous devriez voir toutes les lumières d'alarme s'allumer brièvement et entendre le témoin d'alarme sonore pépier. Si vous pensez qu'une des alarmes ne fonctionne pas, contactez votre distributeur pour qu'il vérifie que toutes les alarmes fonctionnent correctement.

## 7.7. Mise Hors Tension



**PRÉCAUTION : Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.**

Pour mettre le concentrateur d'oxygène Zen-O lite™ hors tension, appuyez et maintenez la touche marche/arrêt. L'appareil pépiera et l'écran affichera un message d'arrêt **Eteindre** pendant environ cinq secondes, puis il passera en mode veille.

*IMPORTANT : Ne débranchez pas l'alimentation A et en même temps ne retirez pas la batterie, alors que l'appareil fonctionne. Utilisez toujours la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil hors tension. Attendez que l'appareil soit complètement hors tension avant de le débrancher et de retirer la batterie.*

## 8. Voyager en avion avec le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™

### 8.1. Préparation du passager avant le vol

#### 8.1.1. Étiquetage obligatoire

Votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ peut être utilisé en avion, il satisfait à tous les critères d'admission de l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA, Federal Aviation Administration). Cette conformité est attestée par l'étiquette apposée à l'arrière du concentrateur d'oxygène portable, qui indique en rouge « The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft » (Le fabricant de ce concentrateur d'oxygène portable assure que cet appareil satisfait à tous les critères d'admission de la FAA en vigueur pour le transport et l'utilisation en avion). Avant de monter en avion, il peut vous être demandé de montrer cette étiquette au personnel de bord.

#### 8.1.2. Consultation d'un professionnel de santé

La FAA n'exige pas d'un passager qu'il consulte un professionnel de santé avant d'utiliser un concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ à bord d'un avion. Toutefois, vous souhaitez peut-être aborder les points suivants avec un professionnel de santé :

- Les effets d'une cabine pressurisée (l'altitude cabine peut atteindre 8 000 pieds) sur vos besoins en oxygène.
  - Compte tenu de l'altitude cabine, certains utilisateurs du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ ont besoin d'un réglage supérieur du débit ou du nombre de litres par minute (LPM) lorsqu'ils sont dans les airs.
  - Compte tenu de l'altitude cabine, certains utilisateurs occasionnels du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ sur la terre ferme peuvent avoir besoin de l'utiliser pendant tout le vol.
- Vos besoins en oxygène au moment du voyage ou les éventuels changements de ces besoins depuis la première prescription du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ ou lors de la dernière consultation chez un professionnel de santé.

- Certains éléments importants du manuel d'utilisation du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, notamment l'administration d'oxygène, les indicateurs, les avertissements et les alertes, ainsi que les réglages/modifications du débit ou des LPM.
- Tous les membres d'équipage (pilotes et personnel de bord) suivent une formation sur la prise en charge des événements médicaux en vol. Pour autant, la FAA n'exige pas que les transporteurs aériens ou les membres d'équipage fournissent une assistance médicale aux passagers.

*IMPORTANT : vous trouverez des informations supplémentaires au sujet de la santé et de la sécurité des passagers sur [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Prévoir un nombre suffisant de batteries**

Il vous incombe de vous munir d'un nombre suffisant de batteries pour alimenter le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ pendant toute la durée d'utilisation prévue de l'appareil. Pour déterminer le nombre de batteries nécessaires, vous devez au moins tenir compte des points suivants :

- Conseils du professionnel de santé quant à la durée d'utilisation du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™.
- Informations du transporteur aérien quant à la durée de vol prévue en tenant compte des escales et des retards imprévus.

*IMPORTANT : il se peut que vous preniez plusieurs vols avec plusieurs compagnies aériennes, cela impliquerait donc une utilisation du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ au sol entre les vols.*

- Informations du manuel de l'utilisateur Zen-O lite™ quant à la durée de vie prévue des batteries.

*IMPORTANT : il ne faut jamais compter sur l'alimentation électrique disponible à bord pendant un vol.*

- Exigences du transporteur aérien quant au nombre de batteries transportées, disponibles en général sur le site web de la compagnie aérienne.

*IMPORTANT : le transporteur aérien peut exiger que vous preniez suffisamment de batteries pour alimenter l'appareil pendant au moins 150 % de la durée de vol prévue.*

### **8.1.4. Documentation**

Le fonctionnement du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ à bord de l'avion vous incombe. C'est pourquoi la FAA recommande aux passagers de prendre avec eux au minimum le présent manuel d'utilisation et tout autre document d'information fourni par un professionnel de santé relatif au concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ et à son utilisation.

### 8.1.5. Certificats médicaux

Un transporteur aérien peut exiger un certificat médical pour un passager souffrant d'une maladie ou d'une infirmité, si l'on peut raisonnablement douter que cette personne puisse supporter tout le vol sans assistance médicale supplémentaire. De même, un transporteur aérien peut exiger un certificat médical pour une personne ayant besoin d'oxygène médical pendant un vol. La FAA n'exige **pas** d'un passager qu'il se obtienne un certificat médical et le présente au personnel de bord ou au pilote avant d'utiliser le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ à bord d'un avion.

### 8.1.6. Batteries de rechange

Les dommages et les courts-circuits des batteries peuvent entraîner une surchauffe des batteries et donc un incendie. De tels événements peuvent à leur tour occasionner des blessures aux autres passagers et, dans le pire des cas pour certains types de batteries, un incendie catastrophique dans la cabine. Par conséquent, vous devez protéger des courts-circuits chacune des batteries au lithium de rechange transportées à bord de l'avion en les laissant dans leur emballage d'origine, en appliquant de l'adhésif sur les bornes exposées ou en plaçant chaque batterie dans un sac en plastique ou une pochette de protection individuelle.

*IMPORTANT : il est interdit de transporter des batteries au lithium de rechange dans les bagages en soute.*

Il vous incombe de veiller à ce que toutes les batteries au lithium de rechange transportées dans un bagage à mains soient correctement emballées. Certains fournisseurs d'équipement pour le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, compagnies aériennes et expéditeurs transitaires spécialisés dans l'expédition de marchandises emballées de petite taille peuvent vous fournir ce service d'emballage.

## 8.2. Informations d'embarquement et en vol

### 8.2.1. Transport du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ dans un bagage enregistré

Votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est un appareil d'assistance. À ce titre, les transporteurs ne peuvent en aucun cas le considérer comme un bagage à mains ordinaire soumis à la réglementation relative aux bagages de cabine, dans la mesure où il est transporté par une personne malade.

*IMPORTANT : un sac contenant des batteries supplémentaires destinées à alimenter le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ en vol peut également être considéré comme un appareil d'assistance. Néanmoins, il existe des limitations sur le régime nominal en watt-heure (Wh) d'une batterie qui doit être inférieur à 100 Wh. Pour votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, le régime nominal en watt-heure (Wh) est inférieur à 100 Wh par batterie, il n'y aura donc aucune limitation imposée.*

### 8.2.2. Transport du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ dans un bagage enregistré

À bord d'un avion, il est possible de transporter votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ en cabine ou en soute. Toutefois, **il est interdit de transporter des batteries au lithium de rechange dans les bagages en soute.**

### 8.2.3. Positionnement et arrimage de votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™

Pour qu'un concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ fonctionne efficacement, le filtre à air/d'admission ne doit pas être bouché pendant l'utilisation. Il faut donc éviter de poser des couvertures, vestes et autres bagages à mains autour du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ afin de ne pas obstruer le filtre à air/d'admission. L'obstruction du filtre à air/d'admission a deux conséquences. Premièrement, des voyants d'avertissement et/ou des alarmes sonores vous indiquent que la concentration d'oxygène au niveau de la sortie du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est insuffisante. Deuxièmement, lorsque la température des composants internes du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ augmente jusqu'à une certaine limite parce que l'appareil essaie de fournir de l'oxygène, le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ se coupe automatiquement afin d'éviter une surchauffe et vous en êtes averti par des voyants d'avertissement et/ou des alarmes sonores.

**Positionnement du Zen-O lite™** Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, conforme FAA, doit être placé sous le siège devant vous de sorte que vous ou votre accompagnant puissiez voir les voyants d'avertissement et/ou entendre les alarmes sonores. Si vous le placez sous votre siège ou dans un compartiment fermé, vous ne verrez pas les voyants d'avertissement et vous n'entendrez probablement pas non plus les alarmes sonores. D'autres emplacements peuvent être adaptés s'ils sont acceptés par le personnel de bord.

### 8.2.4. Restrictions de sièges pour les passagers qui souhaitent utiliser un concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ à bord d'un avion

**Sièges situés près des sorties :** les recommandations de la FAA interdisent aux passagers qui utilisent un appareil d'assistance, et notamment un concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, de s'asseoir sur un siège situé près d'une sortie.

**Arrimage pendant le déplacement de l'avion :** pendant tout déplacement au sol (détachement et circulation au sol), le décollage et l'atterrissage, le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ doit être correctement arrimé de sorte qu'il n'entrave en rien l'accès des passagers à une sortie ni la circulation dans l'allée centrale de la cabine. D'autres restrictions relatives aux places peuvent être appliquées afin de respecter les réglementations de sécurité de la FAA. Par exemple :

1. Certains sièges d'un avion, tels que les sièges situés près d'une cloison, peuvent ou non être dotés d'un espace d'arrimage approuvé pouvant recevoir le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ pendant tout déplacement au sol, le décollage et l'atterrissage. Par conséquent, si l'utilisateur du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ occupe l'un

de ces sièges, l'appareil ne sera peut-être pas arrimé correctement pendant ces phases du vol. Dans ce cas, une restriction relative aux places peut s'appliquer.

2. Pendant tout déplacement au sol, le décollage et l'atterrissage, la tubulure de la canule nasale qui permet à votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ correctement arrimé d'administrer l'oxygène ne doit pas traverser la rangée de sièges d'une manière pouvant gêner l'accès des passagers ou les faire trébucher en cas d'évacuation. Vous ne devez en aucun cas gêner l'accès des autres passagers lors de ces phases du vol. Le cas échéant, une restriction relative aux places peut s'appliquer afin de respecter les réglementations de sécurité de la FAA. Par exemple, si tous les sièges d'une rangée sont occupés, le siège qui convient à l'utilisateur du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ sera le siège côté hublot.
3. L'exploitant ne peut appliquer de restrictions relatives aux places que dans le respect des réglementations de sécurité de la FAA. Les exemples précédents constituent seulement quelques scénarios possibles.

*IMPORTANT : un règlement général de la compagnie aérienne stipulant que tout passager utilisant le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ à bord de l'avion doit occuper un siège côté hublot, indépendamment de la situation de chacun, serait contraire aux exigences de la FAA.*

FR

### 8.2.5. Dépressurisation de la cabine

L'utilisation du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ pendant une dépressurisation de la cabine ne représente aucun danger. Néanmoins, en cas de dépressurisation de la cabine (rapide ou lente), vous devez utiliser les masques à oxygène qui tombent devant vous jusqu'à la stabilisation de l'avion.

### 8.2.6. Utilisation de l'alimentation électrique dans l'avion

Rien n'oblige les exploitants à vous fournir une alimentation électrique dans l'avion pour le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. Les prises électriques à bord d'un avion sont considérées comme un équipement superflu, les certifications ou réglementations d'exploitation ne les imposent donc pas. En outre, tout dysfonctionnement électrique des systèmes de bord peut nécessiter de désactiver la source d'alimentation de ces prises au sol ou en vol pour la sécurité du vol. Compte tenu de cette règle, le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ doit être alimenté exclusivement par batteries à bord d'un avion. **Il ne faut jamais compter sur l'alimentation électrique disponible à bord pendant un vol.**

### 8.2.7. Tabagisme

Il est dangereux de fumer (y compris des cigarettes électroniques) pendant l'oxygénothérapie, cela pourrait déclencher un incendie entraînant des blessures graves voire le décès du patient ou d'autres personnes. N'approchez pas le concentrateur d'oxygène portable ni aucun autre accessoire administrant de l'oxygène à moins de 3 m d'une cigarette ou d'une flamme nue.



### 8.3. Règlements de l'agence de sécurité des transports (TSA, Transportation Security Administration)

Vous pouvez obtenir des informations détaillées concernant le contrôle des passagers qui utilisent des appareils respiratoires, notamment le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™, auprès de la TSA sur le site Web <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

#### Les points de sécurité générale ci-dessous s'appliquent au concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ :

1. La limite d'un seul bagage à mains et un seul bagage personnel (p. ex. sac à main, porte-documents ou sacoche d'ordinateur) ne s'applique pas aux dispositifs ou équipements médicaux, aux aides à la mobilité et/ou aux appareils d'assistance transportés et/ou utilisés par une personne souffrant d'une maladie ou d'une infirmité.
2. Si une personne dispose d'un certificat médical attestant de sa maladie/infirmité, elle peut le présenter à l'agent de sûreté aéroportuaire afin de l'informer de sa situation. Ce document n'est pas obligatoire et ne dispense pas la personne concernée de passer le contrôle de sécurité.

FR

## 9. Témoins de L'alarme

Si le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ détecte une situation d'alarme, il l'indiquera de façon visuelle et sonore dans les 10 secondes. Il existe quatre niveaux d'alarme : haute priorité critique, haute priorité, moyenne priorité et faible priorité.

Chaque niveau est indiqué de façon différente par l'éclairage de l'écran (jaune et rouge) et par la sonnerie, comme indiqué ci-dessous. Dans chacun des cas, le message et l'état de d'alarme

*IMPORTANT : Toutes les alarmes et les paramètres sont pré réglés en usine ; ils ne peuvent pas être modifiés ou ajustés par l'utilisateur.*

*IMPORTANT : Le système d'alarme est testé pendant la séquence d'allumage. Vous devriez voir toutes les lumières d'alarme s'allumer brièvement et entendre le témoin d'alarme sonore pépier.*

| État de l'alarme               | Signaux sonores   | Témoin visuel   | Durée de sourdine |
|--------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>Haute priorité critique</b> | Dix bips à la suite, avec répétition toutes les 3 secondes.   | LED rouge fixe et appareil mis automatiquement hors tension | 20 minutes        |
| <b>Haute priorité</b>          | Dix bips à la suite, avec répétition toutes les 3 secondes.   | LED rouge clignotante                                       | 20 minutes        |
| <b>Moyenne priorité</b>        | Trois bips à la suite, avec répétition toutes les 8 secondes. | LED jaune clignotante                                       | 8 heures          |



|                        |   |                |           |
|------------------------|---|----------------|-----------|
| <b>Faible priorité</b> | Trois bips à la suite, avec répétition toutes les 10 minutes. | LED jaune fixe | 24 heures |
|------------------------|---|----------------|-----------|

*IMPORTANT : Si deux états se déclarent en même temps, l'alarme la plus importante sera indiquée. Si deux alarmes ou plus de même priorité se déclenchent en même temps, la plus récente sera indiquée.*

*IMPORTANT : Les alarmes les plus récentes indiquées par l'appareil sont enregistrées pour référence par le personnel d'entretien. Ce journal est conservé même lorsque l'appareil est mis hors tension ou qu'il s'éteint pour toute autre raison.*

*IMPORTANT : Si vous appuyez sur la touche de sourdine avant qu'une alarme ne se déclenche (par exemple, pour mettre l'appareil en sourdine dans une salle de cinéma), les alarmes de haute priorité critiques et de haute priorité annuleront la fonction de sourdine. En revanche, les alarmes de moyenne et faible priorité seront mises en sourdine pendant huit heures à partir du moment où vous avez appuyé sur la touche. Désactivez la touche de sourdine pour afficher la dernière alarme la plus importante. Activez la touche de sourdine pour réinitialiser la minuterie de huit heures.*

FR

## 9.1. Alarmes

Lorsque le concentrateur envoie une alarme, un message correspondant s'affiche à l'écran. Prenez les mesures nécessaires indiquées dans le tableau ci-dessous.

### 9.1.1. Alarmes Haute Priorité Critiques

*Important : Ces alarmes désactivent l'appareil immédiatement.*

| Message d'alarme      | Description  | Action  |
|-----------------------|--|---|
| <b>Charger batt.</b>  | La batterie doit être chargée.                           | Rechargez la batterie en branchant l'appareil au secteur. Assurez-vous que tous les branchements sont effectués correctement. |
| <b>Batt. Inadapte</b> | La batterie ne fait pas partie des batteries approuvées. | Remplacez la batterie par une batterie approuvée.   |
| <b>XX: Service!*</b>  | Entretien nécessaire.                                    | Contactez votre distributeur.   |

\* Valeur: 01-20

### 9.1.2. Alarmes Haute Priorité

*Important : Ces alarmes ne désactivent pas l'appareil.*

| Alarm message        | Description  | Action   |
|----------------------|--|--|
| <b>Verifier Vent</b> | L'appareil ne peut pas conserver la pureté de l'oxygène. | Assurez-vous que les entrées/sorties d'air ne sont pas bloquées. Si l'alarme persiste, contactez votre distributeur.   |
| <b>Batt. faible</b>  | Durée de vie de la batterie inférieure à 17 minutes.     | Rechargez la batterie en branchant l'appareil au secteur.<br><i>Important : Le message sera supprimé automatiquement lorsque l'appareil sera relié au secteur.</i> |
| <b>XX: Service!*</b> | Entretien nécessaire.                                    | Contactez votre distributeur.  |

\* Valeur: 21-50

### 9.1.3. Alarmes Moyenne Priorité

| Message d'alarme     | Description                                    | Action   |
|----------------------|--|--|
| <b>Verif. canule</b> | Aucune respiration détectée depuis 15 secondes | Vérifiez que la canule est connectée correctement. Assurez-vous de respirer par le nez. Si l'alarme persiste, contactez votre distributeur.<br><i>Important : Le message sera supprimé automatiquement lorsqu'une respiration sera détectée.</i> |
| <b>XX: Service!*</b> | Entretien nécessaire.                          | Contactez votre distributeur.  |


\* Valeur: 51-70

### 9.1.4. Alarmes Faible Priorité

| Message d'alarme     | Description           | Action                        |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>XX: Service!*</b> | Entretien nécessaire. | Contactez votre distributeur. |

\* Valeur: 71-99

### 9.1.5. Autres Messages

| Message  | Description  | Action  |
|--|--|---|
| <b>Deconnecte</b>  | L'appareil n'est plus raccordé au secteur, il fonctionne maintenant sur batterie.  | Aucune action nécessaire.   |
| <b>Eteindre</b>  | S'affiche lors de la séquence de mise hors tension de l'unité  | Aucune action nécessaire.   |
| <b>No hay bateria</b>  | S'affiche dans le menu batterie lorsque l'appareil ne trouve aucune communication avec la batterie.  | Vérifiez que la ou les batteries sont correctement installées. Contactez votre distributeur si la batterie est insérée correctement mais que le message s'affiche encore pendant plus de 30 secondes. |
| <b>Batt NN%</b>  | Affiche le pourcentage de charge de la batterie s'il est supérieur à 10 % et que l'appareil n'est pas branché au secteur.  | Le message s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de la batterie.   |
| <b>En Charge NN%</b>  | NN % affiche le niveau actuel de charge de la batterie.<br>S'affiche lorsque la charge de la batterie est supérieure à 10 % mais inférieure à 100 % et que l'appareil est connecté au secteur. | Le message s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de la batterie.   |
| <b>En Charge</b>   | La charge de la batterie est inférieure à 10 % et l'appareil est connecté au secteur.  | Le message s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de la batterie.   |





FR

## Autres Messages (continuation)

| Message               | Description  | Action   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Freq. Resp. XX</b> | Indique la fréquence respiratoire moyenne du patient lorsque l'appareil délivre la quantité maximale d'oxygène et que le bolus est réduit. Si aucune respiration n'est détectée, l'appareil affiche la fréquence respiratoire la plus récente. | Niveau d'activité réduit. Assurez-vous que les entrées/sorties d'air ne sont pas bloquées.<br><i>Important : Ce message sera automatiquement supprimé lorsque l'appareil reviendra à un fonctionnement normal.</i> |
| <b>RAZ Alarme</b>     | Une alarme réglée précédemment a été automatiquement supprimée.  | Aucune action nécessaire.  |

FR

## 10 Dépannage

| Problème  | Cause possible   | Dépannage   |
|---|--|---|
| Le système ne fonctionne plus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le système peut être débranché du secteur.</li> <li>Le système peut être hors tension.</li> <li>Une alarme haute priorité critique s'est déclenchée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le système est connecté correctement au secteur.</li> <li>Assurez-vous que le système est sous tension.</li> <li>Vérifiez que le système ne présente aucun dommage et qu'il n'a pas été exposé à des liquides.</li> <li>Si le problème persiste, contactez votre distributeur.</li> </ul> |
| Une alarme retentit ou la LED   ou   s'allume | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultez le chapitre 99. Témoins de L'alarme.</li> </ul>   | Consultez le chapitre 99. Témoins de L'alarme.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>La batterie ne se recharge pas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas branché.</li> <li>• La batterie n'est pas insérée correctement.</li> <li>• La batterie ne fonctionne pas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les branchements et assurez-vous : <ul style="list-style-type: none"> <li>• que les réceptacles ronds sont bien en place dans l'unité ;</li> <li>• que le câble est connecté à l'alimentation AC/DC ou qu'un adaptateur CC pour allume-cigare est connecté, le cas échéant ;</li> <li>• que le câble est bien branché au secteur, le cas échéant ;</li> <li>• que la prise murale fonctionne.</li> </ul> </li> <li>• Assurez-vous que la batterie est en place et que son couvercle est bien refermé.</li> <li>• Si le problème persiste, contactez votre distributeur.</li> </ul> |
|--|--|--|

## 11 Entretien et Nettoyage

### 11.1. Entretien Ordinaire

 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de lubrifiant sur l'appareil ou sur ses accessoires.

**PRÉCAUTION** : Remplacez régulièrement la canule. Consultez votre distributeur ou votre médecin pour déterminer la fréquence à laquelle la canule doit être remplacée.

L'appareil indiquera par une alarme lorsque le filtre ou l'appareil doit être nettoyé ou remplacé. (Consultez également le chapitre 1010. Dépannage.)

*Important : La canule et le filtre peuvent être contaminés par le patient, vous devez manipuler ces composants avec précaution.*

### 11.2. Nettoyage de L'extérieur

 **AVERTISSEMENT** : N'immergez pas l'appareil. Ne l'exposez pas à l'eau ou à des précipitations. N'exposez pas l'appareil à des environnements poussiéreux.

 **PRÉCAUTION** : N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que ceux indiqués dans ce manuel. Laissez sécher les surfaces nettoyées avant de réutiliser l'appareil.

 **PRÉCAUTION** : Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le toujours avant de le nettoyer.

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse ou des lingettes antibactériennes (solution de 70 % d'isopropanol).

*Important : L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé toutes les semaines, les accessoires lorsque nécessaire. Le produit doit être nettoyé extérieurement avant d'être utilisé avec un nouveau pa-*

*tient. La partie extérieure de l'appareil doit également être nettoyée avant tout changement de patient. Il est également recommandé de changer le filtre de sortie.*

Canule nasale : se référer au manuel d'utilisation du fabricant

### 11.3. Durée de Vie

La durée de vie prévue de l'appareil est de 5 ans, excepté pour les tamis moléculaires. La durée de vie des tamis moléculaires dépend des conditions d'utilisation. Remplacez-les lorsque l'alarme de vérification des événements s'active. Si les événements d'entrée et de sortie ne sont pas bloquée et que l'alarme persiste, contactez votre distributeur pour connaître la procédure de remplacement des tamis moléculaires.

### 11.4. Connecteur de maintenance

Le connecteur de maintenance se raccorde au harnais de maintenance TF-02091 (5.1 Vdc maximum) et est utilisé uniquement pour la maintenance.



Fig. 8

FR

## 12 Réparation et Élimination de L'appareil

### 12.1. Réparation

Ne tentez pas de réparer l'appareil. Contactez votre prestataire de l'oxygène à domicile ou votre distributeur si vous avez besoin d'assistance (cf. chapitre « 10. Dépannage »).











Les tamis peuvent être remplacés par le patient, tel que déterminé par le fournisseur d'oxygénothérapie à domicile ou du distributeur. Tout autre entretien ou réparation doit être effectué par du personnel qualifié.

### 12.2. Instructions pour le remplacement des tamis :

1. Eteindre le dispositif et débrancher l'alimentation AC ou DC (si le dispositif est branché).
2. Enlever le dispositif de son sac de transport.
3. Enlever la batterie du dispositif.
4. Appuyer sur les 4 boutons de déverrouillage situés en haut du dispositif afin d'enlever le couvercle supérieur de l'appareil, comme sur la Fig. 9.
5. Utiliser l'outil inclus avec les modules de remplacement des tamis pour tourner le tamis dans le sens antihoraire de 3-4 tours, jusqu'à ce qu'il puisse être retiré en tirant vers le haut du dispositif.
6. Répéter l'opération pour le deuxième module.
7. Retirer les tamis de remplacement de leur emballage, retirer la prise d'air des modules des tamis et remplacer-les immédiatement par les nouveaux. Attention : ne pas laisser les tamis de remplacements exposés.
8. Installer les tamis de remplacement, avec le filetage en haut, comme indiqué sur la Fig. 10.

9. Serrer le tamis manuellement.
  10. Utiliser l'outil pour terminer l'installation.
- Attention: Ne pas trop serrer!**
11. Répéter les étapes 8 – 10 pour remplacer le deuxième tamis.
  12. Installer le couvercle supérieur sur le dispositif en appuyant dessus jusqu'à ce que les 4 boutons de déverrouillage s'enclenchent.
  13. Insérer la batterie dans le dispositif.
  14. Brancher le dispositif à une source d'alimentation AC ou DC.

**NE PAS ALLUMER LE DISPOSITIF!**

15. Appuyer sur le bouton alarme muette  et sur le bouton de la batterie  en même temps jusqu'à ce que le dispositif affiche „Test de fuite“ (Leak test).
  - a. Le dispositif va indiquer la progression par des décimales sur la droite du texte „Test de fuite“ (Leak test).
  - b. Une fois terminé, le dispositif va indiquer „test réussi“ (Test Passed) ou „test échoué“ (Test Failed ).
    - i Test réussi – Appuyer sur le bouton de la batterie  pour sortir, continuer à l'étape 16.
    - ii Test échoué - Appuyer sur le bouton de la batterie  pour sortir, répéter les étapes 4 – 15.
16. Si le test de fuite est réussi, nettoyer ensuite le compteur d'heures d'utilisation du tamis du dispositif.
  - a. Allumer votre concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite.
  - b. Appuyer de manière simultanée sur les boutons  et  jusqu'à ce que „diagnostics“ s'affiche.
  - c. Appuyer sur les boutons  ou  pour naviguer dans le menu „diagnostics“ jusqu'à ce que "XXXH Tamis" (XXXH Sieve) s'affiche, XXXX = nombre d'heures d'utilisation de l'ancien tamis.
  - d. Appuyer sur le bouton alarme muette  jusqu'à ce que le compteur d'heures d'utilisation du tamis affiche "0H Tamis" (0H Sieve).
  - e. Appuyer sur le bouton de la batterie  pour sortir du mode diagnostic.
  - f. Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé.

*Important: Contactez votre fournisseur d'oxygène à domicile si le dispositif ne réussit pas le test de fuite après plusieurs essais.*



Fig. 9



Fig. 10

FR

### 12.3. Élimination

- Contactez votre distributeur concernant l'élimination de l'appareil.
- Éliminez la batterie conformément aux dispositions locales ou contactez votre distributeur.

## 13 Garantie

La garantie de l'appareil est limitée à trois (3) ans à compter de la date de fabrication, hors tamis qui n'ont seulement qu'un an de garantie.

La garantie standard n'est valide que pour les produits manipulés comme prévu dans le manuel de l'utilisateur, les bonnes pratiques et les normes de l'industrie.

## 14 Marques

### 14.1. Marques de Commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### 14.2. Clause de Non-Responsabilité

Les informations contenues dans ce document ont été examinées soigneusement et sont dignes de confiance. En outre, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit mentionné pour en améliorer la lisibilité, le fonctionnement ou le design. Le fabricant décline toute responsabilité résultant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou circuit décrit dans le présent document ; et ne couvre pas non plus de licence en vertu de ses droits découlant des brevets ou des droits d'autrui.

#### 14.2.1. Le Présent Document

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans avis préalable. Celui-ci contient des renseignements commerciaux protégés par droit d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit, en tout ou partie (à l'exception de brefs extraits de revues et journaux scientifiques), sans le consentement préalable écrit du fabricant. Assurez-vous de lire attentivement et de comprendre tous les manuels fournis avec le produit.

### Assistance

Pour toute question concernant les informations contenues dans ces instructions ou l'utilisation sécurisée de cet appareil, contactez votre prestataire de l'oxygène à domicile ou votre distributeur.



## 15 Description Technique

|   |  |
|---|--|
| <b>Dimensions :</b>                           | 249 mm (l), 97 mm (P), 231 mm (H)<br>9.8" (l), 3.8" (P), 9.1" (H)  |
| <b>Poids de l'appareil :</b>                  | 2.5 kg (5.5 lbs) (sans sac de transport et chariot)  |
| <b>Caractéristiques électriques :</b>         | Adaptateur AC : 100–240 V AC (+/- 10 %), entrée 50–60 Hz, 24 V CC, sortie 5.0A. Adaptateur DC : entrée 11,5–16 V CC, 24V, sortie 5.0 A<br><i>(Important: voir la liste des accessoires des modèles et références des packs d'alimentation AC et DC.)</i> |
| <b>Pureté :</b>                               | 87% - 96% à tous les débits dans toutes les conditions de fonctionnement   |
| <b>Réglages :</b>                             | Réglable par l'utilisateur par graduations de 0,5 de 5.0.  |
| <b>Sensibilité du déclenchement :</b>         | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O  |
| <b>Indicateur de réglage :</b>                | LCD  |
| <b>Pression maximale d'apport d'oxygène :</b> | 20.5 psi   |
| <b>Plage d'humidité :</b>                     | 5% to 93% ± 2% sans condensation   |
| <b>Dispositif de déconnexion:</b>             | Connecteur d'entrée d'alimentation   |
| <b>Altitude d'utilisation :</b>               | 0' à 13,000' (0m à 4,000m) par rapport au niveau de la mer, 1060 jusqu'à 575 mbar  |
| <b>Niveau de pression sonore :</b>            | 44dBA au réglage 2 et 18 BPM:<br>(Mesuré à 1 m à l'avant du dispositif)<br><br>Niveau de pression acoustique maximum de 52.5dBA pour ISO 80601-2-69  |
| <b>Type de protection (électricité) :</b>     | Classe II  |
| <b>Degré de protection (électricité) :</b>    | Type BF  |

FR

## Description Technique (continuation)

|  |  |
|--|--|
| <b>Degré de protection (eau) :</b>                             | IP22 dans son sac de transport (protection contre les petits corps solides et les gouttes d'eau)<br>IP20 hors du sac de transport (protection contre les petits corps solides et aucune protection contre les gouttes d'eau) |
| <b>Niveau de sécurité (mélange anesthésique inflammable) :</b> | Non adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable   |
| <b>Température de fonctionnement :</b>                         | Fonctionnement continu à des températures comprises entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).  |
| <b>Température de stockage :</b>                               | Entre -20 °C (-4 °F) et 60 °C (140 °F).  |
| <b>Niveau de pression sonore de l'alarme:</b>                  | 65 à 85 dB(A)  |
| <b>Délai du système d'alarme :</b>                             | Moins de 10 secondes après détection (alarme d'oxygène faible si le niveau d'oxygène est inférieur à 82 % du volume dans certains environnements)  |
| <b>Témoin d'état du concentrateur d'oxygène :</b>              | Alarme haute priorité indiquant lorsque la concentration en oxygène est inférieure à 82 %.   |

### Taille du bolus en mode pulse (ml/respiration) selon le réglage et la fréquence respiratoire

| Respirations par minute | Réglage |    |      |      |      |
|-------------------------|---------|----|------|------|------|
|                         | 1       | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                      | 11      | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                      | 11      | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                      | 11      | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                      | 11      | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                      | 11      | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                      | 11      | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

Toutes les valeurs +/- 15 % dans toutes les conditions de fonctionnement

## 15.1. Informations sur la Compatibilité Électromagnétique (CEM)

Cet appareil électrique à usage médical nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Les équipements de communication portables et mobiles à radiofréquences (RF) peuvent affecter les appareils comme le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™. Ce dernier ne doit donc pas être utilisé à proximité de tels équipements. Si cela n'est pas possible, vous devez vérifier à tout moment que l'appareil fonctionne correctement.

### 15.1.1. Directives Et Déclaration Du Fabricant : Émissions Électromagnétiques

Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est conçu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du concentrateur devra s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

| Test d'émissions                                  | Conformité | Environnement électromagnétique/directives  |
|---|------------|---|
| Émissions RF CISPR 11                             | Groupe 1   | Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ utilise de l'énergie RF pour son fonctionnement interne uniquement. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques à proximité. |
| Émissions RF CISPR 11                             | Classe B   | Le concentrateur est adapté pour tous les établissements, y compris les établissements domestiques et les établissements directement reliés au réseau d'alimentation public basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.  |
| Harmonique émissions CEI 61000-3-2                | Classe A   |   |
| Variations de tension/scintillement CEI 61000-3-3 | Conforme   |   |

FR


### 15.1.2. Directives et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique

Zen-O lite™ est conçu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du concentrateur devra s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

| Test d'immunité   | Niveau de test CEI 60601   | Niveau de conformité   | Environnement électromagnétique/directives   |
|---|--|--|--|
| Décharge électrostatique (ESD)<br>CEI 61000-4-2   | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air  | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air  | Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique.<br>Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative devra être d'au moins 30 %.   |
| Perturbation électrique rapide/claquage<br>CEI 61000-4-4  | ± 2 kV pour les lignes d'alimentation<br>± 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie   | ± 2 kV pour les lignes d'alimentation<br>± 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie   | La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier classique.  |
| Poussée<br>CEI 61000-4-5  | Mode différentiel<br>± 1 kV<br>Mode commun<br>± 2 kV   | Mode différentiel<br>± 1 kV<br>Mode commun<br>± 2 kV   | La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier classique.  |
| Chutes de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'alimentation d'entrée<br>CEI 61000-4-11 | < 5 % UT (chute de >95 % en UT) pour 0,5 cycle<br>40 % UT (chute de 60 % en UT) pour 5 cycles<br>70 % UT (chute de 30 % en UT) pour 25 cycles<br><5 % UT (chute de >95 % en UT) pour 5 s | < 5 % UT (chute de >95 % en UT) pour 0,5 cycle<br>40 % UT (chute de 60 % en UT) pour 5 cycles<br>70 % UT (chute de 30 % en UT) pour 25 cycles<br><5 % UT (chute de >95 % en UT) pour 5 s | La qualité de l'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier classique.<br>Si l'utilisateur du concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ a besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures de courant, il est recommandé d'alimenter le concentrateur par une alimentation sans interruption ou une batterie. |

FR

## Directives et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique (continuation)

| Test d'immunité   | Niveau de test CEI 60601                         | Niveau de conformité        | Environnement électromagnétique/directives   |
|---|--|-----------------------------|--|
| Champ magnétique de fréquence (50/60 Hz)<br>CEI 61000-4-8   | 3 A/m  | 3 A/m                       | Les champs magnétiques de fréquence doivent être ceux d'un environnement commercial ou hospitalier classique.  |
| RF transmises<br>CEI 61000-4-6  | 3 Vrms 150 kHz<br>to 80 Mhz ;<br>6Vrms ISM Bands | 3 Vrms<br>(6Vrms ISM Bands) | Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance de l'appareil, y compris ses câbles, moindre que la distance de séparation recommandée calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.<br>Distance de séparation recommandée:<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz à 80 MHz<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz<br>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz<br>où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) conformément au fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).<br>Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site <b>a)</b> devraient être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences <b>b)</b> . Des interférences peuvent se produire à proximité d'un équipement marqué du symbole suivant :  |
| RF émises CEI 61000-4-3   | 10 V/m 80 Mhz<br>to 2.5 Ghz                      | 10 V/m                      |  |
| <p><i>Important : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.</i></p> <p><i>Important : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans certaines situations. La propagation électromagnétique est sensible à l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</i></p> <p><b>a)</b> Il est impossible de prévoir théoriquement les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones radio (portables/sans fil) et radios mobiles terrestres, les radios amateur, la diffusion radio AM et FM et la diffusion TV avec précision. Pour déterminer l'environnement électromagnétique d'un émetteur RF fixe, il est conseillé d'envisager une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ mesurée sur le lieu d'utilisation du Zen-O lite™ dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le concentrateur doit être soumis à vérification afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Si vous observez des performances anormales, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires comme réorienter ou déplacer le concentrateur.</p> <p><b>b)</b> À une gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 6 V/m.</p> |  |                             |  |

FR

### 15.1.3. Distances de Séparation Recommandées Entre les Appareils Portables et Mobiles de Communications RF et Le Concentrateur d'oxygène Portable Zen-O lite™

Le concentrateur d'oxygène portable Zen-O lite™ est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. L'utilisateur du moniteur peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le moniteur comme recommandé ci-dessous, selon la puissance de sortie maximale des équipements de communication.





| Puissance nominale max. de l'émetteur (W) | Distance de séparation (m) en fonction de la fréquence de l'émetteur |   |  |
|---|--|---|--|
|   | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                              | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01                                      | 0.12   | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1                                       | 0.38   | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10  | 3.8  | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100                                       | 12   | 12                                      | 23                                       |

Pour les émetteurs à puissance de sortie maximale ne figurant pas ci-dessus, la distance de séparation recommandée (d) en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) conformément au fabricant de l'émetteur.

















*Important : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.*

*Important : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans certaines situations. La propagation électromagnétique est sensible à l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.*

## 16 Glossaire — Explication des Symboles Présents sur L'emballage ou L'étiquette

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Consulter les instructions générales avant utilisation |  | Limite de la pression atmosphérique en fonctionnement 4 000 m (0 à 13 000 pieds) |
|  | Type BF selon les exigences de sécurité électriques    |  | Limite de la température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)             |

## Glossaire — Explication des Symboles Présents sur L'emballage ou L'étiquette (continuation)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|                       | Numéro de série  |    | Limite de l'humidité 5 % à 93 % ± 2 % sans condensation                      |
|                       | Numéro du catalogue  |    | Manipuler avec précaution  |
|                       | Aux États-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de cet appareil que sur ordonnance ou par un médecin |    | Année de fabrication   |
|                       | Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré. Voir le chapitre 6.  |    | Fabricant  |
| <br>No Open<br>Flames | Ne pas approcher l'appareil de flammes nues lorsqu'il est en marche et ne pas incinérer                  |    | Conserver au sec (ce symbole renvoie à la classification IPX2 de l'appareil) |
| <br>No<br>Smoking     | Ne pas fumer   |    | Éliminer la batterie de façon appropriée                                     |
|                       | Récupération séparée des équipements électriques et électroniques  |    | Symbole de classe II   |
|                     | Est conforme aux directives européennes applicables, y compris la directive de dispositifs médicaux.     |  | Compatible avec l'emploi à domicile  |

FR



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Fabriqué pour: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Nederlands

## Gebruikershandleiding: Zen-O lite™ lite Draagbare Zuurstofconcentrator (Model: RS - 00600)

### Inhoudsopgave

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Voorwoord</b> .....  | <b>112</b> |
| 1.1. Algemene informatie .....                                   | 112        |
| 1.2. Classificatie .....   | 112        |
| 1.3. Typografische conventies .....                              | 113        |
| <b>2. Beoogd gebruik</b> .....                                   | <b>113</b> |
| <b>3. Veiligheidsinstructies</b> .....                           | <b>114</b> |
| 3.1. Overzicht waarschuwingen .....                              | 114        |
| 3.2. Overzicht voorzorgsmaatregelen.....                         | 116        |
| 3.3. Overzicht van belangrijke informatie .....                  | 118        |
| <b>4. Instructies en training</b> .....                          | <b>118</b> |
| <b>5. Beschrijving van het product</b> .....                     | <b>119</b> |
| 5.1. Schematische beschrijving.....                              | 119        |
| <b>6. Algemene instructies voorafgaand aan het gebruik</b> ..... | <b>120</b> |
| 6.1. Lijst met Accessoires.....                                  | 120        |
| 6.2. Batterij .....  | 120        |
| 6.3. Neuscanule .....  | 122        |
| <b>7. De concentrator bedienen</b> .....                         | <b>123</b> |
| 7.1. Neuscanule aansluiten .....                                 | 123        |
| 7.2. Inschakelen .....   | 124        |
| 7.3. Voorkeurstaal kiezen .....                                  | 124        |
| 7.4. Instelling aanpassen.....                                   | 124        |
| 7.5. Batterijknop .....  | 125        |
| 7.6. Op alarmen reageren .....                                   | 125        |
| 7.7. Uitschakelen .....  | 126        |



|   |            |
|---|------------|
| <b>8. De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator meenemen in het vliegtuig</b>                 | <b>126</b> |
| 8.1. Voorbereiding van de passagier vóór de vlucht  | 126        |
| 8.2. Boarding en In-flight informatie   | 129        |
| 8.3. Vereisten van de Transportation Security Administration (TSA)                                | 131        |
| <b>9. Alarmindicatoren</b>  | <b>132</b> |
| 9.1. Alarmen  | 133        |
| <b>10. Problemen oplossen</b>   | <b>136</b> |
| <b>11. Onderhoud en reiniging</b>   | <b>137</b> |
| 11.1. Routinematig onderhoud  | 137        |
| 11.2. Buitenkant reinigen   | 137        |
| 11.3. Gebruiksduur  | 137        |
| 11.4. Service aansluiting   | 138        |
| <b>12. Reparatie en afvoer van het apparaat</b>   | <b>138</b> |
| 12.1. Reparatie   | 138        |
| 12.2. Zeef buizen vervangings instructies   | 138        |
| 12.3. Afvoer  | 139        |
| <b>13. Garantie</b>   | <b>139</b> |
| <b>14. Handelsmerken en afstandsverklaring</b>  | <b>140</b> |
| 14.1. Handelsmerk   | 140        |
| 14.2. Afstandsverklaring  | 140        |
| <b>15. Technische beschrijving</b>  | <b>141</b> |
| 15.1. Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)                                    | 143        |
| <b>16. Verklarende woordenlijst – verklaring van de symbolen op de verpakking en etikettering</b> | <b>146</b> |

# 1. Voorwoord

*Raadpleeg deze handleiding voor gedetailleerde instructies over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, specificaties en aanvullende informatie.*

*BELANGRIJK: Gebruikers moeten deze hele handleiding lezen voordat ze de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator gaan gebruiken. Als dit niet gebeurt, kan dit tot persoonlijk letsel en/of overlijden leiden. Als u vragen hebt over de informatie in deze gebruikershandleiding of over het veilige gebruik van dit systeem, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.*

## 1.1. Algemene informatie

Deze gebruikershandleiding biedt informatie voor gebruikers van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator. Gemakshalve worden de termen 'concentrator', 'POC', 'eenheid' of 'apparaat' soms gebruikt in dit document om te verwijzen naar de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator. 'Patiënt' en 'Gebruiker' worden door elkaar gebruikt.

## 1.2. Classificatie

Dit apparaat is gecertificeerd bij een internationaal erkend testlaboratorium en is geclassificeerd met betrekking tot elektrische schokken, vuur en mechanische gevaren in overeenstemming met de volgende normen:


- IEC/EN 60601-1:2012, Medische elektrische apparatuur – Deel 1: Algemene Vereisten voor Basisveiligheid en Essentiële Prestaties
- IEC/EN 60601-1-2:2014, Deel 1-2: Algemene Veiligheidsvereisten – Secundaire Norm: Elektromagnetische Compatibiliteit – Vereisten en Testen.
- IEC/EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Medische Elektrische Apparatuur – Deel 1-6: Algemene Vereisten voor Basisveiligheid en Essentiële Prestaties – Secundaire Norm: Bruikbaarheid
- IEC/60601-1-8:2006, Medische Elektrische Apparatuur – Deel 1-8: Algemene Veiligheidsvereisten – Secundaire Norm: Algemene Eisen, Testen en Richtlijnen voor Alarmsystemen in Medische Elektrische Toestellen en Medische Elektrische Systemen
- IEC/60601-1-11:2011, Medische elektrische apparatuur – Deel 1-11: Algemene veiligheidsvereisten – Secundaire Norm: Eisen voor Medische Elektrische Apparatuur en Medische Elektrische Systemen die Gebruikt Worden voor de Medische Verzorging in de Thuisituatie.
- ISO 80601-2-67:2014, Medisch Electriche Apparatuur – Deel 2-67 Specifieke eisen voor basis veiligheid en essentiële prestaties van zuurstof besparende apparatuur.
- ISO 80601-2-69:2014, Medisch Electriche apparatuur. Deel 2-67 Specifieke eisen voor basis veiligheid en essentiële prestaties van zuurstof concentrator apparatuur.
- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Canadese Norm, Medische Elektrische Apparatuur – Deel 1: Algemene Vereisten voor Basisveiligheid en Essentiële Prestaties
- Richtlijn 93/42/EEG Betreffende Medische Hulpmiddelen


## Deze apparatuur is geclassificeerd als:

- Klasse II
- Klasse IIa volgens de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG
- Type BF
- IP22 met de draagtas

### 1.3. Typografische conventies

Deze instructies bevatten waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen die helpen de aandacht te vestigen op de belangrijkste veiligheidsaspecten en operationele aspecten van het apparaat. Om deze items te helpen identificeren wanneer ze in de tekst voorkomen, worden ze weergegeven met behulp van de volgende typografische conventies:

 **WAARSCHUWING:** Berichten die ernstige bijwerkingen en mogelijke veiligheidsproblemen aangeven.

 **VOORZORGSMATREGEL:** Deze berichten vragen aandacht voor informatie met betrekking tot elke door de specialist of patiënt uit te voeren speciale zorg voor het veilige en effectieve gebruik van het apparaat.

*BELANGRIJK: Berichten die de aandacht vestigen op aanvullende belangrijke informatie over het apparaat of een procedure.*

## 2. Beoogd gebruik

De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator heeft als doel aanvullende zuurstof te leveren aan volwassen patiënten met chronische longziekten of patiënten die aanvullende zuurstof nodig hebben.

Het apparaat is draagbaar, waardoor patiënten die een zuurstofapparaat nodig hebben, thuis behandeld kunnen worden volgens het voorschrift of de aanwijzingen van een arts.

Zen-O lite™ is niet bedoeld voor levensondersteuning of levensinstandhouding, en wordt niet-steriel geleverd. Het is een enkel op recept te gebruiken apparaat, en is ontworpen voor gebruik binnen en buiten. Voor de juiste bedrijfsomstandigheden gaat u naar hoofdstuk 15. Technische Beschrijving.

### De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is niet bedoeld voor gebruik:

- in levensondersteunende of levensinstandhoudende situaties
- in een operatie- of chirurgische omgeving
- bij niet-volwassen patiënten
- in combinatie met brandbare anesthetica of brandbare materialen

### **3. Veiligheidsinstructies**

#### **⚠ 3.1. Overzicht waarschuwingen**

1. Het apparaat moet in de draagtas worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van vloeistoffen door regen en/of gemorste vloeistoffen.
2. Bij het gebruik van zuurstofapparatuur en -therapie bestaat een risico op brand. Niet gebruiken in de buurt van vonken of open vuur.
3. De instellingen van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator RS-00600 komen mogelijk niet overeen met een continue stroom zuurstof.
4. De instellingen van andere modellen of merken apparatuur voor zuurstoftherapie komen niet overeen met de instellingen van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator RS-00600.
5. Wind of sterke tocht kan de nauwkeurige toediening van zuurstoftherapie nadelig beïnvloeden.
6. Geriatrie patiënten of andere patiënten die ongemak niet tot uitdrukking kunnen brengen, kunnen aanvullende monitoring nodig hebben om letsel te voorkomen.
7. Roken (inclusief e-sigaretten) tijdens zuurstoftherapie is gevaarlijk en zal waarschijnlijk resulteren in gezichtsbrandwonden of overlijden. Sta roken of open vuur niet toe in dezelfde ruimte als de draagbare zuurstofconcentrator of accessoires die zuurstof bevatten. Als u rookt, schakelt u de zuurstofconcentrator altijd uit, verwijdert u de canule en verlaat u de ruimte waar de canule of de concentrator zich bevinden. Als u de ruimte niet kunt verlaten, moet u 10 minuten wachten nadat de zuurstofstroom is gestopt.
8. Gebruik uitsluitend lotions op waterbasis die zuurstofcompatibel zijn vóór en tijdens zuurstoftherapie. Gebruik tijdens gebruik van het apparaat nooit lotions of zalven op basis van petroleum of olie om het risico van brand en brandwonden te voorkomen.
9. Open vlammen tijdens zuurstoftherapie zijn gevaarlijk en resulteren waarschijnlijk in brand of overlijden. Sta geen open vlammen toe binnen 2 meter van de zuurstofconcentrator of accessoires die zuurstof bevatten.
10. Door zuurstof kan een brand eenvoudiger ontstaan en zich uitbreiden. Laat de neuscanule niet op de bedhoes of stoelkussens liggen als de zuurstofconcentrator is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt; door de zuurstof worden de materialen ontvlambaar. Schakel de concentrator uit wanneer deze niet wordt gebruikt om zuurstofverrijking te voorkomen.
11. Kritiek! Explosiegevaar. Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbare anesthetica!
12. Gebruik dit apparaat niet in de aanwezigheid van verontreinigende stoffen of dampen.
13. Dompel dit apparaat niet onder in vloeistoffen. Niet blootstellen aan water of neerslag.

Niet blootstellen aan stoffige omstandigheden.

14. Gebruik apparaten of accessoires niet als deze tekenen van beschadiging vertonen.
15. Gebruik geen smeermiddelen op dit apparaat of enige van de bijbehorende accessoires.
16. Gebruik van dit apparaat op een hoogte boven de 4000 m (13000 voet), of buiten het temperatuurbereik van 5 °C (41 °F) tot 40 °C (104 °F), of buiten het vochtigheidsbereik van 5% tot 93% kan een negatieve invloed hebben op de stroomsnelheid en het percentage zuurstof, en daardoor op de kwaliteit van de therapie. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het in een schone, droge omgeving tussen de -20 en 60 °C (-4 en 140 °F) worden bewaard. Gebruik en/of opslag buiten de geldige omstandigheden kan tot beschadiging van het product leiden. Voor meer technische details gaat u naar hoofdstuk 15. Technische Beschrijving.
17. Zorg er altijd voor dat er minimaal één batterij is geplaatst voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
18. Als u zich ziek voelt of ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp om letsel te voorkomen.
19. Uw zorgverlener (verantwoordelijke organisatie) moet de compatibiliteit van het apparaat en alle gebruikte accessoires vóór gebruik controleren. Om er zeker van te zijn dat u de therapeutische hoeveelheid zuurstof ontvangt voor uw medische conditie, mogen het gecontroleerde compatibele apparaat en de accessoires uitsluitend worden gebruikt nadat een of meer instellingen door uw zorgverlener (verantwoordelijke organisatie) voor u zijn vastgesteld of voorgeschreven op basis van uw specifieke activiteitsniveau's.
20. Het elektriciteits snoer en de slang kunnen gevaar voor struikelen of wurgen opleveren. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
21. Haal dit apparaat of een van de bijbehorende accessoires niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan. Probeer geen andere onderhoudstaken uit te voeren dan de taken beschreven in hoofdstuk 10. Problemen Oplossen. Demontage kan leiden tot elektrische schokken en hierdoor komt de garantie te vervallen. Neem contact op met uw leverancier voor onderhoud door bevoegd personeel.
22. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen reserveonderdelen om een goede werking te garanderen en het risico van brand en brandwonden te voorkomen.
23. Voer geen reparaties of service terwijl het apparaat in gebruik is.

NL

### 3.2. Overzicht voorzorgsmaatregelen

1. Uit de buurt houden van warmtebronnen (open haard, straalkachels, etc.) waardoor de bedrijfstemperatuur op of in de buurt van het apparaat de 40 °C (104 °F) zou kunnen overschrijden.
2. Het scherm kan moeilijk leesbaar zijn bij helder omgevingslicht (zonlicht, binnenverlichting, etc.), uit de buurt van direct licht plaatsen om het scherm goed te kunnen zien.
3. Blijf uit de buurt van de lucht inlaat met pluizig spul om verstoppingen te vermijden.
4. In sommige landen mag dit apparaat uitsluitend door of in opdracht van een voorschrijvende arts worden verkocht. Zorg ervoor dat u de relevante plaatselijke wetgeving in acht neemt.
5. Niet-voorgeschreven zuurstoftherapie kan onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn. Gebruik dit apparaat uitsluitend wanneer het is voorgeschreven door een arts.
6. Patiënten met een hoge ademhalingsnelheid die een hogere zuurstofinstelling nodig hebben, hebben mogelijk meer zuurstof nodig dan dit apparaat kan produceren – zie hoofdstuk 15. Technische Beschrijving. Dit apparaat is in dat geval mogelijk niet geschikt. Raadpleeg uw arts voor een alternatieve behandeling.
7. Gebruik het apparaat altijd met de door een arts voorgeschreven instelling. Verander de instelling niet tenzij dit is voorgeschreven door een arts. De stroominstellingen moeten periodiek opnieuw worden beoordeeld door een arts.
8. Gebruik dit apparaat niet terwijl u slaapt tenzij dit is voorgeschreven door uw arts.
9. Het wordt aanbevolen om een alternatieve zuurstofbron beschikbaar te maken voor het geval dat de stroom uitvalt of zich een mechanisch defect voordoet. Raadpleeg uw zorgverlener of arts voor een geschikt back-upsysteem.
10. Dit apparaat haalt de gespecificeerde zuurstofconcentratie mogelijk pas nadat het tot wel 2 minuten in gebruik is op de ingestelde stroomsnelheid.
11. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij één patiënt tegelijkertijd.
12. Als u geen alarmen kunt horen of zien, geen normale tastzin hebt of ongemak niet tot uitdrukking kunt brengen, raadpleeg dan een arts voor u dit apparaat gaat gebruiken.
13. Als de zuurstofconcentratie onder het gespecificeerde niveau daalt, zal een alarm klinken om deze toestand aan te duiden. Als het alarm blijft aanhouden, stopt u met het gebruik van dit apparaat, schakelt u over naar een andere zuurstofbron en neemt u contact op met uw zorgverlener.
14. Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires met dit apparaat. Zie de lijst met goedgekeurde accessoires in paragraaf 6.1. en de canule die goedgekeurd is voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of canules kan de prestaties van dit apparaat nadelig beïnvloeden.

15. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik met een bevochtiger of vernevelaar. Als er een bevochtiger of vernevelaar wordt gebruikt met dit apparaat, dan kan de werking verminderd zijn en kan het apparaat beschadigd raken.
16. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de canule voor het juiste gebruik.
17. Vervang de canule regelmatig. Raadpleeg uw zorgverlener of arts om te bepalen hoe vaak de canule moet worden vervangen.
18. Controleer of dit apparaat op batterijvoeding werkt na loskoppeling van de voedingsbron.
19. Laad de batterij uitsluitend in dit apparaat of in een goedgekeurde lader op. (Zie lijst met goedgekeurde accessoires.)
20. Verwijder de batterij als dit apparaat gedurende meer dan zeven dagen niet gebruikt zal worden. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
21. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan de middelen die in deze handleiding worden gespecificeerd. Laat de reinigingsoplossing voorafgaand aan het gebruik opdrogen op het gereinigde oppervlak.
22. Schakel dit apparaat altijd uit wanneer het niet wordt gebruikt.
23. Koppel dit apparaat voorafgaand aan de reiniging altijd los van de voeding en schakel het uit. Zie hoofdstuk 11. Onderhoud en Reiniging.
24. Blokkeer de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen niet tijdens het gebruik van dit apparaat. Blokkering kan interne warmteopbouw en uitschakeling of beschadiging van dit apparaat veroorzaken.
25. Plaats geen voorwerpen bovenop dit apparaat.
26. Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren om beschadiging van het apparaat en de accessoires en/of onbedoelde wijzigingen van de instelling te voorkomen.
27. Houd het apparaat uit de buurt van huisdieren en ongedierte.
28. Dit apparaat is geclassificeerd als IP22 bij gebruik in de draagtas. Niet gebruiken in stoffige of natte omstandigheden.
29. Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
30. Volg altijd het onderhoudsschema zoals gespecificeerd in hoofdstuk 11.1. Routinematig Onderhoud.
31. Als dit apparaat een abnormale toestand aangeeft, raadpleegt u hoofdstuk 10. Problemen Oplossen.
32. Ga voorzichtig te werk wanneer u dit apparaat aanraakt bij hoge omgevingstemperaturen.

33. Het toestel kan hergebruikt worden bij een andere patient. Het moet daartoe gereinigd worden volgens § 11.2 van de gebruikshandleiding en de lokale wetten en voorschriften die gelden bij het afleveren aan een nieuwe patient.
34. Het apparaat kan van de voeding ontkoppeld worden door de stekker uit het stopcontact te trekken, zie figuur 1, plaats het apparaat dusdanig zodat de voedings adapter makkelijk is aan te sluiten.

### 3.3. Overzicht van belangrijke informatie

1. *Als er een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een door de UL goedgekeurd snoer van 15 ampère of hoger. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde verlengsnoer. Gebruik geen verlengsnoer met meerdere stopcontacten.*
2. *Adem door de neus voor de meest effectieve werking van de concentrator. Ademhaling door de mond kan leiden tot een minder effectieve zuurstoftherapie.*

## 4. Instructies en training

In de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG staat dat de productaanbieder ervoor moet zorgen dat alle gebruikers van dit apparaat beschikken over de gebruikshandleiding en volledig zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat.

NL



**WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet zonder de juiste opleiding! Patiënten en zorgverleners moeten worden opgeleid door een ervaren persoon die geautoriseerd is door de fabrikant en die over de juiste opleiding, kennis en ervaring beschikt.**

Voor meer informatie over opleidingen neemt u contact op met uw zorgverlener.



## 5. Beschrijving van het product

### 5.1. Schematische beschrijving

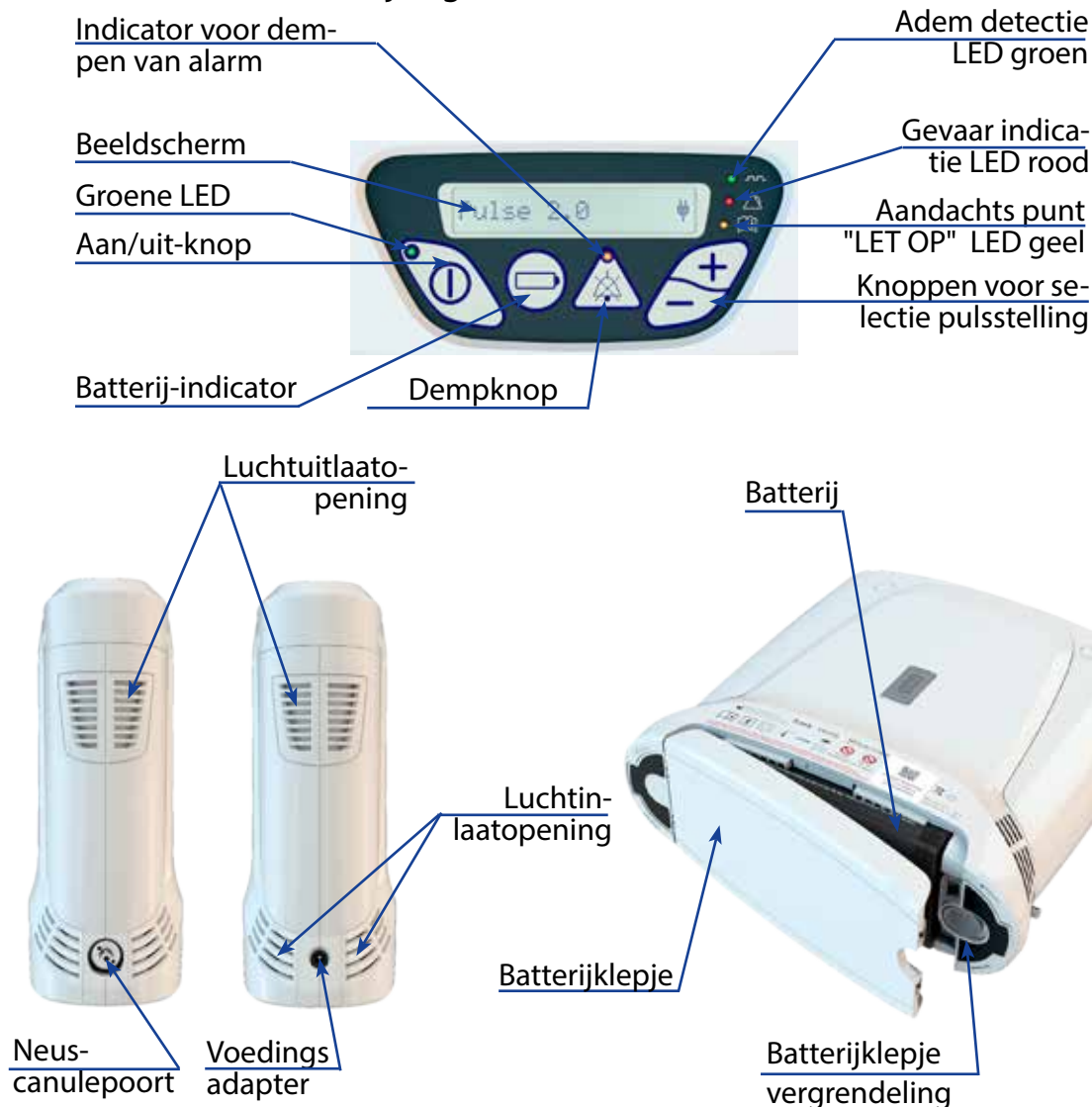


Fig. 1

## 6. Algemene instructies voorafgaand aan het gebruik

Allerlei accessoires kunnen de draagbaarheid en het gebruik van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator verbeteren. Naast het apparaat bevat het pakket accessoires om aan de slag te gaan en een gebruikershandleiding.

Controleer het apparaat en de bijbehorende accessoires vóór gebruik altijd op tekenen van beschadiging.

*BELANGRIJK: Hoewel de doos of verpakking enige schade kan vertonen, bijv. scheuren of deuken, kan het apparaat nog steeds bruikbaar zijn. Als het apparaat of een van de accessoires tekenen van beschadiging vertoont, neemt u contact op met uw zorgverlener.*

Controleer vóór u aan de slag gaat of u het volgende hebt:

- Concentrator
- Batterij
- Draagtas
- Wisselstroomvoeding
- Gelijkstroomvoeding

### 6.1. Lijst met Accessoires

Gebruik uitsluitend voedingsbronnen/adapters of accessoires die in deze handleiding worden gespecificeerd. Het gebruik van accessoires die niet zijn gespecificeerd, kan een gevaar vormen en/of de prestaties van het apparaat negatief beïnvloeden.

- Oplaadbare batterij (RS-00601)
- Wisselstroomvoeding – Netsnoer voor Europa (RS-00602)
- Wisselstroomvoeding – Netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk (RS-00603)
- Wisselstroomvoeding – Netsnoer voor de Verenigde Staten (RS-00604)
- Gelijkstroomvoeding (RS-00605)
- Draagtas (RS-00606)
- Netsnoer voor Europa (RS-00504)
- Netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk (RS-00506)
- Netsnoer voor de Verenigde Staten (RS-00503)
- Externe batterij oplader - EU (RS-00.516)
- Externe batterij oplader - US (RS-00.515)
- Externe batterij oplader - UK (RS-00.517)

 **WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat of de accessoires niet als deze tekenen van beschadiging vertonen.**

### 6.2. Batterij

De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan altijd worden gebruikt wanneer deze rechtstreeks op een voedingsbron is aangesloten. Om de draagbaarheid te vergroten, is de concentrator echter uitgerust met een oplaadbare interne lithium-ionbatterij.

 **Waarschuwing: Zorg dat er altijd een batterij in het toestel is geplaatst voordat deze gebruikt gaat worden.**

**BELANGRIJK:** Er zijn optionele voedingsbronnen beschikbaar voor uiteenlopend wereldwijd gebruik en reizen. Zie de lijst met goedgekeurde accessoires in hoofdstuk 6.1. Lijst met Accessoires.

### 6.2.1. De batterij opladen

**⚠️ VOORZORGSMAATREGEL:** Laad de batterij uitsluitend in dit apparaat of in een goedgekeurde lader op. (Zie de lijst met goedgekeurde accessoires in hoofdstuk 6.1. Lijst met Accessoires.)

- Voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt gaat worden, plaats de batterij volgens Fig. 2. De batterij zal klikken wanneer deze goed geplaatst is.
- Sluit het batterij compartiment van het toestel door deze dicht te laten klikken.
- Sluit de wisselstroom/gelijkstroom aan door de ronde connector in het stopcontact aan de zijkant van de concentrator te steken. Fig. 3.
- Steek het andere uiteinde van de wisselstroom/gelijkstroom in een stopcontact. Ga altijd voorzichtig te werk wanneer u de voedingsbron in een wandcontactdoos steekt.
- Het beeldscherm geeft **Charging NN%**  weer.

De oplader is universeel en ondersteunt een groot aantal internationale markten, zodat deze in een stopcontact met 100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz kan worden gestoken.

Laat één batterij minimaal drie uur opladen vóór gebruik. Zodra de batterij volledig is opgeladen, kan het apparaat tot wel 4 uur op één batterij bij 18 ademhalingen per minuut.

**BELANGRIJK:** De gebruiksduur van de batterijen kan verschillen op basis van de ademhalingsnelheid, leeftijd van de batterij en omgevingsomstandigheden. Zie de weergegeven tekst op het apparaat voor de laadstatus van de batterij.

**BELANGRIJK:** Controleer of het pictogram voor de voedingsstatus (zie Fig. 7) aangeeft dat de voeding is aangesloten. Als dit niet het geval is, controleer dan of het snoer volledig is aangesloten. (Zie hoofdstuk 10. Problemen Oplossen voor meer informatie.)



Fig. 2



Fig. 3

Om de levens- en gebruiksduur van de batterij te maximaliseren, mag u de batterij niet leeg laten raken en moet het apparaat bij gebruik indien mogelijk worden aangesloten op een voedingsbron. De interne batterij wordt automatisch opgeladen wanneer de concentrator op een voedingsbron is aangesloten. U kunt het apparaat gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen. Het LCD-scherm zal aangeven of het apparaat op de batterij of externe wisselstroom werkt.

De volledig opgeladen batterij zal enige lading behouden gedurende tot wel dertig dagen in dit apparaat wanneer het apparaat niet in gebruik is. Zie de voorzorgsmaatregel hieronder voor aanbevelingen voor het verwijderen/bewaren van de batterij.


*BELANGRIJK: De batterij kan beschadigd raken als wordt toegestaan dat de batterij van de concentrator volledig leegraakt.*


*BELANGRIJK: Na 300 oplaad-/ontlaadcycli zal de batterijcapaciteit minimaal 80% van de oorspronkelijke capaciteit bedragen. Vervang de batterij wanneer de verminderde gebruiksduur van de batterij van invloed is op uw mobiliteit.*

*BELANGRIJK: De gelijkstroomvoeding moet worden gebruikt in voertuigen met het juiste uitgangsvermogen.*

*BELANGRIJK: De voertuigmotor moet draaien tijdens het gebruik van de gelijkstroomadapter om voeding te leveren voor de Zen-O draagbare zuurstofconcentrator.*

NL

 **VOORZORGSMATREGEL:** Verwijder de batterij als dit apparaat gedurende meer dan zeven dagen niet gebruikt zal worden. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.

 **VOORZORGSMATREGEL:** Controleer of dit apparaat op batterijvoeding werkt na loskoppeling van de voedingsbron.

*BELANGRIJK: Wanneer de batterij niet in het apparaat wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze in de beschermhuls wordt bewaard die met de oorspronkelijke verpakking is meegeleverd.*

### 6.3. Neuscanule

**Gebruik uitsluitend een neuscanule met de volgende specificaties:**

- 2,1 m (7 voet) of 7,6 m (25 voet) lang
- Hoge stroomsnelheid
- Grote interne diameter
- Rechte canuletips die niet taps toelopen
- Geschikt voor tot wel 15 liter per minuut (lpm) bij een max. druk van 3,6 psi
- Voldoet aan de inhoud over compatibiliteit van IEC/EN 60601-1

**!** **VOORZORGSMAATREGEL:** Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires met dit apparaat. Raadpleeg de gids met goedgekeurde accessoires voor een volledige lijst met accessoires en canules die goedgekeurd zijn voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of canules kan de prestaties van dit apparaat nadelig beïnvloeden, inclusief de stroomsnelheid of zuurstofconcentratie.

Neem contact op met uw leverancier voor bijgewerkte informatie en accessoires en om te informeren of er aanvullende, optionele of vervangende accessoires nodig zijn.

## 7. De concentrator bedienen

*BELANGRIJK: Lees 3.1. Overzicht waarschuwingen en 3.2. Overzicht Voorzorgsmaatregelen voordat u dit apparaat gaat gebruiken.*

De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is ontworpen voor gebruiksgemak, waarbij u via slechts enkele knoppen op het bedieningspaneel toegang krijgt tot alle functies.

Het apparaat moet in combinatie met de tas gebruikt worden in staande positie op een vlakke ondergrond of op de grond maar dan in de trolley. De patient moet binnen de actie- radius van de aanbevolen cannula blijven.

*BELANGRIJK: Behalve tijdens de procedures voor opstarten en afsluiten zal de achtergrondverlichting op het beeldscherm uitgeschakeld zijn. Door op een willekeurige knop te drukken, gaat de achtergrondverlichting kort 'aan'. De achtergrondverlichting blijft ook geactiveerd tijdens een alarmconditie waarvan de demping is opgeheven.*

NL

### 7.1. Neuscanule aansluiten

**!** **VOORZORGSMAATREGEL:** Vervang de canule regelmatig. Raadpleeg uw zorgverlener of arts om te bepalen hoe vaak de canule moet worden vervangen.

**!** **VOORZORGSMAATREGEL:** Volg altijd de instructies van de fabrikant van de canule voor het juiste gebruik.

Sluit de slang op de canulepoort aan zoals afgebeeld in Fig. 5.

Om de canule bij de patiënt aan te brengen, plaatst u de canuletips in de neusgaten van de patiënt en leidt u de slang over beide oren en onder de kin. Volg de instructies van de fabrikant.

Schuif de adapter bij de slang omhoog om de slang aan te passen voor meer comfort en betere pasvorm.

Zodra de canule stevig vastzit, kunt u normaal door de neus ademen. Zen-O lite™ zal een ademhaling detecteren en de zuurstof toedienen tijdens de inademing.

*BELANGRIJK: Onjuiste plaatsing van de canule kan ertoe leiden dat het apparaat niet alle ademhalingsinspanningen van de patiënt kan detecteren. Zorg ervoor dat de canule stevig is aangesloten en volledig is ingebracht.*

## 7.2. Inschakelen

- Als u het apparaat wilt inschakelen, drukt u op de aan/uit-knop .
- De concentrator laat een tijrtoon horen en de groene, gele en rode leds knipperen één keer, terwijl het scherm de naam van het apparaat aangeeft.



Rode led: geeft een waarschuwing, gevaar en/of noodzaak van directe actie aan








Gele led: geeft een aandachtspunt aan of dat u goed moet opletten



Wanneer de groene LED knippert zal er zuurstof geleverd worden.



*BELANGRIJK: Er kunnen geen aanpassingen worden gedaan tot de opstartprocedure is afgerond.*

## 7.3. Voorkeurstaal kiezen

- Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houdt u de plusknop  en dempknop  tegelijkertijd gedurende ongeveer vier seconden ingedrukt tot 'Taal:' wordt weergegeven.
- Blader door de beschikbare talen met behulp van de plusknop  of minknop .
- Wanneer de gewenste taal word getoond, druk dan op de batterij knop  om deze te selecteren. Het apparaat zal de taal veranderen en terugkeren naar het normale hoofdscherm.

## 7.4. Instelling aanpassen

*BELANGRIJK: Na inschakeling van de Zen-O lite™ duurt de opstartprocedure ongeveer 35 seconden. Het gespecificeerde zuurstofniveau wordt binnen 2 minuten gebruik bereikt.*

- Het apparaat begint in de vorige instelling te werken.
- Het apparaat een zuurstofpuls toedienen aan het begin van elke inademing.
- De pulsgebruiksmodus kan worden aangepast van 1,0 tot 5,0 in stappen van 0,5 met de knoppen  en .

*BELANGRIJK: Wanneer een luchtlek wordt vermoed, kan dit lek worden gedetecteerd door een oplossing van zeep en water op het verbindingspunt tussen de canule en concentrator aan te brengen en te kijken of er belletjes verschijnen.*

De huidige instelling en voedingsbron (externe voeding of batterij; het batterijpictogram geeft ook aan hoeveel lading er ongeveer nog over is) worden weergegeven op het beeldscherm zoals afgebeeld in Fig. 7.




Zen-O lite™ werkend op batterijvoeding.








Zen-O lite™ werkend op externe voeding.

Fig. 7


## 7.5. Batterijknop


Met de batterijknop  kunt u de status van de batterij of batterijen controleren. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, kunt u door alle informatie bladeren.

- Eerst zal het display informatie verstrekken omtrent het: **Laden NN%**  of **Batt.1: NN%** 
- Vervolgens **Batt1: NN%**  over het aantal oplaadcycli **Batt.1: N Cycli**  of **Batt: Cycli** .

Na 3 keer gedrukt te hebben op de batterij knop gaat het display terug naar het hoofdscherm waar de ingestelde flow word getoond. Het scherm verlaat ook automatisch het batterijstatusmenu en keert terug naar het scherm met de belangrijkste stroominstelling na ongeveer 15 seconden of als er geen knoppen worden ingedrukt.

## 7.6. Op alarmen reageren

 **VOORZORGSMATREGEL:** Als u geen alarmen kunt horen of zien, geen normale tastzin hebt of ongemak niet tot uitdrukking kunt brengen, raadpleeg dan een arts voor u dit apparaat gaat gebruiken.

Door op een willekeurig moment op de  te drukken, wordt de zoemer gedempt. De duur van de dempperiode is afhankelijk van de ernst van het alarm (zie hoofdstuk 9. Alarm-indicatoren). Tijdens deze dempperiode blijft de demp-LED branden om aan te geven dat de alarmzoemer is gedempt. Druk nog een keer op de dempknop om de demping van alarmen op te heffen. Als u op de dempknop drukt wanneer er geen actief alarm is, dan zullen alle toekomstige alarmen met gemiddelde of lage prioriteit gedurende acht uur worden gedempt. Zie hoofdstuk 9. Alarmindicatoren en hoofdstuk 10. Problemen oplossen voor aanvullende informatie over alarmen.

**BELANGRIJK:** Het alarmsysteem wordt getest tijdens de opstartprocedure. Alle alarmlampjes moeten kort gaan branden en de hoorbare alarmindicator moet een tijrtoon laten horen. Als u vermoedt dat alarmen niet goed werken, neem dan contact op met uw leverancier om de werking van de alarmen te laten controleren.



## 7.7. Uitschakelen



**VOORZORGSMAATREGEL:** Schakel dit apparaat altijd uit wanneer het niet wordt gebruikt.

Als u de Zen-O™ draagbare zuurstofconcentrator wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Het apparaat laat een tjrptoon horen en het scherm geeft een afsluitbericht **Schakelt uit** gedurende ongeveer vijf seconden weer en schakelt vervolgens naar de energiebesparingsmodus.

*BELANGRIJK: Het loskoppelen van de wisselstroomvoeding mag niet tegelijkertijd plaatsvinden met het verwijderen van de batterij als het apparaat nog draait. Gebruik de aan/uit-knop altijd om het apparaat uit te schakelen. Wacht tot het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u het apparaat van de voeding loskoppelt en de batterij verwijdert.*

## 8. De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator meenemen in het vliegtuig

### 8.1. Voorbereiding van de passagier vóór de vlucht

#### 8.1.1. Vereiste etiketten

Uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan worden gebruikt in een vliegtuig en voldoet aan alle criteria van de Amerikaanse luchtvaartorganisatie Federal Aviation Administration (FAA). Dit wordt bevestigd door de volgende rode tekst op de achterzijde van de draagbare zuurstofconcentrator: "The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft" (De fabrikant van deze draagbare zuurstofconcentrator heeft vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan alle geldende acceptatiecriteria van de FAA voor het meenemen en gebruiken van een draagbare zuurstofconcentrator aan boord van een vliegtuig). Voorafgaand aan de vlucht kan een lid van het cabinepersoneel u vragen dit etiket te tonen.

#### 8.1.2. Raadpleging van een zorgverlener

De FAA verplicht passagiers niet om een zorgverlener te raadplegen voordat een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan worden gebruikt aan boord van een vliegtuig. Mogelijk wilt u echter het volgende bespreken met uw zorgverlener:

- De effecten van een drukcabine op uw zuurstofbehoefte (de hoogte van de drukcabine kan 8000 voet bereiken).
  - Sommige gebruikers van een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator hebben een hogere literstroom- of liter per minuut (LPM) instelling nodig voor de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator tijdens de vlucht vanwege de hoogte van de drukcabine.
  - Sommige gebruikers van een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator die deze op de grond af en toe gebruiken, hebben hun Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator tijdens de gehele vlucht nodig door de hoogte van de drukcabine.



- Uw zuurstofbehoefte tijdens de reis en of uw behoeften zijn veranderd sinds de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator voor het eerst werd voorgeschreven of sinds het meest recente consult bij een zorgverlener.
- Essentiële bepalingen in de handleiding van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator met betrekking tot de zuurstoflevering, indicators, waarschuwingen en alarmen, en ook met betrekking tot het instellen/wijzigen van de literstroom of LPM.
- Alle bemanningsleden (piloten en cabinepersoneel) ontvangen training over het omgaan met gebeurtenissen van medische aard tijdens de vlucht. De FAA verplicht luchtvaartmaatschappijen of bemanningsleden echter niet om medische zorg te verlenen aan passagiers.

*BELANGRIJK: aanvullende informatie over de gezondheid en veiligheid van passagiers is te vinden op [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Een adequaat aantal batterijen bepalen**

U bent ervoor verantwoordelijk om een adequaat aantal batterijen mee te brengen als voeding van uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator voor de verwachte gebruiksduur van dit apparaat. Bij het bepalen van een adequaat aantal batterijen dient u rekening te houden met de volgende zaken:

- Advies van een zorgverlener over de gebruiksduur van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator.
- Informatie van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de verwachte duur van de vlucht en daarnaast eventuele tussenstops en onverwachte vertragingen.

*BELANGRIJK: mogelijk vliegt u met meerdere vluchten of luchtvaartmaatschappijen, waarbij de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator tussen de vluchten door ook langdurig op de grond wordt gebruikt.*

- Informatie uit de gebruikershandleiding van de Zen-O lite™ over de verwachte gebruiksduur van batterijvoeding.

*BELANGRIJK: u mag er nooit op vertrouwen dat tijdens een vlucht elektrische voeding beschikbaar is aan boord van het vliegtuig.*

- De vereisten van luchtvaartmaatschappijen voor het meenemen van een bepaalde hoeveelheid batterijen zijn meestal te vinden op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

*BELANGRIJK: luchtvaartmaatschappijen kunnen u verplichten voldoende batterijen mee te brengen voor ten minste 150% van de verwachte maximale vluchtduur.*

#### 8.1.4. Documentatie

U bent verantwoordelijk voor de bediening van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator aan boord van het vliegtuig. Om die reden adviseert de FAA aan passagiers om minimaal deze gebruikershandleiding en eventuele andere schriftelijke informatie mee te nemen die uw zorgverlener heeft verstrekt over de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator en het gebruik van dit apparaat.

#### 8.1.5. Doktersverklaring

Een luchtvaartmaatschappij kan een medische verklaring vereisen van een passagier met een beperking, als er sprake is van redelijke twijfel of de betreffende persoon de vlucht veilig kan voltooien zonder buitengewone medische zorg nodig te hebben tijdens de vlucht. Een luchtvaartmaatschappij kan ook een medische verklaring vereisen van een persoon die tijdens een vlucht medische zuurstof nodig heeft. De FAA verplicht passagiers **niet** om een doktersverklaring te verkrijgen en deze te tonen aan de luchtvaartmaatschappij of gezagvoerder voorafgaand aan het gebruik van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator aan boord van het vliegtuig.

#### 8.1.6. Reservebatterijen

Beschadiging en kortsluiting van batterijen kan leiden tot oververhitting van de batterij en brand. Dit kan vervolgens leiden tot persoonlijk letsel van passagiers en in het ergste geval voor bepaalde batterijtypen tot een catastrofale brand in het passagierscompartiment. Reservelithiumbatterijen die meegebracht worden aan boord van een vliegtuig moeten daarom afzonderlijk worden beschermd tegen kortsluiting door ze in de originele retailverpakking te plaatsen, door blootliggende batterijpolen af te dekken met tape of door elke batterij in een afzonderlijke plastic zak/beschermend etui te plaatsen.

***BELANGRIJK:** reservelithiumbatterijen mogen niet worden meegenomen als ruimbagage aan boord van een vliegtuig.*

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle reservebatterijen die worden meegenomen in de handbagage op de juiste wijze zijn verpakt. Leveranciers van Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrators, sommige luchtvaartmaatschappijen en vrachtvervoerders die zijn gespecialiseerd in verzending van kleine verpakkingen kunnen u mogelijk deze verpakkingsservice bieden.

## 8.2. Boarding en In-flight informatie

### 8.2.1. Handbagage

Uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is een hulpmiddel. Daarom mogen luchtvaartmaatschappijen bij de uitvoering van hun handbagagebeleid de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator niet meetellen voor het maximale aantal items dat meegenomen mag worden naar de cabine door een relevante persoon met een beperking.

*BELANGRIJK: een tas met extra batterijen die nodig is voor de voeding van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan ook worden beschouwd als een hulpmiddel. Er gelden echter wel beperkingen voor het meebrengen van batterijen. Voor uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is de wattuurwaarde (Wh) minder dan 100 Wh per batterij.*

### 8.2.2. Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator als ruimbagage

Uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan worden meegebracht aan boord van een vliegtuig als handbagage of als ruimbagage. **Reservelithiumbatterijen mogen echter niet worden meegenomen als ruimbagage aan boord van een vliegtuig.**

### 8.2.3. Overwegingen voor het plaatsen en opbergen van uw Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator

Voor de efficiënte werking van een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator mag het lucht-/inlaatfilter tijdens gebruik niet worden geblokkeerd. Het gebied rond de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator moet daarom vrij zijn van dekens, jassen en andere handbagage die het lucht-/inlaatfilter kan blokkeren. Als het lucht-/inlaatfilter is geblokkeerd, gebeuren er twee dingen. Ten eerste wordt u gewaarschuwd door waarschuwinglampjes en/of hoorbare alarmen dat de zuurstofconcentratie in de uitvoer van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator onvoldoende is. Ten tweede loopt de temperatuur van de interne componenten van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator op naar een bepaalde limiet omdat de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator nog steeds probeert zuurstof te leveren. De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator wordt dan automatisch uitgeschakeld om oververhitting van het apparaat te voorkomen. U wordt hiervoor gewaarschuwd door waarschuwinglampjes en/of hoorbare alarmen.

**Plaatsing van Zen-O lite™ aan boord van een vliegtuig** De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator moet worden geplaatst onder de stoel voor u, zodat u of de steward(ess) de waarschuwinglampjes kan zien en/of de hoorbare alarmen kan horen. Als u het apparaat direct onder uw stoel plaatst of in een gesloten bagagecompartiment, kunt u de waarschuwinglampjes niet zien en mogelijk ook de hoorbare alarmen niet horen. Andere plaatsingslocaties kunnen acceptabel zijn, afhankelijk van het oordeel van de steward(ess).

NL

#### 8.2.4. Stoelbeperkingen voor passagiers die van plan zijn een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator te gebruiken aan boord van een vliegtuig

**Stoelen bij de uitgang:** de internationale richtlijnen voor vliegtuigen verbieden passagiers die gebruikmaken van een hulpmiddel, waaronder Zen-O lite™, om gebruik te maken van een stoel bij de uitgang van het vliegtuig.

**Opbergen van bagage:** tijdens verplaatsingsbewegingen op de grond (wegrijden bij de gate en taxiën), moet de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator op de juiste wijze zijn opgeborgen, zodat het apparaat niet de toegang beperkt tot een uitgang of het gangpad in het passagierscompartiment. Er kunnen aanvullende stoelbeperkingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan deze veiligheidsregels van de FAA. Voorbeeld:

1. Sommige stoelen in een vliegtuig, zoals stoelen tegen een scheidingswand, hebben mogelijk geen goedgekeurde opbergruimte voor een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator tijdens verplaatsingen op de grond, opstijgen en landen. De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator kan hierdoor mogelijk niet op de juiste wijze worden opgeborgen tijdens deze fasen van de vlucht als de gebruiker van de Zen-O lite™ een dergelijke stoel bezet. In dat geval kan sprake zijn van een stoelbeperking.
2. Tijdens bewegingen op de grond, opstijgen en landen mag de neuscanuleslang die wordt gebruikt voor de levering van zuurstof vanuit een correct opgeborgen Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator niet zodanig over een stoelenrij lopen, dat passagiers geen ongehinderde toegang meer hebben of kunnen struikelen bij een evacuatie. U mag de toegang van andere passagiers tijdens deze vluchtfasen niet beperken. In dat geval kan een aanvullende stoelbeperking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een veiligheidsregel van de FAA. Als bijvoorbeeld alle stoelen in een rij bezet zijn, is de juiste stoel voor iemand die een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator gebruikt een stoel bij het raam.
3. Een luchtvaartmaatschappij mag alleen stoelbeperkingen opstellen op basis van een veiligheidsregel van de FAA. Hierboven vindt u een aantal voorbeelden van scenario's om rekening mee te houden. Het is geen uitputtende lijst.

*BELANGRIJK: een algemene beleidsregel van een luchtvaartmaatschappij dat alle passagiers die met een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator aan boord gaan van een vliegtuig, een stoel bij het raam moeten krijgen, zonder rekening te houden met de specifieke omstandigheden, zou inconsistent zijn met de FAA-vereisten.*

#### 8.2.5. Verlies van de cabinedruk

Als de cabinedruk daalt, vormt het gebruik van een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator geen gevaar. In geval van verlies van cabinedruk (snel of langzaam) dient u echter gebruik te maken van de zuurstofmaskers die beschikbaar zijn tot het vliegtuig stabiliseert.

### 8.2.6. Gebruik van elektrische voeding van het vliegtuig

Luchtvaartmaatschappijen zijn niet verplicht om elektrische voeding van het vliegtuig beschikbaar te stellen aan een gebruiker van een Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator. De elektrische stopcontacten aan boord van een vliegtuig worden beschouwd als niet-essentiële apparatuur en zijn niet vereist op grond van de toepasselijke certificerings- of operationele regels. Bovendien kan het bij elektrische storingen in de vliegtuigsystemen noodzakelijk worden om de voedingsbron van deze stopcontacten uit te schakelen op de grond of tijdens de vlucht, met het oog op de veiligheid tijdens de vlucht. Om deze reden mag de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator aan boord van het vliegtuig alleen worden gebruikt met batterijvoeding. **U mag er nooit op vertrouwen dat tijdens een vlucht elektrische voeding beschikbaar is aan boord van het vliegtuig.**

### 8.2.7. Roken

Roken (inclusief e-sigaretten) tijdens zuurstoftherapie is gevaarlijk en zal waarschijnlijk resulteren in ernstig letsel bij of overlijden van de patiënt en anderen door brand. Sta geen roken of open vlammen toe binnen 3 meter van de draagbare zuurstofconcentrator of accessoires die zuurstof bevatten.

### 8.3. Vereisten van de Transportation Security Administration (TSA)

Gedetailleerde informatie die relevant is voor passagiers met ademhalingsapparaten, waaronder Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrators kunnen worden verkregen van de TSA op <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

#### **De volgende algemene overwegingen met betrekking tot veiligheidscontroles zijn van toepassing op Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrators:**

1. De limiet van één handbagage-item en één persoonlijk item (zoals bijvoorbeeld een handtas, aktetas of laptotas) is niet van toepassing op medische benodigdheden, apparatuur, mobiliteitshulpmiddelen en/of hulpmiddelen die worden gedragen door en/of gebruikt door een persoon met een beperking.
2. Als een persoon medische documentatie heeft over zijn of haar medische toestand of beperking, kan hij of zij deze informatie laten zien aan de controlemedewerker om deze op de hoogte te brengen van de situatie. Deze documentatie is niet vereist en stelt iemand niet vrij van veiligheidscontroles.

## 9. Alarmindicatoren

Als de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator een alarmconditie detecteert, dan wordt het alarm binnen 10 seconden visueel en hoorbaar weergegeven. Er zijn vier alarmniveaus: kritieke hoge prioriteit, hoge prioriteit, gemiddelde prioriteit en lage prioriteit.

Elk niveau wordt anders aangegeven door het scherm met achtergrondverlichting; gele en rode leds; en een zoemer, zoals hieronder wordt aangegeven. In elk geval zullen het alarmbericht en de voedingsstatus de huidige weergave opheffen.

*BELANGRIJK: Alle alarmcondities en parameters zijn vooraf in de fabriek ingesteld; condities en parameters kunnen niet worden veranderd of aangepast door de gebruiker.*

*BELANGRIJK: Het alarmsysteem wordt getest tijdens de opstartprocedure. Alle alarmlampjes moeten kort gaan branden en de hoorbare alarmindicator moet een tijrtoon laten horen.*

| Hoorbare toon                      | Visuele indicatoren   | Visuele indicatie  | Demp tijd  |
|------------------------------------|---|--|------------|
| <b>Kritiek met hoge prioriteit</b> | Tien pieptonen per burst, burst wordt elke 3 seconden herhaald. | Continu brandende rode led en apparaat wordt automatisch uitgeschakeld | 20 minuten |
| <b>Hoge prioriteit</b>             | Tien pieptonen per burst, burst wordt elke 3 seconden herhaald. | Knipperende rode led   | 20 minuten |
| <b>Gemiddelde prioriteit</b>       | Drie pieptonen per burst, burst wordt elke 8 seconden herhaald. | Knipperende gele led   | 8 uur      |
| <b>Lage prioriteit</b>             | Drie pieptonen per burst, burst wordt elke 10 minuten herhaald. | Continu brandende gele led   | 24 uur     |

*BELANGRIJK: Als zich tegelijkertijd twee alarmcondities voordoen, dan wordt het alarm met de hoogste prioriteit aangegeven. Als zich tegelijkertijd twee of meer alarmcondities met dezelfde prioriteit voordoen, dan wordt de meest recente weergegeven.*

*BELANGRIJK: De meest recente alarmen die door het apparaat zijn weergegeven, worden geregistreerd voor referentie door onderhoudspersoneel. Dit logboek blijft bewaard, zelfs als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stroom om enige andere reden is uitgevallen.*

*BELANGRIJK: Als de dempknop wordt ingedrukt voorafgaand aan een alarmconditie (bijvoorbeeld om het apparaat te dempen in een bioscoop), dan zullen kritieke alarmen met hoge prioriteit en alarmen met hoge prioriteit de dempfunctie opheffen; alarmen met gemiddelde en lage prioriteit zullen gedurende acht uur worden gedempt vanaf het moment dat de knop is ingedrukt.*

Druk de dempknop uit om het laatste alarm met hoge prioriteit weer te geven. Druk de dempknop weer in om de timer van acht uur te resetten.

## 9.1. Alarmen

Wanneer de concentrator een alarm laat horen, wordt een bijbehorend bericht op het scherm weergegeven. Neem de benodigde maatregelen zoals weergegeven in de tabellen hieronder.

### 9.1.1. Kritieke alarmen met hoge prioriteit

**BELANGRIJK:** Deze alarmen schakelen het apparaat onmiddellijk uit.

| Alarmbericht  | Beschrijving                            | Actie  |
|---------------|---|--|
| Laad batt.    | Batterij moet opgeladen worden.         | Laad het batterijpak op door dit op de voeding aan te sluiten. Zorg dat alle verbindingen stevig vastzitten. |
| Ong. batt.    | Batterij is geen goedgekeurde batterij. | Vervang de batterij door een goedgekeurde batterij.  |
| XX: Dienstc.* | Service vereist.                        | Neem contact op met uw leverancier.  |

\*Waarde: 01-20

NL

### 9.1.2. Alarmen met hoge prioriteit

**BELANGRIJK:** Bij deze alarmen kan het apparaat blijven werken.

| Alarmbericht  | Beschrijving   | Actie   |
|---------------|--|---|
| Cont. Vent.   | Het apparaat kan de zuurstofconcentratie niet handhaven.         | Controleer of de luchtinlaat/-uitlaat niet is geblokkeerd. Als het alarm blijft aanhouden, neemt u contact op met uw leverancier.                       |
| batt.opladen  | Geschatte gebruiksduur van de batterij is minder dan 17 minuten. | Laad het batterijpak op door dit op de voeding aan te sluiten.<br><b>BELANGRIJK:</b> Het bericht wordt automatisch gewist na aansluiting op de voeding. |
| XX: Dienstc.* | Service vereist.   | Neem contact op met uw leverancier.   |

\*Waarde: 21-50

### 9.1.3. Alarmen met gemiddelde prioriteit

| Alarmbericht         | Beschrijving                                       | Actie  |
|----------------------|--|--|
| <b>Contr. slang</b>  | Geen ademhaling gedetecteerd gedurende 15 seconden | Controleer de canuleaansluiting. Zorg dat u door uw neus ademhaalt, als het alarm blijft aanhouden, neemt u contact op met uw leverancier.<br><i>BELANGRIJK: Dit bericht wordt automatisch gewist wanneer een ademhaling wordt gedetecteerd.</i> |
| <b>XX: Dienstc.*</b> | Service vereist.                                   | Neem contact op met uw leverancier.  |

\*Waarde: 51-70

### 9.1.4. Alarmen met Lage Prioriteit


| Alarmbericht         | Beschrijving     | Actie                               |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>XX: Dienstc.*</b> | Service vereist. | Neem contact op met uw leverancier. |

\*Waarde: 71-99

### 9.1.5. Overige berichten



| Bericht             | Beschrijving  | Actie                     |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Lader Verwd.</b> | De externe voeding is losgekoppeld; het apparaat werkt nu op batterijvoeding. | Er is geen actie vereist. |
| <b>Schakelt uit</b> | Dit wordt weergegeven terwijl het apparaat de afsluitprocedure doorloopt.     | Er is geen actie vereist. |



| Bericht  | Beschrijving   | Actie  |
|--|--|--|
| <b>Geen batt.</b>  | Dit wordt weergegeven als het batterijmenu-item wanneer er geen communicatie met de batterij is.   | Controleer of het batterijpak juist is geplaatst. Neem contact op met uw leverancier als de batterij volledig is geplaatst en het bericht langer dan 30 seconden wordt weergegeven.                          |
| <b>Batt NN%</b>  | Weergegeven percentage van de batterijlading als dit minimaal 10% is en er geen externe voedingsbron is aangesloten.   | Dit bericht wordt weergegeven wanneer de batterijknop is ingedrukt.  |
| <b>Laden NN%</b>  | NN% geeft het huidige batterijlaadniveau weer.<br>Dit wordt weergegeven wanneer de batterijlading meer is dan 10% maar minder is dan 100% en er een externe voedingsbron is aangesloten.   | Dit bericht wordt weergegeven wanneer de batterijknop is ingedrukt.  |
| <b>Batt. laadt</b>   | De batterijlading is minder dan 10% en er is een externe voedingsbron aangesloten.   | Dit bericht wordt weergegeven wanneer de batterijknop is ingedrukt.  |
| <b>Adem-freq XX</b>  | De gemiddelde ademhalingsnelheid van de patiënt wanneer het apparaat de maximale hoeveelheid zuurstof toedient en de bolus is verminderd. Als er geen ademhalingen worden gedetecteerd, wordt de meest recente ademhalingsnelheid weergegeven. | Verminderd activiteitsniveau. Controleer of de luchtinlaat/-uitlaat niet is geblokkeerd.<br><i>BELANGRIJK: Het bericht wordt automatisch gewist wanneer het apparaat naar de normale werking terugkeert.</i> |
| <b>Alarm gewist</b>  | Een eerder ingesteld alarm is automatisch gewist.  | Er is geen actie vereist.  |

NL

## 10 Problemen oplossen


| Probleem   | Mogelijke oorzaak  | Oplossing  |
|--|--|--|
| Het systeem valt uit.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het systeem is mogelijk losgekoppeld van de voedingsbron.</li> <li>• Het systeem is mogelijk uitgeschakeld.</li> <li>• Er is een kritiek alarm met hoge prioriteit opgetreden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het systeem stevig op de voedingsbron is aangesloten.</li> <li>• Controleer of het systeem is ingeschakeld.</li> <li>• Controleer het systeem op beschadiging of blootstelling aan vloeistoffen.</li> <li>• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw leverancier.</li> </ul>  |
| Bij elke alarmtoon brandt er een  of  LED. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie hoofdstuk 9. Alarmindicatoren.</li> </ul>   | Zie hoofdstuk 9. Alarmindicatoren.   |
| Batterij wordt niet opgeladen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voeding is niet aangesloten.</li> <li>• De batterij is niet volledig geplaatst.</li> <li>• De batterij is onbruikbaar.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de aansluitingen om er zeker van te zijn dat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• De ronde stopcontacten stevig in het apparaat vastzitten.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het netsnoer op de wisselstroom/ gelijkstroom is aangesloten of dat de gelijkstroomadapter is aangesloten, indien van toepassing.</li> <li>• Het netsnoer op de wandcontactdoos is aangesloten, indien van toepassing.</li> <li>• De wandcontactdoos stroom krijgt.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Controleer of de batterij volledig is geplaatst en het batterijklepje stevig vastzit.</li> <li>• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw leverancier.</li> </ul> |

NL

## 11. Onderhoud en reiniging

### 11.1. Routinematig onderhoud

 **WAARSCHUWING:** Gebruik geen smeermiddelen op dit apparaat of enige van de bijbehorende accessoires.


 **VOORZORGSMAATREGEL:** Vervang de canule regelmatig. Raadpleeg uw leverancier of arts om te bepalen hoe vaak de canule moet worden vervangen.


Het apparaat zal met een alarm aangeven wanneer een filter of apparaat moet worden gereinigd of vervangen. (Zie ook hoofdstuk 10. Problemen oplossen.)

*BELANGRIJK: De canule en het patiëntfilter kunnen verontreinigd raken door de patiënt, ga voorzichtig te werk bij het hanteren van deze onderdelen.*

### 11.2. Buitenkant reinigen

 **WAARSCHUWING:** Dompel dit apparaat niet onder in vloeistoffen. Niet blootstellen aan water of neerslag. Niet blootstellen aan stoffige omstandigheden.

 **VOORZORGSMAATREGEL:** Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan de middelen die in deze handleiding worden gespecificeerd. Laat de reinigungsoplossing voorafgaand aan het gebruik opdrogen op het gereinigde oppervlak.

 **VOORZORGSMAATREGEL:** Koppel dit apparaat voorafgaand aan de reiniging altijd los van de voeding en schakel het uit.

Reinig de buitenkant met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met zeepwater of met antibacteriële doekjes (oplossing van 70% isopropylalcohol).

*BELANGRIJK: De buitenkant van het apparaat moet wekelijks worden gereinigd, accessoires moeten indien nodig worden gereinigd. Het toestel dient extern gereinigd te worden voordat deze wordt uitgeleverd aan een nieuwe patient. De buitenkant van het toestel moet ook schoon gemaakt worden, alvorens deze aan een nieuwe patient word uitgeleverd waarbij tevens opgemerkt dient te worden dat het wisselen van de patient uitgangs filter aangeraden wordt.*

Neus cannule: Raadpleeg de originele gebruikshandleiding voor het schoonmaken van de neus cannule.

### 11.3. Gebruiksduur

De verwachte gebruiksduur van het apparaat is 5 jaar, met uitzondering van de zeefbedden. De gebruiksduur van de zeefbedden is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Vervang ze indien nodig, dit wordt door het alarm die de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen controleren aangegeven. Als de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen niet zijn geblokkeerd en het alarm luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen controleren blijft aanhouden, neem dan contact op met uw leverancier voor instructies voor het vervangen van de zeefbedden.

## 11.4. Service aansluiting

De service aansluiting is overeenkomstig met de service unit (TF-02091 (5.1 V DC maximaal) en alleen maar voor service doeleinden te gebruiken.

## 12 Reparatie en afvoer van het apparaat

### 12.1. Reparatie

Probeer het apparaat niet te repareren. Neem contact op met uw zorgverlener of leverancier voor ondersteuning (zie hoofdstuk 10. Problemen oplossen).

De zeef buizen mogen door de patient vervangen worden zoals bepaald door de thuiszorg leverancier of distributeur. Andere reparaties en/of onderhouds werkzaamheden dienen door getraind personeel uitgevoerd worden.

### 12.2. Zeef buizen vervangings instructies.

1. Zet het toestel uit en ontkoppel deze van de wissel of gelijk stroom bron indien deze daar op aangesloten is.
2. Haal het toestel uit de draagtas.
3. Haal de batterijen uit het toestel
4. Druk op de 4 knoppen aan de bovenzijde van het toestel om de afdek kap te verwijderen zoals getoond in Fig. 9.
5. Gebruik het met de zeef-buis meegeleverde gereedschap om de zeef-buis al draaiende tegen de wijzers van de klok in, met 3 of 4 slagen los te draaien terwijl deze vanaf de onderkant naar boven gedrukt worden.
6. Herhaal bovenstaande voor de andere zeef-buis.
7. Verwijder de verpakking van de vervangings zeef-buizen. Nadat de bescherm stop verwijderd is dient de zeef-buis direct geplaatst te worden. Let op: Laat de vervangings zeef-buis niet onbeheerd rondslingeren.
8. Installeer de vervangings zeef-buis met de draad naar boven zoals getoond in Fig. 10.
9. Draai de zeef handvast.
10. Gebruik het meegeleverde gereedschap om dit te bewerkstelligen.

**Let op: Draai de zeef-buizen niet te hard aan!**



Fig. 8













Fig. 9



Fig. 10

11. Herhaal deze stappen om de andere zeef-buizen ook te vervangen.
12. Plaats de afdek kap terug op het toestel zodat alle vier de druk-knoppen in de gaatjes klikken.
13. Plaats de batterijen terug in het daarvoor bestemde compartiment.
14. Sluit het toestel aan op de wissel of gelijk stroom bron.

### ZET HET TOESTEL NIET AAN!

15. Druk tegelijk op „alarm geluid“  en „batterij“  toets totdat op het display „lektest“ verschijnt.
  - a. Gedurende dit proces worden rechts van de „lektest“ cijfers getoond.
  - b. Als de test klaar is, zal het display „Test klaar“ of „Test gefaald“ aangeven.
    - i „Test klaar“ druk op de batterij knop  om het programma te verlaten en ga verder naar stap 16.
    - ii „Test gefaald“ druk op de batterij knop  t om het programma te verlaten en herhaal de stappen 4-15.
16. Wanneer de lektest in orde bevonden is moet de uren teller op het toestel gereset worden.
  - a. Start uw Zen-O™ lite draagbare zuurstof concentrator.
  - b. Druk tegelijk op de  en de  knoppen totdat „Diagnose“ is te zien in het display.
  - c. Druk te drukken op de  en  knoppen in het diagnose menu totdat „XXXH zeef“ is te zien, waar XXXX het aantal uren van de vorige zeef-buizen.
  - d. Druk op „Alarm geluid uit“  totdat de urenteller „0H zeef“ laat zien.
  - e. Druk op de batterij knop  om het diagnose menu te verlaten.
  - f. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

*Belangrijk: Neem contact op met je zuurstof leverancier of distributeur als het toestel blijft weigeren.*

### 12.3. Afvoer

- Neem contact op met uw leverancier voor de afvoer van het apparaat.
- Voer de batterij af volgens de lokale voorschriften of neem contact op met uw leverancier.

## 13 Garantie

De garantie op het apparaat is vastgelegd op maximaal 3 jaar vanaf de productie datum, de zeefbuizen echter hebben een maximale garantie van 1 jaar.

De standaard garantie is van toepassing op de producten, benoemd en gehanteerd in de gebruiks handleiding en in overeenstemming met de algemene GMP richtlijnen.

## **14** Handelsmerken en afstandsverklaring

### **14.1. Handelsmerk**

Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

### **14.2. Afstandsverklaring**

De informatie in dit document is nauwkeurig onderzocht en wordt betrouwbaar geacht. Daarnaast behoudt de fabrikant zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten om de leesbaarheid, functie of het ontwerp te verbeteren. De fabrikant draagt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van enig product of circuit beschreven in deze informatie; en geeft tevens geen enkele licentie onder octrooirechten of de rechten van derden.

#### **14.2.1. Dit document**

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document bevat bedrijfseigen informatie waarop copyright rust. Niets uit dit document mag op enige wijze worden gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk (met uitzondering van korte fragmenten uit evaluaties en wetenschappelijke publicaties), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Zorg ervoor dat u alle bij het product meegeleverde handleidingen nauwkeurig hebt gelezen en begrepen.

#### **Voor hulp**

Als u vragen hebt over de informatie in deze instructies of over het veilige gebruik van dit apparaat, neemt u contact op met uw zorgverlener of leverancier.

## 15 Technische beschrijving

|   |   |
|---|---|
| <b>Afmetingen:</b>                        | 249 mm (B), 97 mm (D), 231 mm (H)<br>9.8" (B), 3.8" (D), 9.1" (H)   |
| <b>Gewicht apparaat:</b>                  | 2.5 kg (5.5 lbs) (zonder draagtas en wagentje)  |
| <b>Vereiste voeding:</b>                  | Wisselstroomadapter: 100-240V wisselstroom (+/- 10%), 50-60 Hz in, 24V gelijkstroom, 5.0A uit. Gelijkstroomadapter: 11.5-16V DC gelijkstroom in, 24V, 5.0A uit.<br><i>(Belangrijk: zie de lijst van accessoires voor uitvoering- en artikel nummers voor wissel en gelijkstroom voedings adapters en sets.)</i> |
| <b>Concentratie:</b>                      | 87% - 96% bij alle stroomsnelheden, over gebruiksomstandigheden   |
| <b>Instelling:</b>                        | Door de gebruiker aan te passen in stappen van 0,5 van 1,0 tot 5.0.   |
| <b>Inspiratietrigger-gevoeligheid:</b>    | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O   |
| <b>Indicator voor instelling:</b>         | LCD-scherm  |
| <b>Maximale zuurstofafvoerdruk:</b>       | 20.5 psi  |
| <b>Vochtigheidsbereik:</b>                | 5% to 93% ± 2% niet-condenserend  |
| <b>Ontkoppelen van het apparaat:</b>      | Voedings adapter ingangs aansluiting.   |
| <b>Gebruikshoogte:</b>                    | 0' to 13,000' (0m to 4,000m) relative to sea level, 1060 down to 575 mbar   |
| <b>Geluidsdruk niveau:</b>                | 44 dBA bij instelling 2 en 18 BPM<br>(indien gemeten op een afstand van 1 aan de voorkant van het apparaat)<br><br>Maximum Geluids druk niveau van 52,5 dBA vlg ISO 8060-2-69v  |
| <b>Type bescherming (elektrisch):</b>     | Klasse II   |
| <b>Mate van bescherming (elektrisch):</b> | Type BF   |

## Technische beschrijving (vervolg)

|  |   |
|--|---|
| <b>Mate van bescherming (water):</b>                           | IP22 in draagtas (bescherming tegen kleine voorwerpen en gekanteld druppelend water)<br>IP20 uit de draagtas (bescherming tegen kleine voorwerpen en geen bescherming tegen water dat de concentrator binnendringt) |
| <b>Mate van veiligheid (ontvlambaar anesthetisch mengsel):</b> | Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetische mengsels  |
| <b>Bedrijfstemperatuur:</b>                                    | Continue werking bij temperaturen tussen 5 °C (41 °F) en 40°C (104 °F).   |
| <b>Opslagtemperatuur:</b>                                      | Tussen -20 °C (-4 °F) en 60 °C (140 °F).  |
| <b>Bereik alarmgeluidsdruk:</b>                                | 65 tot 85 dB(A)   |
| <b>Alarmsysteemvertragingen:</b>                               | Minder dan 10 seconden na detectie (lage zuurstofalarmen als zuurstof minder is dan 82% volumefractie bij gespecificeerde omgevingsomstandigheden)  |
| <b>Indicator voor zuurstofconcentrator:</b>                    | Alarm met hoge prioriteit dat aangeeft wanneer de zuurstofconcentratie onder de 82% komt  |

## Bolusgrootte pulsmodus (ml/ademhaling) versus instelling en ademhalingsnelheid

| Ademhalingen per minuut | Instelling |    |      |      |      |
|-------------------------|------------|----|------|------|------|
|                         | 1          | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                      | 11         | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                      | 11         | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                      | 11         | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                      | 11         | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                      | 11         | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                      | 11         | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*Alle waarden ± 15% over alle gebruiksomstandigheden*



## 15.1. Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Medische elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (radiofrequente communicatieapparatuur) kan apparaten als de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator beïnvloeden. Om die reden mag het apparaat niet naast andere apparatuur worden gebruikt. Als dit niet praktisch is, observeer het apparaat dan om er zeker van te zijn dat het altijd goed functioneert.

### 15.1.1. Richtlijnen en verklaring van de fabrikant: Elektromagnetische emissies

De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de concentrator dient ervoor te zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

| Emisietest  | Naleving | Elektromagnetische omgeving/richtlijn  |
|---|----------|--|
| RF-emissies<br>CISPR 11                             | Groep 1  | De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. De RF-emissies zijn derhalve zeer laag en het is niet waarschijnlijk dat deze interferentie kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur in de buurt. |
| RF-emissies<br>CISPR 11                             | Klasse B | De concentrator is geschikt voor gebruik in alle faciliteiten, met inbegrip van woongebouwen en andere gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen met woondoeleinden van stroom voorziet.                        |
| Harmonische emissies<br>IEC 61000-3-2               | Klasse A |  |
| Spanningsvariaties/flikkeremissies<br>IEC 61000-3-3 | Voldoet  |  |

NL

### 15.1.2. Richtlijnen en verklaring van de fabrikant: Elektromagnetische immuiniteit

Zen-O lite™ is bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de concentrator dient ervoor te zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

| Immunitestest  | IEC 60601-testniveau  | Nalevingsniveau   | Elektromagnetische omgeving/richtlijn  |
|--|---|---|--|
| Elektrostatische ontlading (ESD)<br>IEC 61000-4-2  | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air   | ± 2, 4, 6, 8kV contact<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air   | Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn.<br>Als vloeren zijn bedekt met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% zijn.   |
| Snelle elektrische transiënt/burst<br>IEC 61000-4-4  | ± 2 kV voor voedingslijnen<br>± 1kV voor ingangs-/uitgangslijnen  | ± 2 kV voor voedingslijnen<br>± 1kV voor ingangs-/uitgangslijnen  | De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een normale commerciële of ziekenhuisomgeving.   |
| Stroomstoot<br>IEC 61000-4-5   | ± 1kV differentiële modus<br>± 2kV algemene modus   | ± 1kV differentiële modus<br>± 2kV algemene modus   | De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een normale commerciële of ziekenhuisomgeving.   |
| Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsverschillen op stroomtoevoerlijnen<br>IEC 61000-4-11 | <5% UT (>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus<br>40% UT (60% daling in UT) gedurende 5 cycli<br>70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cycli<br><5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 seconden | <5% UT (>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus<br>40% UT (60% daling in UT) gedurende 5 cycli<br>70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cycli<br><5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 seconden | De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een normale commerciële of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator constante werking vereist tijdens stroomonderbrekingen, is het aanbevolen om het apparaat te voeden via een ononderbreekbare stroombron (UPS) of een batterij. |

NL

| Immunitiestest   | IEC 60601-testniveau                       | Nalevingsniveau          | Elektromagnetische omgeving/richtlijn   |
|--|--|--------------------------|---|
| Magnetisch veld met vermogensfrequentie (50/60 Hz)<br>IEC 61000-4-8  | 30 A/m                                     | 30 A/m                   | De vermogensfrequentie van magnetische velden moet op het niveau liggen van een normale locatie in een normale commerciële of ziekenhuisomgeving  |
| Geleide RF IEC 61000-4-6   | 3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz; 6Vrms ISM Bands | 3 Vrms (6Vrms ISM Bands) | Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig onderdeel van het apparaat worden gebruikt, waaronder kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend uit de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand:<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz tot 80 MHz<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz<br>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz tot 2,5 GHz<br>waarbij P het maximaal toelaatbare uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).<br>De door vaste RF-zenders uitgestraalde veldsterkten, zoals vastgesteld door elektromagnetische meting van de locatie, moeten lager zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik.<br>Storingen kunnen optreden in de omgeving van apparatuur die van het volgende symbool is voorzien: |
| Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3   | 10 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz                  | 10 V/m                   |   |
| <p><i>BELANGRIJK: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoge frequentiebereik.</i></p> <p><i>BELANGRIJK: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, voorwerpen en personen.</i></p> <p><sup>a</sup>Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele telefoons/draadloze telefoons) en landmobiele radio's, amateurradio, AM en FM radio- en televisie-uitzendingen, kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, dient een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse te worden overwogen. Wanneer op de gebruikslocatie van de Zen-O lite™ de gemeten veldsterkte het bovenvermelde van toepassing zijnde radiofrequente compliantieniveau overschrijdt, dient te worden gecontroleerd of de concentrator normaal werkt. Als het systeem niet normaal werkt, dienen mogelijk aanvullende maatregelen genomen te worden zoals het opnieuw richten of verplaatsen van de concentrator.</p> <p><sup>b</sup>Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager dan 6 V/m zijn.</p> |  |                          |   |

NL



### 15.1.3. Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator

De Zen-O lite™ draagbare zuurstofconcentrator is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De gebruiker van de monitor kan elektromagnetische storingen helpen voorkomen door de hieronder aanbevolen minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de monitor te handhaven, in overeenstemming met het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.







| Nominale maximale uitgangsvermogen zender (W) | Scheidingsafstand (m) in overeenstemming met de frequentie van de zender |   |  |
|---|--|---|--|
|   | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                                  | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01  | 0.12   | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1   | 0.38   | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10  | 3.8  | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100   | 12   | 12                                      | 23                                       |

Voor zenders waarvan het maximale uitgangsvermogen hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand (d) in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.

**BELANGRIJK:** Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hoge frequentiebereik.  
**BELANGRIJK:** Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, voorwerpen en personen.

NL

## 16 Verklarende woordenlijst – verklaring van de symbolen op de verpakking en etikettering
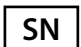
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Zie instructies voorafgaand aan het gebruik               |  | Limiet atmosferische druk voor gebruik 0 voet tot 13 000 voet (0 tot 4 000 m) |
|  | Type BF conform de eisen inzake de elektrische veiligheid |  | Opslagtemperatuurlimiet –20 tot 60 °C (–4 tot 140 °F)                         |
|  | Serienummer   |  | Vochtigheidslimiet 5% tot 93% ± 2% niet-condenserend                          |

## Verklarende woordenlijst (vervolg)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|                       | Catalogusnummer   |   | Voorzichtig behandelen  |
|                       | Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit product alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht |   | Productiedatum  |
|                       | Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Zie hoofdstuk 6.  |   | Fabrikant   |
| <br>No Open<br>Flames | Geen open vuur wanneer het apparaat wordt gebruikt en niet verassen   | <br>Do not<br>get wet<br>IP20           | Droog houden (dit symbool verwijst naar de IPX2-classificatie van het apparaat) |
| <br>No<br>Smoking     | Niet roken  |  DISPOSE OF<br>USED BATTERY<br>PROPERLY | Voer de gebruikte batterij op de juiste manier af                               |
|                       | Gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur   |   | Klasse II-symbool   |
|                       | Voldoet aan de toepasselijke EU-richtlijnen inclusief de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen        |   | Geschikt voor homecare gebruik  |

NL



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Gefabriceerd: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Español

## Manual del Usuario: Zen-O lite™ Concentrador de Oxígeno Portátil (Modelo: Rs - 00600)

### Índice

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Introducción</b> .....                          | <b>150</b> |
| 1.1. Información General .....                        | 150        |
| 1.2. Clasificación .....                              | 150        |
| 1.3. Convenciones Terminológicas .....                | 151        |
| <b>2. Uso Previsto</b> .....                          | <b>151</b> |
| <b>3. Instrucciones de Seguridad</b> .....            | <b>152</b> |
| 3.1. Resumen de Advertencias .....                    | 152        |
| 3.2. Resumen de Precauciones .....                    | 153        |
| 3.3. Resumen de Información Importante: .....         | 155        |
| <b>4. Instrucciones y Formación</b> .....             | <b>155</b> |
| <b>5. Descripción del Producto</b> .....              | <b>156</b> |
| 5.1. Descripción Gráfica .....                        | 156        |
| <b>6. Instrucciones Generales Antes de Usar</b> ..... | <b>157</b> |
| 6.1. Lista de Accesorios .....                        | 157        |
| 6.2. Batería .....                                    | 158        |
| 6.3. Cánula Nasal .....                               | 159        |
| <b>7. Empleo del Concentrador</b> .....               | <b>160</b> |
| 7.1. Conexión de la Cánula Nasal .....                | 160        |
| 7.2. Encendido .....                                  | 161        |
| 7.3. Selección del Idioma .....                       | 161        |
| 7.4. Regulación de los Ajustes .....                  | 161        |
| 7.5. Botón de Batería .....                           | 162        |
| 7.6. Respuesta a Alarmas .....                        | 162        |
| 7.7. Apagado .....                                    | 163        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>8. Viajes aéreos con el COP Zen-O lite™:</b> .....  | <b>163</b> |
| 8.1. Preparación del pasajero anterior al vuelo .....  | 163        |
| 8.2. Información sobre el embarque y vuelo. ....   | 165        |
| 8.3. Requisitos de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) ..... | 167        |
| <b>9. Indicadores de Alarma</b> .....  | <b>168</b> |
| 9.1. Alarmas .....   | 169        |
| <b>10. Resolución de Averías</b> .....   | <b>172</b> |
| <b>11. Mantenimiento y Limpieza</b> .....  | <b>173</b> |
| 11.1. Mantenimiento Periódico .....  | 173        |
| 11.2. Limpieza Externa .....   | 173        |
| 11.3. Vida Útil .....  | 173        |
| 11.4. Conector de servicio .....   | 173        |
| <b>12. Reparación y Eliminación del Aparato</b> .....  | <b>174</b> |
| 12.1. Reparación .....   | 174        |
| 12.2. Sustitución de las columnas de zeolita .....   | 174        |
| 12.3. Eliminación .....  | 175        |
| <b>13. Garantía</b> .....  | <b>175</b> |
| <b>14. Marca Registrada y Aviso Legal</b> .....  | <b>176</b> |
| 14.1. Marca Registrada .....   | 176        |
| 14.2. Aviso Legal .....  | 176        |
| <b>15. Descripción Técnica</b> .....   | <b>176</b> |
| 15.1. Información de Compatibilidad Electromagnética .....   | 179        |
| <b>16. Glosario: Significado de Símbolos de Embalaje y Etiquetas</b> .....   | <b>183</b> |

# 1. Introducción

Consulte en este manual las instrucciones detalladas sobre advertencias, precauciones, especificaciones y otra información adicional.

**IMPORTANTE:** Antes de usar el concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ el usuario debe leer el manual completo. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o incluso la muerte. Si tiene dudas sobre la información de este manual del usuario o acerca del manejo seguro de este sistema, póngase en contacto con el distribuidor.

## 1.1. Información General

En este manual del usuario se proporciona información sobre el concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™. Por cuestiones de brevedad, para referirse al concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ se utilizan en ocasiones los términos concentrador, POC, unidad o aparato. Los términos paciente y usuario se utilizan indistintamente.

## 1.2. Clasificación

Este aparato está homologado por un laboratorio de ensayos reconocido internacionalmente, en lo que respecta a descargas eléctricas, incendios y riesgos mecánicos con arreglo a las siguientes normas:

- UNE-EN 60601-1:2008/A11:2012, Equipos Electromédicos - Parte 1: Requisitos Generales para la Seguridad Básica y Funcionamiento Esencial.
- UNE-EN 60601-1-2:2008 CORR:2010, Parte 1-2: Requisitos Generales para la Seguridad Básica y Características de Funcionamiento Esencial. Norma Colateral: Compatibilidad Electromagnética. Requisitos y Ensayos.
- UNE-EN 60601-1-6:2010, Equipos Electromédicos - Parte 1-6: Requisitos Generales para la Seguridad Básica y Funcionamiento Esencial. Norma Colateral: Aptitud de Uso
- UNE-EN 60601-1-8:2008/A1:2013/AC:2014, Equipos Electromédicos - Parte 1-8: Requisitos Generales para la Seguridad Básica y Características de Funcionamiento Esencial. Norma Colateral: Requisitos Generales, Ensayos y Guía para los Sistemas de Alarma en Equipos Electromédicos y Sistemas Electromédicos.
- UNE-EN 60601-1-11:2010, Equipos Electromédicos - Parte 1-11: Requisitos Generales para la Seguridad Básica y Características de Funcionamiento Esencial. Norma Colateral: Requisitos para el Equipo Electromédico y el Sistema Electromédico Utilizado para el Cuidado en el Entorno Médico del Hogar.
- ISO 80601-2-67:2014: Equipos electromédicos. Parte 2-67: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos economizadores de oxígeno
- UNE-EN ISO 80601-2-69:2015: Equipos electromédicos. Parte 2-69: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos concentradores de oxígeno. (ISO 80601-2-69:2014).
- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Canadian Standard, Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance.



- Directiva de Aparatos Médicos 93/42/CEE.


### Este equipo tiene las siguientes clasificaciones:

- Clase II
- Clase IIa con arreglo a la Directiva de aparatos médicos 93/42/CEE
- Tipo BF
- IP22 con la maleta

### 1.3. Convenciones Terminológicas

En estas instrucciones se ofrecen advertencias, precauciones y observaciones que llama la atención sobre los aspectos más importantes de seguridad y uso del aparato. Para identificar mejor estas cuestiones cuando se mencionan en el texto se utilizan las siguientes convenciones:

 **ADVERTENCIA:** Frases que describen reacciones adversas graves y posibles riesgos para la seguridad.

 **PRECAUCIÓN:** Frases que llaman la atención sobre la información relativa a cualquier precaución especial que se deba tener por parte del médico o el paciente para usar el aparato de forma segura y eficaz.

*IMPORTANTE:* Frases que llama la atención sobre información importante adicional acerca del aparato o de un procedimiento. Frases que proporcionan información suplementaria.

## 2. Uso Previsto

El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ sirve para administrar oxígeno suplementario a pacientes adultos con enfermedades pulmonares crónicas o a cualquier paciente que necesite oxígeno suplementario.

El aparato es portátil, lo que permite al paciente que necesite aporte de oxígeno recibir el tratamiento en su casa, siguiendo la prescripción o las instrucciones clínicas.

Zen-O lite™ no sirve como soporte vital y no es estéril. Se trata de un aparato que solo se debe usar bajo prescripción y diseñado tanto para uso en interior como en exterior. Consulte las condiciones correctas de funcionamiento en el capítulo 15, Descripción Técnica.

**El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ no sirve para las siguientes situaciones:**

- Situaciones de soporte vital
- En entornos quirúrgicos
- Individuos no adultos
- En combinación con anestésicos o materiales inflamables

ES

### 3. Instrucciones de Seguridad



#### 3.1. Resumen de Advertencias

1. El aparato se debe utilizar en su maleta para mantenerlo protegido de la entrada de líquidos, por ejemplo lluvia o derrames.
2. El equipo y las terapias con oxígeno suponen un riesgo de incendio. No se debe utilizar cerca de chispas o llamas desnudas.
3. Puede que los ajustes del concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ RS-00600 no se correspondan con los de un caudal de oxígeno continuo.
4. Los ajustes de otros modelos con marcas de equipos de tratamiento con oxígeno no tienen por qué corresponderse con los ajustes del concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ RS-00600.
5. El viento o las corrientes fuertes de aire pueden afectar a la precisión del suministro del oxígeno.
6. Los pacientes geriátricos o cualquier paciente con dificultades para comunicarse pueden requerir una supervisión adicional para evitar daños.
7. Es peligroso fumar (incluso cigarrillos electrónicos) mientras se está recibiendo tratamiento con oxígeno, porque se pueden producir quemaduras en la cara o incluso la muerte. No se debe fumar ni encender llamas desnudas dentro de la misma estancia en que se encuentra el concentrador de oxígeno portátil o cualquier accesorio con oxígeno. Si va a fumar, debe apagar siempre el concentrador de oxígeno, retirar la cánula y salir de la estancia en la que se encuentre la cánula o el concentrador. Si por cualquier razón no puede salir de la estancia, deberá esperar 10 minutos después de apagar la circulación de oxígeno.
8. Use únicamente lociones con base acuosa, compatibles con el oxígeno antes y durante el tratamiento con oxígeno. No utilice nunca lociones con base de aceites cuando utilice el aparato, para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
9. Las llamas desnudas pueden ser peligrosas mientras se administra el tratamiento de oxígeno, pues se pueden producir incendios fatales. No acerque ninguna llama desnuda a menos de dos metros del concentrador de oxígeno o de cualquier accesorio con oxígeno.
10. El oxígeno facilita la ignición y la propagación de los incendios. No deje la cánula nasal sobre la cama o el sillón mientras el concentrador esté encendido, aunque no se esté usando; puede haber materiales inflamables en presencia de oxígeno. Apague el concentrador cuando no lo esté usando para evitar un exceso de oxígeno en el ambiente.
11. Crítico: Riesgo de explosión. No usar en presencia de anestésicos inflamables.
12. No usar este aparato en presencia de contaminantes o humos.
13. No sumergir el aparato en líquido. No exponer al agua o la precipitación. No exponer

a ambientes polvorientos.

14. No usar el aparato ni accesorio que tenga daños.
15. No usar lubricantes en el aparato ni en ninguno de sus accesorios.
16. El empleo de este aparato a altitudes superiores a 4000 m (13000 pies) o fuera del rango de temperatura de 5 °C (41°F) a 40 °C (104°F), o fuera del rango de humedad de 5 % a 93 % puede afectar negativamente al caudal y al porcentaje de oxígeno, afectando por consiguiente a la calidad del tratamiento. Cuando no se esté usando el aparato se debe guardar en un entorno limpio y seco, entre -20 °C y 60 °C (-4°F y 140°F). El empleo o el almacenamiento en condiciones que no sean las idóneas puede dañar el producto. Consulte la información técnica en el capítulo 15. Descripción Técnica.
17. Antes de usar el aparato, asegúrese siempre de que tiene al menos una pila colocada.
18. Si se siente mal o incómodo mientras usar el aparato, póngase en contacto con su médico o pida asistencia médica inmediatamente.
19. Su servicio de salud o la organización responsable debe verificar la compatibilidad del aparato y de todos los accesorios antes de usarlo. Para garantizar que usted reciba la cantidad de oxígeno indicada para su enfermedad, solamente se deben usar el aparato y los accesorios compatibles verificados después de que su servicio de salud haya determinado o prescrito uno o más ajustes para su caso concreto de nivel de actividad.
20. El cable eléctrico y los tubos presentan riesgos de estrangulación o tropezón. Manténgase alejado de los niños y las mascotas.
21. No desmonte ni modifique el aparato ni ninguno de sus accesorios. No intente realizar ningún tipo de mantenimiento más allá del descrito en el capítulo 10. Resolución de Averías. Si se desmonta el aparato se pueden producir descargas eléctricas y además se invalidará la garantía. Póngase en contacto con el distribuidor para solicitar la asistencia de personal autorizado.
22. Use únicamente recambios recomendados por el fabricante, para garantizar un funcionamiento idóneo y para evitar riesgos de incendio y quemaduras.
23. No intente reparar o realizar cualquier trabajo de mantenimiento mientras el dispositivo está siendo usado por el paciente.



### 3.2. Resumen de Precauciones

1. Mantener alejado de fuentes de calor (chimeneas, estufas, etc.) que pudieran elevar la temperatura en el entorno del aparato por encima de 40 °C (104°F).
2. Puede resultar difícil leer la pantalla cuando hay una iluminación muy brillante (a la luz del sol, iluminación interior, etc.); aléjelo de la luz directa para ver correctamente la pantalla.
3. Mantenga alejado el concentrador de cualquier suciedad u otros elementos sueltos que pudieran bloquear los orificios de entrada de aire.
4. En algunos países solamente se puede adquirir este aparato por prescripción médica. Asegúrese de cumplir la reglamentación local pertinente.

5. El tratamiento con oxígeno no prescrito puede resultar peligroso en ciertas circunstancias. Use este aparato solamente cuando así se lo prescriba un médico.
6. Los pacientes con una frecuencia respiratoria alta pueden requerir un ajuste del oxígeno mayor que el que puede proporcionar este aparato, consulte el capítulo 15. Descripción Técnica. En esos casos, puede que este aparato no sea adecuado. Consulte a su médico la posibilidad de un tratamiento alternativo.
7. Emplee el aparato siempre con el ajuste prescrito por su médico. No modifique el ajuste si no se lo han prescrito. La revisión periódica de los ajustes de caudal la debe efectuar un médico.
8. No use el aparato mientras duerme a no ser que así se lo prescriba su médico.
9. Se recomienda disponer de una fuente alternativa de oxígeno para los cae corte de corriente o avería mecánica. Consulte cuál es el sistema de respaldo adecuado a su servicio de salud o a su médico.
10. Puede que el aparato no alcance la pureza de oxígeno especificada hasta que lleve por lo menos dos minutos funcionando al caudal prescrito.
11. Este aparato está pensado para que lo use un único paciente.
12. Si no es capaz de oír o ver las alarmas, si no tiene una sensibilidad táctil normal o no tiene capacidad para comunicar la incomodidad, consulte a su médico antes de usar este aparato.
13. Si la concentración de oxígeno desciende de un nivel especificado, sonará una alarma para indicarlo. Si la alarma persiste, deje de usar el aparato, cambie a una fuente alternativa de oxígeno y póngase en contacto con su servicio de salud.
14. Use solamente accesorios autorizados para este aparato. Consulte la lista de accesorios autorizados en la sección 6.1., así como las cánulas autorizadas con este aparato. El uso de accesorios o cánulas no autorizados puede afectar al funcionamiento del aparato.
15. Este aparato no está pensado para ser usado con un humidificador o nebulizador. Si se usa un humidificador o un nebulizador con este aparato, no solo se puede ver afectado el funcionamiento sino que puede resultar dañado el aparato.
16. Siga siempre las instrucciones del fabricante de la cánula para usarla debidamente.
17. Sustituya la cánula con periodicidad. Consulte a su servicio de salud médico con qué frecuencia se debe sustituir la cánula.
18. Compruebe que el aparato funciona con la batería tras desconectarlo del suministro eléctrico.
19. Cargue la batería del aparato solamente con un cargador homologado (consulte la lista de accesorios aprobados).
20. Retire la batería del aparato si no lo va a usar al menos en siete días. Guarde la batería en un sitio fresco y seco.

21. No utilice otros limpiadores que los que se especifican en este manual. Antes de volver a usar el aparato, deje que se seque la solución limpiadora de la superficie.
22. Apague siempre el aparato cuando no lo esté usando.
23. Corte siempre la corriente y apague el aparato antes de limpiarlo. Consulte el capítulo 11. Mantenimiento y Limpieza.
24. Cuando esté usando el aparato no obstruya las tomas de aire ni las salidas de ventilación. Si se obstruyen, el aparato se puede calentar y apagarse o resultar dañado.
25. No coloque ningún objeto encima del aparato.
26. Mantenga el aparato y los accesorios alejados de niños y mascotas para evitar daños o cambios inadvertidos del ajuste.
27. Mantenga el aparato alejado de mascotas y plagas.
28. El aparato goza de clasificación IP22 siempre que se use con la maleta. No se debe usar en ambientes polvorientos o húmedos.
29. Se debe usar siempre en una ubicación bien ventilada.
30. Siga siempre el programa de mantenimiento que se especifica en la sección 11.1. Mantenimiento Periódico.
31. Si el aparato indica alguna situación anómala, consulte el capítulo 10. Resolución De Averías.
32. Tenga cuidado al tocar el aparato cuando la temperatura ambiente sea alta.
33. El dispositivo podrá ser utilizado por otro paciente. El dispositivo deberá ser higienizado según se describe en la Sección 11.2 de este Manual de Usuario y según la Normativa vigente antes de enviarlo a un nuevo paciente.
34. El dispositivo se puede aislar de la red eléctrica desconectando la fuente de alimentación del conector de entrada, ver fig. 1. Coloque el dispositivo para facilitar el acceso al conector de entrada de alimentación.

### 3.3. Resumen de Información Importante:

1. *Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice un cable homologado UL de 15 A o mayor. No conecte ningún otro aparato al mismo alargador. No utilice un cable alargador con varios enchufes.*
2. *Para que el concentrador funcione con la mayor eficacia, inhale a través de la nariz. La inhalación a través de la boca puede hacer que el tratamiento con oxígeno sea menos efectivo.*

## 4. Instrucciones y Formación

La Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios establece que el suministrador del producto debe garantizar que se le proporcione a todo el personal el manual del usuario y que reciba la formación pertinente sobre el uso de dicho equipo.



**ADVERTENCIA:** No se debe usar el producto si se carece de la formación pertinente. Los pacientes y los cuidadores recibirán formación impartida por una persona experta y auto-

rizada por el fabricante, que disponga de la formación, conocimientos y experiencia pertinentes.

Si desea recibir más información sobre la formación, póngase en contacto con su servicio de salud.

## 5. Descripción del Producto

### 5.1. Descripción Gráfica


Indicador de silencio de alarma

Pantalla de visualización

LED verde

Botón de encendido

Indicador de batería

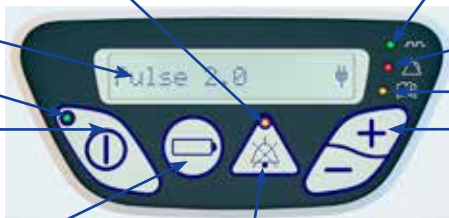

La respiración detecta el LED.

LED rojo

LED amarillo

Teclas de selección de ajustes pulsado

Tecla silencio de alarma

ES

Salida de ventilación

Batería



Conexión de cánula nasal

Toma de corriente

Toma de aire



Tapa de la batería

Cierre de la tapa de la batería

Fig. 1

## 6. Instrucciones Generales Antes de Usar

Existen una serie de accesorios que pueden mejorar la potabilidad y el empleo del concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™. Además del propio aparato el paquete contiene accesorios para iniciarse en el uso, así como el manual del usuario.

Antes de usarlos inspeccione siempre el aparato y los accesorios por si presentasen algún tipo de daño.

*IMPORTANTE: Aunque la caja o el paquete pueda mostrar algún tipo de daño, por ejemplo desgarrones o muescas, el aparato puede estar en perfectas condiciones. Si el aparato o cualquier accesorio mostrase cualquier signo de deterioro, póngase en contacto con su servicio de salud.*

Antes de comenzar a usarlo, compruebe que dispone de los siguientes elementos:

- Concentrador
- Batería
- Maleta
- Alimentación eléctrica de CA
- Alimentación eléctrica de CC
- Carrito de transporte

### 6.1. Lista de Accesorios

Use únicamente los adaptadores/alimentadores eléctricos o accesorios que se especifican en este manual. Si se usan accesorios no especificados se pueden originar riesgos o afectar negativamente al funcionamiento del aparato.

- Batería recargable (RS-00601)
- Fuente de alimentación de CA – Cable de alimentación tipo europeo (RS-00602)
- Fuente de alimentación de CA – Cable de alimentación para el Reino Unido (RS-00603)
- Fuente de alimentación de CA – Cable de alimentación para Norteamérica (RS-0604)
- Fuente de alimentación de CC (RS-00605)
- Maleta (RS-00606)
- Cable de alimentación tipo europeo (RS-00504)
- Cable de alimentación para el Reino Unido (RS- 00506)
- Cable de alimentación para Norteamérica (RS-00503)
- Cargador de batería externo - UE (RS-00516)
- Cargador de batería externo - Estados Unidos (RS-00515)
- Cargador de batería externo - Reino Unido (RS-00517)



**ADVERTENCIA: No usar el aparato ni ningún accesorio si tienen daños.**

ES



## 6.2. Batería


El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ se puede usar siempre conectado a un suministro eléctrico. No obstante, para aumentar la portabilidad, el concentrador viene equipado con una batería recargable de ion litio.

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese siempre de que la batería se inserta antes de utilizar este dispositivo.

*IMPORTANTE:* Se ofrecen otros tipos de alimentación eléctrica para viajes y usos en otras zonas del mundo. Consulte la lista de accesorios autorizados en el capítulo 6.1.

### 6.2.1. Carga de la Batería

**⚠ PRECAUCIÓN:** Cargue la batería del aparato solamente con un cargador homologado. Consulte la lista de accesorios autorizados en el capítulo 6.1.

- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, instale la batería tal y como se muestra en la Fig. 2. La batería se enganchará cuando está completamente asentada.
- Cierre el compartimiento de la batería asegurando que la tapa está bien cerrada.
- Conecte la alimentación eléctrica CA/CC enchufando el conector redondo en la toma del lateral del concentrador, figura 3.
- Conecte el otro extremo del cable de CA/CC a una toma de corriente. Introduzca siempre con precaución el enchufe en la toma de corriente mural.
- En la pantalla aparecerá: **Cargando NN%** .

El cargador es universal y adaptado a una amplia gama de mercados internacionales, por lo que se puede enchufar en una toma de corriente con 100-240 V CA, 50-60 Hz.

Deje que cada batería se cargue un mínimo de tres horas antes de usarla. Una vez completamente cargada la batería, el aparato puede funcionar hasta cuatro horas con una sola batería a 18 inhalaciones por minuto.

*IMPORTANTE:* La duración de la batería puede variar en función del ritmo de la respiración, la antigüedad de la batería y las condiciones ambientales. Consulte el estado de carga de la batería en el texto que muestra el aparato.



Fig. 2



Fig. 3



*IMPORTANTE: Asegúrese de que el icono de estado de alimentación eléctrica (consulte la figura 3) indique que la alimentación está conectada. De no ser así, compruebe si el cable está bien enchufado (encontrará más información en el capítulo 10. Resolución de Averías).*

Para mantener una duración y una vida útil óptimas de la batería evite dejar que se agote por completo y use el aparato conectado a la corriente eléctrica siempre que sea posible. La batería interna se cargará automáticamente siempre que el concentrador esté conectado a la corriente eléctrica. El aparato se puede usar mientras la batería se esté cargando. La pantalla LCD indicará si el aparato está funcionando con la batería o con corriente eléctrica de CA externa.


Cuando no se esté usando el aparato la batería cargada por completo mantendrá cierto nivel de carga durante 30 días; consulte la precaución que se da a continuación en cuanto a recomendaciones de retirada/almacenamiento de batería.


*IMPORTANTE: La batería se puede dañar si se deja que se descargue por completo.*

*IMPORTANTE: Tras 300 ciclos de carga/descarga, la capacidad de la batería se habrá reducido al menos al 80% de la capacidad original. Sustituya la batería cuando la reducción de su vida útil pueda afectar a su movilidad.*

*IMPORTANTE: La alimentación eléctrica de CC se debe utilizar en vehículos que cuenten con la potencia nominal adecuada.*

*IMPORTANTE: El vehículo debe estar en funcionamiento al utilizar el adaptador de CC para alimentar el concentrador de oxígeno portátil Zen-O.*

 **PRECAUCIÓN:** Retire la batería del aparato si va a permanecer sin usar más de siete días. Guarde la batería en un sitio fresco y seco.


 **PRECAUCIÓN:** Compruebe que el aparato funciona con la batería tras desconectarlo del suministro eléctrico.

*IMPORTANTE: Cuando no se esté usando la batería en el aparato guárdelo en la funda protectora que viene en el embalaje original.*

### 6.3. Cánula Nasal

**Úsele únicamente una cánula nasal con las siguientes especificaciones:**

- Tubo de 2,1 m (7 ft) o 7,6 m (25 ft) de largo
- De alto caudal
- Diámetro interno grande
- Puntas rectas, no cónicas
- Apta para hasta 15 l/min a una presión máxima de 3,6 psi
- Cumple la compatibilidad de sustancias de la norma IEC/EN 60601-1

 **PRECAUCIÓN:** Use solamente accesorios autorizados para este aparato. Consulte en la guía de accesorios autorizados la lista completa de accesorios y cánulas válidas para este aparato.

El empleo de accesorios y cánulas no autorizados puede perjudicar el funcionamiento de este aparato, incluidos el caudal y la pureza del oxígeno.

Póngase en contacto con el distribuidor si necesita información actualizada y accesorios, o accesorios adicionales, optativos o de recambio.

## 7. Empleo del Concentrador

**IMPORTANTE:** Lea los apartados 3.1, Resumen de Advertencias, y 3.2, Resumen de Precauciones, antes de usar el aparato.

El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ está pensado para facilitar el uso, con todas las funciones accesibles mediante unas pocas teclas del panel de control.

El dispositivo debe llevarse siempre en su bolsa de transporte y colocarlo, cuando se vaya a usar, en posición vertical sobre una superficie plana o en el suelo siempre dentro de su bolsa de transporte. El paciente debe respetar (no forzar) la longitud de la cánula durante el uso.

**IMPORTANTE:** Excepto en el curso de las secuencias de encendido y apagado, la retroiluminación de la pantalla de visualización permanece apagada. La retroiluminación se enciende brevemente al pulsar cualquier tecla. Asimismo, permanecerá encendida cuando haya una alarma activada y sin silenciar.

### 7.1. Conexión de la Cánula Nasal

**⚠ PRECAUCIÓN:** Sustituya la cánula con periodicidad. Consulte a su servicio de salud médico con qué frecuencia se debe sustituir la cánula.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Siga siempre las instrucciones del fabricante de la cánula para usarla debidamente.

Conecte la tubería a la toma de la cánula tal como se muestra en la figura 5.

Para colocar la cánula al paciente, introduzca las dos puntas en las narinas del paciente y pase el tubo por encima de ambas orejas y bajo la barbilla. Siga las instrucciones del fabricante.

Deslice el adaptador por el tubo para ajustar la cánula cómodamente.

Una vez que la cánula esté sujeta, respire normalmente por la nariz. El Zen-O lite™ detecta la inhalación y suministra el oxígeno.

**IMPORTANTE:** Si no se coloca la cánula correctamente puede que el aparato no sea capaz de detectar los esfuerzos respiratorios del paciente. Cerciórese de que la cánula está bien conectada, sujeta y completamente introducida.

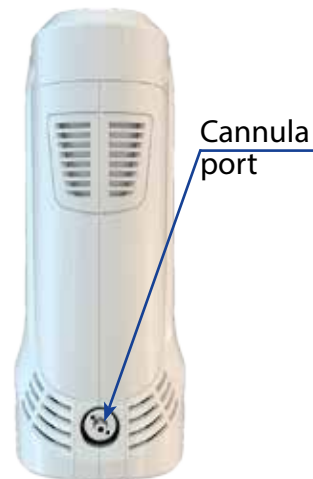



Fig. 5



Fig. 6

## 7.2. Encendido

- Para encender el aparato, pulse la tecla de encendido .
- El concentrador emitirá un pitido y los LED verde, amarillo y rojo parpadearán una vez, mientras en la pantalla aparece el nombre del dispositivo.



LED rojo - advierte de un peligro o de la necesidad de actuar con urgencia.








LED amarillo - indica precaución o que se requiere atención.



LED verde parpadeante - se está suministrando oxígeno



*IMPORTANTE: Se puede realizar ningún ajuste hasta que haya concluido la secuencia de encendido.*

## 7.3. Selección del Idioma

- Con el aparato encendido, mantenga pulsada las teclas más  y silencio  a la vez durante unos cuatro segundos, hasta que aparezca Idioma:.
- A continuación, desplácese por los idiomas disponibles utilizando las teclas más  y menos .
- Cuando se muestre el idioma seleccionado, presione el botón batería  para seleccionar. El aparato cambiará de idioma y volverá a la pantalla normal.

## 7.4. Regulación de los Ajustes

*IMPORTANTE: Tras encender el Zen-O lite™ la secuencia de encendido dura aproximadamente 35 segundos. La concentración de oxígeno especificada se alcanza al cabo de dos minutos de funcionamiento.*

- El aparato empieza a funcionar con el ajuste anterior.
- El aparato suministra un pulso de oxígeno al comenzar cada una de las inhalaciones.
- El modo pulsado de funcionamiento se puede regular de 1,0 a 5,0 en incrementos de 0,5 con las teclas  y .

*IMPORTANTE: Si se sospecha que haya una fuga de aire, las fugas se pueden detectar con una solución jabonosa que se aplica a la conexión cánula-concentrador, una vez aplicada se observa si se producen burbujas.*

El ajuste actual y la alimentación eléctrica (batería o alimentación externa; el icono de la batería muestra de forma aproximada el nivel de carga que resta) se muestran en la pantalla de visualización tal como se indica la figura 7.




Funcionamiento  
del Zen-O lite™  
con batería.








Funcionamiento  
del Zen-O lite™  
con alimentación eléctrica externa.

Fig. 7


## 7.5. Botón de Batería


El botón de batería  sirve para comprobar el estado de la batería o baterías. Para pasar por toda la información, se pulsa el botón repetidas veces.

- En primer lugar, aparecerá la información del manómetro **Cargando NN%**  o **Bat.1: NN%** .
- A continuación, **Bat.1: NN%**  aparecerá el número de ciclos de carga **Bat.1: N Ciclos**  o **Bat: Ciklos** .

Después de la tercera pulsación del botón de la batería, la pantalla volverá a la pantalla principal que muestra la configuración de caudal actual. Asimismo, el menú de estado de batería se apaga automáticamente y se vuelve a la pantalla de ajustes principal si transcurren más de 15 segundos sin tocar los botones.

## 7.6. Respuesta a Alarmas

 **PRECAUCIÓN:** Si no es capaz de oír o ver las alarmas, si no tiene una sensibilidad táctil normal o no tiene capacidad para comunicar la incomodidad, consulte a su médico antes de usar este aparato.

El zumbador se apaga en cualquier momento pulsando la tecla de silencio de alarma . La duración del silencio depende de la gravedad de la alarma (desde el capítulo 9. Indicadores de Alarma). Durante el período de silencio permanece encendido el LED de silencio, indicando que está silenciado el zumbador de alarma. Pulse de nuevo la tecla de silencio para desactivar el silencio de las alarmas. Si se pulsa la tecla de silencio cuando no esté activada ninguna alarma, se silenciará cualquier alarma futura de prioridad media o baja, durante ocho horas. Consulte en el capítulo 9. Indicadores de Alarma, y el capítulo 10. Resolución de Averías, la información adicional sobre alarmas.

*IMPORTANTE: El sistema de alarma se prueba durante la secuencia de encendido. Las luces de las alarmas se encienden brevemente y la alarma sonora pita. Si sospecha que las alarmas no funcionan correctamente, póngase en contacto con el distribuidor para verificarlas.*

## 7.7. Apagado



**PRECAUCIÓN:** Apague siempre el aparato cuando no lo esté usando.

Para apagar el concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ mantenga pulsada la tecla de encendido. El aparato pitará y en la pantalla aparecerá el mensaje de apagado, Apagando **Extincion** durante unos cinco segundos, para a continuación entrar en el modo de bajo consumo.

*IMPORTANTE: No desconecte la alimentación eléctrica de CA al mismo tiempo que retira la batería mientras la unidad está en funcionamiento. Utilice siempre la tecla de encendido para apagar el aparato. Espere hasta que el aparato esté completamente apagado para desconectar la corriente y retirar la batería.*

## 8. Viajes aéreos con el COP Zen-O lite™:

### 8.1. Preparación del pasajero anterior al vuelo

#### 8.1.1. Etiquetado obligatorio

El COP (concentrador de oxígeno portátil) Zen-O lite™ es adecuado para su uso en aviones y cumple con todos los requisitos de aceptación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (United States Federal Aviation Administration, FAA). Esto se verifica en la parte trasera del COP, donde puede leerse un texto en color rojo: «The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft» (El fabricante de este COP ha determinado que este dispositivo cumple con todos los requisitos de validez de la FAA para el transporte de COP a bordo de un avión). Antes del vuelo, puede que le soliciten mostrar esta etiqueta del COP al auxiliar de vuelo.

#### 8.1.2. Consulta al proveedor sanitario

La FAA no exige que el pasajero consulte a un proveedor sanitario antes de usar un COP Zen-O lite™ a bordo de un avión. No obstante, puede que desee comentar lo siguiente con su proveedor sanitario:

- Los efectos de una cabina presurizada (la altitud de la presión en cabina puede llegar a los 8000 pies) en el oxígeno que necesita.
  - Algunos usuarios del COP Zen-O lite™ necesitan un ajuste de caudal o litros por minuto (LPM) más alto del COP Zen-O lite™ en el aire debido a la altitud de la presión en cabina.
  - Algunos usuarios del COP Zen-O lite™ que utilizan este dispositivo de forma ocasional en tierra pueden necesitarlo durante todo el vuelo debido a la altitud de la presión en cabina.
- El oxígeno que necesita a la hora de viajar y si cambian sus necesidades desde la primera prescripción del COP Zen-O lite™ o en la última consulta a un profesional sanitario.
- Ciertos puntos del manual de uso del POC Zen-O lite™ sobre administración de oxígeno, indicadores, advertencias y alertas, así como el ajuste o cambio del caudal o los LPM.

- Todos los miembros de la tripulación (pilotos y auxiliares de vuelo) reciben formación sobre cómo manejar el dispositivo ante una necesidad médica durante un vuelo. No obstante, la FAA no exige que las compañías aéreas o los miembros de la tripulación proporcionen atención médica a los pasajeros.

*IMPORTANTE: Puede encontrar más información sobre la salud y la seguridad de los pasajeros en [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Determinar una cantidad suficiente de baterías**

Usted es responsable de llevar un número de baterías suficiente para el funcionamiento del COP Zen-O lite™ durante todo el tiempo de uso previsto del dispositivo. Como mínimo, debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de determinar una cantidad suficiente de baterías:

- Consejos del profesional sanitario sobre la duración de uso del COP Zen-O lite™.
- Información de la compañía aérea sobre la duración del vuelo previsto, así como sobre las escalas y los retrasos inesperados.

*IMPORTANTE: Puede darse el caso de tomar varios vuelos o usar varias aerolíneas, lo que podría implicar también un uso prolongado del COP Zen-O lite™ en tierra entre un vuelo y otro.*

- Información del manual del usuario del Zen-O lite™ acerca de la duración prevista de la batería.

*IMPORTANTE: Durante un vuelo no debe depender del suministro eléctrico del avión.*

- Los requisitos de la compañía aérea a la hora de llevar cierta cantidad de baterías normalmente están disponibles en el sitio web de cada compañía.

*IMPORTANTE: Las compañías aéreas pueden exigir que lleve suficientes baterías para que el dispositivo funcione durante al menos el 150 % de la duración máxima prevista del vuelo.*

### **8.1.4. Documentación**

Usted es responsable del uso del COP Zen-O lite™ a bordo del avión. Por este motivo, la FAA recomienda que los pasajeros lleven, como mínimo, este manual del usuario y toda la información adicional por escrito que le haya proporcionado el profesional sanitario sobre el COP Zen-O lite™ y su uso.

### **8.1.5. Declaración del médico**

Puede que una compañía aérea solicite un certificado médico a los pasajeros con una discapacidad. Esto puede ocurrir si existe una duda razonable sobre la capacidad de la persona para viajar por aire de forma segura sin necesidad de asistencia médica adicional durante el vuelo. Además, puede que la compañía aérea solicite un certificado médico a una persona que necesita oxígeno de uso médico durante un vuelo. La FAA no exige que los pasajeros obtengan una declaración del médico para mostrarla al operador o al piloto al mando antes de usar el COP Zen-O lite™ a bordo del avión.

### 8.1.6. Baterías de recambio

Si las baterías se dañan o se cortocircuitan, pueden sobrecalentarse y provocar fuego. Estos eventos, a su vez, pueden provocar lesiones físicas en los pasajeros y, en el peor de los casos con ciertos tipos de baterías, provocar un incendio en el compartimento de pasajeros con consecuencias catastróficas. Por tanto, las baterías de litio de recambio que se lleven a bordo del avión deben protegerse de forma individual para evitar cortocircuitos; para ello, es necesario colocarlas en su envase original, colocar cinta adhesiva en los terminales expuestos o colocar cada batería en una bolsa de plástico o en un estuche protector.

*IMPORTANTE: Está prohibido transportar baterías de litio de recambio en el equipaje facturado dentro de un avión.*

Usted es responsable de garantizar que todas las baterías de recambio que se llevan en el equipaje de mano estén debidamente envasadas. Los proveedores del equipo COP Zen-O lite™, algunas aerolíneas y empresas de transporte que se especializan en envíos de paquetes pequeños pueden proporcionarle este servicio de envasado.

## 8.2. Información sobre el embarque y vuelo

### 8.2.1. Equipaje de mano

El COP Zen-O lite™ es un dispositivo de asistencia. En este caso, las compañías no deberán, al aplicar su política de equipaje, contabilizar el COP Zen-O lite™ en el límite de artículos de mano en cabina si se trata de una persona con discapacidad que esté cualificada.

*IMPORTANTE: Llevar una bolsa con las baterías adicionales necesarias para alimentar el POC ZEN-O™ durante el vuelo se podría considerar como un dispositivo de ayuda. Sin embargo, existen limitaciones en el transporte de las baterías. Para su ZEN-O™ POC, el valor nominal vatios hora (W/h) es inferior 100Wh por batería*

### 8.2.2. COP Zen-O lite™ como equipaje de mano

El COP Zen-O lite™ puede llevarse en el avión como equipaje de mano o como equipaje facturado. **No obstante, está prohibido llevar las baterías de litio de recambio dentro del equipaje facturado en el avión.**

### 8.2.3. Cuestiones sobre la colocación y la estiba del COP Zen-O lite™

Para que un COP Zen-O lite™ funcione de forma eficiente, el filtro de aire o aspiración no debe bloquearse durante su uso. Por tanto, en el área que rodea el COP Zen-O lite™ no debe haber mantas, abrigos ni ningún otro elemento del equipaje de mano que pueda bloquear el filtro de aire o aspiración. Si el filtro de aire o aspiración está bloqueado, ocurrirán dos cosas. Primero, las luces de advertencia y/o las alertas sonoras le harán saber que la concentración de oxígeno de la salida del COP Zen-O lite™ no es suficiente. Segundo, cuando la temperatura de los componentes internos del COP Zen-O lite™ aumenta hasta cierto límite porque el dispositivo sigue intentando administrar oxígeno, el COP Zen-O lite™ se apagará automáticamente para evitar un sobrecalentamiento y podrá saberlo por las luces de advertencia y/o las alertas sonoras.



**Colocación del Zen-O lite™** el COP Zen-O lite™ debe colocarse bajo el asiento frente a usted; de este modo, usted o el asistente podrán ver las luces de advertencia o escuchar las alertas sonoras. Si lo coloca directamente bajo su asiento o en un compartimento cerrado, no podrá ver las luces de advertencia y quizás tampoco oír las alertas sonoras. Puede que otras ubicaciones sean válidas si así lo considera el auxiliar de vuelo.

#### **8.2.4. Restricciones de asientos para pasajeros que van a utilizar un COP Zen-O lite™ a bordo de un avión**

**Asientos en la fila de salida:** Está prohibido que los pasajeros utilicen un dispositivo de asistencia (incluido el Zen-O lite™) cuando ocupan un asiento situado en la vía de salida.

**Estiba:** durante el movimiento en la superficie (alejamiento del avión de la puerta de embarque y uso de taxis), y el aterrizaje, el COP Zen-O lite™ debe estibarse debidamente y de forma que no bloquee el acceso de los pasajeros a ninguna salida ni al pasillo del compartimento de pasajeros. Puede que sean necesarias otras restricciones de asientos para cumplir las normas de seguridad de la FAA. Por ejemplo:

1. Algunos asientos de avión, como los asientos de mampara, pueden disponer o carecer de un espacio de estiba permitido para alojar el COP Zen-O lite™ durante el movimiento en la superficie, el despegue y el aterrizaje. Por tanto, puede que el COP Zen-O lite™ no pueda estibarse adecuadamente en estas etapas de un vuelo si el dispositivo ocupa dichos asientos. Si es el caso, puede aplicarse una restricción de asientos.
2. Durante el movimiento en la superficie, el despegue y el aterrizaje, el tubo de la cánula nasal que suministra el oxígeno desde el COP Zen-O lite™ no puede extenderse en la fila de forma que obstaculice el acceso de los pasajeros o represente un peligro para el viaje en caso de evacuación. No debe impedir el acceso de otros pasajeros durante estas etapas del vuelo. En este caso, puede ser necesaria una restricción de asientos para cumplir con las normas de seguridad de la FAA. Por ejemplo, si todos los asientos de la fila están ocupados, el asiento adecuado para el usuario del COP Zen-O lite™ sería un asiento de ventanilla.
3. Un operador solo puede establecer restricciones de asientos en cumplimiento de las normas de seguridad. Los ejemplos mencionados representan algunas de las situaciones que se deben tener en cuenta, pero no todas.

*IMPORTANTE: Una política de aerolínea general que determine que todos los pasajeros a bordo del avión que utilicen un COP Zen-O lite™ deben ocupar un asiento de ventanilla, independientemente de la situación específica de la persona, no cumpliría con los requisitos de la FAA.*

#### **8.2.5. Despresurización en la cabina**

El uso de un COP Zen-O lite™ no presenta ningún peligro durante una pérdida de presión en cabina. No obstante, en caso de pérdida de presión en cabina (rápida o lenta), debe usar las máscaras de oxígeno que se despliegan hasta que el avión se estabilice.



### 8.2.6. Uso de la alimentación eléctrica del avión

No existen requisitos para los operadores a la hora de proporcionar alimentación eléctrica en el avión a un COP Zen-O lite™. Las tomas de corriente a bordo del avión se consideran equipo prescindible y no son obligatorias desde el punto de vista de la certificación pertinente o de las normas de funcionamiento. Además, los errores de funcionamiento eléctrico de los sistemas de un avión pueden requerir la desactivación de estas fuentes de alimentación, ya sea en tierra o durante el vuelo, con fines de seguridad. Debido a esta indicación, el COP Zen-O lite™ solo debe utilizarse con batería mientras se está a bordo del avión. **Nunca debe depender de la disponibilidad de alimentación eléctrica a bordo de un avión durante un vuelo**

### 8.2.7. Fumar

El acto de fumar (incluidos los cigarrillos electrónicos) durante la terapia con oxígeno resulta peligroso y es probable que provoque lesiones o la muerte del paciente y de otras personas debido a un incendio. No permita que se fume o que haya llamas abiertas dentro de un radio de 3 m del Concentrador de oxígeno portátil o de cualquier otro accesorio portador de oxígeno.

### 8.3. Requisitos de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA)

La información detallada relativa a pasajeros que utilizan dispositivos respiratorios, incluidos los COP Zen-O lite™, puede obtenerse de la TSA en la dirección <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

**Los siguientes aspectos generales de control de la seguridad se aplican al uso de los COP Zen-O lite™:**

1. El límite de un artículo de mano y un artículo personal (p. ej., monedero, maletín o estuche de ordenador) no se aplica a los suministros, equipos, productos de ayuda para la movilidad y/o dispositivos de asistencia que una persona con discapacidad transporte o utilice.
2. Si una persona dispone de documentación médica relativa a su estado médico o discapacidad, puede presentar esta información al responsable de seguridad para informarle de la situación de la persona. Esta documentación no es obligatoria y no exime a una persona de someterse al proceso de control de seguridad.

ES

## 9. Indicadores de Alarma

Si el concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ detecta una situación de alarma, lo indicará con una alarma visual y sonora en un plazo de 10 segundos. Existen cuatro niveles de alarma: Prioridad crítica, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja.

Cada una de ellas se indica de diferente modo en la pantalla retroiluminada: con LED amarillos y rojos y con el zumbador, tal como se indica a continuación. En cada caso, el mensaje de alarma y el estado eléctrico pasarán a mostrarse en la pantalla.

*IMPORTANTE: Todas las condiciones y parámetros de alarma vienen definidos de fábrica, y el usuario no los puede modificar.*

*IMPORTANTE: El sistema de alarma se prueba durante la secuencia de encendido. Las luces de las alarmas se encienden brevemente y la alarma sonora pita.*

| Estado de alarma         | Tono audible   | Indicador visual   | Tiempo de silencio |
|--------------------------|--|--|--------------------|
| <b>Prioridad crítica</b> | 10 pitidos por ráfaga, la ráfaga se repite cada 3 segundos | LED rojo encendido y el aparato se apaga automáticamente | 20 minutos         |
| <b>Prioridad alta</b>    | 10 pitidos por ráfaga, la ráfaga se repite cada 3 segundos | LED rojo intermitente                                    | 20 minutos         |
| <b>Prioridad media</b>   | 3 pitidos por ráfaga, la ráfaga se repite cada 8 segundos  | LED amarillo intermitente                                | 8 horas            |
| <b>Prioridad baja</b>    | 3 pitidos por ráfaga, la ráfaga se repite cada 10 minutos  | LED amarillo encendido                                   | 24 horas           |

*IMPORTANTE: Si se producen dos situaciones de alarma al mismo tiempo, solamente se indica la alarma de mayor prioridad. Si se producen más de dos situaciones de alarma de igual prioridad al mismo tiempo, se mostrará la más reciente.*

*IMPORTANTE: El personal de mantenimiento registra las alarmas más recientes del aparato para su referencia. Este registro se mantiene si el aparato se apaga o si se pierde la corriente por alguna razón.*

*IMPORTANTE: Si se pulsa la tecla de silencio antes de que se produzca una situación de alarma (por ejemplo, para silenciar el aparato en el cine), las alarmas de prioridad crítica y de prioridad alta ignorarán el silencio; las alarmas de prioridad media y baja permanecerán silenciadas durante ocho horas a partir de haber pulsado la tecla. Pulse la tecla para desactivar el silencio para que se muestre la alarma más reciente de mayor prioridad. Vuelva a pulsar la tecla de silencio para poner a cero el contador de ocho horas.*

## 9.1. Alarmas

Cuando suena una alarma en el concentrador se muestra el mensaje correspondiente en la pantalla. Adopte las medidas adecuadas que se indican en las siguientes tablas.

### 9.1.1. Alarmas de Prioridad Crítica

*IMPORTANTE: Estas alarmas desactivan de inmediato el aparato.*

| Mensaje de alarma     | Descripción                            | Medida  |
|-----------------------|--|---|
| <b>Cargar batería</b> | Es necesario cargar la batería.        | Cargue la batería enchufándola a la alimentación eléctrica. Cerciórese de que todas las conexiones queden bien sujetas. |
| <b>Bat. incorr</b>    | La batería no es un modelo autorizado. | Sustituya la batería por un modelo autorizado.  |
| <b>XX: Servicio!*</b> | Se necesita una revisión.              | Póngase en contacto con el distribuidor.  |

\*Valor: 01-20

### 9.1.2. Alarmas de Prioridad Alta

*IMPORTANTE: Estas alarmas permiten que el aparato siga funcionando.*

| Mensaje de alarma     | Descripción  | Medida   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Rev. Conductos</b> | El aparato no es capaz de mantener la pureza de oxígeno.     | Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y salidas de aire. Si la alarma persiste, póngase en contacto con el distribuidor.                                  |
| <b>Batería baja</b>   | La duración estimada de la batería es inferior a 17 minutos. | Cargue la batería enchufándola a la alimentación eléctrica.<br><i>IMPORTANTE: El mensaje desaparecerá automáticamente al enchufar a la alimentación eléctrica.</i> |
| <b>XX: Servicio!*</b> | Se necesita una revisión.                                    | Póngase en contacto con el distribuidor.   |

\*Valor: 21-50

ES

### 9.1.3. Alarmas de Prioridad Media

| Mensaje de alarma     | Descripción   | Medida  |
|-----------------------|---|---|
| <b>Rev. Canula</b>    | No se ha detectado inhalación en un periodo de 15 segundos. | Compruebe la conexión de la cánula. Asegúrese de que respira por la nariz. Si persiste la alarma, póngase en contacto con el distribuidor.<br><i>IMPORTANTE: El mensaje desaparecerá automáticamente cuando se detecte la inhalación.</i> |
| <b>XX: Servicio!*</b> | Se necesita una revisión.                                   | Póngase en contacto con el distribuidor.  |

\*Valor: 51-70

### 9.1.4. Alarmas de Prioridad Baja

| Mensaje de alarma     | Descripción               | Medida                                   |
|-----------------------|---------------------------|--|
| <b>XX: Servicio!*</b> | Se necesita una revisión. | Póngase en contacto con el distribuidor. |


\*Valor: 71-99

ES

### 9.1.5. Otros Mensajes



| Mensaje             | Descripción  | Medida                         |
|---------------------|--|--------------------------------|
| <b>Desconectado</b> | Se ha desconectado la alimentación eléctrica externa; la unidad funciona ahora con la batería. | No se requiere ninguna medida. |
| <b>Extincion</b>    | Se muestra mientras la unidad se apaga.  | No se requiere ninguna medida. |

## Otros Mensajes (continuación)

| Mensaje   | Descripción  | Medida  |
|---|--|---|
| <b>No hay batería</b>   | Se muestra como elemento del menú de batería cuando no hay comunicaciones con la batería.  | Verificar que las baterías estén correctamente colocadas. Póngase en contacto con el distribuidor si la batería está introducida a tope pero continúa apareciendo el mensaje durante más de 30 segundos.        |
| <b>Bat NN%</b>  | El porcentaje de carga de la batería que se muestra es al menos un 10% y no hay electricidad externa conectada.  | El mensaje se muestra cuando se pulsa la tecla de batería.  |
| <b>Cargando NN% </b> | NN% indica el nivel de carga actual de la batería.<br>Aparece cuando la carga de la batería es mayor del 10%, pero inferior al 100% y hay corriente externa conectada.   | El mensaje se muestra cuando se pulsa la tecla de batería.  |
| <b>Cargando</b>   | La carga de la batería es inferior al 10% y hay corriente externa conectada.   | El mensaje se muestra cuando se pulsa la tecla de batería.  |
| <b>Frec. Resp. XX</b>   | Promedio de inhalación del paciente cuando el aparato suministra la cantidad máxima de oxígeno y se reduce la embolada de oxígeno. Si no se detectan inhalaciones, aparece el promedio de inhalación más reciente. | Nivel de actividad reducido. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y salidas de aire.<br><i>IMPORTANTE: El mensaje desaparecerá automáticamente cuando vuelva el aparato al funcionamiento normal.</i> |
| <b>Alarma desact.</b>   | Se ha eliminado automáticamente una alarma ajustada previamente.   | No se requiere ninguna medida.  |

ES

## 10 Resolución de Averías

| Problema   | Causa posible   | Solución  |
|--|---|---|
| El sistema no funciona   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede que el sistema se haya desconectado de la corriente eléctrica.</li> <li>• Puede que el sistema se haya apagado.</li> <li>• Se ha producido una alarma de prioridad crítica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el sistema está conectado correctamente a la alimentación eléctrica.</li> <li>• Asegúrese de que el sistema esté encendido.</li> <li>• Verifique si el sistema tiene daños o ha sido expuesto al contacto con líquidos.</li> <li>• Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor.</li> </ul>  |
| Suena cualquier alarma o  o LED encendido  LED encendido | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte el capítulo 9. Indicadores de Alarma.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte el capítulo 9. Indicadores de Alarma.</li> </ul>  |
| La batería no se carga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No está conectada la corriente eléctrica.</li> <li>• La batería no está introducida a tope.</li> <li>• La batería no funciona.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe las conexiones para cerciorarse de que:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los enchufes redondos están firmemente introducidos.</li> <li>• El cable de alimentación está conectado al suministro de CA/CC o está conectado el adaptador CC para coche, si procede.</li> <li>• El cable de alimentación está conectado al enchufe mural, si procede.</li> <li>• El enchufe mural tiene corriente eléctrica.</li> </ul> </li> <li>• Verifique que la batería está asentada a tope y que la cubierta está sujeta.</li> <li>• Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor.</li> </ul> |

## 11 Mantenimiento y Limpieza

### 11.1. Mantenimiento Periódico

**⚠ ADVERTENCIA:** No usar lubricantes en el aparato ni en ninguno de sus accesorios.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Sustituya la cánula con periodicidad. Consulte con el distribuidor o el médico con qué frecuencia se debe sustituir la cánula.

El aparato indica con una alarma cuando se debe limpiar o cambiar algún filtro o accesorio (véase el capítulo 10. Resolución de Averías).

*IMPORTANTE: La cánula y el filtro del paciente pueden estar contaminados por el propio paciente, por lo que se deben manejar con sumo cuidado.*

### 11.2. Limpieza Externa

**⚠ ADVERTENCIA:** No sumergir el aparato en líquido. No exponer al agua o la precipitación. No exponer a ambientes polvorientos.

**⚠ PRECAUCIÓN:** No utilice otros limpiadores que los que se especifican en este manual. Antes de volver a usar el aparato, deje que se seque la solución limpiadora de la superficie.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Corte siempre la corriente y apague el aparato antes de limpiarlo.

Limpie el exterior con un trapo suave ligeramente humedecido en agua jabonosa o con toallitas antibacterias (alcohol isopropílico al 70%).

*IMPORTANTE: El aparato se debe limpiar externamente una vez a la semana; los accesorios se limpiarán cuando sea necesario. El exterior del aparato debe ser limpiado antes de ser suministrado a un nuevo paciente. El dispositivo exterior debe ser higienizado antes de enviarlo a un Nuevo paciente. Se recomienda cambiar el filtro exterior.*

Cánula nasal: consulte el manual de instrucciones del fabricante antes de proceder a la limpieza de la cánula nasal

### 11.3. Vida Útil

La vida útil prevista del aparato es de cinco años, excepto los tamices. La vida útil de los tamices dependerá de las condiciones de funcionamiento. Sustitúyalos cuando sea necesario y así lo indique la alarma de comprobación de la ventilación. Si las ventilaciones de toma y de escape no están obstruidas pero persiste la alarma de comprobación de la ventilación, solicite al distribuidor las instrucciones sobre cómo sustituir los tamices.

### 11.4. Conector de servicio

El conector de servicio encaja con el arnés de servicio TF-02091 (5,1 Vdc como máximo) y se utiliza sólo para mantenimiento.



Fig. 8

## 12 Reparación y Eliminación del Aparato

### 12.1. Reparación

No trate de reparar el aparato. Solicite asistencia a su servicio de salud o al distribuidor (consulte el capítulo 10. Resolución de Averías).

Las columnas de zeolita podrán ser sustituidas por el paciente según determine el proveedor del servicio de oxigenoterapia. Cualquier otra actuación o reparación deben ser realizadas únicamente por personal autorizado.

### 12.2. Sustitución de las columnas de zeolita

1. Apague el dispositivo y desconecte la fuente de alimentación de CA o CC (si está conectado).
2. Retire el dispositivo de la bolsa de transporte.
3. Retire la batería del dispositivo.
4. Pulse los cuatro botones de liberación ubicados en la parte superior del dispositivo para retirar la cubierta superior del dispositivo como se muestra en la Fig. 9.
5. Use la herramienta incluida en el kit de sustitución de las columnas de zeolita para girar las columnas hacia la izquierda, 3 - 4 vueltas, hasta que se puedan sacar tirando hacia arriba, hacia la parte superior del dispositivo.
6. Repita el proceso para la segunda columna
7. Saque las columnas de zeolita del embalaje, quite el tapón del módulo de zeolita e inmediatamente coloque la columna de zeolita de sustitución. Atención: No deje la columna de zeolita expuesta.
8. Instalar la columna de zeolita de sustitución, con la rosca en la parte superior del dispositivo, tal y como se muestra en la Fig. 10.
9. Apriete con la mano la columna.
10. Use la herramienta para finalizar la instalación.
11. Repita los pasos 8 - 10 para sustituir la segunda columna.
12. Vuelva a colocar la cubierta superior en el dispositivo apretando hacia abajo sobre la parte superior del dispositivo, hasta que los cuatro botones encajen en su sitio
13. Vuelva a insertar la batería en el dispositivo.
14. Conectar el dispositivo a una fuente de alimentación de CA o CC.

**No encienda!**













Fig. 8



Fig. 9



15. Pulse el botón de silencio de la alarma  y de la batería  al mismo tiempo, hasta que aparezca en la pantalla "Test de fugas".
- El dispositivo indicará el progreso con decimales a la derecha del texto "Test de fugas" („Leak test“).
  - Cuando se haya completado, el dispositivo indicará "Test Aprobado" („Test passed“) o "ha fallado" („Test failed“).
    - Si se ha superado la prueba, pulse el botón de la batería  para salir y continúe con el paso 16.
    - Si aparece prueba fallida - Pulse el botón batería  para salir, a continuación, repita los pasos 4-15.
16. Si la prueba de fugas ha pasado, ponga el contador de horas del dispositivo a cero.
- Presione simultáneamente los botones  y  hasta que aparezca "Diagnóstico" („Diagnostics“).
  - Pulse el botón  o  para desplazarse hasta que, en el menú de diagnóstico aparezca "XXXH Módulo", donde se verá durante cuantas horas se usó el anterior módulo de zeolita.
  - Apriete el botón de silencio de alarma  hasta que en el contador de horas aparezca "0H módulo" („0H Sieve“).
  - Presione el botón de la batería  para salir del modo de diagnóstico.
  - El dispositivo está ahora listo para ser utilizado.

*Importante: Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor de oxigenoterapiasi el dispositivo no funciona tras varios intentos.*

ES

### 12.3. Eliminación

- Solicite información al distribuidor sobre la eliminación del aparato.
- Deshágase de la batería según la normativa local o póngase en contacto con el distribuidor.

## 13 Garantía

La garantía del dispositivo se limita a tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. No se incluyen las columnas de zeolita, cubierta con un año de garantía.

La garantía estándar sólo es válida para productos que han sido tratados según indica el Manual del Usuario, y siguiendo las Normas y Código de Buenas Prácticas comunes en la industria.

## 14 Marca Registrada y Aviso Legal

### 14.1. Marca Registrada

Todas las marcas registradas pertenecen a los respectivos propietarios.

### 14.2. Aviso Legal

La información de este documento se ha estudiado cuidadosamente, por lo que se tiene por fiable. Además, el fabricante se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos para mejorar la legibilidad, el funcionamiento o el diseño. El fabricante asume responsabilidad alguna derivada de la aplicación o el empleo de cualquiera de los productos o circuitos descritos anteriormente; asimismo, no cubre ninguna licencia bajo derechos de patente ni derechos de terceros.

#### 14.2.1. Este Documento

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso. Este documento tiene información de propietario protegida por copyright. Se prohíbe la reproducción de este documento, completo o en parte (con la excepción de breves reseñas en revistas y artículos científicos), por cualquier método sin previo consentimiento por escrito del fabricante. Cértese de leer con atención y comprender todos los manuales que acompañan al producto.

#### Asistencia

Si tiene dudas sobre la información de estas instrucciones o acerca del manejo seguro de este aparato, póngase en contacto con su servicio de salud o con el distribuidor.

ES

## 15 Descripción Técnica

|   |   |
|---|---|
| <b>Tamaño:</b>                                  | 249 mm (W), 97 mm (D), 231 mm (H)<br>9.8" (W), 3.8" (D), 9.1" (H)   |
| <b>Peso de la unidad:</b>                       | 2.5 kg (5.5 lbs) (sin la maleta ni el carrito)  |
| <b>Requisitos eléctricos:</b>                   | Adaptador CA: 100-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz ent., 24 V CC, 5.0A sal. Adaptador CC: 11,5-16 V CC ent., 24 V, 5.0 A sal.<br><i>(Importante: vea la lista de accesorios para las referencias y modelos de los kits de CA y CC de conectores eléctricos)</i> |
| <b>Pureza:</b>                                  | 87% - 96% a cualquier caudal y cualquier condición de funcionamiento  |
| <b>Ajuste:</b>                                  | Regulable por el usuario en incrementos de 0.5 de 1.0 a 5.0.  |
| <b>Sensibilidad de disparo por inspiración:</b> | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O   |
| <b>Indicador de ajuste:</b>                     | Pantalla LCD  |

## Descripción Técnica (sigue)

|   |   |
|---|---|
| <b>Presión de descarga máx. de oxígeno</b>                | 20.5 psi  |
| <b>Rango de humedad:</b>                                  | 5% to 93% ± 2% sin condensación   |
| <b>Desconecte el dispositivo:</b>                         | Conector de entrada de la fuente de alimentación  |
| <b>Altitud de funcionamiento:</b>                         | De 0 m a 4,000 m (de 0 ft a 13,000 ft) respecto al nivel del mar, de 1,060 a 575 bar  |
| <b>Presión acústica:</b>                                  | 44 dBA en el ajuste 2 y 18 BPM:<br>(medida a 1 m del frente del dispositivo)  |
|   | Nivel de presión sonora máxima de 52.5dBA según ISO 0601-2-69   |
| <b>Tipo de protección eléctrica:</b>                      | Clase II  |
| <b>Grado de protección eléctrica:</b>                     | Tipo BF   |
| <b>Grado de estanqueidad:</b>                             | IP22 en la maleta (protección frente a objetos pequeños y agua que gotea)<br>IP20 fuera de la maleta (protección frente a objetos pequeños y sin protección frente a la entrada de agua en el concentrador) |
| <b>Grado de seguridad (mezcla anestésica inflamable):</b> | No apto para el uso en presencia de compuestos anestésicos inflamables  |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b>                     | Funcionamiento continuo a temperatura entre 5 °C (41°F) y 40 °C (104°F).  |
| <b>Temperatura de conservación:</b>                       | Entre -20 °C (-4°F) y 60 °C (140°F)   |
| <b>Rango de presión acústica de alarmas:</b>              | De 65 a 85 dB(A)  |
| <b>Retraso del sistema de alarmas:</b>                    | Inferior a 10 segundos tras la detección (alarma por deficiencia de oxígeno si la fracción en volumen es menor de 82% en las condiciones ambientales especificadas)   |
| <b>Indicador de estado del concentrador de oxígeno:</b>   | Alarma de prioridad alta que indica caída de la concentración de oxígeno por debajo de 82%  |

**Capacidad de embolada en modo pulsado (ml/inhalación) frente a ajuste y ritmo de inhalación**

| Inhalaciones por minuto | Ajuste |    |      |      |      |
|-------------------------|--------|----|------|------|------|
|                         | 1      | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                      | 11     | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                      | 11     | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                      | 11     | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                      | 11     | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                      | 11     | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                      | 11     | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*Todos los valores con un margen de +/- 15% en todas las condiciones de funcionamiento.*

ES

## 15.1. Información de Compatibilidad Electromagnética

El equipo electromédico está sujeto a precauciones especiales en lo que respecta a la compatibilidad electromagnética, CEM. Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) portátiles y móviles pueden afectar a aparatos como el concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™. Por esta razón, el aparato no se debe usar junto a estos dispositivos. Si ello no fuera posible, observe el funcionamiento del aparato para cerciorarse de que opera adecuadamente en todo momento.

### 15.1.1. Directrices y Declaración del Fabricante: Emisiones Electromagnéticas

El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ sirve para entornos electromagnéticos como los que se especifican a continuación. El cliente o usuario del concentrador de garantizar que se utilice en tales entornos.

| Prueba de emisión   | Conformidad | Entorno electromagnético  |
|---|-------------|---|
| Emisiones RF<br>CISPR 11  | Grupo 1     | El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ solo usa radiación de RF para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son de muy baja intensidad y no es probable que interfieran con ningún equipo electrónico adyacente. |
| Emisiones RF<br>CISPR 11  | Clase B     | El concentrador sirve para todo tipo de establecimiento, desde hogares a los conectados directamente con redes públicas de baja tensión para uso residencial.   |
| Armónicas<br>Emisiones<br>IEC 61000-3-2                             | Clase A     |   |
| Fluctuaciones de tensión/<br>emisiones momentáneas<br>IEC 61000-3-3 | Cumple      |   |

ES


### 15.1.2. Directrices y Declaración del Fabricante: Inmunidad Electromagnética

El Zen-O lite™ sirve para los entornos electromagnéticos que se indican a continuación. El cliente o usuario del concentrador debe garantizar que se utilice en tales entornos.

| Prueba de inmunidad   | Nivel de prueba IEC 60601  | Nivel de conformidad   | Entorno electromagnético/guía  |
|---|--|--|--|
| Descarga electrostática (ESD)<br>IEC 61000-4-2  | ± 2, 4, 6, 8kV contacto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV aire  | ± 2, 4, 6, 8kV contacto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV aire  | Los suelos deben ser de madera, hormigón o cerámicos.<br>Si el suelo está cubierto con material sintético, la humedad relativa debe ser un 30% como mínimo.  |
| Transitorio rápido/ráfaga<br>IEC 61000-4-4  | ± 2 kV para líneas de suministro<br>± 1 kV para líneas de entrada/salida   | ± 2 kV para líneas de suministro<br>± 1 kV para líneas de entrada/salida   | La calidad del suministro de red debe ser el de un establecimiento comercial u hospital.   |
| Pico de tensión<br>IEC 61000-4-5  | ± 1 kV modo diferencial<br>± 2 kV modo común   | ± 1 kV modo diferencial<br>± 2 kV modo común   | La calidad del suministro de red debe ser el de un establecimiento comercial u hospital.   |
| Caídas de tensión, cortes breves y variaciones de tensión en líneas de suministro<br>IEC 61000-4-11 | < 5% UT<br>(>95% caída en UT) para 0,5 ciclo<br>40% UT<br>(60% caída en UT) para 5 ciclos<br>70% UT<br>(30% caída en UT) para 25 ciclos<br>< 5% UT<br>(>95% caída en UT) para 5 segundos | < 5% UT<br>(>95% caída en UT) para 0,5 ciclo<br>40% UT<br>(60% caída en UT) para 5 ciclos<br>70% UT<br>(30% caída en UT) para 25 ciclos<br>< 5% UT<br>(>95% caída en UT) para 5 segundos | La calidad del suministro de red debe ser el de un establecimiento comercial u hospital. Si el usuario del concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ necesita que el aparato continúe funcionando con cortes de corriente se recomienda alimentar el aparato desde un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería. |
| Campo magnético de frecuencia de electricidad (50/60 Hz)<br>IEC 61000-4-8                           | 30 A/m   | 30 A/m   | Los campos magnéticos de frecuencia deben ser los habituales en un establecimiento comercial u hospital.   |

ES

## Directrices y Declaración del Fabricante: Inmunidad Electromagnética (sigue)

| Prueba de inmunidad  | Nivel de prueba IEC 60601                     | Nivel de conformidad     | Entorno electromagnético/guía   |
|--|---|--------------------------|---|
| RF conducida IEC 61000-4-6   | 3 Vrms, de 150 kHz a 80 Mhz; 6Vrms ISM Bandas | 3 Vrms; 6Vrms ISM Bandas | <p>No se deben usar equipos de comunicaciones RF móviles ni portátiles, incluidos los cables, a menos de la distancia de separación recomendada del aparato y calculada con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada:</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz<br>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz<br>donde P es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante y d es la distancia de separación recomendada, en metros (m). <p>La potencia del campo de un transmisor fijo de RF determinada mediante un estudio electromagnético del emplazamiento <sup>a)</sup> debe ser inferior al nivel de conformidad de cada rango de frecuencias <sup>b)</sup>. Se pueden producir interferencias en las inmediaciones de los equipos marcados con el siguiente símbolo: </p> |
| RF radiada IEC 61000-4-3   | 10 V/m, de 80 Mhz a 2,5 Ghz                   | 10 V/m                   |   |
| <p><b>IMPORTANTE:</b> A 80 MHz y 800 MHz aplica el rango de mayor frecuencia.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Puede que estas pautas no sean aplicables a todas las situaciones. La propagación de las ondas electromagnéticas se ve afectada por la absorción y la reflexión por parte de estructuras, objetos y personas.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Puede que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión por parte de las estructuras, los objetos y las personas.</p> <p><sup>a)</sup>La potencia de los campos generados por transmisores fijos como estaciones base de radio (móviles/inalámbricas) para teléfonos y radios terrestres móviles, radioaficionados, emisiones de AM y FM y emisiones de TV no se puede predecir con precisión de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético de transmisores fijos de radiofrecuencia se puede contemplar una evaluación electromagnética del emplazamiento. Si se halla que la potencia del campo en la ubicación en la que se va a usar el Zen-O lite™ supera el nivel de radiofrecuencia descrito anteriormente, se deberá observar el funcionamiento del concentrador para comprobar si es normal. Si se detecta un comportamiento anómalo será necesario adoptar alguna medida, como reorientar o reubicar el concentrador.</p> <p><sup>b)</sup>En un rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz la potencia del campo debe ser inferior a 6 V/m.</p> |   |                          |   |

ES

### 15.1.3. Distancia de Separación Recomendada de Equipos de Comunicaciones Rf Portátiles y Móviles al Concentrador de Oxígeno Portátil Zen-O lite™

El concentrador de oxígeno portátil Zen-O lite™ sirve para entornos electromagnéticos en los que están controladas las perturbaciones de radiofrecuencia radiada. El usuario puede evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima respecto al equipo de comunicaciones por radiofrecuencia portátil y móvil (transmisores), según la potencia máxima de emisión del equipo de comunicaciones.

| Máxima potencia nominal del transmisor (W) | Distancia (m) según la frecuencia del transmisor |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$          | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01                                       | 0.12   | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1  | 0.38   | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10   | 3.8  | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100  | 12   | 12                                      | 23                                       |

Para los transmisores con una potencia de emisión distinta de las enumeradas en la tabla, la distancia de separación recomendada (d) en metros (m) se puede estimar mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de emisión nominal del transmisor en vatios (W) según el fabricante.








**IMPORTANTE:** A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación del mayor rango de frecuencia.

**IMPORTANTE:** Puede que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión por parte de las estructuras, los objetos y las personas.

ES



## 16 Glosario: Significado de Símbolos de Embalaje y Etiquetas
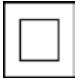
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|                    | Consulte las instrucciones antes de usarlo  |                            | Limitación de presión atmosférica a altitudes de 0 m a 4 000 m (0 ft - 13 000 ft) |
|                    | Tipo BF según requisitos de seguridad eléctrica   |                            | Limitación de temperatura de conservación de -20 °C a 60 °C (de -4°F a 140°F)     |
|                    | Número de serie   |                            | Limitación de humedad de 5% 93% ± 2% sin condensación                             |
|                    | Número de catálogo  |   |   |
|                    | Las leyes federales estadounidenses exigen la prescripción médica para poder adquirir este aparato. |                            | Fecha de fabricación  |
|                    | No usar si el embalaje está dañado. Véase el Capítulo 6.  |                            | Fabricante  |
| <br>No Open Flames | No quemar nada cuando el aparato esté en funcionamiento   | <br>Do not get wet<br>IP20 | Mantener seco (el símbolo corresponde a la clasificación IPX2 del aparato)        |
| <br>No Smoking     | No fumar  |                            | Elimine la batería como corresponda   |
|                  | Recogida selectiva de equipo eléctrico y electrónico  |                          | Símbolo de Clase II   |
|                  | Cumple las Directivas de la UE aplicables, incluida la Directiva de aparatos médicos                |                          | Apropiado para el uso domiciliario  |

ES



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Fabricado por: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Português

## Manual do Utilizador: Zen-O lite™ Concentrador de Oxigénio Portátil (Modelo: RS - 00600)

### ÍNDICE

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Prefácio</b>                              | <b>186</b> |
| 1.1. Informação Geral                           | 186        |
| 1.2. Classificação                              | 186        |
| 1.3. Convenções de Terminologia                 | 187        |
| <b>2. Utilização Prevista</b>                   | <b>187</b> |
| <b>3. Instruções de Segurança</b>               | <b>188</b> |
| 3.1. Descrição Geral dos Avisos                 | 188        |
| 3.2. Descrição Geral das Precauções             | 190        |
| 3.3. Descrição Geral da Informação Importante:  | 192        |
| <b>4. Instruções e Formação</b>                 | <b>192</b> |
| <b>5. Descrição do Produto</b>                  | <b>193</b> |
| 5.1. Descrição Esquemática                      | 193        |
| <b>6. Instruções Gerais Antes de Utilização</b> | <b>194</b> |
| 6.1. Lista de Acessórios                        | 194        |
| 6.2. Bateria                                    | 195        |
| 6.3. Cânula Nasal                               | 196        |
| <b>7. Funcionamento do Concentrador</b>         | <b>197</b> |
| 7.1. Conexão da Cânula Nasal                    | 197        |
| 7.2. Ativação                                   | 198        |
| 7.3. Seleção do Idioma Preferido                | 198        |
| 7.4. Ajuste das Definições                      | 198        |
| 7.5. Botão da Bateria                           | 199        |
| 7.6. Resposta aos Alarmes                       | 199        |
| 7.7. Desativação                                | 200        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>8. Viajar com o COP Zen-O lite™ por via aérea</b> .....  | <b>200</b> |
| 8.1. Preparação de passageiros antes do voo .....   | 200        |
| 8.2. Informações sobre "utilização a bordo e voo" .....   | 202        |
| 8.3. Requisitos da Administração para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos<br>(Transportation Security Administration, TSA) ..... | 204        |
| <b>9. Indicadores de Alarme</b> .....   | <b>205</b> |
| 9.1. Alarmes .....  | 206        |
| <b>10. Resolução de Problemas</b> .....   | <b>209</b> |
| <b>11. Manutenção e Limpeza</b> .....   | <b>210</b> |
| 11.1. Manutenção de Rotina .....  | 210        |
| 11.2. Limpeza Exterior .....  | 210        |
| 11.3. Vida Útil .....   | 211        |
| 11.4. Conector do serviço .....   | 211        |
| <b>12. Reparação e Eliminação do Dispositivo</b> .....  | <b>211</b> |
| 12.1. Reparação .....   | 211        |
| 12.2. Filtros de crivo Instruções de substituição: .....  | 212        |
| 12.3. Eliminação .....  | 213        |
| <b>13. Garantia</b> .....   | <b>213</b> |
| <b>14. Marcas Comerciais e Isenção de Responsabilidade</b> .....  | <b>213</b> |
| 14.1. Marca Comercial .....   | 213        |
| 14.2. Isenção de Responsabilidade .....   | 213        |
| <b>15. Descrição Técnica</b> .....  | <b>214</b> |
| 15.1. Informação Acerca da Compatibilidade Eletromagnética (EMC) .....  | 217        |
| <b>16. Glossário - Explicação dos Símbolos na Embalagem e Rotulagem</b> .....   | <b>220</b> |

# 1. Prefácio

Consulte este manual para obter instruções detalhadas acerca dos avisos, precauções, especificações e informação adicional.

**IMPORTANTE:** Os utilizadores devem ler este manual na íntegra antes de utilizar o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. O não cumprimento desta indicação pode originar lesões pessoais e/u morte. Contacte o seu distribuidor se tiver quaisquer dúvidas acerca da informação disponível neste manual do utilizador ou acerca do funcionamento seguro deste sistema.

## 1.1. Informação Geral

Este manual do utilizador disponibiliza informação para os utilizadores do Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. Resumindo, os termos “concentrador”, “POC”, “unidade” ou “dispositivo” são por vezes utilizados neste documento para descrever o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. “Paciente” e “Utilizador” são utilizados intercambiavelmente.

## 1.2. Classificação

Este dispositivo está certificado por um laboratório de testes reconhecido internacionalmente e classificado no que diz respeito a choques elétricos, incêndios e perigos mecânicos de acordo com as seguintes normas:

- IEC/EN 60601-1:2012, Equipamento Médico Elétrico – Parte 1: Regras Gerais de Segurança Básica e Desempenho Essencial
- IEC/EN 60601-1-2:2014, Parte 1-2: Regras Gerais de Segurança – Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Regras e Testes.
- IEC/EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Equipamento Médico Elétrico – Parte 1-6: Regras Gerais de Segurança Básica e Desempenho Essencial – Norma Colateral: Usabilidade
- IEC/60601-1-8:2006 Equipamento Médico Elétrico – Parte 1-8: Regras Gerais para Segurança – Norma Colateral: Regras Gerais, Testes e Diretrizes para Sistemas de Alarme em Equipamento Médico Elétrico e Sistemas Médicos Elétricos
- IEC/60601-1-11:2011 Equipamento Médico Elétrico - Parte 1-11: Regras Gerais de Segurança - Norma Colateral: Regras de Equipamento Médico Elétrico e Sistemas Médicos Elétricos Usados no Ambiente de Cuidados de Saúde Domiciliários.
- ISO 80601-2-67:2014, Medical Electrical Equipment - Part 2-67: Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Oxygen Conserving Equipment.
- ISO 80601-2-69:2014, Medical Electrical Equipment - Part 2-69: Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Oxygen Concentrator Equipment.
- CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1:14, Norma Canadiana, Equipamento Médico Elétrico - Parte 1: Regras Gerais de Segurança Básica e Desempenho Essencial
- Diretiva Relativa a Dispositivos Médicos 93/42/CEE


## Este equipamento está classificado como:

- Classe II
- Classe IIa de acordo com a MDD 93/42/CEE
- Tipo BF
- IP22 com a bolsa de transporte

### 1.3. Convenções de Terminologia

Estas instruções contêm avisos, precauções e notas para ajudar a chamar atenção aos aspetos de segurança e de funcionamento mais importantes do dispositivo. Para ajudar a identificar estes itens quando ocorrem no texto, são apresentados usando as seguintes convenções tipográficas:

 **AVISO:** Declarações que descrevem reações adversas graves e potenciais perigos de segurança.

 **PRECAUÇÃO:** Declarações que chamam atenção para a informação acerca de quaisquer cuidados especiais a serem exercidos pelo profissional e/ou paciente para a utilização segura e eficaz do dispositivo.

*IMPORTANTE: Declarações que chamam atenção para a informação significativa adicional acerca do dispositivo ou um procedimento.*

## 2. Utilização Prevista

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ destina-se a disponibilizar oxigénio adicional a pacientes adultos com doenças pulmonares crónicas ou qualquer paciente que exija oxigénio adicional.

O dispositivo é portátil, e permite o tratamento no domicílio de pacientes que necessitem de um dispositivo de oxigénio de acordo com a receita médica ou indicações de um médico.

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ não se destina a utilização em situações de suporte de vida ou sustentação de vida, e é fornecido não esterilizado. Trata-se de um dispositivo fornecido com receita médica apenas e foi concebido para utilização no interior e exterior. Para obter informação acerca das condições de funcionamento corretas, consulte o Capítulo 15. Descrição Técnica.

### **O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ não se destina a ser utilizado:**

- em situações de suporte de vida ou sustentação de vida
- num ambiente operatório ou cirúrgico
- com uma população não adulta
- em conjunto com materiais anestésicos inflamáveis ou inflamáveis

PT

### 3. Instruções de Segurança



#### 3.1. Descrição Geral dos Avisos

1. O dispositivo deve ser utilizado na bolsa de transporte para fornecer proteção contra intrusão de líquidos de chuva e/ou derrames.
2. Existe um risco de incêndio associado ao equipamento e terapia de oxigênio. Não utilize perto de faíscas ou chamas vivas.
3. As definições do Concentrador de Oxigênio Portátil Zen-O lite™, RS-00600, podem não corresponder com fluxo contínuo de oxigênio.
4. As definições de outros modelos ou marcas de equipamento de terapia de oxigênio não correspondem às definições do Concentrador de Oxigênio Portátil Zen-O lite™ RS-00600.
5. Vento ou correntes de ar fortes podem afetar adversamente o fornecimento preciso de terapia de oxigênio.
6. Pacientes geriátricos ou qualquer outro paciente incapaz de comunicar situações de desconforto podem necessitar de monitorização adicional para evitar a ocorrência de lesões.
7. Fumar (incluindo cigarros eletrônicos) durante a terapia de oxigênio é perigoso e é provável que cause queimaduras faciais ou morte. Não permita fumar ou a presença de chamas vivas na mesma divisão que o concentrador de oxigênio portátil ou quaisquer acessórios de transporte de oxigênio. Se fumar, deve sempre desligar o concentrador de oxigênio, remova a cânula da saia ou divisão onde quer a cânula ou o concentrador estiverem localizados. Se não conseguir sair da divisão, deve aguardar 10 minutos após a interrupção do fluxo de oxigênio.
8. Use apenas loções à base de água que sejam compatíveis com oxigênio, antes e durante a terapia de oxigênio. Nunca use loções ou cremes perfumados à base de petróleo ou óleo ao operar o dispositivo para evitar o risco de incêndio e queimaduras.
9. A presença de chamas vivas durante a terapia de oxigênio é perigosa e é provável que cause incêndios ou morte. Não permita a presença de chamas vivas a uma distância de 2 m do concentrador de oxigênio ou qualquer acessório de transporte de oxigênio.
10. O oxigênio facilita o início e propagação dos incêndios. Não deixe a cânula nasal sobre colchas ou almofadas com o concentrador ligado, mas sem estar em uso; o oxigênio tornará os materiais inflamáveis. Desligue o concentrador quando não estiver em uso para prevenir o enriquecimento de oxigênio.
11. Crítico! Perigo de explosões. Não utilize na presença de anestésicos inflamáveis!
12. Não utilize este dispositivo na presença de poluentes ou fumos.

13. Não submerja este dispositivo em líquidos. Não exponha a água ou precipitação. Não exponha a condições com poeiras.
14. Não utilize um dispositivo ou qualquer outro acessório que exiba quaisquer sinais de danos.
15. Não use lubrificantes neste dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios.
16. A utilização deste dispositivo a uma altitude superior a 4,000 m (13,000 pés), ou fora do intervalo de temperatura de 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F), ou fora do intervalo de humidade de 5% a 93% pode afetar adversamente a taxa do fluxo e percentagem de oxigénio e, conseqüentemente, da qualidade da terapia. Quando não estiver em uso, o dispositivo deve ser armazenado num ambiente limpo e seco entre -20 °C e 60 °C (-4°F e 140 °F). A utilização e/ou armazenamento fora das condições válidas pode danificar o produto. Para obter mais informações detalhadas técnicas, consulte o Capítulo 15. Descrição Técnica.
17. Certifique-se sempre de que está introduzida pelo menos uma bateria antes de utilizar este dispositivo.
18. Contacte o seu médico ou procure assistência médica imediata para evitar lesões caso se sinta doente ou sinta algum desconforto durante o uso deste dispositivo.
19. O seu prestador de oxigenoterapia domiciliar deve verificar a compatibilidade do dispositivo e todos os acessórios usados antes da utilização. Para assegurar que está a receber a quantidade terapêutica de oxigénio para a sua condição médica, o dispositivo compatível verificado e respetivos acessórios só devem ser utilizados após uma ou mais definições lhe terem sido determinadas ou prescritas para si considerando os seus níveis de atividade específicos pelo seu prestador de oxigenoterapia domiciliar.
20. O fio elétrico e tubagem podem constituir um perigo de queda ou estrangulação. Mantenha-os afastados de crianças e animais de estimação.
21. Não desmonte ou modifique este dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios. Não tente efetuar quaisquer tarefas de manutenção além das descritas no Capítulo 10. Resolução de Problemas. A desmontagem pode criar um perigo de choque elétrico e anulará a garantia. Contacte o seu distribuidor para solicitar assistência por técnicos autorizados.
22. Utilize apenas as peças sobresselentes recomendadas pelo fabricante para assegurar o funcionamento devido e evitar o risco de incêndio e queimaduras.
23. Não tente reparar ou realizar trabalhos de manutenção enquanto o dispositivo está em uso pelo paciente.

## 3.2. Descrição Geral das Precauções

1. Mantenha afastado de fontes de calor (lareiras, radiadores, etc.) que possam fazer com que a temperatura operacional no ou perto do dispositivo seja superior a 40°C (104 °F).
2. Pode ser difícil ler o ecrã em condições de luminosidade elevada (luz solar direta, luzes interiores, etc.); afaste-se da luz direta para poder consultar o ecrã.
3. Manter afastado de fibra de algodão ou qualquer outro material solto que podem bloquear as entradas de ar.
4. Alguns países limitam a venda deste dispositivo por ou mediante a receita de um médico responsável pela prescrição. Certifique-se de que cumpre a legislação local relevante.
5. A terapia de oxigénio sem receita médica pode ser perigosa sob determinadas circunstâncias. Utilize este dispositivo apenas quando receitado por um médico.
6. Os pacientes com uma frequência respiratória rápida que exija uma definição de oxigénio mais elevada podem necessitar de uma quantidade de oxigénio superior à que este dispositivo consegue produzir - consultar o Capítulo 15. Descrição Técnica. Este dispositivo pode não ser apropriado para uma tal situação. Consulte o seu médico para solicitar um tratamento alternativo.
7. Opere sempre o dispositivo com a definição receitada por um médico. Não altere a definição exceto caso tal seja receitado por um médico. A reavaliação periódica das definições do fluxo deve ser efetuada por um médico.
8. Não utilize este dispositivo enquanto estiver a dormir exceto caso tal seja receitado pelo seu médico.
9. Recomendamos a disponibilidade de uma fonte de oxigénio alternativa na eventualidade de uma falha da corrente ou avaria mecânica. Consulte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar ou médico para solicitar um sistema de reserva apropriado.
10. Este dispositivo pode só alcançar a pureza da concentração de oxigénio especificada depois de estar em utilização durante mais de 2 minutos de acordo com a taxa do fluxo definida.
11. Este dispositivo foi concebido para utilização por um paciente de cada vez.
12. Consulte um médico antes de utilizar este dispositivo se não conseguir ouvir ou ver os alarmes, não possuir sensibilidade tátil normal ou não conseguir comunicar situações de desconforto.
13. Um alarme indicará uma condição na qual a concentração de oxigénio descer abaixo do nível especificado. Interrompa a utilização deste dispositivo se o alarme persistir e passe para uma fonte de oxigénio alternativa; em seguida, contacte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar.
14. Utilize apenas acessórios aprovados com este dispositivo. Consulte a lista de acessórios



aprovados disponível na Secção "6.1. Lista de Acessórios" bem como a cânula aprovada para utilização com este dispositivo. A utilização de acessórios ou de uma cânula não aprovados pode prejudicar o desempenho deste dispositivo.

15. Este dispositivo não foi concebido para utilização com um humidificador ou nebulizador. O desempenho do dispositivo pode ser diminuído e o dispositivo pode ser danificado se for utilizado com um humidificador ou nebulizador.
16. Cumpra sempre as instruções do fabricante da cânula para assegurar uma utilização apropriada.
17. Substitua a cânula regularmente. Consulte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar ou médico para determinar a frequência da substituição da cânula.
18. Certifique-se de que este dispositivo funciona com carga da bateria após desligar a fonte de alimentação.
19. Carregue apenas a bateria neste dispositivo ou num carregador aprovado. (Consulte a lista de acessórios aprovados.)
20. Remova a bateria se este dispositivo não for utilizado durante mais de sete dias. Armazene a bateria num local fresco e seco.
21. Não utilize agentes de limpeza além dos especificados neste manual. Aguarde até a solução de limpeza secar na superfície limpa antes de utilizar.
22. Desligue sempre este dispositivo quando não estiver em utilização.
23. Desligue sempre a alimentação e desligue este dispositivo antes de o limpar. Consulte o Capítulo 11. Manutenção e Limpeza.
24. Não obstrua as aberturas de entrada de ar ou de exaustão durante o funcionamento deste dispositivo. Os bloqueios podem causar uma acumulação interna de calor e desligar ou danificar este dispositivo.
25. Não coloque objetos sobre a parte superior deste dispositivo.
26. Mantenha afastado de crianças e animais de estimação para impedir a ocorrência de danos no dispositivo e acessórios e/ou alterações acidentais das definições.
27. Mantenha o dispositivo longe dos animais de estimação e bichos.
28. Este dispositivo tem a classificação IP22 enquanto utilizado no saco de transporte. Não utilize em condições com poeiras ou humidade.
29. Utilize sempre num local bem ventilado.
30. Cumpra sempre o calendário de manutenção conforme especificado no Capítulo 11.1. Manutenção de Rotina.
31. Se este dispositivo indicar uma condição anómala, consulte o Capítulo 9. Resolução de Problemas.


32. Exerça os devidos cuidados ao tocar neste dispositivo com temperaturas ambiente elevadas.
33. O equipamento pode ser utilizado para outro paciente. O equipamento deve ser limpo segundo indicações na secção 11.2 deste manual, de acordo com as leis locais e prescrições antes de entrega a novo paciente.
34. O dispositivo pode ser isolado da corrente desligando a fonte de alimentação do conector de entrada, ver fig. 1, posicione o dispositivo para facilitar o acesso ao conector de entrada de alimentação.

### 3.3. Descrição Geral da Informação Importante:

1. *Se for necessário utilizar uma extensão, utilize uma extensão UL com classificação de 15 amp ou superior. Não ligue quaisquer outros dispositivos na mesma extensão. Não utilize uma extensão com múltiplas fichas.*
2. *Inale através do nariz para o concentrador trabalhar de uma maneira mais eficaz. Inalar através da boca pode originar uma terapia de oxigénio menos eficaz.*

## 4. Instruções e Formação

A Diretiva relativa a dispositivos médicos 93/42/CEE indica que o fornecedor do produto deve certificar-se de que todos os utilizadores deste dispositivo são fornecidos com o manual do utilizador e têm a formação completa acerca da utilização do equipamento.

 **AVISO: Não utilize o produto sem a formação devida! Os pacientes e prestadores de oxigenoterapia domiciliar devem realizar formação apropriada com um formador com a devida experiência autorizado pelo fabricante e que tenha a formação, conhecimento e experiência apropriados.**

Contacte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar para obter mais informação acerca da formação.

## 5. Descrição do Produto

### 5.1. Descrição Esquemática

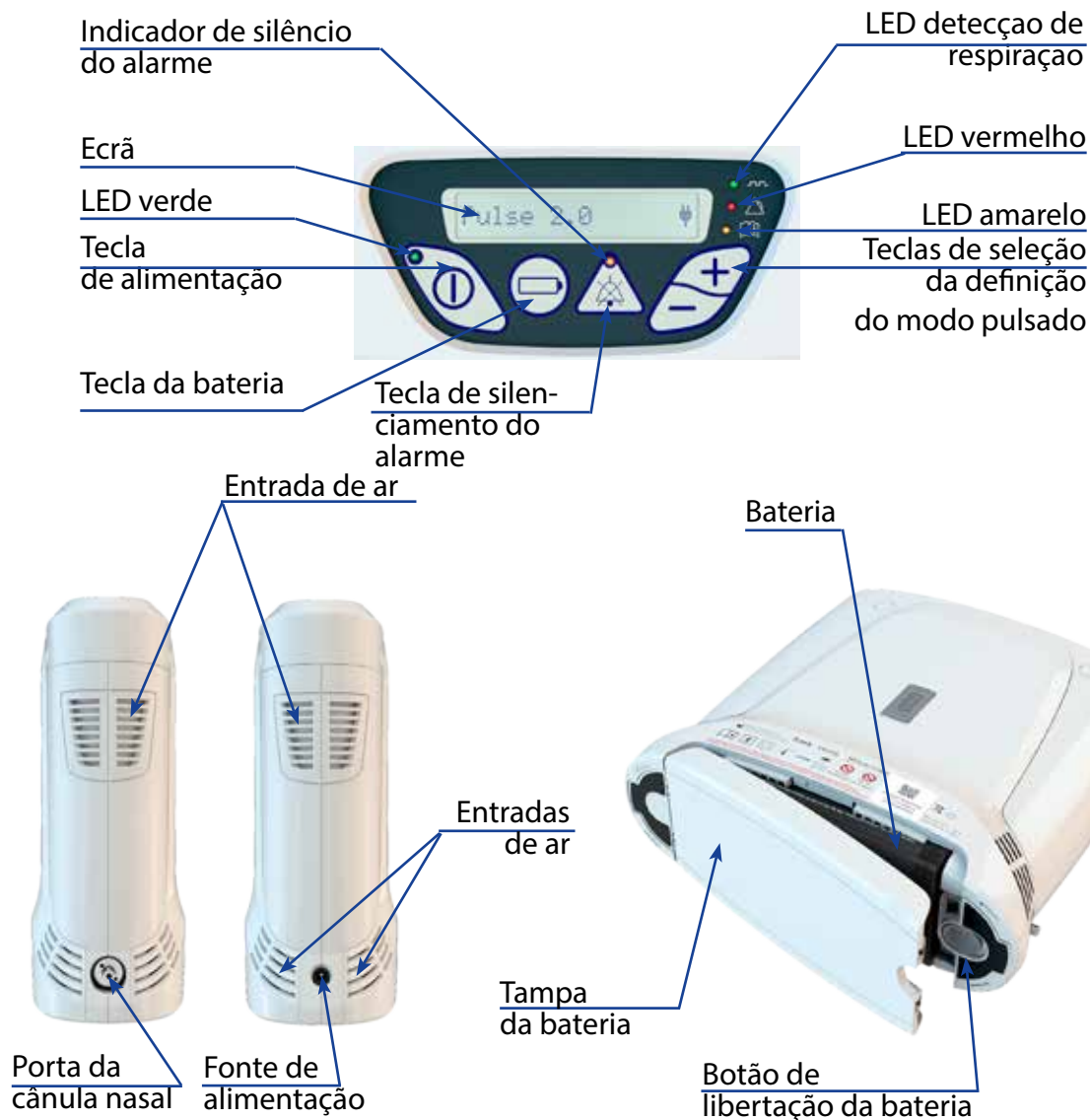


Fig. 1

## 6. Instruções Gerais Antes de Utilização

Vários acessórios podem melhorar a portabilidade e utilização do Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. Além do dispositivo, a embalagem contém acessórios para auxiliar ao início da utilização do dispositivo e um manual do utilizador.

Inspeccione o dispositivo e respetivos acessórios para detetar quaisquer sinais de danos antes da utilização.

*IMPORTANTE: Embora a caixa ou embalagem possa exibir alguns danos, por ex., rasgões ou amolgadelas, o dispositivo pode ainda assim estar em bom estado de funcionamento. Contacte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar se o dispositivo ou qualquer acessório exibir quaisquer sinais de danos.*

Antes de começar a utilizar o dispositivo, certifique-se de que os seguintes componentes estão disponíveis:

- Concentrador
- Bateria
- Bolsa de transporte
- Fonte de alimentação de corrente CA
- Fonte de alimentação de corrente CC

### 6.1. Lista de Acessórios

Utilize apenas as fontes de alimentação/carregadores ou acessórios especificados neste manual. O uso de acessórios não especificados pode criar um situação de perigo e/ou afetar negativamente o desempenho do dispositivo.

- Bateria recarregável (RS-00601)
- Fonte de alimentação de corrente CA – Fio elétrico europeu (RS-00602)
- Fonte de alimentação de corrente CA – Fio do Reino Unido (RS-00603)
- Fonte de alimentação de corrente CA – Fio da América do Norte (RS-00604)
- Fonte de alimentação de corrente CC (RS-00605)
- Bolsa de transporte (RS-00606)
- Fio elétrico europeu (RS-00504)
- Fio do Reino Unido (RS- 00506)
- Fio da América do Norte (RS-00503)
- Carregador de bateria externa - A União Europeia (RS-00516)
- Carregador de bateria externa - US (RS-00515)
- Carregador de bateria externa - UK (RS-00517)



**AVISO:** Não utilize o dispositivo ou qualquer outro acessório que exiba quaisquer sinais de danos.

## 6.2. Bateria


O Concentrador de Oxigênio Portátil Zen-O lite™ pode ser sempre utilizado quando ligado diretamente a uma fonte de alimentação. Porém, para melhorar a sua portabilidade, o concentrador está equipado com uma bateria de íões de lítio interna recarregável.

**⚠ ATENÇÃO:** Assegurar sempre que a bateria esteja inserida antes de usar este dispositivo.

*IMPORTANTE:* Estão disponíveis fontes de alimentação opcionais para várias utilizações a nível global e viagem. Consulte a lista de acessórios aprovados no Capítulo 6.1.

### 6.2.1. Carregar a Bateria

**⚠ PRECAUÇÃO:** Carregue apenas a bateria neste dispositivo ou num carregador aprovado. (Consulte a lista de acessórios aprovados no Capítulo 6.1.)

- Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, colocar a bateria como mostrado na Fig. 2. a bateria ficará travada quando totalmente encaixada.
- Feche o compartimento da bateria assegurando que as patilhas da tampa fixam ao dispositivo.
- Ligar a alimentação AC/DC ligando a ficha redonda no local indicado na parte lateral do dispositivo do concentrador Fig. 3.
- Ligar a outra extremidade do cabo AC/DC numa tomada corrente. Tome as devidas precauções ao ligar a ficha a tomada.
- O display mostra **A carr.: NN%**  .

Antes de utilizar, permita que uma bateria carregue durante pelo menos três horas. Com a carga completa, o dispositivo pode funcionar durante até 4 horas com uma bateria com 18 inspirações por minuto.

*IMPORTANTE:* O tempo de funcionamento pode variar com base na frequência respiratória, idade da bateria e condições ambientais. Consulte o texto apresentado no dispositivo para obter informação acerca do estado de carga da bateria.

*IMPORTANTE:* Certifique-se de que o ícone do estado da alimentação (consulte a Fig. 7) indica que a alimentação está conectada. Caso contrário, certifique-se de que o fio está devidamente conectado. (Consulte o Capítulo 10. Resolução de Problemas para obter mais informação.)



Fig. 2



Fig. 3

Para maximizar a vida útil da bateria e tempo de funcionamento, evite permitir que a bateria descarregue na totalidade e utilize o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação sempre que possível. A bateria interna carregará automaticamente sempre que o concentrador estiver ligado a uma fonte de alimentação. Pode utilizar o dispositivo enquanto a bateria está a carregar. O painel LCD irá indicar se o dispositivo está a funcionar com bateria ou fonte de alimentação externa.


A bateria com a carga completa manterá algum nível de carga durante até trinta dias neste dispositivo quando este não estiver em uso - consulte a Precaução abaixo para obter recomendações acerca da remoção/armazenamento da bateria.


*IMPORTANTE: A bateria do concentrador pode sofrer danos se permitir que descarregue completamente.*

*IMPORTANTE: A capacidade da bateria será de pelo menos 80% da sua capacidade original após 300 ciclos de carga/descarga. Substitua a bateria quando a vida reduzida da bateria afetar a sua mobilidade.*

*IMPORTANTE: A fonte de alimentação CC deve ser utilizada em veículos com a potência nominal de saída adequada.*

*IMPORTANTE: O veículo deve estar em funcionamento durante a utilização do adaptador CC para alimentar o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O.*

 **PRECAUÇÃO:** Remova a bateria se este dispositivo não for utilizado durante mais de sete dias. Armazene a bateria num local fresco e seco.


 **PRECAUÇÃO:** Certifique-se de que este dispositivo funciona com carga da bateria após desligar a fonte de alimentação.

*IMPORTANTE: Quando não utilizar a bateria no interior da unidade, certifique-se de que a armazena na manga protetora fornecida com a embalagem original. Se a bateria não for utilizado por longos períodos, carregue a bateria completamente pelo menos uma vez por ano.*

### 6.3. Cânula Nasal

**Utilize apenas uma cânula nasal com as seguintes especificações:**

- 2,1 m (7 pés) ou 7,6 m (25 pés) de comprimento
- Fluxo elevado
- Orifício com diâmetro interno grande
- Pontas direitas não afuniladas
- Adequada para até 15 lpm de máximo. pressão de 3,6 psi
- Cumprindo as regras de compatibilidade de substância da norma IEC/EN 60601-1

 **PRECAUÇÃO:** Utilize apenas acessórios aprovados com este dispositivo. Consulte o guia de acessórios aprovados para obter uma lista completa de acessórios e cânula aprovados para uso com este dispositivo. A utilização de acessórios ou de uma cânula não aprovados pode

prejudicar o desempenho deste dispositivo, incluindo a taxa de fluxo ou pureza de oxigénio.

Contacte o seu distribuidor para obter informação atualizada e acessórios ou caso necessite de acessórios adicionais, opcionais ou de substituição.

## 7. Funcionamento do Concentrador

**IMPORTANTE:** Leia a Secção 3.1. Descrição Geral dos Avisos e a Secção 3.2. Descrição Geral das Precauções antes de utilizar este dispositivo.

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ foi concebido para permitir uma fácil utilização, estando todas as funções acessíveis através de apenas algumas teclas no painel de controlo.

O dispositivo deve ser transportado no seu saco de transporte e usado quando posicionado na posição vertical sobre uma superfície plana ou no chão, enquanto no saco de transporte. O paciente deve estar dentro da área inferior ao comprimento da cânula recomendada durante a utilização.

**IMPORTANTE:** A retroiluminação do ecrã permanece desligada exceto durante as sequências de arranque e desativação. A retroiluminação é ativada brevemente após a pressão de qualquer tecla. A retroiluminação também permanecerá ativa durante uma condição de alarme não silenciado.

### 7.1. Conexão da Cânula Nasal

**⚠ PRECAUÇÃO:** Substitua a cânula regularmente. Consulte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar ou médico para determinar a frequência da substituição da cânula.

**⚠ PRECAUÇÃO:** Cumpra sempre as instruções do fabricante da cânula para assegurar uma utilização apropriada.

Conecte a tubagem à porta da cânula conforme apresentado na Fig. 5.

Para conectar a cânula ao paciente, posicione as pontas da cânula nas narinas do paciente e passe a tubagem sobre ambas as orelhas e debaixo do queixo. Cumpra as instruções do fabricante.

Deslize o adaptador pela tubagem para ajustar para fins de conforto e encaixe.

Respire normalmente através do nariz após fixar a cânula. O Zen-O lite™ detetará a respiração e administrará o oxigénio durante a inalação.



Fig. 5




Fig. 6

PT



**IMPORTANTE:** Uma colocação incorreta da cânula pode fazer com que o dispositivo não consiga detetar todos os esforços respiratórios do paciente. Certifique-se de que a cânula está devidamente conectada e introduzida na totalidade.

## 7.2. Ativação

- Prima a tecla de alimentação  para ligar o dispositivo.
- O concentrador emitirá um sinal sonoro e os LEDs verde, amarelo e vermelho piscarão todos uma vez, enquanto o ecrã apresenta o nome do dispositivo.



LED vermelho - indica uma situação de aviso, perigo e/ou necessidade de ação








LED amarelo - indica uma situação de advertência ou atenção;



LED verde intermitente - indica que o oxigénio está a ser distribuído.



**IMPORTANTE:** Só é possível efetuar quaisquer ajustes após a conclusão da sequência de arranque.

## 7.3. Seleção do Idioma Preferido

- Tendo o dispositivo ligado, prima ininterrupta e simultaneamente os botões  e silenciar  durante cerca de quatro segundos até surgir a indicação "Language:"
- Percorra então os idiomas disponíveis usando os botões mais  ou menos .
- Quando o idioma pretendido for mostrado, pressione o botão da bateria  para seleccionar. O dispositivo muda de idioma e regressa ao ecrã do fluxo normal.

## 7.4. Ajuste das Definições

**IMPORTANTE:** A sequência de arranque dura cerca de 35 segundos após ligar o Zen-O lite™. O nível de oxigénio especificado será alcançado após 2 minutos de uso.

- O dispositivo começa a funcionar na definição anterior.
- O dispositivo fornece um fluxo pulsado de oxigénio no início de cada inspiração.
- É possível ajustar o modo pulsado de funcionamento de 1,0 a 5,0 em incrementos de 0,5 através das teclas  e .

**IMPORTANTE:** Se suspeitar da existência de uma fuga de ar, estas podem ser detetadas usando uma solução de água e sabão aplicada no ponto de conexão da cânula-concentrador e observando para detetar a presença de bolhas de ar.

A atual definição e fonte de alimentação (alimentação externa ou bateria; o ícone da bateria também apresenta o nível aproximado de carga restante) são apresentados no ecrã conforme indicado na Fig. 7.





Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ a funcionar com carga da bateria



Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ a funcionar com alimentação externa

Fig. 7

## 7.5. Botão da Bateria

O botão da bateria (🔋) permite-lhe verificar o estado da bateria ou baterias. Prima o botão repetidamente para consultar toda a informação alternadamente.

- Primeiro, a informação no display mostra **A carr.: NN%** 🔋 ou **Bat.1: NN%** 🔋.
- A seguir **Bat1: NN%** 🔋 o numero de ciclos sera mostrado **Bat.1: N Ciclos.** 🔋 cycles ou **Bat: Ciclos** 🔋.

Após o terceiro toque no botão da bateria, o ecrã irá alternar de volta para a tela principal, mostrando a definição de fluxo de corrente. Sairá também automaticamente do menu do estado da bateria e regressa ao ecrã da definição do fluxo principal após cerca de 15 segundos sem nenhuma pressão dos botões.

## 7.6. Resposta aos Alarmes

**⚠️ PRECAUÇÃO:** Consulte um médico antes de utilizar este dispositivo se não conseguir ouvir ou ver os alarmes, não possuir sensibilidade tátil normal ou não conseguir comunicar situações de desconforto.

Prima a tecla de silenciamento do alarme (🔇) a qualquer altura silenciará a campainha. A duração do período de silenciamento depende da gravidade do alarme (consulte o Capítulo 9. Indicadores de Alarme). Durante este período de silenciamento, o LED do silenciamento permanecerá aceso, indicando que a campainha do alarme está silenciada. Prima a tecla de silenciamento novamente para anular o silenciamento dos alarmes. Prima a tecla de silenciamento quando não existe nenhum alarme ativo para silenciar quaisquer futuros alarmes de média ou baixa prioridade durante oito horas. Consulte o Capítulo 9. Indicadores de Alarme e o Capítulo 10. Resolução de Problemas para obter informação adicional acerca dos alarmes.

**IMPORTANTE:** O sistema de alarme é testado durante a sequência de arranque. Deve observar se todas as luzes de alarme se acendem brevemente e se soa um indicador sonoro de alarme. Contacte o seu distribuidor para verificar se os alarmes estão a funcionar devidamente em caso de suspeita de funcionamento indevido como a causa dos alarmes.

## 7.7. Desativação



**PRECAUÇÃO:** Desligue sempre este dispositivo quando não estiver em utilização.

Prima ininterruptamente a tecla de alimentação para desligar o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. O dispositivo emitirá um sinal sonoro e surge no ecrã uma mensagem de encerramento **A desligar** durante cerca de cinco segundos e, em seguida, passa para o modo de baixo consumo de energia.

*IMPORTANTE: Não desconecte a fonte de alimentação de corrente CA e remova a bateria simultaneamente enquanto a unidade está a funcionar. Use sempre a tecla de alimentação para desligar o dispositivo. Aguarde até o dispositivo estar completamente desativado antes de o desconectar da alimentação e remover a bateria.*

## 8. Viajar com o COP Zen-O lite™ por via aérea

### 8.1. Preparação de passageiros antes do voo

#### 8.1.1. Rotulagem necessária

O seu COP Zen-O lite™ é adequado para utilização em aeronaves, tendo cumprido todos os critérios de aceitação da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (Federal Aviation Administration, FAA). Este facto é certificado pela declaração na parte de trás do COP que indica, em texto a vermelho, «The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft» (O fabricante deste COP determina que este dispositivo está em conformidade com todos os critérios de aceitação aplicáveis da FAA para o transporte e utilização do COP a bordo de uma aeronave). Antes do voo, poder-lhe-á ser solicitado que mostre este rótulo no COP à hospedeira ou ao comissário de bordo.

#### 8.1.2. Consulta com o profissional de saúde

A FAA não exige que um passageiro consulte um profissional de saúde antes de utilizar um COP Zen-O lite™ a bordo de uma aeronave. No entanto, poderá querer debater o que se segue com o seu profissional de saúde:

- Os efeitos de uma cabina pressurizada (a altitude de pressão da cabina pode atingir até 8000 pés) nas suas necessidades em termos de oxigénio.
  - Alguns utilizadores do COP Zen-O lite™ precisam de um valor de fluxo por litro ou litros por minuto (LPM) superior para o COP Zen-O lite™ no ar devido à altitude de pressão da cabina.
  - Alguns utilizadores do COP Zen-O lite™, que utilizam um COP Zen-O lite™ ocasionalmente em terra, poderão ter de utilizar o seu COP Zen-O lite™ durante todo o voo devido à altitude de pressão da cabina.
- As suas necessidades de oxigénio no momento da viagem e se as suas necessidades se alteraram desde que o COP Zen-O lite™ lhe foi prescrito pela primeira vez ou durante a consulta mais recente com um profissional de saúde.

- Algumas disposições fundamentais do manual de utilização do COP Zen-O lite™ relativas ao fornecimento de oxigénio, indicadores, avisos e alertas, assim como a regulação/alteração do fluxo por litro ou LPM.
- Todos os membros da tripulação (pilotos e hospedeiras/comissários de bordo) recebem formação relativamente à gestão de eventos médicos durante o voo. No entanto, a FAA não exige que as transportadoras aéreas nem os membros da tripulação facultem assistência médica aos passageiros.

*IMPORTANTE: Encontra mais informações relativas à saúde e segurança de passageiros em [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Definir um número suficiente de baterias**

Você é responsável por ter consigo um número suficiente de baterias para alimentar o seu COP Zen-O lite™ durante o tempo de utilização previsto do seu COP Zen-O lite™. Deverá considerar, no mínimo, o que se segue, para definir qual o número suficiente de baterias:

- Aconselhamento do profissional de saúde relativamente ao tempo de utilização do COP Zen-O lite™.
- Informação da transportadora aérea relativamente à duração prevista do voo, assim como quaisquer escalas e atrasos não previstos.

*IMPORTANTE: Poderá ter de viajar em diversos voos ou várias companhias aéreas, o que poderá também implicar períodos prolongados de utilização do COP Zen-O lite™ em terra entre voos.*

- Informações do manual do proprietário do Zen-O lite™ relativamente à duração esperada da carga da bateria.

*IMPORTANTE: Nunca deverá depender da alimentação aérea a bordo de uma aeronave durante um voo.*

- As exigências das transportadoras aéreas para o transporte de um determinado número de baterias normalmente estão disponíveis no website de cada companhia aérea.

*IMPORTANTE: As transportadoras aéreas poderão exigir que transporte baterias suficientes para alimentar o dispositivo durante, no mínimo, 150% da duração máxima esperada do voo.*

### **8.1.4. Documentação**

Você é responsável pela utilização do COP Zen-O lite™ a bordo da aeronave. Por este motivo, a FAA recomenda que os passageiros transportem junto deles, no mínimo, este Manual do Utilizador e quaisquer outras informações escritas fornecidas pelo seu profissional de saúde relativas ao COP Zen-O lite™ e a sua utilização.

### 8.1.5. Declaração médica

Uma transportadora aérea poderá exigir um atestado médico de um passageiro com uma incapacidade caso exista uma dúvida fundamentada de que o indivíduo possa concluir o voo em segurança sem necessitar de assistência médica extraordinária durante o voo. Além disso, uma transportadora aérea poderá exigir um atestado médico de uma pessoa que necessite de oxigênio medicinal durante um voo. A FAA **não** exige que os passageiros obtenham uma declaração de um médico e apresentem essa declaração ao operador ou ao piloto comandante antes da utilização do COP Zen-O lite™ a bordo da aeronave.

### 8.1.6. Baterias sobressalentes

Danos e curto-circuitos na bateria poderão resultar em sobreaquecimento da bateria e em incêndio. Estes acontecimentos, por seu lado, podem resultar em ferimentos pessoais em passageiros e, na pior das hipóteses para alguns tipos de baterias, num incêndio catastrófico no compartimento dos passageiros. Assim, as baterias de lítio sobressalentes transportadas a bordo da aeronave têm de ser protegidas individualmente contra curto-circuito através da colocação na embalagem de venda original, cobrindo os terminais expostos, ou colocando cada bateria num saco de plástico/bolsa de proteção separados.

*IMPORTANTE: Não é permitido transportar baterias de lítio sobressalentes na bagagem de porão.*

Você é responsável por assegurar que todas as baterias sobressalentes transportadas na bagagem de cabina estão devidamente embaladas. Os fornecedores do equipamento COP Zen-O lite™, algumas companhias aéreas e transitários especializados no envio de pequenas embalagens poderão providenciar-lhe este serviço de embalagem.

## 8.2. Informações sobre "utilização a bordo e voo"

### 8.2.1. Bagagem de cabina

O seu COP Zen-O lite™ é um dispositivo auxiliar. Neste caso, as transportadoras não deverão, na implementação da sua política relativa a bagagem de cabina, contar com o COP Zen-O lite™ para o limite de bagagem de mão levada para a cabina por um indivíduo qualificado com uma incapacidade.

*IMPORTANTE: Um saco com baterias extras necessárias para alimentar o POC ZEN-O™ durante o vôo também podem ser considerados um dispositivo de apoio. No entanto, existem restrições ao valor Watt hora (Wh) máximo da bateria, que é limitada a 100Wh por bateria. Para o seu POC ZEN-O™, o valor Watt hora (Wh) é inferior a 100Wh por bateria e portanto, não será imposta nenhuma limitação.*

### 8.2.2. COP Zen-O lite™ como bagagem de porão

O seu COP Zen-O lite™ pode ser transportado numa aeronave como bagagem de cabina ou bagagem de porão. **No entanto, as baterias de lítio sobressalentes não podem ser transportadas na bagagem de porão de uma aeronave.**

### 8.2.3. Considerações relativas ao posicionamento e acondicionamento do seu COP Zen-O lite™

Para que um COP Zen-O lite™ trabalhe de modo eficiente, o filtro de ar/entrada não deve estar bloqueado durante a utilização. Por conseguinte, a área à volta do COP Zen-O lite™ não deve ter cobertores, casacos e outras peças de bagagem de cabina que possam bloquear o filtro de ar/entrada. Se o filtro de ar/entrada for bloqueado, irão correr duas coisas. Primeiro, será alertado por indicadores luminosos e/ou sonoros de aviso que indicam que a concentração de oxigénio na saída do COP Zen-O lite™ é insuficiente. Segundo, quando a temperatura dos componentes internos do COP Zen-O lite™ aumentar até um determinado limite porque o COP Zen-O lite™ continua a tentar fornecer oxigénio, o COP Zen-O lite™ irá desligar-se automaticamente para evitar sobreaquecimento do COP Zen-O lite™ e será alertado por indicadores luminosos e/ou sonoros de aviso.

#### **Posicionamento do Zen-O lite™ a bordo de uma aeronave**

O COP Zen-O lite™ deve ser posicionado sob o assento à sua frente para que você ou a hospedeira/o comissário de bordo possam ver os indicadores luminosos de aviso e/ou escutar o sinal sonoro de aviso. O posicionamento diretamente sob o assento e o posicionamento num compartimento fechado iriam impedi-lo de ver os indicadores luminosos de aviso assim como, possivelmente, de escutar os sinais sonoros de aviso. Poder-se-ão aceitar outros locais de posicionamento conforme aceite pela hospedeira/comissário de bordo.

### 8.2.4. Restrições de lugares para passageiros que planeiem utilizar um COP Zen-O lite™ a bordo de uma aeronave

**Lugares na fila junto à saída** — As diretrizes internacionais para aeronaves proíbem que os passageiros que utilizem qualquer dispositivo auxiliar, incluindo o Zen-O lite™, de ocupar um lugar junto à saída.

**Acondicionamento durante a movimentação** — Durante a movimentação em terra (reboque do portão e táxi), descolagem e aterragem, o COP Zen-O lite™ deve ser devidamente acondicionado e de modo a não impedir o acesso de passageiros a qualquer saída ou ao corredor da cabina de passageiros. Poderão ser necessárias restrições de lugares adicionais para cumprir estas regras de segurança da FAA. Por exemplo:

1. Alguns lugares na aeronave, como na primeira fila, podem ou não ter espaço de acondicionamento aprovado para colocar um COP Zen-O lite™ durante a movimentação na superfície, descolagem e aterragem. Por conseguinte, o COP Zen-O lite™ poderá não ser devidamente acondicionado durante estas fases do voo se o utilizador do Zen-O lite™ ocupar esses lugares. Neste caso, poderá aplicar-se uma restrição de lugar.
2. Durante a movimentação em terra, descolagem e aterragem a tubagem da cânula nasal que é utilizada para fornecer oxigénio a partir do seu COP Zen-O lite™ devidamente acondicionado, não poderá atravessar a fila de modo a impedir o acesso de passageiros ou constituir risco de tropeçamento em caso de evacuação. Não poderá limitar o acesso de outro passageiro durante estas fases do voo. Neste caso, poderá ser necessária uma restrição de lugares para cumprir uma regra de segurança da FAA. Por exemplo, se todos

os lugares na fila estiverem ocupados, o lugar adequado para o utilizador do COP Zen-O lite™ seria um lugar junto à janela.

3. Um operador apenas poderá estabelecer restrições de lugares com base numa regra de segurança da FAA. Os exemplos acima representam alguns, mas não todos, os cenários a considerar.

*IMPORTANTE: Uma política geral da companhia aérea, de que todos os passageiros que embarquem na aeronave com um COP Zen-O lite™ devem ocupar um lugar junto à janela, independentemente das especificidades da situação do indivíduo, seria inconsistente com os requisitos da FAA.*

### 8.2.5. Despressurização da cabina

Um COP Zen-O lite™ em funcionamento durante uma perda de pressão da cabina não causa qualquer tipo de risco. No entanto, em caso de perda de pressão da cabina (rápida ou lenta), deverá utilizar as máscaras de oxigénio que se soltam até que a aeronave estabilize.

### 8.2.6. Utilização da energia eléctrica da aeronave

Não existe qualquer requisito para que os operadores forneçam energia eléctrica da aeronave a um utilizador de um COP Zen-O lite™. As tomadas eléctricas a bordo da aeronave são consideradas equipamento não essencial e não são exigidas pelas normas de certificação ou operacionais aplicáveis. Além disso, a ocorrência de avarias nos sistemas da aeronave poderão exigir a desativação da energia eléctrica nestas tomadas em terra ou durante o voo por motivos de segurança. Devido a esta declaração, o COP Zen-O lite™ apenas deve ser utilizado alimentado por bateria enquanto estiver a bordo da aeronave. **Nunca deverá depender da disponibilidade de alimentação eléctrica a bordo de uma aeronave durante um voo**

### 8.2.7. Hábitos tabágicos

Fumar (incluindo cigarros eletrónicos) durante a terapia com oxigénio é perigoso e poderá resultar em ferimentos graves ou morte do doente ou de outros devido a incêndio. Não permita que fumem nem permita chamas desprotegidas a uma distância de 3 metros do concentrador de oxigénio portátil ou quaisquer acessórios de transporte de oxigénio.

## 8.3. Requisitos da Administração para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (Transportation Security Administration, TSA)

Poderá obter informações detalhadas relativas a passageiros que utilizem dispositivos respiratórios, incluindo COPs Zen-O lite™, junto da TSA em <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

**As seguintes questões de controlo de segurança gerais aplicam-se aos COPs Zen-O lite™:**

1. O limite de uma mala de mão e um item pessoal (por exemplo, carteira, pasta ou mala de computador) não se aplica a medicamentos, equipamento médico, auxiliares de mobilidade, e/ou dispositivos auxiliares transportados por e/ou utilizados por uma pessoa com uma incapacidade.

- Se uma pessoa possuir documentação médica referente ao seu estado de saúde ou incapacidade, pode apresentar esta informação ao operador responsável pelo rastreio para ajudar a informá-lo sobre a situação da pessoa. Esta documentação não é necessária e não dispensará uma pessoa do processo de controlo de segurança.

## 9. Indicadores de Alarme

Se o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ detetar uma condição de alarme, indicará a situação de alarme por meio de um indicador visual e sonoro dentro de 10 segundos. Existem quatro níveis de alarmes: crítico de alta prioridade, alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade.

Cada alarme é indicado de maneira diferente pelo ecrã retroiluminado; LEDs amarelo e vermelho; e campainha, conforme indicado abaixo. Em cada caso, a mensagem de alarme e estado da alimentação substituirá o atual ecrã.

*IMPORTANTE: Todas as condições e parâmetros de alarme são predefinidos na fábrica; as condições e parâmetros não podem ser alterados ou ajustados pelo utilizador.*

*IMPORTANTE: O sistema de alarme é testado durante a sequência de arranque. Deve observar se todas as luzes de alarme se acendem brevemente e se soa um indicador sonoro de alarme.*

| Estado do alarme                  | Sinal sonoro  | Indicador visual   | Tempo de silêncio |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Crítico de alta prioridade</b> | Dez sinais sonoros por sequência; a sequência é repetida a cada 3 segundos. | LED vermelho contínuo e o dispositivo desliga-se automaticamente | 20 minutos        |
| <b>Alta prioridade</b>            | Dez sinais sonoros por sequência; a sequência é repetida a cada 3 segundos. | LED vermelho a piscar  | 20 minutos        |
| <b>Média prioridade</b>           | Três sinais sonoros por sequência; a sequência é repetida a cada 8 segundos | LED amarelo a piscar   | 8 horas           |
| <b>Baixa prioridade</b>           | Três sinais sonoros por sequência; a sequência é repetida a cada 10 minutos | LED amarelo contínuo   | 24 horas          |

PT



**IMPORTANTE:** Se existirem duas condições de alarme simultâneas, será indicado o alarme com a prioridade mais elevada. Se existirem duas ou mais condições de prioridade igual simultâneas, será apresentada a mais recente.

**IMPORTANTE:** Os alarmes mais recentes indicados pelo dispositivo são registados para referência dos técnicos de assistência. Este registo é mantido mesmo após a desativação do dispositivo ou em caso de falha da alimentação por qualquer motivo.

**IMPORTANTE:** Se a tecla de silenciamento for premida antes de uma condição de alarme (por exemplo, para silenciar o dispositivo numa sala de cinema), os alarmes críticos de alta prioridade e de alta prioridade substituirão a função de silenciamento; os alarmes de média e baixa prioridade serão silenciados durante oito horas a partir do momento em que a tecla foi premida. Prima a tecla de silenciamento para apresentar o mais recente alarme com a prioridade mais elevada. Prima a tecla de silenciamento novamente para reiniciar o temporizador de oito horas.

## 9.1. Alarmes

Quando o concentrador emite um alarme, uma mensagem correspondente será apresentada no ecrã. Tome a ação apropriada conforme indicado nos gráficos abaixo.

### 9.1.1. Alarmes Críticos de Alta Prioridade

**IMPORTANTE:** Estes alarmes desativarão o dispositivo imediatamente.

| Mensagem de alarme   | Descrição                            | Ação  |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Carreg. bat.</b>  | A bateria precisa de ser carregada.  | Carregue a bateria ligando-a à fonte de alimentação. Certifique-se de que todas as conexões estão devidamente encaixadas. |
| <b>Bat. inválida</b> | A bateria não é uma bateria aprovada | Substitua a bateria por uma bateria aprovada.   |
| <b>XX: Serviço!*</b> | Assistência necessária.              | Contacte o seu distribuidor.  |

\*Valor: 01-20



### 9.1.2. Alarmes de Alta Prioridade

*IMPORTANTE: Estes alarmes permitirão que o dispositivo continue a funcionar.*

| Mensagem de alarme   | Descrição   | Ação   |
|----------------------|---|--|
| <b>Verif. vent.</b>  | O dispositivo não consegue manter a pureza do oxigénio.         | Certifique-se de que a entrada/saída do ar não está bloqueada. Contacte o seu distribuidor se o alarme persistir.  |
| <b>Bateria fraca</b> | A duração prevista da carga da bateria é inferior a 17 minutos. | Carregue a bateria ligando-a à fonte de alimentação.<br><i>IMPORTANTE: A mensagem é limpa automaticamente quando o dispositivo é conectado à fonte de alimentação.</i> |
| <b>XX: Serviço!*</b> | Assistência necessária.   | Contacte o seu distribuidor.   |

\*Valor: 21-50

### 9.1.3. Alarmes de Média Prioridade

| Mensagem de alarme   | Descrição                                       | Ação  |
|----------------------|---|---|
| <b>Verif. cânula</b> | Nenhuma respiração detetada durante 15 segundos | Verifique a conexão da cânula. Certifique-se de que está a respirar pelo nariz. Contacte o seu distribuidor se o alarme persistir.<br><i>IMPORTANTE: A mensagem é limpa automaticamente quando for detetada respiração.</i> |
| <b>XX: Serviço!*</b> | Assistência necessária.                         | Contacte o seu distribuidor.  |

\*Valor: 51-70


PT

#### 9.1.4. Alarmes de Baixa Prioridade

| Mensagem de alarme   | Descrição               | Ação                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>XX: Serviço!*</b> | Assistência necessária. | Contacte o seu distribuidor. |

\*Value: 71-99





#### 9.1.5. Outras Mensagens

| Mensagem  | Descrição  | Ação   |
|---|--|--|
| <b>Desligado</b>  | A alimentação externa foi desconectada; a unidade está a funcionar com carga da bateria.   | Não é necessária nenhuma ação.   |
| <b>A desligar</b>   | Apresentado enquanto a unidade percorre a sua sequência de desativação.  | Não é necessária nenhuma ação.   |
| <b>Sem bateria</b>  | Apresentado como item do menu da bateria quando não existem quaisquer comunicações com a bateria.  | Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente. Contacte o seu distribuidor se a bateria estiver completamente introduzida e a mensagem continuar a ser apresentada durante mais de 30 segundos. |
| <b>Bat NN%</b>  | Percentagem da carga da bateria apresentada se for de, pelo menos, 10% e não houver nenhuma alimentação externa conectada.   | A mensagem é apresentada quando premir a tecla da bateria.   |
| <b>A carr.: NN%</b>  | NN% apresenta o atual nível de carga da bateria.<br>Apresentado quando a carga da bateria é superior a 10% mas inferior a 100% e a alimentação externa está conectada. | A mensagem é apresentada quando premir a tecla da bateria.   |
| <b>A carregar</b>   | A carga da bateria é inferior a 10% e a alimentação externa está conectada.  | A mensagem é apresentada quando premir a tecla da bateria.   |

PT

| Mensagem              | Descrição   | Ação   |
|-----------------------|---|--|
| <b>Freq. resp. XX</b> | A frequência respiratória média do paciente quando o dispositivo está a fornecer a quantidade máxima de oxigénio e o bolus é reduzido. É apresentada a frequência respiratória mais recente se não forem detetadas quaisquer respirações. | Nível de atividade reduzido.<br>Certifique-se de que a entrada/saída do ar não está bloqueada.<br><i>IMPORTANTE: A mensagem é limpa automaticamente quando o dispositivo regressa ao funcionamento normal.</i> |
| <b>Alarme apag</b>    | Um alarme definido anteriormente foi limpo automaticamente.   | Não é necessária nenhuma ação.   |
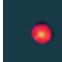
## 10. Resolução de Problemas

| Problema   | Causa possível  | Resolução do problema   |
|--|---|---|
| O sistema está inoperante  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema pode ter sido desconectado da fonte de alimentação.</li> <li>O sistema pode estar desligado.</li> <li>Ocorreu um alarme crítico de alta prioridade.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o sistema está devidamente conectado à fonte de alimentação.</li> <li>Certifique-se de que o sistema está ligado.</li> <li>Inspeccione o sistema para detetar quaisquer danos ou exposição a líquidos.</li> <li>Contacte o seu distribuidor se o problema persistir.</li> </ul> |
| Qualquer alarme sonoro ou o LED   ou   aceso | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte o Capítulo 9. Indicadores De Alarme.</li> </ul>   | Consulte o Capítulo 9. Indicadores De Alarme.   |

PT


## Resolução de Problemas (continuação)

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| A bateria não carrega | <ul style="list-style-type: none"><li>• A alimentação não está conectada.</li><li>• A bateria não está introduzida na totalidade.</li><li>• A bateria está inoperante.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique as conexões para assegurar o seguinte:<ul style="list-style-type: none"><li>• Os recetáculos redondos estão firmemente conectados à unidade.</li><li>• O fio elétrico está conectado à fonte de alimentação de corrente CA/CC ou o carregador de corrente CC para automóvel está conectado, se aplicável.</li><li>• O fio elétrico está ligado à tomada elétrica, se aplicável.</li><li>• A tomada elétrica tem alimentação.</li></ul></li><li>• Certifique-se de que a bateria está completamente assente e que a tampa do respetivo compartimento está fixa.</li><li>• Contacte o seu distribuidor se o problema persistir.</li></ul> |
|-----------------------|--|---|

## 11 Manutenção e Limpeza

### 11.1. Manutenção de Rotina


 **AVISO:** Não use lubrificantes neste dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios.


 **PRECAUÇÃO:** Substitua a cânula regularmente. Consulte o seu distribuidor ou médico para determinar a frequência da substituição da cânula.

O dispositivo indicará quando é necessário limpar ou substituir um filtro ou componente. (Consulte também o Capítulo 10. Resolução de Problemas.)

*IMPORTANTE: A cânula e o filtro do paciente podem ser contaminados pelo paciente, pelo que exerça os devidos cuidados ao manusear estes componentes.*

### 11.2. Limpeza Exterior

 **AVISO:** Não submerja este dispositivo em líquidos. Não exponha a água ou precipitação. Não exponha a condições com poeiras.

 **PRECAUÇÃO:** Não utilize agentes de limpeza além dos especificados neste manual. Aguarde até a solução de limpeza secar na superfície limpa antes de utilizar.

**⚠ PRECAUÇÃO:** Desligue sempre a alimentação e desligue este dispositivo antes de o limpar.

Limpe o exterior com um pano macio ligeiramente humedecido com água e sabão ou com toalhetes antibacterianos (solução de álcool isopropílico a 70%).

*IMPORTANTE: O exterior do dispositivo deve ser limpo semanalmente e os acessórios devem ser limpos conforme necessário. O aparelho deve ser limpo exteriormente antes de entregar a um novo paciente. O exterior do dispositivo também deve ser limpo antes de se entregar a um novo paciente, assim como é recomendado substituir o filtro de saída do paciente.*

Cânula nasal: Consulte as instruções do fabricante para a limpeza da cânula nasal.

### 11.3. Vida Útil

A vida útil prevista do dispositivo é de 5 anos, exceto as bases de filtragem. A vida útil das bases de filtragem dependerá das condições operacionais. Substitua-as conforme necessário, o que será indicado pelo alarme de verificação das aberturas de ventilação: "Check vents". Contacte o seu distribuidor para solicitar instruções acerca da substituição das bases de filtragem se as aberturas de ventilação de entrada e de exaustão não estiverem bloqueadas e o alarme "Check vents" persistir.

### 11.4. Conector do serviço

A ficha de ligação combina com a tomada TF-02091 (5.1 Vdc maximo) e é utilizada apenas para manutenção.



Fig. 8

## 12 Reparação e Eliminação do Dispositivo

### 12.1. Reparação

Não tente reparar o dispositivo. Contacte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar ou distribuidor para solicitar assistência. (Consulte o Capítulo 10. Resolução de Problemas.).

Os filtros de crivo podem ser substituídos por parte do paciente, conforme determinado pelo fornecedor ou distribuidor de oxigénio. Todas as outras manutenções ou reparações devem ser realizadas por pessoal técnico especializado.

## 12.2. Filtros de crivo Instruções de substituição:

1. Desligue o aparelho e desconecte a fonte de alimentação AC ou DC (se estiver ligado).
2. Retirar o dispositivo da bolsa de transporte.
3. Retire a bateria do dispositivo.
4. Pressionar os quatro botões de desengate localizados na parte superior do dispositivo para remover a tampa superior do dispositivo, como mostrado na Fig. 9.
5. Utilizar a ferramenta incluída com a pacote de módulos crivo de substituição para rodar o crivo-no sentido de horário 3 - 4 voltas até que possa ser removido, puxando para cima na direcção do topo do dispositivo.
6. Repita o procedimento para o segundo módulo de crivo.
7. Retirar os crivos de substituição da embalagem, remova a ficha de ar do módulo de crivo e imediatamente instalar o módulo de de crivo de substituição. Cuidado: Não deixe o crivo de substituição exposto.
8. Instalar o crivo de substituição, com rosca na parte superior do dispositivo, como mostrado na Fig. 10.
9. Aperte o crivo a mão.
10. Use a ferramenta para concluir a instalação.

### **ATENÇÃO: Não aperte demasiado!**

11. Repetir os passos 8-10 para o segundo crivo de substituição.
12. Reinstalar a tampa superior do aparelho, empurrando para baixo sobre a parte superior do dispositivo até que os quatro botões se encaixem no lugar.
13. Insira novamente a bateria no dispositivo.
14. Conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação AC ou DC.

### **NAO LIGAR!**











15. Pressione oos botoes de alarme sem som  e bateria  simultaneamente ate o mostrador ver "Leak Test".
  - a. O dispositivo irá indicar o progresso em décimas à direita do texto "leak test".
  - b. Quando acabar, o dispositivo ira indicar "Test Passed" ou "Test Failed".
    - i Test Passed - Pressione o botao  para sair, ir para ponto 16.
    - ii Test Failed - Pressione o botao  para sair, repetir 4-15.
16. Se o o teste de fugas passou, em seguida limpar o contador dispositivo de horas do crivo.
  - a. Ligue o seu concentrador portátil de oxigénio Zen-O™ Lite.



Fig. 9



Fig. 10

- b. Simultaneamente pressionar os botões  e  até aparecer "Diagnostics is displayed".
- c. Pressionar o botão  ou  para navegar no menu até "XXXH Sieve" aparecer, onde XXXX = número de horas de uso do crivo antigo.
- d. Pressionar o botão de alarme  até o contador de horas mostrar "0H Sieve".
- e. Pressionar o botão de alarme  para sair do modo de diagnóstico.
- f. O dispositivo está agora pronto para uso.

*Importante: Contacte o seu fornecedor de oxigénio ou distribuidor do dispositivo se o teste não passa após várias tentativas.*

### 12.3. Eliminação

- Contacte o seu distribuidor para obter mais informações acerca da eliminação do dispositivo.
- Elimine a bateria de acordo com os regulamentos locais ou contacte o seu distribuidor.

## 13 Garantia

A garantia do dispositivo é limitada a três (3) anos a partir da data de fabricação ou 15.000 horas de uso total. Todos os acessórios, incluindo as baterias estão limitados a um (1) ano de garantia.

A garantia standard é válida apenas para os produtos quando manipulados conforme indicado no manual do utilizador e de acordo com as boas práticas e padrões da indústria em geral.

## 14 Marcas Comerciais e Isenção de Responsabilidade

### 14.1. Marca Comercial

Todas as marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

### 14.2. Isenção de Responsabilidade

A informação neste documento foi cuidadosamente examinada e considera-se que é fiável. Além disso, o fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações a quaisquer produtos aqui mencionados para melhorar a legibilidade, função ou conceção. O fabricante não assume qualquer responsabilidade resultante da aplicação ou utilização de qualquer produto ou circuito descrito no presente; nem o mesmo abrange qualquer licença ao abrigo dos seus direitos de patente nem dos direitos de terceiros.

#### 14.2.1. Este Documento

A informação contida neste documento encontra-se sujeita a alteração sem aviso prévio. Este documento contém informação proprietária que está protegida por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer maneira, na sua totalidade ou em parte (exceto para breves excertos em análises e artigos científicos) sem a autorização prévia por escrito do fabricante. Certifique-se de que lê cuidadosamente e compreende todos os manuais fornecidos com o produto.

## Para obter ajuda

Contacte o seu prestador de oxigenoterapia domiciliar ou distribuidor caso tenha quaisquer dúvidas acerca da informação fornecida nestas instruções ou acerca do funcionamento seguro deste dispositivo.

## 15 Descrição Técnica

|  |   |
|--|---|
| <b>Tamanho:</b>                                | 249 mm (L), 97 mm (P), 231 mm (A)<br>9.8" (L), 3.8" (P), 9.1" (A)   |
| <b>Peso da unidade:</b>                        | 2.5 kg (5.5 lbs) (Sem saco de transporte)   |
| <b>Requisitos de potência:</b>                 | AC adaptor: 100-240V AC (+/- 10%), 50-60 Hz in, 24V DC, 5.0A out.<br>DC adaptor: 11.5-16V DC in, 24V, 5.0A out<br>Transformador de corrente CA: 100-240V CA (+/- 10%), 50-60 Hz entrada, 24V CC, 5,0A saída. Transformador de corrente CC: 11,5-16V CC entrada, 24V, 5,0A de saída<br><i>(Importante: ver lista de acessórios para o modelo e códigos para fonte de alimentação AC e DC.)</i> |
| <b>Pureza:</b>                                 | 87% - 96% com qualquer caudal, em condições normais de operação   |
| <b>Definição:</b>                              | Ajustável pelo utilizador em incrementos de 0,5 de 1,0 a 5,0.   |
| <b>Sensibilidade do disparo inspiratório:</b>  | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O   |
| <b>Indicador de definição:</b>                 | Ecrã LCD  |
| <b>Pressão máxima de descarga do oxigénio:</b> | 20.5 psi  |
| <b>Intervalo de humidade:</b>                  | 5% to 93% ± 2% não condensada   |
| <b>Desligar o equipamento:</b>                 | Conector de ligação a alimentação   |
| <b>Altitude operacional:</b>                   | 0 m a 4,000 m (0 pés a 13,000 pés) em relação ao nível do mar;<br>1,060 até 575 mbar  |
| <b>Nível da pressão do som:</b>                | 44dBA no nível 2 e 18 BPM<br>(Quando medido a 1 m da frente do aparelho)  |

Nível de Pressão Sonora Máximo de 52.5dBA pela ISO 80601-2-69



## Descrição Técnica (continuação)

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de proteção (elétrica):</b>                       | Classe II   |
| <b>Grau de proteção (elétrica):</b>                       | Tipo BF   |
| <b>Grau de proteção (água):</b>                           | IP22 dentro da bolsa de transporte (Proteção contra pequenos objetos e queda de água inclinada)<br>IP20 fora da bolsa de transporte (Proteção contra pequenos objetos e nenhuma proteção contra a entrada de água dentro do Concentrador) |
| <b>Grau de segurança (mistura anestésica inflamável):</b> | Não é adequado para uso na presença de uma mistura anestésica inflamável  |
| <b>Temperatura operacional:</b>                           | Funcionamento contínuo a temperaturas entre 5 °C (41 °F) e 40 °C (104 °F).  |
| <b>Temperatura de armazenamento</b>                       | Entre -20 °C (-4 °F) e 60 °C (140 °F).  |
| <b>Intervalo da pressão do som do alarme:</b>             | 65 a 85 dB(A)   |
| <b>Atrasos do sistema de alarme:</b>                      | Menos de 10 segundos após a deteção (alarmes de oxigénio baixo se o oxigénio for inferior a uma fração do volume de 82% nas condições ambientais especificadas)   |
| <b>Indicador do estado do concentrador de oxigénio:</b>   | Alarme de alta prioridade que indica que a concentração de oxigénio é inferior a 82%  |

PT

## Tamanho do bolus do modo pulsado (ml/respiração) versus definição e frequência respiratória

|                       | Definição |    |      |      |      |
|-----------------------|-----------|----|------|------|------|
| Respiração por minuto | 1         | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                    | 11        | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                    | 11        | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                    | 11        | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                    | 11        | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                    | 11        | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                    | 11        | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*Todos os valores +/- 15% através de todas as condições operacionais*

## 15.1. Informação Acerca da Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

O equipamento médico elétrico exige precauções especiais acerca da compatibilidade eletromagnética (EMC). O equipamento de comunicações por radiofrequência (RF) portátil e móvel pode afetar dispositivos como o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™. O dispositivo não deve assim ser utilizado próximo de outro equipamento. Se tal não for prático, deve observar o dispositivo para assegurar que está sempre a funcionar devidamente.

### 15.1.1. Diretrizes e Declaração do Fabricante: Emissões Eletromagnéticas

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ destina-se a utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do concentrador deve certificar-se de que ele é utilizado num tal ambiente.

| Teste de emissões  | Conformidade    | Ambiente/Diretrizes eletromagnéticas  |
|--|-----------------|---|
| Emissões RF CISPR 11                                       | Grupo 1         | O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ usa energia RF apenas nas suas funções internas. Consequentemente, as suas emissões RF são muito baixas não sendo provável que causem quaisquer interferências no equipamento eletrónico na zona circundante. |
| Emissões RF CISPR 11                                       | Classe B        | O concentrador é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e os diretamente ligados à rede pública de fornecimento de baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins domésticos.              |
| Harmónico emissões IEC 61000-3-2                           | Classe A        |   |
| Flutuações de tensão/ emissões de tremulação IEC 61000-3-3 | Em conformidade |   |

PT


### 15.1.2. Diretrizes e Declaração do Fabricante: Imunidade Eletromagnética

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ destina-se a utilização no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do concentrador deve certificar-se de que ele é utilizado num tal ambiente.

| Teste de imunidade  | IEC 60601 nível de teste  | Nível de conformidade   | Ambiente/Diretrizes  |
|---|---|---|--|
| Descarga eletrostática (ESD)<br>IEC 61000-4-2   | ± 2, 4, 6, 8kV contacto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV ar   | ± 2, 4, 6, 8kV contacto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV ar   | Os pavimentos devem ser madeira, betão ou tijoleira. Se o pavimento estiver coberto com material sintético, a humidade relativa deve ser de pelo menos 30%.  |
| Transitório/Rajada eléctricos rápidos IEC 61000-4-4   | ± 2kV para linhas de corrente eléctrica<br>± 1kV para linhas de entrada/saída   | ± 2kV para linhas de corrente eléctrica<br>± 1kV para linhas de entrada/saída   | A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar comum.   |
| Pico de tensão IEC 61000-4-5  | ± 1kV modo diferencial<br>± 2kV modo comum  | ± 1kV modo diferencial<br>± 2kV modo comum  | A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar comum.   |
| Quedas de tensão, interrupções breves e variações da tensão nas linhas de entrada da corrente eléctrica IEC 1000-4-11 | < 5% UT (>95% de queda em UT) durante 0,5 ciclos<br>40% UT (60% de queda em UT) durante 5 ciclos<br>70% UT (30% de queda em UT) durante 25 ciclos<br><5% UT (>95% de queda em UT) durante 5 seg | < 5% UT (>95% de queda em UT) durante 0,5 ciclos<br>40% UT (60% de queda em UT) durante 5 ciclos<br>70% UT (30% de queda em UT) durante 25 ciclos<br><5% UT (>95% de queda em UT) durante 5 seg | A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar comum. Se o utilizador do Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ necessitar de funcionamento contínuo durante interrupções do fornecimento da corrente eléctrica, recomendamos que o concentrador seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou bateria. |

PT

## Diretrizes e Declaração do Fabricante: Imunidade Eletromagnética (continuação)

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
| Campo magnético da frequência da potência (50/60 Hz)<br>IEC 61000-4-8  | 30 A/m                                   | 30 A/m                   | Os campos magnéticos da frequência da potência devem estar a níveis característicos de um ambiente comercial ou hospitalar comum.   |
| RF conduzida<br>IEC 61000-4-6  | 3 Vrms 150 kHz a 80 Mhz; 6Vrms ISM Bands | 3 Vrms (6Vrms ISM Bands) | O equipamento de comunicações RF portátil e móvel deve ser utilizado junto de qualquer parte do dispositivo a pelo menos a distância de separação calculada com base na equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz<br>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz<br>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz<br>onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) base para de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação em metros (m). Intensidades do campo dos transmissores RF conforme determinado por um eletromagnético deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência. <sup>b)</sup> Podem ocorrer interferências ao reposicionar o concentrador próximo do equipamento assinalado com o seguinte símbolo:  |
| RF irradiada<br>IEC 61000-4-3  | 10 V/m 80 Mhz to 2.5 Ghz                 | 10 V/m                   |   |
| <p><b>IMPORTANTE:</b> A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado. I</p> <p><b>MPORTANTE:</b> Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas.</p> <p>a) As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações radiotelefone (celulares/sem fios) e rádios terrestres móveis, rádio, transmissões de rádio AM e FM e transmissão de televisão não podem distância de separação recomendada em ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos transmissores RF fixos, um estudo eletromagnético do Intensidades do campo dos transmissores RF local deve ser considerado. Se a intensidade de campo medida no fixos, conforme determinado por um estudo eletromagnético local onde o Concentrador Zen-O lite™ é utilizado exceder o intervalo do locala deve ser inferior ao nível de conformidade RF acima, o concentrador deve ser observado o nível de conformidade em cada frequência para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anómalo, aplicável podem ser necessárias medidas adicionais, como reorientação ou deslocalização deslocalização de concentrador.</p> <p>b) Através do intervalo de frequência 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo deve ser inferior a 6 V/m.</p> |  |                          |   |

PT

### 15.1.3. Distâncias de Separação Recomendadas Entre Equipamento de Comunicações Rf Portátil e Móvel e o Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™

O Concentrador de Oxigénio Portátil Zen-O lite™ destina-se a uso num ambiente eletromagnético onde os distúrbios da RF irradiada sejam controlados. O utilizador responsável pela monitorização pode ajudar a prevenir as interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações RF portátil e móvel (transmissores) e o monitor conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

| Potência nominal máxima de saída do transmissor (W) | Distância de separação (m) de acordo com a frequência do transmissor |   |  |
|---|--|---|--|
|   | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                              | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01  | 0.12   | 0.12                                    | 0.23                                     |
| 0.1   | 0.38   | 0.38                                    | 0.73                                     |
| 10  | 3.8  | 3.8                                     | 7.3                                      |
| 100   | 12   | 12                                      | 23                                       |





No caso de transmissores com uma potência nominal de saída máxima diferente da listada acima, a distância de separação recomendada (d) em metros (m) pode ser calculada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

**IMPORTANTE:** A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais elevado.

















**IMPORTANTE:** Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electro-magnética é afetada pela absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas.

PT

## 16 Glossário - Explicação dos Símbolos na Embalagem e Rotulagem

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Consulte as instruções antes de utilizar o dispositivo |  | Limitação da pressão atmosférica operacional de 0' a 13,000'              |
|  | Tipo BF de acordo com as regras de segurança elétrica  |  | Limitação da temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |

## Glossário (continuação)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|                       | Número de série   |  | Limitação da humidade de 5% a 93% ± 2% não condensada                    |
|                       | Número de catálogo  |  | Manusear com cuidado   |
|                       | A lei federal americana limita a venda deste dispositivo a médicos ou sob receita médica.               |  | Data de fabrico  |
|                       | Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Consulte o Capítulo 6.                                  |  | Fabricante   |
| <br>No Open<br>Flames | Proibido ter chamas vivas ao pé do dispositivo quando em uso ou incinerar                               |  | Manter seco (Este símbolo refere-se à classificação IPX2 do dispositivo) |
| <br>No<br>Smoking     | Proibido fumar  |  | Eliminar a bateria usada devidamente                                     |
|                       | Recolha separada para equipamento elétrico e eletrónico   |  | Símbolo de Classe II   |
|                       | Em conformidade com as Diretivas da UE aplicáveis, incluindo a Diretiva relativa a dispositivos médicos |  | Adequado para utilização em Home care                                    |

PT



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Fabricado para:: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Italiano

## Manuale dell'utente: Zen-O lite™ Concentratore di Ossigeno Portatile (Modello: RS - 00600)

### Contenuto

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Premessa</b> .....                            | <b>224</b> |
| 1.1. Informazioni Generali .....                    | 224        |
| 1.2. Classificazione .....                          | 224        |
| 1.3. Convenzioni Tipografiche .....                 | 225        |
| <b>2. Uso Previsto</b> .....                        | <b>225</b> |
| <b>3. Istruzioni per la Sicurezza</b> .....         | <b>226</b> |
| 3.1. Panoramica delle Avvertenze .....              | 226        |
| 3.2. Panoramica delle Precauzioni .....             | 227        |
| 3.3. Panoramica delle Informazioni Importanti ..... | 229        |
| <b>4. Istruzioni e Formazione</b> .....             | <b>229</b> |
| <b>5. Descrizione del Prodotto</b> .....            | <b>230</b> |
| 5.1. Descrizione Schematica .....                   | 230        |
| <b>6. Istruzioni Generali Prima dell'uso</b> .....  | <b>231</b> |
| 6.1. Lista Accessorio .....                         | 231        |
| 6.2. Batteria .....                                 | 231        |
| 6.3. Cannula Nasale .....                           | 233        |
| <b>7. Funzionamento del Concentratore</b> .....     | <b>234</b> |
| 7.1. Collegamento della Cannula Nasale .....        | 234        |
| 7.2. Accensione .....                               | 235        |
| 7.3. Scelta della Lingua .....                      | 235        |
| 7.4. Regolazione delle Impostazioni .....           | 235        |
| 7.5. Pulsante Batteria .....                        | 236        |
| 7.6. Risposta Agli Allarmi .....                    | 236        |
| 7.7. Spegnimento .....                              | 237        |



|   |            |
|---|------------|
| <b>8. Viaggiare in aereo con il POC Zen-O lite™</b> .....                                 | <b>237</b> |
| 8.1. Preparazione pre-volo per i passeggeri .....   | 237        |
| 8.2. Imbarco e uso durante il volo .....  | 239        |
| 8.3. Requisiti della Transportation Security Administration (TSA) .....                   | 241        |
| <b>9. Indicatori di Allarme</b> .....   | <b>242</b> |
| 9.1. Allarmi .....  | 243        |
| <b>10. Risoluzione dei Problemi</b> .....   | <b>246</b> |
| <b>11. Manutenzione e Pulizia</b> .....   | <b>247</b> |
| 11.1. Manutenzione Regolare .....   | 247        |
| 11.2. Pulizia Esterna .....   | 247        |
| 11.3. Vita Utile .....  | 247        |
| 11.4. Connettore di servizio .....  | 248        |
| <b>12. Riparazione e Smaltimento del Dispositivo</b> .....                                | <b>248</b> |
| 12.1. Riparazione .....   | 248        |
| 12.2. Sostituzione dei filtri molecolari .....  | 248        |
| 12.3. Smaltimento .....   | 249        |
| <b>13. Garanzia</b> .....   | <b>250</b> |
| <b>14. Marchi di Fabbrica e Dichiarazioni di non Responsabilità</b> .....                 | <b>250</b> |
| 14.1. Marchi di Fabbrica .....  | 250        |
| 14.2. Dichiarazioni di non Responsabilità .....   | 250        |
| <b>15. Descrizione Tecnica</b> .....  | <b>251</b> |
| 15.1. Informazioni Relative alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) .....               | 253        |
| <b>16. Glossario: Spiegazione dei Simboli della Confezione e dell'etichettatura</b> ..... | <b>256</b> |

## 1. Premessa

*Per le istruzioni dettagliate relative a avvertenze, precauzioni, specifiche e informazioni aggiuntive, fare riferimento a questo manuale.*

*IMPORTANTE: Gli utenti devono leggere tutto il manuale prima di utilizzare il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™. La mancata osservanza di tale raccomandazione potrebbe portare a lesioni personali e/o al decesso. In caso di domande riguardanti le informazioni contenute in questo manuale dell'utente o le procedure per la sicurezza di questo sistema, contattare il distributore locale.*

### 1.1. Informazioni Generali

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni per gli utenti del concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™. Per brevità, in questo manuale i termini "concentratore", "POC", "unità" o "dispositivo" sono utilizzati a volte per indicare il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™. "Paziente" e "utente" sono utilizzati in modo interscambiabile.

### 1.2. Classificazione

Questo dispositivo è stato classificato da un laboratorio di analisi riconosciuto a livello internazionale per rischio di scosse elettriche, incendio e rischi meccanici in conformità agli standard seguenti:


- CEI/EN 60601-1-2:2012, Apparecchiature Elettromedicali – Parte 1: Requisiti Generali per la Sicurezza di Base e le Prestazioni Essenziali
- CEI/EN 60601-1-2:2014, Parte 1-2: Norme Generali per la Sicurezza – Norma Collaterale: Compatibilità Elettromagnetica – Prescrizioni e Prove
- CEI/EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Apparecchiature Elettromedicali – Parte 1-6: Requisiti Generali per la Sicurezza di Base e le Prestazioni Essenziali – Norma Collaterale: Usabilità
- CEI/60601-1-8:2006 Apparecchiature Elettromedicali – Parte 1-8: Norme Generali per la Sicurezza – Norma Collaterale: Prescrizioni Generali, Prove e Linee-guida per Sistemi di Allarme usati in Apparecchi e Sistemi Elettromedicali
- CEI/60601-1-11:2011 Apparecchiature Elettromedicali – Parte 1-11: Norme Generali per la Sicurezza – Norma Collaterale: Prescrizioni per Apparecchi Elettromedicali e Sistemi Elettromedicali per uso Domiciliare
- ISO 80601-2-67:2014, Dispositivi medici elettrici - Parte 2-67: Disposizioni particolari per la Sicurezza di base e prestazioni essenziali dei dispositivi economizzatori di Ossigeno.
- ISO 80601-2-69:2014, Medical Electrical Equipment - Part 2-69: Disposizioni particolari per la Sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei Concentratori di ossigeno.
- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Standard Canadese, Apparecchiature Elettromedicali – Parte 1: Requisiti Generali per la Sicurezza di Base e le Prestazioni Essenziali
- Direttiva CEE 93/42 sui Dispositivi edici


**Questa apparecchiatura è classificata come segue:**

- Classe II
- Classe IIa in base al DDM 93/42/CEE
- Tipo BF
- IP22 con borsa da trasporto

### **1.3. Convenzioni Tipografiche**

Queste istruzioni contengono avvertenze, precauzioni e note per richiamare l'attenzione su gli aspetti più importanti riguardanti la sicurezza e il funzionamento del dispositivo. Per poter riconoscere facilmente queste voci nel testo, esse sono indicate con le seguenti convenzioni tipografiche:

 **AVVERTENZE:** Dichiarazioni che descrivono reazioni indesiderate gravi e possibili rischi per la sicurezza.

 **PRECAUZIONI:** Dichiarazioni che richiamano l'attenzione su informazioni relative a qualsiasi particolare cura alla quale si dovrebbero attenere il professionista e/o il paziente per un utilizzo sicuro ed efficace del dispositivo.

*IMPORTANTE: Dichiarazioni che richiamano l'attenzione su ulteriori informazioni importanti relative al dispositivo e a una procedura.*

## **2. Uso Previsto**

Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ è indicato per fornire ossigeno supplementare a pazienti adulti che soffrono di patologie polmonari croniche o a qualsiasi paziente che richieda ossigeno supplementare.

Il dispositivo portatile consente ai pazienti che necessitano di un dispositivo di erogazione di ossigeno di essere trattati a domicilio secondo la prescrizione o le indicazioni del medico.

Il dispositivo Zen-O lite™ non è indicato per l'uso in condizioni di supporto o di sostentamento vitale, perché è fornito non sterile. È un dispositivo solo su prescrizione medica per l'uso al chiuso e all'esterno. Per le condizioni operative corrette vedere il capitolo 15. Descrizione Tecnica.

**Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ non è indicato per l'uso:**

- in condizioni di supporto o di sostentamento vitale
- in ambiente operatorio o chirurgico
- con una popolazione non adulta
- insieme ad anestetici o materiali infiammabili

### **3. Istruzioni per la Sicurezza**



#### **3.1. Panoramica delle Avvertenze**

- 1. Il dispositivo deve essere utilizzato nella borsa da trasporto per proteggerlo dalla penetrazione di liquido dovuto a pioggia e/o a perdite.**
- 2. Esiste un rischio di incendio associato ad apparecchiature con ossigeno e ossigenoterapia. Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere.**
- 3. Le impostazioni del concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ RS-00600 potrebbero non corrispondere a quelle di flusso continuo di ossigeno.**
- 4. Le impostazioni di altri modelli o marchi di apparecchiature di ossigenoterapia non corrispondono a quelle del concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ RS-00600.**
- 5. Il vento o forti spifferi possono alterare la corretta erogazione dell'ossigenoterapia.**
- 6. I pazienti geriatrici o non in grado di comunicare il proprio disagio possono richiedere un ulteriore monitoraggio per evitare danni.**
- 7. Fumare (comprese le sigarette elettroniche) durante l'ossigenoterapia è pericoloso e potrebbe provocare ustioni al viso o il decesso. Vietare il fumo o evitare la presenza di fiamme libere nella stessa stanza del concentratore di ossigeno portatile o di qualsiasi accessorio che contiene ossigeno. Se il paziente fuma, deve sempre spegnere il concentratore di ossigeno, rimuovere la cannula e lasciare la stanza in cui sono riposti il concentratore e la cannula. Se non è possibile lasciare la stanza, si devono attendere 10 minuti dopo l'interruzione del flusso di ossigeno.**
- 8. Durante l'ossigenoterapia utilizzare solo lozioni a base di acqua, compatibili con l'ossigeno. Non utilizzare mai lozioni o balsami a base di petrolio o olio per evitare il rischio di incendio e ustioni.**
- 9. Durante l'ossigenoterapia le fiamme libere sono pericolose e potrebbero provocare incendi o il decesso. Evitare la presenza di fiamme libere entro 2 m dal concentratore di ossigeno o da qualsiasi accessorio che contiene ossigeno.**
- 10. L'ossigeno facilita lo sviluppo e la diffusione di un incendio. Non lasciare la cannula nasale sul copriletto o sui cuscini delle sedie, mentre il concentratore è acceso ma inutilizzato, perché l'ossigeno può rendere il materiale infiammabile. Quando non si utilizza il concentratore, spegnerlo per evitare l'arricchimento di ossigeno.**
- 11. Critico! Rischio di esplosione. Non utilizzare in presenza di anestetici infiammabili!**
- 12. Non utilizzare questo dispositivo in presenza di inquinanti o esalazioni.**
- 13. Non immergere questo dispositivo in liquidi. Non esporlo all'acqua o a precipitazioni. Non esporlo a condizioni polverose.**
- 14. Non utilizzare un dispositivo o alcun accessorio che mostra qualsiasi segno di danno.**
- 15. Non utilizzare lubrificanti su questo dispositivo o su qualsiasi suo accessorio.**

16. L'utilizzo di questo dispositivo a un'altitudine superiore a 4,000 m (13,000 piedi) o al di fuori dell'intervallo di temperatura di 5 °C (41 °F)/40 °C (104 °F) o dell'intervallo di umidità del 5%/93% può alterare la velocità di flusso e la percentuale di ossigeno e conseguentemente la qualità della terapia. Quando il dispositivo non viene utilizzato, deve essere conservato in un ambiente pulito e secco a una temperatura compresa tra -20 e 60 °C (-4/140 °F). L'uso e/o la conservazione al di fuori delle condizioni valide può danneggiare il prodotto. Per maggiori dettagli tecnici vedere il capitolo 15. Descrizione Tecnica.
17. Verificare sempre che sia inserita almeno una batteria prima di iniziare a utilizzare questo dispositivo.
18. In caso di sensazione di malessere o disagio durante l'uso di questo dispositivo, contattare il medico o cercare immediatamente assistenza medica per evitare danni.
19. L'operatore sanitario deve verificare la compatibilità del dispositivo e di tutti gli accessori prima dell'uso. Per garantire che il paziente riceva la quantità terapeutica di ossigeno per le sue condizioni mediche, il dispositivo e gli accessori compatibili verificati devono essere utilizzati solo dopo che sono state determinate o prescritte dall'operatore sanitario una o più impostazioni per il paziente in base ai suoi livelli specifici di attività.
20. Il cavo elettrico e i tubi possono presentare un rischio di inciampo o di strangolamento. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
21. Non smontare o modificare questo dispositivo o qualsiasi suo accessorio. Non tentare di eseguire alcuna manutenzione diversa dalle attività descritte nel capitolo 10. Risoluzione dei Problemi. Lo smontaggio può creare un rischio di scossa elettrica e invalida la garanzia. Per l'assistenza da parte di personale autorizzato contattare il distributore locale.
22. Utilizzare solo ricambi raccomandati dal produttore per garantire il corretto funzionamento ed evitare il rischio di incendio e di ustioni.
23. Non effettuare riparazioni o manutenzioni mentre l'apparecchio è in uso al paziente.



### 3.2. Panoramica delle Precauzioni

1. Tenere lontano da fonti di calore (camini, stufe radianti, ecc.) che potrebbero far aumentare la temperatura operativa del dispositivo o vicino ad esso sopra i 40 °C (104 °F).
2. In condizione di luce abbagliante (luce del sole, luci d'interni, ecc.) può essere difficile leggere il display, in tal caso allontanarsi dalla luce diretta per poter visualizzare il display.
3. Tenere l'apparecchio lontano da garze o altro materiale simile che potrebbe essere attirato dalle bocche di aspirazione aria e bloccarne il regolare flusso.
4. In alcuni Paesi la vendita di questo dispositivo è limitata al medico o dietro prescrizione medica. Verificare di essere conformi alle leggi relative locali.

5. L'ossigenoterapia non prescritta può essere pericolosa in alcune circostanze. Utilizzare questo dispositivo solo quando prescritto da un medico.
6. I pazienti con una frequenza respiratoria veloce, che richiedono un'impostazione di ossigeno più alta, possono aver bisogno di più ossigeno di quanto possa erogare questo dispositivo, vedere il capitolo 15. Descrizione Tecnica. In tal caso questo dispositivo non può essere appropriato. Consultare il medico per un trattamento alternativo.
7. Utilizzare il dispositivo sempre all'impostazione prescritta dal medico. Non modificare l'impostazione se non prescritto dal medico. Il medico deve eseguire controlli periodici delle impostazioni del flusso.
8. Non utilizzare questo dispositivo quando si dorme, se non prescritto dal medico.
9. Si raccomanda di avere disponibile una fonte alternativa di ossigeno nel caso di interruzione della corrente elettrica o di danno meccanico. Per un sistema appropriato di backup consultare l'operatore sanitario o il medico.
10. Questo dispositivo raggiunge la purezza specificata di concentrazione di ossigeno dopo 2 minuti di utilizzo alla velocità di flusso impostata.
11. Questo dispositivo è progettato per l'uso da parte di un paziente alla volta.
12. Se non si è in grado di udire o vedere gli allarmi, non si ha una normale sensibilità tattile o non si è in grado di comunicare condizioni di disagio, consultare il medico prima di usare questo dispositivo.
13. Se la concentrazione di ossigeno dovesse scendere al di sotto del livello specificato, un allarme indicherà questa condizione. Se l'allarme persiste, interrompere l'utilizzo di questo dispositivo, usare una fonte alternativa di ossigeno e contattare l'operatore sanitario.
14. Utilizzare solo accessori approvati con questo dispositivo. Vedere l'elenco degli accessori e delle cannule approvati per l'uso nella sezione 6.1. L'utilizzo di accessori o cannule non approvati può alterare la prestazione di questo dispositivo.
15. Questo dispositivo non è progettato per l'uso con un umidificatore o un nebulizzatore. Se questo dispositivo viene utilizzato con un umidificatore o un nebulizzatore, la sua prestazione può risultare ridotta e il dispositivo si può danneggiare.
16. Per un uso corretto della cannula, attenersi sempre alle istruzioni del produttore.
17. Sostituire la cannula regolarmente. Verificare con l'operatore sanitario o il medico la frequenza con cui va sostituita la cannula.
18. Controllare che il dispositivo funzioni quando è alimentato dalla batteria, scollegandolo dalla fonte di alimentazione elettrica.
19. Caricare la batteria solo in questo dispositivo o in un caricatore approvato (vedere l'elenco degli accessori approvati).
20. Se il dispositivo non verrà utilizzato per più di sette giorni, rimuovere la batteria. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

21. Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti specificate in questo manuale. Prima dell'uso, lasciar sempre asciugare la soluzione detergente sulla superficie pulita.
22. Spegnere sempre questo dispositivo quando non lo si utilizza.
23. Prima della pulizia scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione e spegnerlo, vedere il capitolo 11. Manutenzione e Pulizia.
24. Durante il funzionamento di questo dispositivo non ostruire le fessure di ingresso o di sfianto di aria. Il blocco può creare un accumulo di calore interno e arrestare o danneggiare il dispositivo.
25. Non porre degli oggetti sopra questo dispositivo.
26. Tenere lontano da bambini e animali domestici per evitare di danneggiare il dispositivo o gli accessori e/o di modificare accidentalmente le impostazioni.
27. Tenere questo dispositivo lontano da bambini e animali domestici.
28. Questo dispositivo è classificato IP22 quando utilizzato nella borsa da trasporto. Non utilizzare in condizioni polverose o umide.
29. Utilizzare sempre in una posizione ben ventilata.
30. Attenersi sempre al calendario di manutenzione specificato nel capitolo 11.1.
31. Se il dispositivo indica una condizione anormale, vedere il capitolo 10. Risoluzione dei Problemi.
32. Porre attenzione quando si tocca questo dispositivo in condizioni di alte temperature.
33. Il dispositivo può essere riutilizzato con un nuovo paziente. Il dispositivo deve essere pulito come indicato nella sezione 11.2 di questo manuale e secondo le leggi locali e prescrizioni prima di essere utilizzato con un nuovo paziente.
34. L'apparecchio può essere isolato dall'alimentazione elettrica sconnettendo il connettore di ingresso, vedere fig.1, posizionare l'apparecchio in modo che il connettore sia facilmente accessibile.

### **3.3. Panoramica delle Informazioni Importanti**

1. *Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo classificato UL almeno da 15 amp. Non collegare qualsiasi altro dispositivo alla stessa prolunga. Non utilizzare una prolunga con multi-presa.*
2. *L'inalazione attraverso il naso consente al concentratore di funzionare al meglio. L'inalazione per bocca può rendere meno efficace l'ossigenoterapia.*

## **4. Istruzioni e Formazione**

La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici dichiara che il fornitore del prodotto deve garantire che tutti gli utenti di questo dispositivo posseggano il manuale dell'utente e abbiamo ricevuto una formazione completa per l'utilizzo dell'apparecchiatura.

**AVVERTENZE:** utilizzare il prodotto solo se si ha ricevuto un'adeguata formazione! I pazienti e chi li assiste devono ricevere la formazione da una persona qualificata, autorizzata dal produttore e con una formazione, conoscenza ed esperienza adeguate.  
Per ulteriori informazioni sulla formazione, contattare l'operatore sanitario.

## 5. Descrizione del Prodotto

### 5.1. Descrizione Schematica



Fig. 1



## 6. Istruzioni Generali Prima dell'uso

Numerosi accessori possono migliorare la trasportabilità e l'utilizzo del concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™. Oltre al dispositivo, la confezione contiene accessori per l'avvio e un manuale dell'utente.

Ispezionare sempre il dispositivo e i suoi accessori per qualsiasi segno di danno prima dell'uso.

*IMPORTANTE: Anche se la confezione o la scatola può mostrare alcuni danni, per es. strappi o ammaccature, il dispositivo può essere comunque in condizioni idonee all'uso. Se il dispositivo o qualsiasi accessorio mostra segni di danno, contattare l'operatore sanitario.*


Prima di iniziare, accertarsi di avere quanto segue:

- Concentratore
- Batteria
- Borsa da trasporto
- Alimentazione c.a.
- Alimentazione c.c.

### 6.1. Lista Accessorio

Utilizzare solo materiali/adattatori o accessori specificati in questo manuale. L'utilizzo di accessori non specificati può generare dei rischi e/o influire negativamente sulla prestazione del dispositivo.

- Batteria ricaricabile (RS-00601)
- Alimentazione c.a. – Cavo di alimentazione europeo (RS-00602)
- Alimentazione c.a. – Cavo di alimentazione per il Regno Unito (RS-00603)
- Alimentazione c.a. – Cavo di alimentazione per l'America del Nord (RS-00604)
- Alimentazione c.c. (RS-00605)
- Borsa da trasporto (RS-00606)
- Cavo di alimentazione europeo (RS-00504)
- Cavo di alimentazione per il Regno Unito (RS-00506)
- Cavo di alimentazione per l'America del Nord (RS-00503)
- Caricabatteria esterno - UE (RS-00516)
- Caricabatteria esterno - US (RS-00515)
- Caricabatteria esterno - UK (RS-00517)

 **AVVERTENZE: non utilizzare il dispositivo o alcun accessorio che mostra qualsiasi segno di danno.**

### 6.2. Batteria


Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ può essere sempre utilizzato quando è connesso direttamente a una fonte di alimentazione. Tuttavia, per migliorare la sua trasportabilità il concentratore è provvisto di una batteria interna agli ioni di litio ricaricabile.

 **AVVERTENZE: Assicurarsi sempre che la batteria sia inserita prima di usare il dispositivo.**

*IMPORTANTE: è possibile alimentare il dispositivo in modi diversi per adattarsi alle esigenze globali di utilizzo e viaggio, vedere l'elenco degli accessori approvati nel capitolo 6.1.*

## 6.2.1. Caricamento di Una Batterie

**⚠ PRECAUZIONI:** Caricare la batteria solo in questo dispositivo o in un caricatore approvato (vedere l'elenco degli accessori approvati nel capitolo 6.1.).

- Prima di usare il dispositivo per la prima volta installare la batteria come mostrato in Fig.2. La batteria si bloccherà non appena completamente inserita.
- Chiudere il vano batteria assicurando gli appositi ganci al dispositivo.
- Collegare il cavo dell'alimentazione c.a./c.c. inserendo il connettore rotondo nella presa sul lato del concentratore, vedere la Fig. 3.
- Inserire l'altra estremità del cavo dell'alimentazione c.a./c.c. in una presa di corrente. Porre sempre attenzione quando si inserisce il cavo dell'alimentazione in una presa della corrente a parete.
- Sul display viene visualizzato **Charging NN%**  .

Il caricatore è universale e supporta un'ampia varietà di condizioni internazionali, quindi può essere collegato a una spina a 100–240 V c.a., 50–60 Hz.

Lasciare ricaricare la batteria almeno per tre ore prima dell'uso. Una volta che la batteria è caricata completamente, il dispositivo può funzionare per un massimo di 4 a 18 respiri al minuto.

*IMPORTANTE: la durata di carica della batteria può variare in base alla frequenza respiratoria, all'età della batteria e alle condizioni ambientali. Per conoscere lo stato di carica della batteria, guardare il testo visualizzato sul display.*

*IMPORTANTE: verificare che l'icona dello stato di alimentazione (vedere la Fig. 7) indichi che il dispositivo è collegato all'alimentazione. In caso contrario, controllare che il cavo sia inserito correttamente nella presa (per maggiori informazioni vedere il capitolo 10. Risoluzione dei Problemi).*

Per massimizzare la vita della batteria e la durata della carica, evitare che si esaurisca completamente e usarla mentre il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione, ogni volta possibile. La batteria interna si carica automaticamente ogni volta che il concentratore è collegato a una fonte dell'alimentazione.

È possibile utilizzare il dispositivo mentre la batteria si carica. Il pannello LCD indicherà se l'apparecchio sta lavorando alimentato dalla batteria interna o dall'alimentazione elettrica esterna.



Fig. 2



Fig. 3


La batteria completamente carica mantiene un livello di carica per un massimo di trenta giorni all'interno del concentratore inutilizzato, vedere Precauzioni di seguito per le raccomandazioni sulla rimozione/conservazione della batteria.


*IMPORTANTE: Se la batteria del concentratore viene lasciata scaricare completamente, si può danneggiare.*

*IMPORTANTE: Dopo 300 cicli di caricamento/scaricamento, la capacità della batteria sarà almeno l'80% della sua capacità originale. Sostituire la batteria, quando la ridotta durata della carica influisce sugli spostamenti.*

*IMPORTANTE: L'alimentazione CC deve essere utilizzata su veicoli con un'adeguata potenza in uscita nominale.*

*IMPORTANTE: Per poter alimentare il concentratore di ossigeno portatile Zen-O utilizzando l'adattatore CC, il veicolo deve essere in funzione.*

 **PRECAUZIONI:** Se il dispositivo non verrà utilizzato per più di sette giorni, rimuovere la batteria. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.


 **PRECAUZIONI:** Controllare che il dispositivo funzioni quando è alimentato dalla batteria, scollegandolo dalla fonte di alimentazione elettrica.

*IMPORTANTE: Quando non si usa la batteria nell'unità, accertarsi di conservarla nella custodia protettiva in dotazione con la confezione originale. Se la batteria non verrà utilizzata per lunghi periodi, caricarla comunque al massimo almeno una volta l'anno.*

### 6.3. Cannula Nasale

**Utilizzare una cannula nasale solo con le seguenti specifiche:**

- 7ft (2.1 m) or 25ft (7.6 m) long
- 2,1 m (7 piedi) o 7,6 m (25 piedi) di lunghezza
- Flusso elevato
- Diametro interno grande
- Punta dritte non coniche
- Adatta per un massimo di 15 lpm a un max. pressione di 3.6 psi
- Soddisfa la compatibilità del materiale CEI/EN 60601-1

 **PRECAUZIONI:** Utilizzare solo accessori approvati con questo dispositivo. Per un elenco completo degli accessori e delle cannule approvate con questo dispositivo fare riferimento alla guida degli accessori approvati. L'utilizzo di accessori o cannule non approvate può alterare la prestazione di questo dispositivo, compresa la velocità di flusso o la purezza dell'ossigeno. Contattare il distributore locale per informazioni aggiornate e per gli accessori o se sono necessari accessori aggiuntivi, opzionali o sostitutivi.

## 7. Funzionamento del Concentratore

**IMPORTANTE:** Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere le sezioni 3.1. Avvertenze e Precauzioni e 3.2. Panoramica delle Precauzioni.

Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ è progettato per un semplice utilizzo e un accesso a tutte le funzioni mediante pochi tasti sul pannello di controllo.

L'apparecchio dovrebbe essere utilizzato nella sua borsa e usato quando è in posizione verticale su una superficie piana o sul pavimento (sempre nella borsa).

Il paziente deve essere nel raggio di lunghezza del tubo della cannula raccomandata.

**IMPORTANTE:** La retroilluminazione del display rimane spenta, tranne durante le sequenze di avvio e spegnimento. Per accenderla brevemente premere qualsiasi tasto. La retroilluminazione rimane accesa anche durante una condizione di allarme non silenziato.

### 7.1. Collegamento della Cannula Nasale

**⚠ PRECAUZIONI:** Sostituire la cannula regolarmente. Verificare con l'operatore sanitario o il medico la frequenza con cui va sostituita la cannula.

**⚠ PRECAUZIONI:** Per un uso corretto della cannula, attenersi sempre alle istruzioni del produttore.

Collegare il tubo alla porta della cannula, come mostrato nella Fig. 5.

Per collegare la cannula al paziente, posizionare le punte della cannula nelle narici del paziente e far passare il tubo su entrambe le orecchie e sotto il mento. Seguire le istruzioni del produttore.

Far scorrere l'adattatore sul tubo in modo che la cannula sia comoda e si adatti al paziente.

Una volta bloccata la cannula, respirare normalmente attraverso il naso. Il dispositivo Zen-O lite™ rileva un respiro ed eroga l'ossigeno durante l'inalazione.

**IMPORTANTE:** Se la cannula non è posizionata in modo corretto, il dispositivo potrebbe non riuscire a rilevare tutti gli sforzi respiratori del paziente. Verificare che la cannula sia collegata saldamente e completamente inserita.

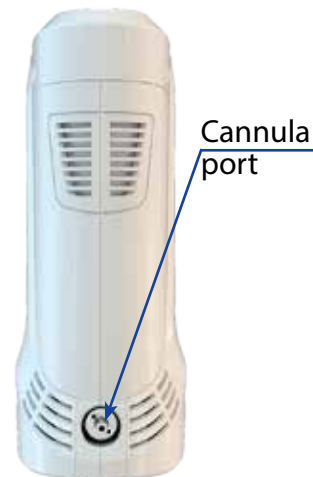



Fig. 5



Fig. 6

## 7.2. Accensione

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto dell'alimentazione .
- Il concentratore emette un segnale acustico e i LED verde, giallo e rosso lampeggiano una volta, mentre sullo schermo sono visualizzate il nome del dispositivo.



LED rosso: indica un avviso di pericolo e/o la necessità di un'azione urgente.








LED giallo: indica che è richiesta attenzione o precauzione.



LED verde lampeggiante – indica che l'apparecchio sta erogando l'ossigeno.



*IMPORTANTE: possono essere eseguite delle regolazioni solo al termine della sequenza di avvio.*

## 7.3. Scelta della Lingua

- Mentre il dispositivo è acceso, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti più  e di silenziamento  per quattro secondi fino a quando viene visualizzato "Lingua:".
- Quindi scorrere le lingue disponibili con i pulsanti più  o meno .
- Quando la lingua desiderata appare, premere il pulsante batteria  per selezionarla. Il dispositivo cambia la lingua e ritorna alla schermata di flusso normale.

## 7.4. Regolazione delle Impostazioni

*IMPORTANTE: una volta acceso il dispositivo Zen-O lite™, la sequenza di avvio richiederà circa 35 secondi. Il livello specificato di ossigeno è raggiunto entro 2 minuti di utilizzo.*

- Il dispositivo inizia operando con l'impostazione precedente.
- Il dispositivo eroga una "pulsazione" di ossigeno all'inizio di ogni inalazione.
- La modalità pulsazione può essere regolata da 1,0 a 5,0 con incrementi da 0,5 con i tasti  e .

*IMPORTANTE: se si sospetta una perdita d'aria, è possibile rilevarla applicando una soluzione di sapone e acqua al punto di collegamento tra cannula e concentratore e controllando la formazione di bolle.*

Le impostazioni della corrente e la fonte di alimentazione (alimentazione esterna o batteria; l'icona della batteria mostra anche il livello approssimativo di carica rimasta) sono visualizzate sullo schermo del display, come mostrato nella Fig. 7.




Dispositivo Zen-O lite™  
che funziona  
a batteria.








Dispositivo Zen-O lite™  
che funziona  
con l'alimentazione esterna.

Fig. 7

## 7.5. Pulsante Batteria

Il pulsante batteria  consente di controllare lo stato della o delle batterie. Premendo ripetutamente il pulsante si scorrono tutte le informazioni.


- Primo, l'indicatore di carica sarà mostrato **In carica NN%**  o **Batt.1: NN%** .
- Successivamente **Batt1: NN%**  avrà mostrato il numero di cicli di carica **Batt.1: N Cicli**  o **Batt: Cicli** .

Dopo la terza pressione del pulsante batteria, il display ritornerà alla schermata principale che mostra l'impostazione corrente del flusso. Il dispositivo esce automaticamente dal menu dello stato della batteria e ritorna al display principale dell'impostazione del flusso dopo 15 secondi di inattività.

## 7.6. Risposta Agli Allarmi



**PRECAUZIONI:** Se non si è in grado di udire o vedere gli allarmi, non si ha una normale sensibilità tattile o non si è in grado di comunicare condizioni di disagio, consultare il medico prima di usare questo dispositivo.

Quando si preme il tasto di silenziamento allarme  in qualsiasi momento si disattiva il segnale acustico. La durata della disattivazione dell'allarme acustico dipende dalla gravità dell'allarme (vedere il capitolo 9. Indicatori di Allarme). Durante questo periodo di silenziamento, il LED di silenziamento rimane illuminato a indicare che il segnale acustico dell'allarme è disattivato. Per riattivare l'allarme acustico, premere di nuovo il pulsante di silenziamento. Se si preme il tasto di silenziamento quando nessun allarme è attivo, si silenzia qualsiasi allarme futuro di priorità media o bassa per otto ore. Per ulteriori informazioni sugli allarmi vedere il capitolo 9. Indicatori di Allarme e il capitolo 10. Risoluzione dei Problemi.

**IMPORTANTE:** il sistema di allarmi viene testato durante la sequenza di avvio. Si dovrebbero illuminare brevemente tutte le spie degli allarmi e si dovrebbe avvertire il segnale acustico. Se si sospetta che gli allarmi non funzionino correttamente, contattare il distributore per la verifica del loro corretto funzionamento.

## 7.7. Spegnimento



**PRECAUZIONI:** Spegnere sempre questo dispositivo quando non lo si utilizza.

Per spegnere il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™, premere e tenere premuto il tasto dell'alimentazione. Il dispositivo emette un segnale acustico e lo schermo visualizza un messaggio di arresto **Spegnimento** per circa cinque secondi, infine entra nella modalità a basso consumo.

*IMPORTANTE: non scollegare l'alimentazione c.a. e contemporaneamente rimuovere la batteria mentre l'unità sta funzionando. Utilizzare sempre il tasto dell'alimentazione per spegnere il dispositivo. Attendere fino al completo spegnimento del dispositivo, prima di scollegarlo dall'alimentazione o rimuovere la batteria.*

## 8. Viaggiare in aereo con il POC Zen-O lite™

### 8.1. Preparazione pre-volo per i passeggeri

#### 8.1.1. Etichettatura richiesta

Il concentratore di ossigeno portatile (Portable Oxygen Concentrator, POC) Zen-O lite™ è adatto all'uso in aereo e rispetta tutti i criteri di ammissione stabiliti dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. Ciò è certificato dall'etichetta con testo rosso sul retro del POC, che dichiara: "The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft". (= "Il costruttore di questo concentratore ha determinato che il dispositivo è conforme a tutte le disposizioni applicabili della FAA per l'accettazione e l'uso a bordo del dispositivo stesso.") Prima del volo, potrebbe essere necessario mostrare all'assistente di volo l'etichetta riportata sul POC.

#### 8.1.2. Consulto con un operatore sanitario

La FAA non richiede al passeggero il consulto con un operatore sanitario prima dell'utilizzo del POC Zen-O lite™ a bordo di un aereo. Tuttavia, è consigliabile valutare con il proprio operatore sanitario i seguenti aspetti:

- Effetti di una cabina pressurizzata (l'altitudine di pressione della cabina può raggiungere gli 8.000 piedi) sulle proprie esigenze di ossigeno.
  - A causa dell'altitudine di pressione della cabina, alcuni utenti necessitano di un'impostazione superiore del flusso di litri o di litri al minuto (LPM) per il POC Zen-O lite™ durante il volo.
  - A causa dell'altitudine di pressione della cabina, alcuni utenti che a terra utilizzano occasionalmente un POC Zen-O lite™ potrebbero richiederne l'utilizzo per l'intero volo.

IT



- Specifiche esigenze di ossigeno al momento del viaggio ed eventuali modifiche alle stesse dalla prima prescrizione del POC Zen-O lite™ o durante il consulto più recente con un operatore sanitario.
- Determinate indicazioni chiave presenti nel manuale operativo del POC Zen-O lite™ relative all'erogazione di ossigeno, agli indicatori, alle avvertenze, agli avvisi e all'impostazione/modifica del flusso di litri o dell'LPM.
- Tutti i membri dell'equipaggio (piloti e assistenti di volo) ricevono una formazione specifica in merito alla gestione degli eventi medici a bordo. Tuttavia, la FAA non richiede ai vettori aerei né ai membri dell'equipaggio di fornire assistenza medica ai passeggeri.

*IMPORTANTE: ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza dei passeggeri sono contenute nella seguente pagina [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

### **8.1.3. Determinazione del numero di batterie richieste**

L'utente è responsabile del trasporto di un numero sufficiente di batterie per alimentare il POC Zen-O lite™ per l'intera durata dell'uso previsto dello stesso. È necessario considerare almeno i seguenti aspetti per determinare il numero di batterie richieste:

- Indicazione dell'operatore sanitario in merito alla durata di utilizzo del POC Zen-O lite™.
- Informazioni del vettore aereo in merito alla durata prevista del volo e a eventuali scali e ritardi imprevisti.

*IMPORTANTE: in caso di viaggi che prevedano più voli o più compagnie aeree, considerare anche i periodi prolungati di utilizzo del POC Zen-O lite™ a terra tra un volo e l'altro.*

- Informazioni contenute nel manuale del proprietario del POC Zen-O lite™ relative alla durata prevista delle batterie.

*IMPORTANTE: non fare mai affidamento sulla disponibilità di prese elettriche a bordo dell'aereo durante il volo.*

- I requisiti stabiliti da ciascun vettore aereo relativamente al quantitativo di batterie trasportabile a bordo sono in genere disponibili sul rispettivo sito web.

*IMPORTANTE: i vettori aerei potrebbero richiedere all'utente di portare batterie sufficienti per alimentare il dispositivo per un periodo pari almeno al 150% della durata massima prevista del volo.*

### **8.1.4. Documentazione**

L'utente è responsabile del funzionamento del POC Zen-O lite™ a bordo dell'aereo. Per tale motivo, la FAA raccomanda ai passeggeri di portare a bordo il manuale utente e qualsiasi altra informazione scritta fornita dall'operatore sanitario in merito al POC Zen-O lite™ e al relativo utilizzo.

### **8.1.5. Dichiarazione del medico**

Il vettore aereo può richiedere un certificato medico a un passeggero con disabilità qualora vi sia il ragionevole dubbio che il soggetto possa completare il volo in sicurezza, senza richie-



dere un'assistenza medica straordinaria durante il volo. Inoltre, il vettore aereo può richiedere un certificato medico a una persona che necessita di ossigeno medicale durante il volo. La FAA **non** richiede ai passeggeri di munirsi di una dichiarazione del medico da presentare all'operatore o al pilota in comando (PIC) prima di poter utilizzare il POC Zen-O lite™ a bordo dell'aereo.

### 8.1.6. Batterie di ricambio

Danni alle batterie o il cortocircuito delle stesse possono comportare il surriscaldamento e l'incendio. Tali eventi possono comportare conseguentemente lesioni personali ai passeggeri e, nello scenario peggiore per determinati tipi di batterie, un grave incendio nel comparto passeggeri. Pertanto, le batterie al litio di ricambio trasportate a bordo dell'aereo devono essere protette singolarmente dal cortocircuito collocandole nell'imballo originale del rivenditore, coprendo con del nastro i terminali esposti o collocando ciascuna batteria in una bustina di plastica separata/involucro protettivo.

*IMPORTANTE: è vietato trasportare su un aereo batterie al litio di ricambio all'interno del bagaglio registrato.*

L'utente è responsabile del trasporto di tutte le batterie di ricambio nel bagaglio a mano, debitamente imballate. I fornitori di apparecchiature POC Zen-O lite™, alcune compagnie aeree e gli spedizionieri specializzati in spedizioni di piccoli imballi possono fornire tale servizio di imballaggio.

## 8.2. Imbarco e uso durante il volo

### 8.2.1. Bagaglio a mano

Il POC Zen-O lite™ è un dispositivo di assistenza. Pertanto, relativamente all'implementazione della politica sul bagaglio a mano, le compagnie aeree non possono conteggiare il POC Zen-O lite™ nel limite di oggetti a mano trasportabili in cabina da un soggetto qualificato con disabilità.

*IMPORTANTE: Una borsa con una batteria addizionale che sia richiesta per alimentare ZEN-O™ durante il volo può altresì essere considerata un dispositivo di assistenza. Comunque ci sono restrizioni ai Watt per ora (Wh) erogabili dalla batteria che sono limitati a 100 Wh per batteria. Per il tuo ZEN-O™ i Wh sono meno di 100 per batteria quindi non saranno imposte limitazioni al volo.*

### 8.2.2. POC Zen-O lite™ come bagaglio registrato

Il proprio POC Zen-O lite™ può essere trasportato a bordo come bagaglio a mano o come bagaglio registrato. Tuttavia, **è vietato trasportare in aereo batterie al litio di ricambio all'interno del bagaglio registrato.**

### 8.2.3. Considerazioni relative al posizionamento e allo stivaggio del POC Zen-O lite™

Affinché il POC Zen-O lite™ possa funzionare efficacemente, il filtro dell'aria/di aspirazione non deve essere ostruito durante l'uso. Pertanto, l'area intorno al POC Zen-O lite™ dovrebbe essere priva di coperte, cappotti e altri elementi dei bagagli a mano in grado di ostruire il filtro

dell'aria/di aspirazione. Se il filtro dell'aria/di aspirazione risulta ostruito, si verificheranno due situazioni. Per prima cosa, si verrà informati mediante spie di avviso e/o allarmi acustici della rilevazione di una concentrazione di ossigeno insufficiente nell'aria erogata dal POC Zen-O lite™. Secondo, se la temperatura dei componenti interni del POC Zen-O lite™ dovesse salire fino a un determinato limite, a causa del tentativo da parte del POC Zen-O lite™ di erogare comunque ossigeno, il POC Zen-O lite™ si arresterà automaticamente per impedire un sovraccarico, segnalando tale situazione mediante spie di avviso e/o allarmi acustici.

**Posizionamento del POC Zen-O lite™ a bordo di un aereo** Collocare il POC Zen-O lite™ sotto al sedile posto davanti all'utente, in modo che l'utente o chi lo accompagna possa notare le spie di avviso e/o udire l'allarme acustico. Il posizionamento direttamente sotto il sedile o in un comparto chiuso impedirebbe la visualizzazione delle spie di avviso, così come l'ascolto degli avvisi acustici. Altri posizionamenti possono risultare accettabili in base alle indicazioni fornite dagli assistenti di volo.

#### **8.2.4. Limitazioni per i posti a sedere dei passeggeri che intendono utilizzare un POC Zen-O lite™ a bordo di un aereo**

**Posto a sedere vicino all'uscita di emergenza:** La FAA vieta ai passeggeri che utilizzano dispositivi di assistenza, tra cui lo Zen-O lite™, di occupare uno dei posti a sedere in prossimità dell'uscita di emergenza.

**Stivaggio durante il movimento:** durante il movimento in superficie (pushback da gate e taxi), il decollo e l'atterraggio, il POC Zen-O lite™ deve essere stivato correttamente e in modo tale da non limitare l'accesso dei passeggeri a qualsiasi uscita o al corridoio nel comparto passeggeri. Al fine di rispettare tali normative di sicurezza della FAA, potrebbero essere applicate altre limitazioni ai posti a sedere. Ad esempio:

1. Alcuni posti a sedere all'interno dell'aereo, come quelli in prossimità delle paratie, potrebbero presentare o meno uno spazio di stivaggio approvato per ospitare un POC Zen-O lite™ durante il movimento in superficie, il decollo e l'atterraggio. Pertanto, il POC Zen-O lite™ potrebbe non essere stivato correttamente durante tali fasi di volo, nel caso in cui l'utente dello Zen-O lite™ occupi tali posti a sedere. Di conseguenza, potrebbe essere applicata una limitazione ai posti a sedere.
2. Durante il movimento in superficie, il decollo e l'atterraggio, i tubi di collegamento della cannula nasale, utilizzati per erogare ossigeno dal proprio POC Zen-O lite™ correttamente stivato, potrebbero non distendersi sufficientemente tra la fila, comportando limitazioni all'accesso dei passeggeri o rappresentando un rischio di inciampo in caso di evacuazione. Durante tali fasi di volo, è necessario non limitare l'accesso degli altri passeggeri. Di conseguenza, potrebbe essere applicata una limitazione ai posti a sedere, al fine di rispettare le normative di sicurezza della FAA. Ad esempio, se tutti i posti a sedere nella fila risultano occupati, il posto appropriato per l'utente del POC Zen-O lite™ sarebbe quello del finestrino.
3. Un operatore può stabilire limitazioni ai posti a sedere solo in base alle normative di sicurezza della FAA. Gli elenchi sopra rappresentano solo alcuni degli scenari da considerare.

*IMPORTANTE: una politica generale applicata dalle compagnie aeree che richiedesse a tutti i passeggeri imbarcati con un POC Zen-O lite™ di occupare un posto a sedere con finestrino, indipendentemente dal caso specifico, non rispetterebbe i requisiti della FAA.*

### **8.2.5. Depressurizzazione in cabina**

In caso di utilizzo del POC Zen-O lite™ durante una perdita di pressione in cabina, non vi è alcun pericolo specifico. Tuttavia, se dovesse verificarsi una perdita di pressione in cabina (lenta o rapida), è consigliabile utilizzare le maschere di ossigeno messe automaticamente a disposizione fino alla stabilizzazione dell'aereo.

### **8.2.6. Utilizzo dell'energia elettrica dell'aereo**

Non vi è alcun obbligo per gli operatori in merito alla fornitura di energia elettrica a un utente del POC Zen-O lite™. Le prese elettriche a bordo dell'aereo sono considerate apparecchiature non essenziali e la loro presenza non è regolamentata dalla certificazione applicabile o dalle norme operative. Inoltre, eventuali malfunzionamenti elettrici nei sistemi aerei possono richiedere la disattivazione di tali prese elettriche, a terra o in volo, per garantire la sicurezza del volo. Pertanto, per l'intera permanenza a bordo dell'aereo, il POC Zen-O lite™ deve essere utilizzato esclusivamente a batteria. **Non fare mai affidamento sulla disponibilità di prese elettriche a bordo dell'aereo durante il volo.**

### **8.2.7. Fumo**

Durante l'ossigenoterapia, il fumo (comprese le sigarette elettroniche) è pericoloso e potrebbe provocare lesioni gravi o il decesso del paziente o di altri a causa dell'incendio. Non consentire la presenza di fumo o fiamme libere entro 3 metri dal concentratore di ossigeno o da qualsiasi accessorio contenente ossigeno.

## **8.3. Requisiti della Transportation Security Administration (TSA)**

I passeggeri che utilizzano dispositivi respiratori, inclusi i POC Zen-O lite™, possono ottenere dalla TSA informazioni specifiche consultando la pagina <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

**Le seguenti considerazioni generiche per il controllo di sicurezza sono applicabili anche ai POC Zen-O lite™:**

1. Il limite di un bagaglio a mano e di un bagaglio personale (borsa, valigetta o custodia per portatile) non si applica alle forniture mediche, alle apparecchiature, agli ausili per la mobilità e/o ai dispositivi di assistenza trasportati da e/o utilizzati da una persona con disabilità.
2. Se si dispone di una documentazione medica relativa alla propria condizione clinica o disabilità, presentare tali informazioni all'addetto al controllo per informarlo in merito alla propria situazione personale. Tale documentazione non è obbligatoria e non esenterà il soggetto dalla procedura di controllo di sicurezza.

## 9. Indicatori di Allarme

Se il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ rileva una condizione di allarme, indica visivamente l'allarme ed emette un segnale sonoro entro 10 secondi. I livelli di allarme sono quattro: priorità critica alta, priorità alta, priorità media e priorità bassa.

Ognuno è indicato in modo differente dal display retroilluminato; dai LED giallo e rosso e dal segnale acustico. In ogni caso, il messaggio di allarme e lo stato di alimentazione hanno la precedenza sulla visualizzazione corrente.

*IMPORTANTE: tutti i parametri e le condizioni di allarme sono preimpostati in fabbrica e non possono essere modificati o regolati dall'utente.*

*IMPORTANTE: il sistema di allarmi viene testato durante la sequenza di avvio. Si dovrebbero illuminare brevemente tutte le spie degli allarmi e si dovrebbe avvertire il segnale acustico.*

| Stato dell'allarme           | Segnale acustico                                | Indicatore visivo  | Durata della disattivazione acustica |
|------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>Priorità critica alta</b> | Sequenza di dieci bip, ripetuta ogni 3 secondi. | LED rosso fisso e il dispositivo si spegne automaticamente | 20 minuti                            |
| <b>Priorità alta</b>         | Sequenza di dieci bip, ripetuta ogni 3 secondi. | LED rosso lampeggiante                                     | 20 minuti                            |
| <b>Priorità media</b>        | Sequenza di tre bip, ripetuta ogni 8 secondi.   | LED giallo lampeggiante                                    | 8 ore                                |
| <b>Priorità bassa</b>        | Sequenza di tre bip, ripetuta ogni 10 secondi.  | LED giallo fisso   | 24 ore                               |

*IMPORTANTE: se coesistono due condizioni di allarme contemporaneamente, viene indicato l'allarme a priorità più alta. Se coesistono contemporaneamente due condizioni di allarme di eguale priorità, viene visualizzato l'allarme più recente.*

*IMPORTANTE: gli allarmi più recenti indicati dal dispositivo sono registrati per riferimento dal personale dell'assistenza. Questo registro è conservato anche se il dispositivo viene spento o se si interrompe l'alimentazione per qualsiasi altra ragione.*

*IMPORTANTE: se si preme il tasto di silenziamento prima di una condizione di allarme (per esempio per silenziare il dispositivo al cinema), gli allarmi di priorità critica alta e alta disabiliteranno la funzione di silenziamento; mentre gli allarmi di priorità media e bassa saranno silenziati per otto ore dal momento in cui si è premuto il tasto. Premere il tasto di silenziamento per vedere l'ultimo allarme di priorità più alta. Premerlo di nuovo per resettare il timer a otto ore.*

## 9.1. Allarmi

Quando un concentratore emette un allarme acustico, sullo schermo viene visualizzato un messaggio corrispondente. Intraprendere le azioni indicate nel grafico seguente.

### 9.1.1. Allarmi a Priorità Critica Alta

*IMPORTANTE: questi allarmi disattivano immediatamente il dispositivo.*

| Messaggio di allarme   | Descrizione                                | Azione  |
|------------------------|--|---|
| <b>Caricare batt.</b>  | La batteria deve essere ricaricata.        | Ricaricare il pacchetto batteria collegandolo all'alimentazione. Verificare che tutte le connessioni siano salde. |
| <b>Batt. non val.</b>  | La batteria non è approvata.               | Sostituire la batteria con una approvata.   |
| <b>Allarm!ManutXX*</b> | È necessario l'intervento dell'assistenza. | Contattare il distributore locale.  |

\*Valore: 01–20

### 9.1.2. Allarmi a Priorità Alta

*IMPORTANTE: questi allarmi consentono al dispositivo di continuare a funzionare.*

| Messaggio di allarme   | Descrizione   | Azione   |
|------------------------|---|--|
| <b>Contr. aeraz.</b>   | Il dispositivo non riesce a mantenere la purezza dell'ossigeno. | Verificare che l'entrata/uscita dell'aria non siano bloccate. Se l'allarme persiste, contattare il distributore locale.  |
| <b>Batt. scarica</b>   | Vita della batteria stimata inferiore a 17 minuti.              | Caricare il pacchetto batteria collegandolo all'alimentazione.<br><i>IMPORTANTE: il messaggio viene cancellato automaticamente quando la batteria viene collegata all'alimentazione.</i> |
| <b>Allarm!ManutXX*</b> | È necessario l'intervento dell'assistenza.                      | Contattare il distributore locale.   |

\*Valore: 21–50

### 9.1.3. Allarmi a Priorità Media

| Messaggio di allarme   | Descrizione   | Azione  |
|------------------------|---|---|
| <b>Cont. cannula</b>   | Nessun respiro rilevato per 15 secondi.                     | Controllare il collegamento della cannula. Accertarsi di respirare attraverso il naso. Se l'allarme persiste, contattare il distributore locale.<br><i>IMPORTANTE: il messaggio viene cancellato automaticamente quando viene rilevata la respirazione.</i> |
| <b>Basso consumo</b>   | Il flusso continuo di ossigeno è inferiore alle specifiche. | Controllare che la cannula non sia attorcigliata e il filtro del paziente sia installato correttamente. Se l'allarme persiste, contattare il distributore locale.   |
| <b>Allarm!ManutXX*</b> | È necessario l'intervento dell'assistenza.                  | Contattare il distributore locale.  |

\*Valore: 51–70

### 9.1.4. Allarmi a Priorità Bassa


| Messaggio di allarme   | Descrizione                                | Azione                             |
|------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Allarm!ManutXX*</b> | È necessario l'intervento dell'assistenza. | Contattare il distributore locale. |

\*Valore: 71–99

### 9.1.5. Altri Messaggi


| Messaggio            | Descrizione  | Azione                    |
|----------------------|--|---------------------------|
| <b>Alim. rimossa</b> | L'alimentazione esterna è stata scollegata, l'unità ora è alimentata dalla batteria. | Nessuna azione richiesta. |
| <b>Spegnimento</b>   | Visualizzato durante la sequenza di spegnimento dell'unità.                          | Nessuna azione richiesta. |

## Altri Messaggi (continuazione)

| Messaggio  | Descrizione   | Azione  |
|--|---|---|
| <b>Nessuna batt.</b>   | Visualizzato come voce del menu della batteria, quando non vi è comunicazione con la batteria.  | Verificare che il pacchetto batteria sia installato correttamente. Contattare il distributore locale, se il messaggio continua a essere visualizzato per più di 30 secondi nonostante la batteria sia completamente inserita. |
| <b>Batt NN%</b>  | Percentuale di carica della batteria visualizzata se è almeno del 10% e non vi è alcuna alimentazione esterna collegata.  | Il messaggio è visualizzato quando viene premuto il tasto batteria.   |
| <b>In carica NN%</b>  | NN% visualizza il livello di carica corrente della batteria. È visualizzato quando la carica della batteria è maggiore del 10% ma inferiore al 100% e l'alimentazione esterna è collegata.  | Il messaggio è visualizzato quando viene premuto il tasto batteria.   |
| <b>In carica</b>   | La carica della batteria è inferiore al 10% e l'alimentazione esterna è collegata.  | Il messaggio è visualizzato quando viene premuto il tasto batteria.   |
| <b>Freq. resp. XX</b>  | La frequenza media di respirazione del paziente quando il dispositivo sta erogando la quantità massima di ossigeno e il bolo è ridotto. Se non viene rilevato alcun respiro, viene visualizzata la frequenza di respirazione più recente. | Livello di attività ridotta. Verificare che l'entrata/uscita dell'aria non siano bloccate.<br><i>IMPORTANTE: Il messaggio viene cancellato automaticamente, quando il dispositivo ritorna al funzionamento normale.</i>       |
| <b>Allarme elimin</b>  | È stato cancellato automaticamente un allarme impostato in precedenza.  | Nessuna azione richiesta.   |

IT

## 10. Risoluzione dei Problemi
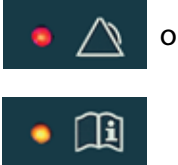
| Problema   | Possibile causa  | Risoluzione del problema  |
|--|--|---|
| <p>Il sistema non funziona più.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema può essere scollegato dall'alimentazione.</li> <li>• Il sistema può essere spento.</li> <li>• Si è attivato un allarme a priorità critica alta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che il sistema sia collegato correttamente all'alimentazione.</li> <li>• Verificare che il sistema sia acceso.</li> <li>• Esaminare il sistema per la presenza di eventuali danni o l'esposizione a liquidi.</li> <li>• Se l'allarme persiste, contattare il distributore locale.</li> </ul>   |
| <p>Suona qualsiasi allarme o è illuminato il LED</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedere il capitolo 9. Indicatori di Allarme.</li> </ul>   | <p>Vedere il capitolo 9. Indicatori di Allarme.</p>   |
| <p>La batteria non è carica.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentazione non è collegata.</li> <li>• La batteria non è inserita completamente nel vano.</li> <li>• La batteria non funziona.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare le connessioni per verificare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le prese rotonde siano fissate nell'unità.</li> <li>• Il cavo dell'alimentazione sia collegato all'alimentazione c.a./c.c. o sia collegato l'adattatore c.c. per auto, se pertinente.</li> <li>• Il cavo dell'alimentazione sia collegato alla presa a muro, se pertinente.</li> <li>• La presa a muro sia alimentata.</li> </ul> </li> <li>• Verificare che la batteria sia completamente inserita nel vano e il suo coperchio sia fissato.</li> <li>• Se l'allarme persiste, contattare il distributore locale.</li> </ul> |



## **11** Manutenzione e Pulizia

### 11.1. Manutenzione Regolare

**⚠ AVVERTENZE:** Non utilizzare lubrificanti su questo dispositivo o su qualsiasi suo accessorio. I lubrificanti a contatto con l'ossigeno possono incendiarsi spontaneamente.

**⚠ PRECAUZIONI:** Sostituire la cannula regolarmente. Verificare con il distributore o il medico la frequenza con cui va sostituita la cannula.

Il dispositivo indica con un allarme quando un filtro o il dispositivo deve essere pulito o sostituito (vedere anche il capitolo 10. Risoluzione dei Problemi).

*IMPORTANTE: La cannula e il filtro del paziente possono essere contaminati dal paziente, pertanto si deve manipolare con cura questi componenti.*

### 11.2. Pulizia Esterna

**⚠ AVVERTENZE:** Non immergere questo dispositivo in liquidi. Non esporlo all'acqua o a precipitazioni. Non esporlo a condizioni polverose.

**⚠ PRECAUZIONI:** Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti specificate in questo manuale. Prima dell'uso, lasciar sempre asciugare la soluzione detergente sulla superficie pulita.

**⚠ PRECAUZIONI:** Prima della pulizia scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione e spegnerlo.

Pulire la parte esterna con un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone o con salviette antibatteriche (soluzione di alcool isopropilico al 70%).

*IMPORTANTE: pulire esternamente il dispositivo con cadenza settimanale, gli accessori devono essere puliti al bisogno. Il dispositivo deve essere accuratamente pulito anche esternamente prima di essere inviato a un nuovo paziente. E' anche raccomandato di sostituire il filtro in uscita ad ogni paziente diverso.*

Cannula nasale: fare riferimento alle istruzioni originali del produttore riguardo la sua pulizia.

### 11.3. Vita Utile

La vita utile del dispositivo è di 5 anni, tranne per i setacci. La vita utile dei setacci dipende dalle condizioni operative. Sostituirli quando necessario, come indicato dall'allarme di controllo fessure. Se le fessure di ingresso e sfiato di aria non sono bloccate, ma l'allarme del controllo fessure persiste, contattare il distributore per le istruzioni relative alla sostituzione dei setacci. Ambienti o condizioni climatiche ad alta umidità possono ridurre sensibilmente la vita dei setacci.

### 11.4. Connettore di servizio

Il connettore di servizio e relative parti TF-02091 (5.1 Vdc massimo) viene utilizzato solo per manutenzione da parte di personale autorizzato.



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

## 12 Riparazione e Smaltimento del Dispositivo

### 12.1. Riparazione

Non tentare di riparare il dispositivo. Contattare l'operatore sanitario o il distributore per l'assistenza (vedere il capitolo 10. Risoluzione dei Problemi).

I filtri molecolari potrebbero essere sostituiti anche dal paziente dopo che è stato stabilito dal fornitore/noleggiatore dell'apparecchio che è il caso di sostituirli. Tutte le altre operazioni di manutenzione o riparazione devono invece essere effettuate solo da personale tecnico formato e autorizzato dal produttore.











### 12.2. Sostituzione dei filtri molecolari

1. Spegnerne il dispositivo e scollegare l'alimentatore AC o DC (se connesso)
2. Togliere il dispositivo dalla borsa.
3. Rimuovere la batteria dal dispositivo.
4. Premere i 4 pulsanti situati sopra al dispositivo per rimuovere la parte superiore del dispositivo stesso come mostrato in Fig.9.
5. Usare l'attrezzo incluso nel kit di sostituzione dei filtri per ruotare i filtri stessi in senso anti-orario per 3 o 4 giri fino a quando possono essere rimossi tirandoli verso l'alto.
6. Ripetere col secondo filtro sul lato opposto.
7. Rimuovere i nuovi filtri dalla loro confezione, rimuovere la protezione aria da ognuno dei filtri e installarli IMMEDIATAMENTE nel dispositivo. Attenzione: non lasciare i nuovi filtri esposti all'aria (contaminandoli) prima di installarli, montarli immediatamente dopo averli tolti dalla loro confezione e aver tolto la protezione aria!
8. Installare i filtri sostitutivi inserendoli sopra al dispositivo come mostrato in Fig. 10.
9. Avvitare a mano i filtri.
10. Utilizzare l'apposita chiave per l'ultimo serraggio.

**ATTENZIONE: Non stringere esageratamente!**

11. Ripetere le fasi 8-10 per il secondo filtro.
12. Re-installare la cover superiore del dispositivo rimettendola al suo posto e spingendo fino a quando i 4 pulsanti scatteranno (click).
13. Re-inserire la batteria nel dispositivo.
14. Collegare il dispositivo alla sorgente AC o DC **SENZA ACCENDERLO**.

### **NON ACCENDERLO!**

15. Premere il bottone silenziatore allarme  e quello batteria  contemporaneamente fino a quando il display mostrerà la scritta „prova di tenuta“ o "Leak Test".
  - a. Il display indicherà un progressivo aumento di decimali.
  - b. Quando completato il dispositivo indicherà „test superato/test passed“ oppure indicherà "test fallito/Test Failed".
    - i. Se il test è superato premere il tasto batteria  per uscire, continuare con il passo 16.
    - ii. Se il test è fallito premere il tasto batteria  per uscire quindi ripetere le fasi di montaggio da 4 a 15 assicurandosi di fissare correttamente i due filtri.
16. Se il test viene superato bisogna azzerare il contaore di funzionamento per i nuovi filtri.
  - a. Accendere il concentratore di ossigeno Zen-O™ lite.
  - b. Premere contemporaneamente  e  fino a quando appare la scritta "diagnostica/Diagnostics".
  - c. Premere  o  per navigare il menu diagnostico fino a quando appare la scritta "XXXH Sieve/filtro", dove XXXX = è il numero delle ore in cui il filtro è stato utilizzato.
  - d. Tenere quindi premuto il tasto „silenziamento allarme“  fino a quando il contatore indica "0H Sieve/filtro" (azzerato).
  - e. Premere il pulsante batteria  per uscire dal modo diagnostico.
  - f. Il dispositivo è ora pronto per essere utilizzato.

*Importante: Contatta chi ti ha fornito, noleggiato o messo a disposizione il dispositivo se questo non supera per più volte i test dopo la sostituzione dei filtri o se hai il sospetto che qualcosa non funzioni correttamente.*

### **12.3. Smaltimento**

- Per lo smaltimento del dispositivo contattare il distributore locale.
- Smaltire la batteria in conformità alle normative locali o contattare il distributore locale.

## **13** Garanzia

La garanzia dell'apparecchio è limitata a tre (3) anni dalla data di fabbricazione. Ciò esclude i filtri molecolari che hanno un solo anno di garanzia.

Tutti gli accessori invece incluse le batterie hanno un anno di garanzia (1).

La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato secondo quanto indicato nel manuale istruzioni e conservato opportunamente e con cura secondo le regole della buona pratica e buon senso.

## **14** Marchi di Fabbrica e Dichiarazioni di non Responsabilità

### **14.1. Marchi di Fabbrica**

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### **14.2. Dichiarazioni di non Responsabilità**

Le informazioni contenute in questo documento sono state esaminate con attenzione e ritenute affidabili. Inoltre, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto indicato nel presente documento per migliorarne la leggibilità, il funzionamento o il design. Il produttore non si assume alcuna responsabilità sulla corretta applicazione o meno del concentratore Zen-O e dei suoi vari accessori di completamento alle patologie del paziente; né risponde di alcuna licenza prevista dai diritti dei suoi brevetti o dai diritti di altri.

#### **14.2.1. Il Presente Documento**

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza avviso. Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo, per intero o in parte (tranne per brevi estratti in revisione e articoli scientifici), senza previo consenso scritto del produttore. Accertarsi di aver letto con attenzione e aver compreso tutti i manuali forniti con il prodotto.

#### **Per assistenza**

In caso di domande riguardanti le informazioni contenute in queste istruzioni o l'utilizzo sicuro del dispositivo, contattare il distributore locale.

## 15 Descrizione Tecnica

|  |  |
|--|--|
| <b>Dimensioni:</b>                                 | 249 mm (L), 97 mm (P), 231 mm (A)<br>9.8" (L), 3.8" (P), 9.1" (A)  |
| <b>Peso dell'unità:</b>                            | 2.5 kg (5.5 lbs) (senza borsa)   |
| <b>Requisiti di alimentazione:</b>                 | Adattatore c.a.: 100–240 V c.a. ( $\pm 10\%$ ), 50–60 Hz ingresso, 24 V c.c., 5.0 A uscita. Adattatore c.c.: 11,5–16 V c.c. ingresso, 24 V, 5.0 A uscita<br><i>(Importante: vedere la lista di accessori per il modello e I codici per l'alimentatore AC/DC)</i> |
| <b>Purezza:</b>                                    | 87% - 96% a tutte le frequenze di flusso, nelle condizioni operative   |
| <b>Impostazione:</b>                               | Regolabile dall'utente con incrementi di 0,5 da 1,0 a 5.0.   |
| <b>Sensibilità di attivazione inspiratoria:</b>    | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O  |
| <b>Indicatore di impostazione:</b>                 | Display LCD  |
| <b>Pressione massima di emissione di ossigeno:</b> | 20.5 psi   |
| <b>Intervallo di umidità:</b>                      | 5% to 93% $\pm$ 2% senza condensa  |
| <b>Scollegare l'apparecchio:</b>                   | Connettore di ingresso dell'alimentazione  |
| <b>Altitudine operativa:</b>                       | da 0 m a 4,000 m (0–13,000 piedi) sopra il livello del mare, da 1,060 a 575 mbar   |
| <b>Livello di pressione del suono:</b>             | 44dBA al settaggio 2 e con 18 BPM:<br>(misurato a un metro di fronte al dispositivo)<br><br>Massima pressione Sonora 52.5dBA secondo ISO 80601-2-69  |
| <b>Tipo di protezione (elettrica):</b>             | Classe II  |
| <b>Grado di protezione (elettrica):</b>            | Tipo BF  |

## Descrizione Tecnica (continuazione)

**Grado di protezione (acqua):** IP22 nella borsa da trasporto (protezione contro piccoli oggetti e da gocciolamento inclinato)  
IP20 al di fuori della borsa da trasporto (protezione contro piccoli oggetti e nessuna protezione contro l'acqua che entra nel concentratore)

**Grado di sicurezza (miscela di anestetici infiammabili):** Non adatto all'uso in presenza di una miscela di anestetici infiammabili

**Temperatura operativa:** Funzionamento continuo a temperature comprese tra 5 °C (41 °F) e 40 °C (104 °F).

**Temperatura di conservazione:** Tra -20 °C (-4 °F) e 60 °C (140 °F).

**Intervallo della pressione del suono degli allarmi:** 65–85 dB(A)

**Ritardi del sistema di allarmi:** Meno di 10 secondi dopo il rilevamento (allarme di ossigeno basso se inferiore alla frazione di volume dell'82% in specifiche condizioni ambientali)

**Indicatore di stato del concentratore di ossigeno:** Allarme a priorità alta che indica quando la concentrazione di ossigeno scende sotto l'82%

## Dimensione del bolo in modalità pulsazione (ml/respiro) versus impostazione e frequenza respiratoria

|                   | Impostazione |    |      |      |      |
|-------------------|--------------|----|------|------|------|
| Respiri al minuto | 1            | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                | 11           | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                | 11           | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                | 11           | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                | 11           | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                | 11           | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                | 11           | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

*Tutti i valori  $\pm$  15% per tutte le condizioni operative*

## 15.1. Informazioni Relative alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

Le apparecchiature elettromedicali richiedono specifiche precauzioni riguardo alla compatibilità elettromagnetica (EMC). Le apparecchiature per comunicazioni in radiofrequenza (RF) portatili e mobili possono influire sui dispositivi, quali il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™. Pertanto, il dispositivo non deve essere utilizzato accanto ad altre apparecchiature. Se ciò non fosse possibile, controllare il dispositivo per accertarsi che funzioni appropriatamente sempre.

### 15.1.1. Linee Guida e Dichiarazione del Produttore: Emissioni Elettromagnetiche

Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ è progettato per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del concentratore deve assicurare che l'apparecchiatura venga utilizzata in un ambiente di questo tipo.

| Test delle emissioni  | Conformità | Ambiente elettromagnetico/Linee guida  |
|---|------------|--|
| Emissioni RF<br>CISPR 11  | Gruppo 1   | Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Le emissioni RF sono pertanto molto ridotte e difficilmente causano interferenze con apparecchiature elettroniche poste in prossimità. |
| Emissioni RF<br>CISPR 11  | Classe B   | Il concentratore è adatto per l'uso in tutti gli ambienti, inclusi gli ambienti domestici e gli ambienti direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta edifici utilizzati per scopi domestici.            |
| Armoniche<br>Emissioni<br>CEI 61000-3-2                             | Classe A   |  |
| Fluttuazioni di<br>tensione/emis-<br>sioni flicker<br>CEI 61000-3-3 | Conforme   |  |

IT

### 15.1.2. Linee Guida e Dichiarazione del Produttore: Immunità Elettromagnetica

Il dispositivo Zen-O lite™ è indicato per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del concentratore deve assicurare che l'apparecchiatura venga utilizzata in un ambiente di questo tipo.

| Test di immunità  | Livello test CEI 60601  | Livello di conformità   | Ambiente elettromagnetico/ Linee guida  |
|---|---|---|---|
| Scariche elettrostatiche (ESD) CEI 61000-4-2  | ± 2, 4, 6, 8kV contact contatto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air aria   | ± 2, 4, 6, 8kV contact contatto<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV air aria   | I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari ad almeno il 30%.  |
| Transitori elettrici veloci/burst CEI 61000-4-4   | ± 2 kV per linee di alimentazione<br>± 1 kV per linee di ingresso/uscita  | ± 2 kV per linee di alimentazione<br>± 1 kV per linee di ingresso/uscita  | La qualità dell'alimentazione principale deve essere quella tipica dell'ambiente commerciale o ospedaliero.   |
| Sovracorrente CEI 61000-4-5   | ± 1 kV modalità differenziale<br>± 2 kV modalità comune   | ± 1 kV modalità differenziale<br>± 2 kV modalità comune   | La qualità dell'alimentazione principale deve essere quella tipica dell'ambiente commerciale o ospedaliero.   |
| Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione su linee di ingresso dell'alimentazione CEI 1000-4-11 | < 5% UT<br>(> 95% di caduta in UT) per 0,5 cicli<br>40% UT<br>(60% di caduta in UT) per 5 cicli<br>70% UT<br>(30% di caduta in UT) per 25 cicli<br>< 5% UT<br>(> 95% di caduta in UT) per 5 cicli | < 5% UT<br>(> 95% di caduta in UT) per 0,5 cicli<br>40% UT<br>(60% di caduta in UT) per 5 cicli<br>70% UT<br>(30% di caduta in UT) per 25 cicli<br>< 5% UT<br>(> 95% di caduta in UT) per 5 cicli | La qualità dell'alimentazione principale deve essere quella tipica dell'ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente del concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ necessita di un uso continuo durante interruzioni dell'alimentazione, si raccomanda che il concentratore sia alimentato da un gruppo di continuità o da una batteria. |



## Linee Guida e Dichiarazione del Produttore: Immunità Elettromagnetica (continuazione)

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| Campo magnetico generato alla frequenza di rete (50/60 Hz)<br>CEI 61000-4-8  | 30 A/m                                      | 30 A/m                   | I campi magnetici alla frequenza dell'alimentazione devono essere pari ai livelli caratteristici di una posizione tipica in ambiente commerciale o ospedaliera.   |
| RF condotta<br>CEI 61000-4-6   | 3 Vrms da 150 kHz a 80 MHz; 6Vrms ISM Bands | 3 Vrms (6Vrms ISM Bands) | Le apparecchiature per comunicazioni RF mobili e portatili non devono essere utilizzate vicino ad alcuna parte del dispositivo, inclusi i cavi, a una distanza non inferiore a quella consigliata e calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.<br>Distanza consigliata:<br>d = 1,2 √P da 150 kHz a 80 MHz<br>d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz<br>d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz<br>dove P è il valore nominale massimo di alimentazione in uscita dal trasmettitore espresso in watt (W), secondo il produttore del trasmettitore e d la distanza consigliata in metri (m).<br>Le intensità di campo provenienti dai trasmettitori RF fissi, secondo quanto determinato da un'indagine elettromagnetica condotta sul campo devono essere inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenzab.<br>Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnata con il simbolo seguente: |
| RF irradiata<br>CEI 61000-4-3  | 10 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz                  | 10 V/m                   |   |
| <p><i>IMPORTANTE: a 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata.</i></p> <p><i>IMPORTANTE: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è condizionata dall'assorbimento e dalla rifrazione da parte di strutture, oggetti e persone.</i></p> <p>aLe intensità di campo provenienti dai trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefono (cellulari e cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radiofoniche in AM e FM e trasmissioni TV, non sono teoricamente prevedibili in modo accurato. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori RF fissi, si consiglia di prendere in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se l'intensità del campo misurata nella posizione in cui il dispositivo Zen-O lite™ viene utilizzato supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, il concentratore deve essere tenuto sotto controllo per verificarne il corretto funzionamento. qualora si osservino prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, quali il riposizionamento e la correzione dell'orientamento del concentratore.</p> <p>bAl di sopra della gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 6V/m</p> |   |                          |   |



### 15.1.3. Distanza Consigliata tra le Apparecchiature di Comunicazione RF Portatili e Mobili e il Concentratore di Ossigeno Portatile Zen-O lite™

Il concentratore di ossigeno portatile Zen-O lite™ è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da radiofrequenza irradiata sono controllati. L'utente del monitor può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche garantendo la distanza minima consigliata tra il monitor e le eventuali apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori), come consigliato di seguito, in base alla potenza massima in uscita da tali apparecchiature.

| Potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore (W) | Distanza in base alla frequenza del trasmettitore (m) |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 150 kHz a 80 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                | 80 MHz a 800 MHz<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 MHz a 2.5 GHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01   | 0.12  | 0.12                                   | 0.23                                    |
| 0.1  | 0.38  | 0.38                                   | 0.73                                    |
| 10   | 3.8   | 3.8                                    | 7.3                                     |
| 100  | 12  | 12                                     | 23                                      |


Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non è elencata sopra, la distanza consigliata (d) in metri (m) può essere determinata tramite l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima in uscita in Watt (W) indicata dal produttore del trasmettitore.

*IMPORTANTE: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza della gamma di frequenza più elevata.*














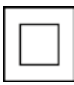


*IMPORTANTE: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è condizionata dall'assorbimento e dalla rifrazione da parte di strutture, oggetti e persone.*

IT

## 16 Glossario: Spiegazione dei Simboli della Confezione e dell'etichettatura

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Vedere le istruzioni prima dell'uso                |  | Limitazione per pressione atmosferica operativa: da 0 a 4,000 m (0–13,000 piedi) |
|  | Tipo BF secondo i requisiti di sicurezza elettrica |  | Limitazioni per temperatura di conservazione: -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F)        |

## Glossario: Spiegazione dei Simboli della Confezione e dell'etichettatura (continuazione)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|   | Numero di serie   |   | Limitazione per umidità:<br>5–93% ±2% senza condensa                                    |
|   | Numero di catalogo  |   | Maneggiare con cura   |
|   | La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica |   | Data di fabbricazione   |
|   | Non usare se la confezione è danneggiata. Vedere il Capitolo 6.   |   | Produttore  |
|   | Nessuna fiamma libera se il dispositivo è in uso o non incenerire   |   | Tenere asciutto (questo simbolo si riferisce alla classificazione IPX2 del dispositivo) |
|   | Vietato fumare  |   | Smaltire appropriatamente le batterie esauste   |
|   | Raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche                                     |   | Simbolo di Classe II  |
|  | Conforme alle direttive UE compresa quella per gli apparecchi elettromedicali                             |  | Idoneo per utilizzo in Ossigeno terapia domiciliare                                     |

IT



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom



Prodotto per: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States



# Svenska

## Bruksanvisning: Zen-O lite™ Bärbar Syrgaskoncentrator (Modell: RS - 00600)

### Innehåll

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Förord</b> .....                         | <b>260</b> |
| 1.1. Allmän Information .....                  | 260        |
| 1.2. Klassificering .....                      | 260        |
| 1.3. Markörer .....                            | 261        |
| <b>2. Avsedd Användning</b> .....              | <b>261</b> |
| <b>3. Säkerhetsinstruktioner</b> .....         | <b>262</b> |
| 3.1. Översikt Över Varningar .....             | 262        |
| 3.2. Översikt över Försiktighetsåtgärder ..... | 263        |
| 3.3. Översikt över Viktig Information .....    | 265        |
| <b>4. Anvisningar och Utbildning</b> .....     | <b>265</b> |
| <b>5. Produktbeskrivning</b> .....             | <b>266</b> |
| 5.1. Ritning .....                             | 266        |
| <b>6. Instruktioner före Användning</b> .....  | <b>267</b> |
| 6.1. Lista över Tillbehör .....                | 267        |
| 6.2. Batteri .....                             | 267        |
| 6.3. Näskanyl .....                            | 269        |
| <b>7. Användning av Koncentratoren</b> .....   | <b>270</b> |
| 7.1. Anslutning av Näskanyl .....              | 270        |
| 7.2. Påslagning .....                          | 271        |
| 7.3. Välj Språk .....                          | 271        |
| 7.4. Ändra Inställning .....                   | 271        |
| 7.5. Batteriknapp .....                        | 272        |
| 7.6. Svara På Alarm .....                      | 272        |
| 7.7. Avstängning .....                         | 272        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>8. Resa med Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator med flyg</b> .....                            | <b>273</b> |
| 8.1. Förberedelser för passageraren innan resan .....  | 273        |
| 8.2. Ombordstigning och flyginformation.....   | 275        |
| 8.3. Krav från Transportsäkerhetsadministrationen (Transport Security Administration — TSA)<br>..... | 277        |
| <b>9. Alarmindikatorer</b> .....   | <b>277</b> |
| 9.1. Alarm .....   | 278        |
| <b>10. Problemsökning</b> .....  | <b>281</b> |
| <b>11. Underhåll och Rengöring</b> .....   | <b>282</b> |
| 11.1. Rutinunderhåll.....  | 282        |
| 11.2. Yttre Rengöring .....  | 282        |
| 11.3. Livslängd .....  | 282        |
| 11.4. Serviceanslutningen .....  | 282        |
| <b>12. Reparation och Avyttring Av Utrustningen</b> .....  | <b>283</b> |
| 12.1. Reparation.....  | 283        |
| 12.2. Anvisningar för byte av siktrören: .....   | 283        |
| 12.3. Avyttring .....  | 284        |
| <b>13. Garanti</b> .....   | <b>284</b> |
| <b>14. Varumärken och Ansvarsfriskrivning</b> .....  | <b>284</b> |
| 14.1. Varumärke.....   | 284        |
| 14.2. Ansvarsfriskrivning.....   | 284        |
| <b>15. Teknisk Beskrivning</b> .....   | <b>285</b> |
| 15.1. Information om Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC).....                                      | 287        |
| <b>16. Ordlista – Förklaring av Symboler på Förpackning och Etiketter</b> .....                      | <b>290</b> |

# 1. Förord

*Var god se denna bruksanvisning för detaljerade anvisningar om varningar, försiktighetsåtgärder, specifikationer och ytterligare information.*

*Viktigt: Användare bör läsa hela bruksanvisningen innan de använder den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™. Att inte göra detta kan resultera i personskada och/eller dödsfall. Om du har frågor om informationen i denna bruksanvisning eller om hur du använder detta system på ett säkert sätt bör du kontakta din distributör.*

## 1.1. Allmän Information

Denna bruksanvisning innehåller information för användare av den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™. För att göra bruksanvisningen lättare att läsa används ibland termerna "koncentrator", "BSK", "enhet" och "utrustning" för att hänvisa till den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™. "Patient" och "användare" betecknar samma sak.

## 1.2. Klassificering

Denna utrustning finns listad hos ett internationellt känt testlaboratorium och är klassificerad med avseende på elchock, eld och mekaniska faror i enlighet med följande standarder:

- IEC/EN 60601-1:2012, Medicinsk elektrisk utrustning – del 1: Krav för grundläggande säkerhet och drift
- IEC/EN 60601-1-2:2014, del 1-2: Krav för Grundläggande Säkerhet – Säkerhetsstandard: Elektromagnetisk Kompatibilitet – Krav och Tester.
- IEC/EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Medicinsk Elektrisk Utrustning – del 1-6: Krav för Grundläggande Säkerhet och Drift – Säkerhetsstandard: Användbarhet
- IEC/60601-1-8:2006 Medicinsk Elektrisk Utrustning – del 1-8: Krav för Grundläggande säkerhet – Säkerhetsstandard: Grundläggande Krav, Tester och Vägledning för Alarmsystem i Medicinsk Elektrisk Utrustning och i Medicinska Elektriska System
- IEC/60601-1-11:2011 Medicinsk elektrisk utrustning – del 1-11: Krav för Grundläggande säkerhet – Säkerhetsstandard: Krav för Medicinsk Elektrisk Utrustning och Medicinska Elektriska System som används för Sjukvård i Hemmet
- ISO 80601-2-67:2014, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – del 2-67: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för oxygenbesparande utrustning
- ISO 80601-2-69:2014, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-69 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för utrustning av oxygenkoncentratorer
- CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, Kanadensisk Standard, Medicinsk Elektrisk Utrustning – del 1: Krav för Grundläggande Säkerhet och Drift
- Medicintekniskt Direktiv 93/42/EEG

## Denna utrustning klassificeras som:

- Klass II
- Klass IIa enligt MDD 93/42/EEG
- Typ BF
- IP22 med bärväska

### 1.3. Markörer

Dessa instruktioner innehåller varningar, försiktighetsåtgärder och notiser för att uppmärksamma om de viktigaste aspekterna för säkerhet och användning av utrustning. För att lättare kunna upptäcka dessa i texten visas de med följande markörer:



**Varning: Beskriver allvarliga negativa reaktioner och potentiella säkerhetsrisker.**



**Försiktighetsåtgärd:** Visar på information angående eventuella särskilda åtgärder som vårdgivare och/eller patient måste göra för att säkerställa säker och effektiv användning av utrustningen.

*VIKTIGT: Uppmärksammar ytterligare viktig information om utrustning eller användning.*

## 2. Avsedd Användning

Den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ är till för att ge extra syrgas till vuxna patienter med kroniska lungsjukdomar och för patienter som behöver extra syrgas.

Utrustningen är bärbar och ger patienter som behöver syrgasutrustning möjlighet att behandlas i hemmet enligt behandlares ordination eller anvisning.

Zen-O lite™ är inte menad för användning i situationer som kräver livsuppehållande vård, och utrustningen är inte steril. Utrustningen fås endast på recept och är ämnad för användning både inomhus och utomhus. Läs mer om driftsförutsättningar i kapitel "15. Teknisk beskrivning".

### Den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ skall inte användas:

- i situationer som kräver livsuppehållande vård
- i operationsmiljöer och i kirurgiska miljöer
- på personer som inte är vuxna
- i förbindelse med lättantändliga bedövningsmedel eller lättantändliga material

### 3. Säkerhetsinstruktioner



#### 3.1. Översikt Över Varningar

1. Utrustningen måste användas i bärväska för att skyddas från vätskor som regn och/eller spill.
2. Syrgasutrustning och syrgasterapi kan medföra brandfara. Använd inte nära gnistor eller öppen eld.
3. Inställningarna för den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ RS-00600 kanske inte överensstämmer med fortlöpande syrgasflöde.
4. Inställningarna för andra modeller eller märken av syrgasterapiutrustning överensstämmer inte med inställningarna för den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ RS-00600.
5. Vind eller starka drag kan påverka utförandet av syrgasterapi negativt.
6. Geriatriska patienter och patienter som inte kan kommunicera obehag kan behöva ytterligare övervakning för att undvika skador.
7. Rökning (inklusive e-cigaretter) under syrgasterapi är farligt och kommer sannolikt att leda till brännskador i ansiktet eller dödsfall. Tillåt inte rökning eller öppen eld i samma rum som den bärbara syrgaskoncentratorn eller tillbehör för att bära syrgas. Om du röker måste du alltid stänga av syrgaskoncentratorn, ta bort kanylen och gå ut ur det rum där du förvarar kanylen och/eller koncentratorn. Om du inte kan lämna rummet måste du vänta tio minuter efter det att syrgasflödet har stoppats.
8. Använd bara vattenbaserade krämer som är syrgaskompatibla före och under syrgasterapi. Använd aldrig petroleum- eller oljebaserade krämer eller salvor när du använder utrustning för att undvika risk för eld och brännskador.
9. Öppen eld i samband med syrgasterapi är farligt och kommer sannolikt att leda till eld eller dödsfall. Tillåt inte öppen eld inom två meter av den bärbara syrgaskoncentratorn eller tillbehör för att bära syrgas.
10. Syrgas gör det lättare för eld att starta och spridas. Lämna inte näskanylen på sängöverkast eller stolskuddar med koncentratorn på när den inte används. Syrgasen gör materialen lättantändliga. Stäng av koncentratorn när du inte använder den för att förhindra syrgasberikning.
11. Viktigt! Explosionsrisk. Använd inte nära lättantändliga bedövningsmedel!
12. Använd inte utrustningen i närheten av utsläpp eller avgaser.
13. Sänk inte ned utrustningen i vätska. Utsätt inte för vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte för dammiga miljöer.
14. Använd inte utrustning eller tillbehör som blivit skadade.



15. Använd inte smörjmedel på utrustningen eller dess tillbehör.
16. Användning av utrustningen på en höjd av över 4 000 m (13 000 ft) eller i temperaturer under eller över 5 °C (41 °F) till 40 °C (104 °F), eller i luftfuktighet under eller över 5 % till 93 % kan påverka flödet och procenthalten av syrgas negativt och därigenom påverka behandlingskvaliteten. När utrustningen inte används bör den förvaras i en ren, torr miljö mellan -20 °C och 60 °C (-4 °F och 140 °F). Användning och/eller förvaring utanför de rätta förutsättningarna kan skada produkten. Läs mer om tekniska detaljer i kapitel 15. Teknisk Beskrivning.
17. Kontrollera alltid att minst ett batteri är anslutet innan du använder utrustningen.
18. Om du mår dåligt eller upplever obehag medan du använder utrustningen ska du kontakta din behandlare eller söka medicinsk hjälp omedelbart för att undvika skador.
19. Din vårdgivare måste kontrollera utrustningens kompatibilitet med alla dess tillbehör före användning. För att se till att du får i dig rätt mängd syrgas för ditt sjukdomstillstånd får utrustningen och dess kontrollerade kompatibla tillbehör endast användas efter att en eller flera inställningar har bestämts eller blivit ordinerat dig för dina specifika aktivitetsnivåer av din vårdgivare.
20. De elektriska sladdarna och rören kan utgöra fara för att snava eller strypas. Håll borta från barn och husdjur.
21. Ta inte isär eller ändra utrustningen eller dess tillbehör. Försök inte att utföra någon form av underhåll förutom vad som beskrivs i kapitel "9. PROBLEMSÖKNING". Isärtagning kan orsaka elchocker och ogiltigförklarar garantin. Kontakta din distributör för underhåll av auktoriserad personal.
22. Använd bara reservdelar som rekommenderats av tillverkaren för att säkerställa korrekt drift och för att undvika risker för eld och brännskador.
23. Man får inte reparera eller utföra servicearbete när enheten används av patienten.



### 3.2. Översikt över Försiktighetsåtgärder

1. Håll utrustningen borta från värmekällor (eldstäder, värmeelement och liknande) som kan få temperaturen runt utrustningen att överstiga 40 °C (104 °F).
2. Skärmen kan vara svår att läsa i starkt ljus (solljus, lysrör och liknande). Flytta skärmen ur direkt ljus för att läsa av skärmen.
3. Undvik löst material som kan blockera ventilationsöppningarna för luftintag.
4. Vissa länder begränsar försäljningen av denna utrustning till att endast säljas av eller enligt beställning av en ordinerande vårdgivare. Se till att du följer vidkommande lokala lagar.
5. Icke receptbelagd syrgasterapi kan vara skadlig under vissa omständigheter. Använd endast denna utrustning om den är ordinerad av en vårdgivare.

6. Patienter med snabb andning som behöver en högre syrgasinställning kanske behöver mer syrgas än vad denna utrustning kan producera. Se kapitel "15. Teknisk Beskrivning". Denna utrustning kanske inte är lämplig om så är fallet. Rådgör med din vårdgivare angående alternativ behandling.
7. Använd alltid denna utrustning på den inställning som du blivit ordinerad av en vårdgivare. Ändra inte inställningen om du inte fått ordination av din vårdgivare. Utrustningens flödesinställningar bör utvärderas av en vårdgivare med jämna mellanrum.
8. Använd inte denna utrustning medan du sover om du inte blivit ordinerad detta av din vårdgivare.
9. Vi rekommenderar att ha en alternativ syrgaskälla tillgänglig i händelse av strömavbrott eller mekaniskt fel. Rådgör med din vårdgivare angående ett passande reservsystem.
10. Utrustningen kan ta upp till två minuter på rätt inställt flöde för att nå den specificerade syrgaskoncentrationen.
11. Utrustningen är menad att användas av en patient åt gången.
12. Om du är oförmögen att höra eller se alarm, inte har normal känsel eller inte kan kommunicera obehag bör du rådgöra med en vårdgivare innan du använder utrustningen.
13. Om syrgaskoncentrationen sjunker under den specificerade nivån kommer ett alarm att indikera detta. Om alarmet fortsätter ska du sluta använda utrustningen, byta till en alternativ syrgaskälla och kontakta din vårdgivare.
14. Använd bara godkända tillbehör med denna utrustning. En lista över godkända tillbehör finns i sektion 6.1. tillsammans med kanyler som är godkända för användning med denna utrustning. Att använda icke godkända tillbehör eller kanyler kan försämra utrustningens prestanda.
15. Utrustningen är inte gjord för användning tillsammans med en luftfuktare eller nebulisator. Om en luftfuktare eller nebulisator används tillsammans med denna utrustning kan prestandan försämrans och utrustningen kan skadas.
16. Följ alltid kanyltillverkarens instruktioner för användning.
17. Byt ut kanylen regelbundet. Rådfråga din vårdgivare om hur ofta du bör byta ut kanylen.
18. Kontrollera att utrustningen fungerar på batteridrift efter att du kopplat bort strömkällan.
19. Ladda bara batteriet i utrustningen eller i en godkänd laddare. (Se listan över godkända tillbehör.)
20. Ta ut batteriet om utrustningen inte kommer att användas på mer än sju dagar. Förvara batteriet svalt och torrt.
21. Använd inga andra rengöringsmedel än de som nämns i denna bruksanvisning. Låt rengöringsmedlet torka från den rengjorda ytan före användning.
22. Stäng alltid av utrustningen när den inte används.

23. Koppla bort strömkällan och stäng av utrustningen innan du rengör den. Se kapitel "11. Underhåll och Rengöring".
24. Blockera inte de in- och utgående luftvägarna när du använder utrustningen. Blockeringar kan orsaka överhettning som kan stänga av eller skada utrustningen.
25. Placera inte föremål ovanpå utrustningen.
26. Håll utrustningen borta från barn och husdjur för att förhindra skador på utrustning och tillbehör och/eller oavsiktliga ändringar av inställningarna.
27. Håll utrustningen borta från husdjur och skadedjur.
28. Utrustningen har klassificeringen IP22 när den används i bärväskan. Använd inte i dammiga eller våta miljöer.
29. Använd alltid i väl ventilerade miljöer.
30. Följ alltid det underhållsschema som specificeras i kapitel "11.1. Rutinunderhåll".
31. Om utrustningen verkar vara i onormalt skick bör du läsa kapitel "10. Problemsökning".
32. Var försiktig när du vidrör utrustningen i höga omgivande temperaturer.
33. Enheten kan återanvändas av en ny patient. Utrustningen skall rengöras enligt kapitel 11.2 i denna bruksanvisning och skall följa lokala lagar och förordningar innan leverans till ny patient.
34. Enheten kan isoleras från strömförsörjningen genom att koppla bort den från ingången, se fig. 1, placera enheten för enkel åtkomst till strömförsörjningsingången.

### 3.3. Översikt över Viktig Information

1. *Om du behöver använda en förlängningsladd ska du använda en UL-godkänd sladd för 15 ampere eller högre. Anslut inte annan utrustning på samma förlängningsladd. Använd inte i en förlängningsladd med flera uttag.*
2. *För att koncentratorn ska fungera så effektivt som möjligt ska du andas in genom näsan. Att andas in genom munnen kan göra syrgasterapin mindre effektiv.*

## 4. Anvisningar och Utbildning

Det medicintekniska direktivet 93/42/EEG anger att produktleverantören måste se till att alla användare av utrustningen tillhandahålls med bruksanvisningen och att de utbildas i hur utrustningen ska användas.

 **WARNING: Använd inte utan rätt utbildning! Patienter och vårdgivare måste utbildas av en erfaren person som har blivit auktoriserad av tillverkaren och som har passande utbildning, kunskap och erfarenhet.**

Kontakta din vårdgivare för mer information om utbildning.

## 5. Produktbeskrivning

### 5.1. Ritning

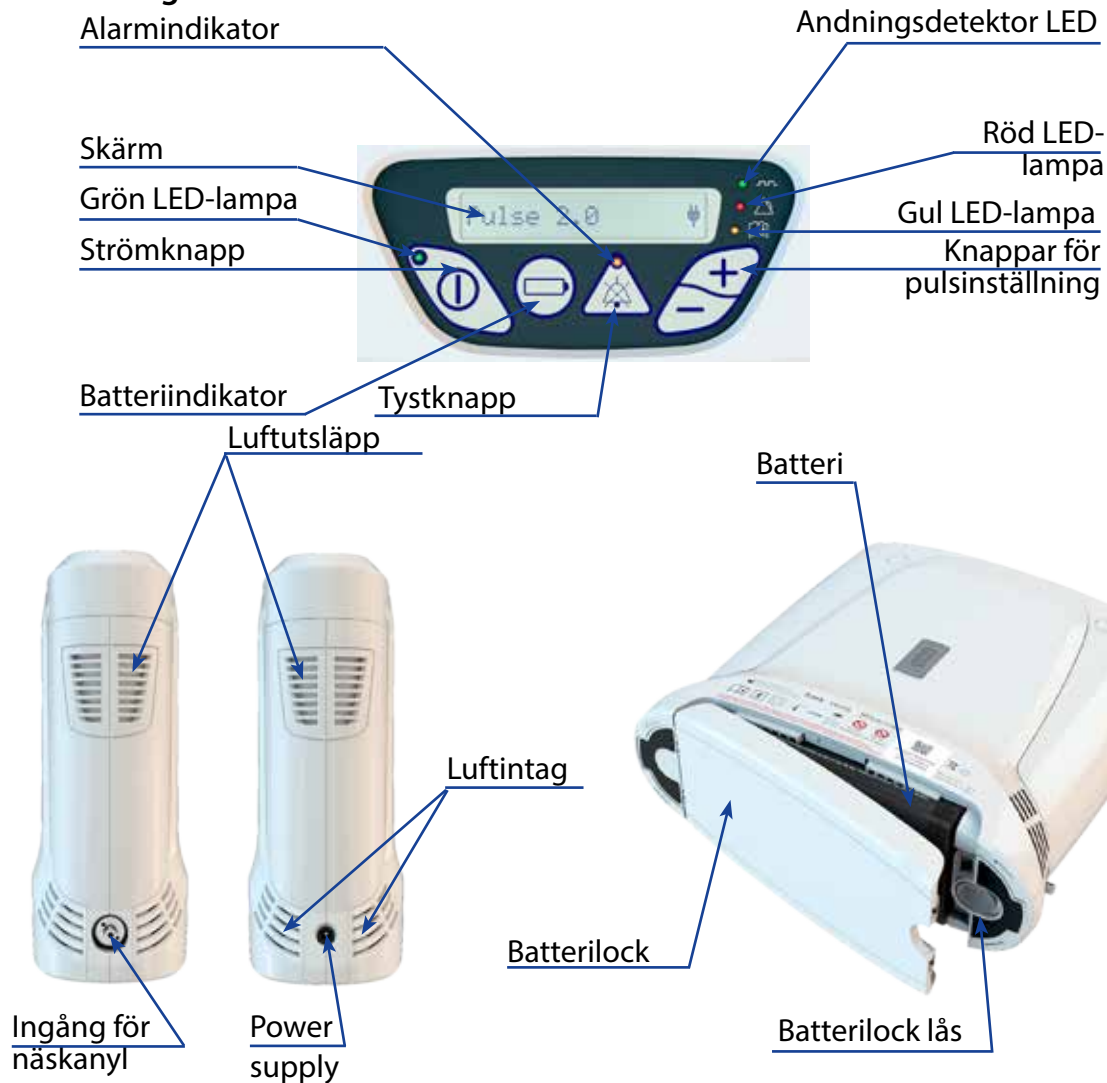


Fig. 1

SV

## 6. Instruktioner före Användning

Ett flertal tillbehör kan förbättra rörligheten och användbarheten av den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™. Förutom utrustningen innehåller förpackningen också tillbehör för att komma igång och en bruksanvisning.

Kontrollera alltid att utrustningen och tillbehören inte är skadade före användning.

*Viktigt: Även om kartongen eller förpackningen kan vara skadade, till exempel revor eller märken, kan utrustningen fortfarande vara i användbart skick. Kontakta din vårdgivare om utrustningen eller något av tillbehören visar tecken på skada.*

Se till att du har följande innan du startar:

- Koncentrator
- Batteri
- Bärväska
- Växelströmkälla
- Likströmkälla

### 6.1. Lista över Tillbehör

Använd bara strömkällor/adaptrar och tillbehör som nämns i denna bruksanvisning. Att använda tillbehör som inte är specificerade kan skada och/eller negativt påverka utrustningens prestanda.

- Uppladdningsbart batteri (RS-00601)
- Växelströmkälla – Europeisk strömsladd (RS-00602)
- Växelströmkälla – Brittisk strömsladd (RS-00603)
- Växelströmkälla – Nordamerikansk strömsladd (RS-00604)
- Likströmkälla (RS-00605)
- Bärväska (RS-00606)
- Europeisk strömsladd (RS-00504)
- Brittisk strömsladd (RS-00506)
- Nordamerikansk strömsladd (RS-00503)
- Extern batteriladdare - EU (RS-00516)
- Extern batteriladdare - USA (RS-00515)
- Extern batteriladdare - UK (RS-00517)

 **WARNING: Använd inte utrustning eller tillbehör som blivit skadade.**

### 6.2. Batteri


Den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™ kan alltid användas när den är direkt ansluten till en strömkälla. Men för att göra den mer rörlig är koncentratorn utrustad med ett inre uppladdningsbart litiumjonbatteri.

 **WARNING: Se alltid till att batteriet är isatt innan användning av enheten.**

*VIKTIGT: Andra strömkällor finns tillgängliga för användning globalt och för resor. En lista över godkända tillbehör finns i kapitel 6.1.*

### 6.2.1. Ladda Batteriet

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Ladda bara batteriet i utrustningen eller i en godkänd laddare. (En lista över godkända tillbehör finns i kapitel 6.1.)

- Innan användning av enheten, installera batteriet som visas i Fig. 2. Batterier klickar till när det sitter i ordentligt.
- Stäng batterifacket på enheten.
- Anslut växel/likströmkällan genom att ansluta den runda kopplingen till uttaget på sidan om koncentratorn. Fig. 3.
- Anslut den andra änden av växel/likströmkällan till ett eluttag. Var alltid försiktig när du ansluter strömkällan till eluttaget.
- Skärmen visar **Laddar NN%** .

Laddaren är av universalmodell och är kompatibel med ett flertal internationella marknader så att den kan anslutas till ett uttag med 100-240 V växelström, 50-60 Hz.

Låt batteriet ladda minst tre timmar före användning. Efter fullständig laddning kan utrustningen användas upp till fyra timmar med ett batteri med 18 andetag i minuten.

*VIKTIGT: Batteritiden kan variera beroende på andningstakt, batteriets ålder och miljö. Läs mer om batteriets laddningsstatus på utrustningens text.*

*Viktigt: Kontrollera att strömikonen (Fig. 7) visar att strömmen är ansluten. Kontrollera annars att sladden är korrekt ansluten. (Se kapitel 10. Problemsökning för mer information.)*

För att maximera batteriets livslängd och drifttid bör du undvika att låta batteriet laddas ur helt, och använd utrustningen när den är ansluten till en strömkälla närhelst det är möjligt. Det inre batteriet kommer automatiskt att laddas när koncentratorn är ansluten till en strömkälla. Du kan använda utrustningen medan batteriet laddar. LCD-panelen visar om enheten drivs med batteri eller extern AC-strömförsörjning.

Det fulladdade batteriet behåller viss laddning i upp till trettio dagar i utrustningen när den inte används. Läs försiktighetsåtgärden nedan för rekommendationer om uttag och förvaring av batteriet.



Fig. 2




Fig. 3


*Viktigt: Om koncentratorns batteri laddas ur helt och hållet kan batteriet skadas.*

*Viktigt: Efter 300 laddningar och urladdningar kommer batterikapaciteten att vara minst 80 % av ursprungskapaciteten. Byt ut batteriet när dess reducerade livslängd påverkar din rörlighet.*

*VIKTIGT: Likströmskälla ska endast användas i fordon med korrekt uteffekt.*

*VIKTIGT: Fordonet ska vara igång när likströmsadaptorn används för att driva den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O.*

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Ta ut batteriet om utrustningen inte kommer att användas på mer än sju dagar. Förvara batteriet svalt och torrt.


 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Kontrollera att utrustningen fungerar på batteridrift efter att du kopplat bort strömkällan.

*VIKTIGT: När du inte använder batteriet i enheten ska du förvara det i skyddsfickan som kom med originalförpackningen. Om batteriet inte kommer att utnyttjas för långa löptider, ladda batteriet helt åtminstone en gång per år.*

### 6.3. Näskanyl

**Använd bara näskanyl med följande specifikationer:**

- 7 ft (2,1 m) eller 25 ft (7,6 m) lång
- Stort flöde
- Stor inre diameter
- Raka, icke avsmalnande toppar
- Passar för upp till 15 liter/minut vid en max. tryck av 3,6 psi
- Kompatibel med IEC/EN 60601-1

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Använd bara godkända tillbehör med denna utrustning. Vi hänvisar till den godkända tillbehörsguiden för en fullständig lista över tillbehör och kanyler som är godkända för användning med denna utrustning. Att använda icke godkända tillbehör eller kanyl kan försämra utrustningens prestanda, inklusive flöde och syrgasens renhet. Kontakta din distributör för uppdaterad information och tillbehör, eller om du behöver ytterligare, extra eller ersättningstillbehör.

SV



## 7. Användning av Koncentratorn

**VIKTIGT:** Läs 3.1. Översikt över Varningar och 3.2. Översikt över Försiktighetsåtgärder innan du använder utrustningen.

Den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ är gjord för att vara lätt att använda. Alla funktioner finns tillgängliga genom ett fåtal knappar på panelen.

Enheten bör transporteras i sin väska och används när den är placerad upprätt på en plan yta eller på golvet i väskan. Patienten bör befinna sig inom den rekommenderade kanyllängden under användning.

**VIKTIGT:** Förutom under påslagning och avstängning kommer skärmens bakgrundsljus att vara avstängt. Varje knapptryckning tänder bakgrundsljuset en kort stund. Bakgrundsljuset förblir också tätt medan larmet är igång.

### 7.1. Anslutning av Näskanyl

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Byt ut kanylen regelbundet. Rådfråga din vårdgivare om hur ofta du bör byta ut kanylen.

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Följ alltid kanyltillverkarens instruktioner för användning.

Anslut röret till kanylanslutningen enligt Fig. 5.

Anslut kanylen till patienten genom att placera kanylens toppar i patientens näsborrar och dra rören över båda öronen och under hakan. Följ tillverkarens instruktioner.

Dra adaptern upp längs rören för att justera passformen.

När kanylen sitter på plats ska du andas normalt genom näsan. Zen-O lite™ kommer att notera andning och distribuera syrgas vid inandning.

**VIKTIGT:** Felaktig placering av kanylen kan innebära att utrustningen inte kan notera alla patientens andetag. Se till att kanylen är säkert fastsatt och helt införd.

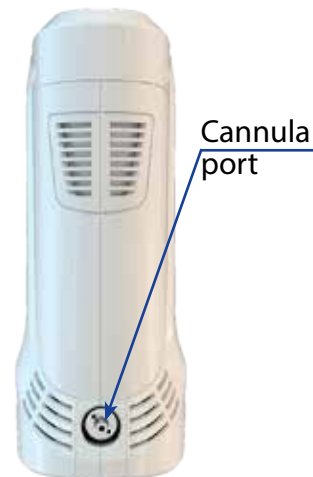



Fig. 5



Fig. 6



## 7.2. Påslagning

- Tryck på strömknappen för att starta utrustningen .
- Koncentratorn piper och de gröna, röda och gula LED-lamporna blinkar en gång, medan skärmen visar enhetsnamnet.



Röd LED-lampa – indikerar en varning, fara och/eller behov av omedelbar handling








Gul LED-lampa – indikerar behov av försiktighet eller uppmärksamhet



Blinkande grön LED – indikerar att syre levereras.



*IMPORTANT: No adjustments can be made until the startup sequence is completed.*

## 7.3. Välj Språk

- När utrustningen är på håller du in plusknappen  och tystknappen  tillsammans i ungefär fyra sekunder tills skärmen visar "Språk:"
- Bläddra sedan i listan över tillgängliga språk med plus-  och minus-  knapparna.
- När önskat språk visas, tryck på batteriknappen  för att välja. Utrustningen kommer att byta språk och återgå till den vanliga flödesskärmen.


## 7.4. Ändra Inställning

*VIKTIGT: När du startar Zen-O lite™ tar startsekvensen ungefär 35 sekunder. Den specificerade syrgasnivån nås inom två minuters användning.*

- Utrustningen startar på föregående inställning.
- Utrustningen ger en syrgaspuff i början av varje inandning.
- Pulsläget kan justeras storleksmässigt mellan 1,0 och 5,0 i steg om 0,5 med  och  -knapparna.

*VIKTIGT: Om du misstänker en luftläcka kan du hitta den genom att applicera en blandning av tvål och vatten på anslutningspunkten mellan kanylen och koncentratorn och titta efter bubblor.*

Den nuvarande inställningen och strömkällan (extern ström eller batteri – batteriikonen visar också batteriets ungefärliga laddning) visas på skärmen enligt Fig. 7.

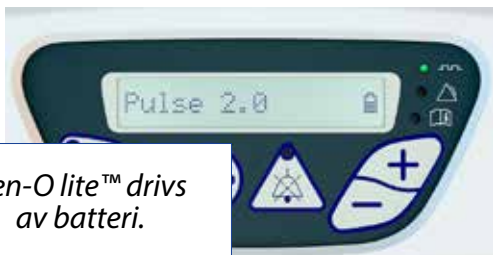


Zen-O lite™ drivs  
av batteri.








Zen-O lite™ drivs  
av extern strömkälla.

Fig. 7


## 7.5. Batteriknapp


Batteriknappen  visar batteriets/batteriernas status. Genom att trycka på knappen upprepade gånger går du genom all information.

- Först kommer mätaren att visa **Laddar NN%**  eller **Bat.1: NN%** .
- Därefter **Bat.1: NN%**  kommer antalet laddningscykler att visa **Batt.1: N Cykl.**  eller **Bat: Cycl.** .

Efter tre tryck på batteriknappen kommer displayen att växla tillbaka till huvudskärmen som visar den aktuella flödesinställningen. Efter den femte gången du trycker på batteriknappen går skärmen tillbaka till huvudskärmen som visar nuvarande flödesinställning. Utrustningen lämnar automatiskt batteristatusmenyn och går tillbaka till flödesinställningsmenyn om du inte trycker på någon knapp inom 15 sekunder.

## 7.6. Svara På Alarm

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Om du är oförmögen att höra eller se alarm, inte har normal känsel eller inte kan kommunicera obehag bör du rådgöra med en vårdgivare innan du använder utrustningen.

Om du trycker på tystknappen  tystar du alarmet. Längden av tystnad beror på hur allvarligt alarmet är (se kapitel "8. Alarmindikatorer"). Under den tysta perioden kommer LED-lamporna att lysa för att visa att alarmet är tystat. Tryck på tystknappen igen för att sätta igång alarmen igen. Om du trycker på tystknappen när det inte finns något aktivt alarm kommer framtida alarm med låg eller mellanprioritet att tystas i åtta timmar. Se kapitel "8. Alarmindikatorer" och kapitel "9. Problemlösning" för mer information om alarm.

*VIKTIGT: Alarmsystemet testas under startsekvensen. Alla alarmlampor ska tändas kort och alarmindikatorn ska pipa. Om du misstänker att alarmen inte fungerar som de ska bör du kontakta din distributör för att få bekräftat att alarmen fungerar korrekt.*

## 7.7. Avstängning

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Stäng alltid av utrustningen när den inte används.

För att stänga av den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™ håller du in strömknappen. Utrustningen piper och skärmen visar ett avstängningsmeddelande **Avstängning** i ungefär fem sekunder innan den övergår till strömsparläge.

*Viktigt: Koppla inte bort växelströmkällan och batteriet samtidigt medan enheten är igång. Stäng alltid av utrustningen med strömknappen. Vänta tills utrustningen har stängts av helt innan du kopplar bort strömkällan och batteriet.*

## 8. Resa med Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator med flyg

### 8.1. Förberedelser för passageraren innan resan

#### 8.1.1. Obligatorisk märkning

Din Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator är lämpad att användas på flygplan och har uppfyllt alla acceptanskriterier från United States Federal Aviation Administration (FAA). Detta verifieras av texten på baksidan av din portabla syrgaskoncentrator där det står, med röd text, "The manufacturer of this POC has determined this device conforms to all applicable FAA acceptance criteria for POC carriage and use on board aircraft" (Tillverkaren av denna portabla syrgaskoncentrator har fastställt att denna enhet uppfyller alla tillämpliga acceptanskriterier från FAA för medförande och användning av portabla syrgaskoncentratorer ombord på flygplan). Före flygningen kan du bli ombedd att visa denna etikett på din portabla syrgaskoncentrator för en flygvärdinna.

#### 8.1.2. Rådgivning från läkare/sjuksköterska

FAA kräver inte att passagerare rådgör med läkare/sjuksköterska innan en Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator används ombord på ett flygplan. Du kan dock vilja diskutera följande med din läkare/sjuksköterska:

- Hur en trycksatt kabin (kabintryckshöjden kan nå drygt 8 000 fot) påverkar ditt syrgasbehov.
  - Vissa användare av Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator behöver ställa in ett högre literflöde eller liter per minut (LPM) på sin Zen-O lite™ portabla syrgaskoncentrator i luften p.g.a. kabintryckshöjden.
  - Vissa användare av Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator som använder sin Zen-O lite™ vid behov på marken kan behöva använda sin Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator under hela flygningen p.g.a. kabintryckshöjden.
- Ditt syrgasbehov vid tiden för resan och om ditt behov har ändrats sedan din Zen-O lite™ portabel syrgaskoncentrator först förskrevs eller under den senaste konsultationen med en läkare/sjuksköterska.
- Vissa nyckelföreskrifter i handboken för Zen-O lite™ syrgaskoncentrator gällande syrgasmatning, indikatorer, varningar och även inställning/ändring av literflödet eller LPM.
- Alla i flygbesättningen (piloter och flygvärdinnor (F/A)) får utbildning i hur medicinska händelser ska hanteras under en flygning. FAA kräver dock inte att flygbolag eller besättningsmedlemmar ger passagerare medicinsk hjälp.

*VIKTIGT: Ytterligare information gällande hälsa och säkerhet för passagerare kan hittas på [http://www.faa.gov/passengers/fly\\_safe/health/comprehensive/](http://www.faa.gov/passengers/fly_safe/health/comprehensive/).*

#### 8.1.3. Fastställa ett tillräckligt antal batterier

Du är ansvarig för att ta med ett tillräckligt antal batterier för att driva din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator under hela den förväntade användningstiden av din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator. Du bör åtminstone överväga följande när du fastställer ett tillräckligt antal batterier:

- Råd från läkare/sjuksköterska gällande hur länge Zen-O lite™ syrgaskoncentrator kommer att användas.
- Flygbolagets information gällande flygtid och även eventuella uppehåll och oväntade förseningar.

*VIKTIGT: Du kanske kommer att flyga på flera plan eller med flera flygbolag vilket också kan innebära längre användningsperioder för Zen-O lite™ syrgaskoncentrator på marken mellan flygen.*

- Instruktionerna i bruksanvisningen för Zen-O lite™ gällande hur lång varaktighet batterierna har.

*VIKTIGT: Du bör aldrig förlita dig på flygplanets tillgängliga el under en flygning.*

- Flygbolagets krav att medföra en viss mängd batterier finns vanligtvis tillgängliga på varje flygbolags webbplats.

*VIKTIGT: Flygbolag kan kräva att du har tillräckligt med batterier för att driva enheten i minst 150 % av den förväntade maximala flygtiden.*

#### **8.1.4. Dokumentation**

Du är ansvarig för driften av Zen-O lite™ syrgaskoncentrator ombord på planet. Av denna anledning rekommenderar FAA att passagerare tar med sig, som minst, denna bruksanvisning och alla annan skriftlig information som tillhandahållits av din läkare/sjuksköterska gällande Zen-O lite™ syrgaskoncentrator och dess användning.

#### **8.1.5. Läkarutlåtande**

Ett flygbolag kan kräva ett läkarintyg från passagerare med en funktionsnedsättning om det finns rimlig anledning att tvivla på att denna individ kan genomföra flygningen på ett säkert sätt utan att behöva speciell medicinsk assistans under flygresan. Ett flygbolag kan också kräva ett läkarintyg från en person som behöver medicinsk syrgas under flygresan. FAA kräver **inte** att passagerare skaffar ett läkarutlåtande och visar upp detta för operatören eller befälhavaren (Pilot in Command – PIC) innan Zen-O lite™ syrgaskoncentrator används ombord på planet.

#### **8.1.6. Extrabatterier**

Batteriskador och kortslutning av batterier kan resultera i att batterierna överhettas och fattar eld. Dessa händelser kan i sin tur leda till att passagerare skadas och, i värsta fall med vissa batterityper, en katastrofal kabinbrand. P.g.a. detta måste extra litiumbatterier som tas med ombord på ett flygplan vara individuellt skyddade mot kortslutning genom att vara placerade i ursprungsförpackningen från inköpsstället eller att varje batteri är placerat i en separat plastpåse/skyddande ficka.

*VIKTIGT: Det är förbjudet att ha extra litiumbatterier i incheckat bagage på ett flygplan.*

Du är ansvarig för att säkerställa att alla batterier som medförs i handbagaget är korrekt förpackade. Leverantörer av Zen-O lite™ syrgaskoncentratorer, vissa flygbolag och speditörer som specialiserar sig på frakt av små paket kan tillhandahålla dig denna förpackningstjänst.

## 8.2. Ombordstigning och flyginformation

### 8.2.1. Handbagage

Din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator är ett hjälpmedel. I detta fall ska flygbolaget inte tillämpa sin handbagagepolicy och räkna med Zen-O lite™ syrgaskoncentrator i gränsen för handbagage som är tillåtet att ta med sig i kabinen för en kvalificerad person med ett funktionshinder.

*VIKTIGT: En väska med extrabatterier som krävs för att driva Zen-O lite™ syrgaskoncentrator under flygtiden kan också anses vara ett hjälpmedel. Det finns dock restriktioner på kapaciteten av antal wattimmar (Wh) på batteriet som är begränsad till 100Wh per batteri. För din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator så är kapaciteten för antal wattimmar (Wh) mindre än 100Wh per batteri. Därför kommer ingen begränsning att införas.*

### 8.2.2. Zen-O lite™ syrgaskoncentrator som handbagage

Din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator kan tas med på flyget som handbagage eller incheckat bagage. Det är däremot **förbjudet att ha extra litiumbatterier i incheckat bagage på ett flygplan.**

### 8.2.3. Att ta hänsyn till gällande placering och stuvning av din Zen-O lite™ syrgaskoncentrator

För att en Zen-O lite™ syrgaskoncentrator ska fungera effektivt får inte luft-/intagsfiltret vara blockerat vid användning. Därför måste området omkring Zen-O lite™ syrgaskoncentrator vara fritt från filter, jackor och andra typer av handbagageartiklar som kan blockera luft-/intagsfiltret. Om luft-/intagsfiltret är blockerat kommer två saker att ske. Först kommer du att varnas via varningslampor och/eller ljudsignaler om att syrekoncentrationen i din Zen-O lite™ syrgaskoncentrators utmatning är otillräcklig. Sedan, när temperaturen hos Zen-O lite™ syrgaskoncentrators inre komponenter stiger till en viss gräns eftersom Zen-O lite™ syrgaskoncentrator fortfarande försöker att mata ut syre, kommer Zen-O lite™ syrgaskoncentrator automatiskt att stängas av för att förhindra överhettning och du kommer att varnas via varningslampor och/eller ljudsignaler.

**Placering av Zen-O lite™ syrgaskoncentrator ombord på flygplanet ska placeras under sätet framför dig så att du eller flygpersonalen kan se varningslampor och/eller höra ljudsignaler. Placering under ditt eget säte eller i ett stängt utrymme förhindrar att du ser varningslamporna och kan möjligen också förhindra att du hör ljudsignaler. Annan placering kan vara acceptabel om den anses vara acceptabel av flygvärdinnan.**

### 8.2.4. Sittplatsbegränsningar för personer som planerar att använda en Zen-O lite™ syrgaskoncentrator ombord på ett flygplan

**Nödutgångsplats** – FAA förbjuder personer som använder hjälpmedel, inklusive Zen-O lite™, att sitta på en nödutgångsplats.

**Förvaring under rörelse** – då flygplanet förflyttar sig på marken (bogsering från gaten och taxning), start och landning, måste Zen-O lite™ syrgaskoncentrator vara ordentligt förvarade

på ett sådant sätt att den inte begränsar någon passagerares åtkomst till nödutgångar eller mittgången i passagerarutrymmet. Ytterligare sittplatsbegränsningar kan krävas för att uppfylla FAA:s säkerhetsregler. Exempel:

1. Vissa platser på ett flygplan, såsom säten vid skiljeväggar, har inte alltid godkänt förvaringsutrymme för en Zen-O lite™ syrgaskoncentrator vid förflyttning på marken, start och landning. Därför kanske inte Zen-O lite™ syrgaskoncentrator kan förvaras korrekt under dessa flygfaser om en användare av Zen-O lite™ syrgaskoncentrator sitter på dessa platser. I sådana fall kan sittplatsbegränsningar gälla.
2. Vid förflyttning på marken, start och landning får inte slangen till näsgrimmans som används för att mata syrgas från din korrekt placerade Zen-O lite™ syrgaskoncentrator sträcka sig över raden på ett sådant sätt att den begränsar passagerares rörlighet eller blir en snubbelrisk vid evakuering. Du får aldrig begränsa en annan passagerares rörlighet under dessa faser i flygningen. I sådana fall kan ytterligare sittplatsbegränsningar krävas för att uppfylla FAA:s säkerhetsregler. Exempelvis, om alla platser i en rad är upptagna, är den lämpliga platsen för den som använder en Zen-O lite™ syrgaskoncentrator fönsterplatsen.
3. En operatör kan endast fastställa sittplatsrestriktioner baserade på FAA:s säkerhetsregler. Exempelen ovan representerar vissa, men inte alla, tänkbara scenarier.

*VIKTIGT: En allmän flygbolagspolicy som säger att alla passagerare som går ombord flygplanet med en Zen-O lite™ syrgaskoncentrator måste ha en fönsterplats, utan att ta den individuella statusen i beaktande, skulle inte vara i enlighet med FAA:s krav.*

### 8.2.5. Tryckfall i kabinen

En Zen-O lite™ syrgaskoncentrator som används under ett tryckfall i kabinen utgör ingen fara. Dock bör du, i händelse av tryckfall i kabinen (snabbt eller långsamt) använda de syrgasmasker som distribueras tills flygplanet stabiliseras.

### 8.2.6. Användande av flygplanets el

Operatörerna har ingen skyldighet att tillhandahålla flygplanets el till användare av Zen-O lite™ syrgaskoncentrator. Eluttag ombord på flygplan anses inte vara viktig utrustning och krävs inte av den tillämpliga certifieringen eller operativa bestämmelser. Dessutom kan elektriska felfunktioner i flygplanssystem kräva att strömtillförseln till dessa uttag inaktiveras på marken eller under flygningen för dess säkerhets skull. P.g.a. detta ska Zen-O lite™ syrgaskoncentrator enbart drivas med batterikraft ombord på flygplan. **Du bör aldrig förlita dig på att ett flygplan har el tillgänglig under en flygning**

### 8.2.7. Rökning

Rökning (inklusive e-cigarett) under syrgasterapi är farligt och kommer sannolikt att leda till allvarliga skador eller dödsfall för patienten och andra på grund av brand. Tillåt inte rökning eller öppen eld inom tre meter av den bärbara syrgaskoncentratorn eller några tillbehör för att bära syrgas.

### 8.3. Krav från Transportsäkerhetsadministrationen (Transport Security Administration — TSA)

Detaljerad information som är väsentlig för passagerare som använder andningsenheter, inklusive Zen-O lite™ syrgaskoncentratorer, kan fås från TSA på <https://www.tsa.gov/travel/special-procedures>.

**Följande allmänna överväganden vid säkerhetskontroller gäller för Zen-O lite™ syrgaskoncentratorer:**

1. Gränsen för ett handbagage och ett personligt föremål (t.ex. handväska, portfölj eller datorväska) gäller inte medicinska förnödenheter, utrustning, rörelsehjälpmedel och/eller hjälpmedel som bärs av och/eller används av en person med funktionshinder.
2. Om en person har medicinsk dokumentation gällande sitt medicinska tillstånd eller sitt funktionshinder kan de visa denna information för kontrollanten för att informera denne om sin situation. Denna dokumentation är inte obligatoriskt och kommer inte att undanta en person från säkerhetskontrollprocessen.

## 9. Alarmindikatorer

Om den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ upptäcker ett alarmtillstånd visar den alarmet på skärmen och med ljud inom tio sekunder. Det finns fyra alarmlägen: kritisk högprioritet, hög prioritet, mellanprioritet och låg prioritet.

Varje alarm visas olika på skärmen, med de gula och röda LED-lamporna och med ljud enligt schemat nedan. Alarmmeddelanden och strömstatus ersätter alltid nuvarande skärmvisning.

*VIKTIGT: Alla alarmtillstånd och parametrar är inbyggda och kan inte ändras eller justeras av användaren.*

*VIKTIGT: Alarmsystemet testas under startsekvensen. Alla alarmlampor ska tändas kort och alarmindikatorn ska pipa.*

| Alarmstatus                 | Ljud   | Visuell indikator  | Tystnad    |
|-----------------------------|--|--|------------|
| <b>Kritisk högprioritet</b> | Tio pip åt gången som upprepas var tredje sekund.  | Röd LED-lampa lyser och utrustningen stängs av automatiskt | 20 minuter |
| <b>Hög prioritet</b>        | Tio pip åt gången som upprepas var tredje sekund.  | Röd LED-lampa blinkar                                      | 20 minuter |
| <b>Mellanprioritet</b>      | Tre pip åt gången som upprepas var åttonde sekund. | Gul LED-lampa blinkar                                      | 8 timmar   |
| <b>Låg prioritet</b>        | Tre pip åt gången som upprepas var tionde minut.   | Gul LED-lampa lyser  | 24 timmar  |



**VIKTIGT:** Om två alarmtillstånd uppstår samtidigt visas det alarm som har högst prioritet. Om två eller fler alarmtillstånd med samma prioritet uppstår samtidigt visas det senaste alarmet.

**VIKTIGT:** Utrustningen registrerar de senaste alarmen som referens för underhållspersonal. Utrustningen registrerar dessa även om den är i strömsparkläge eller om strömmen förlorats av någon annan anledning.

**VIKTIGT:** Om tystknappen aktiverats innan en alarmsituation (till exempel för att tysta utrustningen i en biosalong) kommer kritiska högprioritetsalarm och högprioritetsalarm att åsidosätta tystfunktionen. Mellan- och lågprioritetsalarm tystas i åtta timmar från knapptryckningen. Stäng av tystknappen för att visas det senaste alarmet med högst prioritet. Tryck på tystknappen igen för att återställa åttatimmarsstimern.

## 9.1. Alarm

När ett alarm går på koncentratorn visas ett överensstämmande meddelande på skärmen. Utför motsvarande handling som visas i schemat nedan.

### 9.1.1. Kritiska Högprioritetsalarm

**VIKTIGT:** Dessa alarm inaktiverar utrustningen omedelbart.

| Alarmmeddelande        | Beskrivning                            | Handling  |
|------------------------|--|---|
| <b>ladda batt.</b>     | Batteriet behöver laddas.              | Ladda batteriet genom att ansluta det till strömkällan. Se till att alla anslutningar är säkra. |
| <b>Ogiltigt batt.</b>  | Batteriet är inte ett godkänt batteri. | Byt ut batteriet mot ett godkänt batteri.   |
| <b>XX: servicekod*</b> | Underhåll krävs.                       | Kontakta din distributör.   |

\*Värde: 01-20



### 9.1.2. Högprioritetsalarm

*VIKTIGT: Dessa alarm låter utrustningen fortsätta arbeta.*

| Alarmmeddelande        | Beskrivning  | Handling   |
|------------------------|--|--|
| <b>kont. vent.</b>     | Utrustningen kan inte upprätthålla syrgasrenheten. | Kontrollera att ventilationen inte är blockerad. Kontakta din distributör om alarmet fortsätter.   |
| <b>svagt batteri</b>   | Uppskattad batteritid mindre än 17 minuter.        | Ladda batteriet genom att ansluta det till strömkällan.<br><i>VIKTIGT: Meddelandet försvinner automatiskt när utrustningen ansluts till strömkällan.</i> |
| <b>XX: servicekod*</b> | Underhåll krävs.                                   | Kontakta din distributör.  |

\*Värde: 21-50

### 9.1.3. Mellanprioritetsalarm

| Alarmmeddelande        | Beskrivning                           | Handling   |
|------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>kont. kanylen</b>   | Inga andetag noterade på 15 sekunder. | Kontrollera kanylanslutningen. Se till att andas genom näsan. Kontakta din distributör om alarmet fortsätter.<br><i>Viktigt: Meddelandet försvinner automatiskt när andetag noteras.</i> |
| <b>XX: servicekod*</b> | Underhåll krävs.                      | Kontakta din distributör.  |

\*Värde: 51-70


### 9.1.4. Lågprioritetsalarm

| Alarmmeddelande        | Beskrivning      | Handling                  |
|------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>XX: servicekod*</b> | Underhåll krävs. | Kontakta din distributör. |

\*Värde: 51-70



SV

### 9.1.5. Andra Meddelanden

| Meddelande  | Beskrivning  | Handling  |
|---|--|---|
| <b>Ström avkoppl</b>  | Strömkällan har kopplats bort, enheten körs nu på batteri.   | Ingen handling krävs.   |
| <b>Avstängning</b>  | Visas medan enheten går igenom avstängningssekvensen.  | Ingen handling krävs.   |
| <b>Inget batteri</b>  | Visas i batterimenyn när inget batteri upptäcks.   | Kontrollera att batteriet är korrekt installerat. Kontakta din distributör om batteriet är korrekt insatt och meddelandet fortsätter att visas i mer än 30 sekunder.              |
| <b>Laddar NN%</b>  | NN% visar nuvarande batteriladdning.<br>Visas när batteriladdningen är större än 10 % men mindre än 100 % och ingen extern strömkälla är ansluten.                           | Meddelandet visas när batteriknappen är intryckt.   |
| <b>Laddar</b>   | Batteriladdningen är mindre 10% och en extern strömkälla är ansluten.  | Meddelandet visas när batteriknappen är intryckt.   |
| <b>Andn.frekv. XX</b>   | Patientens genomsnittliga andningstakt när utrustningen levererar maximal mängd syrgas och Bolus är reducerad. Om inga andetag registreras visas den senaste andningstakten. | Reducerad aktivitetsnivå. Kontrollera att ventilationen inte är blockerad.<br><i>Viktigt: Meddelandet försvinner automatiskt när utrustningen återgår till normal användning.</i> |
| <b>Larm återst.</b>   | Ett tidigare inställt alarm har deaktiverats automatiskt.  | Ingen handling krävs.   |

SV

## 10. Problemsökning

| Problem   | Möjlig orsak   | Problemsökning   |
|---|--|--|
| Systemet är ur funktion   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemet kan vara bortkopplat från strömkällan.</li> <li>• Systemet kan vara avstängt.</li> <li>• Ett kritiskt högprioritetsalarm har upptäckts.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att systemet är säkert anslutet till strömkällan.</li> <li>• Kontrollera att systemet är på.</li> <li>• Undersök om systemet blivit skadat eller utsatt för vätska.</li> <li>• Kontakta din distributör om problemet fortsätter.</li> </ul>   |
| Något alarmljud eller antingen<br> eller<br> LED-lampa tänd | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se kapitel 9. Alarmindikatorer.</li> </ul>  | Se kapitel 9. Alarmindikatorer.  |
| Batteriet laddas inte   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strömmen är inte ansluten.</li> <li>• Batteriet är inte korrekt isatt.</li> <li>• Batteriet fungerar inte.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera anslutningarna för att säkerställa att:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• De runda kopplingarna sitter säkert i enheten.</li> <li>• Strömsladden är ansluten till en växel/likströmskälla eller att en självgående likströmsadapter är ansluten (om tillämpligt).</li> <li>• Strömsladden är ansluten till ett eluttag (om tillämpligt).</li> <li>• Det finns ström i eluttaget.</li> </ul> </li> <li>• Kontrollera att batteriet är korrekt isatt och att batterikåpan är säkrad.</li> <li>• Kontakta din distributör om problemet fortsätter.</li> </ul> |

SV

## 11 Underhåll och Rengöring

### 11.1. Rutinunderhåll

**⚠ VARNING:** Använd inte smörjmedel på utrustningen eller dess tillbehör.

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Byt ut kanylen regelbundet. Rådfråga din distributör eller vårdgivare om hur ofta du bör byta ut kanylen.

Utrustningen indikerar med ett alarm när ett filter eller komponent behöver rengöras eller bytas ut. (Se också kapitel 10. Problemsökning.)

*Viktigt: Kanylen och patientfiltret kan bli förorenade av patienten. Se till att dessa komponenter hanteras varsamt.*

### 11.2. Yttre Rengöring

**⚠ VARNING:** Sänk inte ned utrustningen i vätska. Utsätt inte för vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte för dammiga miljöer.

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Använd inga andra rengöringsmedel än de som nämns i denna bruksanvisning. Låt rengöringsmedlet torka från den rengjorda ytan före användning.

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:** Koppla bort strömkällan och stäng av utrustningen innan du rengör den.

Rengör utsidan med en mjuk trasa som fuktats med såpvatten eller med antibakteriella trasor (70-procentig isopropanollösning).

*Viktigt: Utrustningen bör rengöras utvändigt en gång i veckan. Tillbehör bör rengöras vid behov. Utsidan på enheten bör också rengöras före leverans till en ny patient. Det är också rekommenderat att ersätta filter för utandning från patient.*

Näskanyl: Se originaltillverkarens anvisningar för rengöring av näskanylen.

### 11.3. Livslängd

Utrustningens förväntade livslängd är fem år, förutom skikten. Skiktens livslängd beror på bruksmiljön. Byt ut dem när detta indikeras av luftvägsalarmet. Om de in- och utgående luftvägarna inte är blockerade och luftvägsalarmet fortsätter bör du kontakta din distributör för instruktioner om hur du byter ut skikten.

### 11.4. Serviceanslutningen

Serviceanslutningen passar ihop med serviceselen TF-02.091 (5,1 VDC maximum) och används endast för service.



Fig. 8

## 12 Reparation och Avyttring Av Utrustningen

### 12.1. Reparation

Försök inte att reparera utrustningen Kontakta din vårdgivare eller distributör för assistans (se kapitel 10. Problemsökning).

Siktrören kan ersättas av patienten som bestämts av syrgasleverantören eller distributören. Allt annan underhåll eller reparation måste utföras av utbildad servicepersonal.

### 12.2. Anvisningar för byte av siktrören:

1. Stäng av enheten och koppla ifrån AC eller DC-strömkällan (om den är ansluten).
2. Ta bort enheten från väskan.
3. Ta bort batteriet från enheten.
4. Tryck på de fyra frigörningsknapparna längst upp på enheten för att ta bort det övre locket som visas i Fig. 9.
5. För att kunna ersätta kolonen, använd verktyget som medföljer i paketet och rotera kolonen moturs 3-4 varv tills den kan tas bort. Det görs genom att man dra upp den mot toppen av enheten.
6. Upprepa för den andra kolonen.
7. Ta bort ersättningskolonen ur förpackningen. Ta bort luftkontakten på kolonen och installera omedelbart. Varning: Låt inte ersättningskolonen exponeras.
8. Installera de nya kolonen med en gänga vid toppen av enheten, såsom visas i Fig. 10.
9. Dra åt sikten.
10. Använd verktyget för att slutföra installationen.

#### **WARNING: Dra inte åt för hårt!**

11. Repetera steg 8-10 för den andra ersättningskolonen.
12. Sätt tillbaka locket på enheten genom att trycka ner det från toppen tills de fyra knapparna sitter på plats.
13. Sätt tillbaka batteriet i enheten.
14. Anslut enheten till en AC eller DC-strömkälla.

#### **SÄTT INTE PÅ STRÖMMEN!**











15. Tryck på alarmavstängning  och batteriet  knapparna samtidigt tills displayen visar "Läckagetest".
  - a. Enheten indikerar framsteg genom decimaler till höger om "Läckagetest".



Fig. 9



Fig. 10

- b. När den är klar kommer enheten indikera "Test godkändes" eller "Test misslyckades".
  - i Test godkändes – Tryck på batteriknappen  för att avsluta och fortsätt med steg 16
  - ii Test misslyckades- Tryck på batteriknappen  för att avsluta. Repetera sedan steg 4-15.
16. Om läkagetestet har godkänts, rensa timräknaren för kolonen på enheten.
  - a. Starta din bärbara oxygenkoncentrator, Zen-O™ lite.
  - b. Tryck samtidigt på  och  knapparna tills "Diagnostik visas".
  - c. Tryck på  eller  knappen för att navigera diagnostikmenyn tills "XXXX sikt" visas, där XXXX = antal timmar sen den gamla kolonen togs i bruk.
  - d. Tryck på knappen för alarmavstängning  tills timräknaren visar 0 timmars användning av kolonen
  - e. Tryck på batteriknappen  för att avsluta diagnostikläge.
  - f. Enheten är nu klar att användas

*Viktigt: Kontakta din syrgasleverantör eller distributör om enheten inte godkänns efter flera försök.*

### 12.3. Avyttring

- Kontakta din distributör angående avyttring av utrustningen.
- Avyttra batteriet enligt lokala bestämmelser eller kontakta din distributör.

## 13 Garanti

Garantin för enheten är begränsad till tre (3) år från tillverkningsdatum, detta exkluderar siktrören som bara har ett års garanti. Alla tillbehör, inklusive batterier är begränsade till ett (1) års garanti.

Garantin gäller endast för produkter som hanteras i enlighet med instruktionsboken och i enlighet med allmän god praxis och industriella standarder.

## SV 14 Varumärken och Ansvarsfriskrivning

### 14.1. Varumärke

Alla varumärken är respektive ägares egendom.

### 14.2. Ansvarsfriskrivning

Informationen i detta dokument har undersökts noggrant och antas vara pålitlig. Vidare tar sig tillverkaren rätten att ändra i bruksanvisningen för att förbättra läsbarhet, funktion och/eller design. Tillverkaren tar inget ansvar för användande av någon av produkterna som beskrivs i bruksanvisningen. Vidare täcker tillverkaren inte licenser under sina patentlagar eller andras rättigheter.

### 14.2.1. Detta Dokument

Informationen i detta dokument kan ändras utan varsel. Dokumentet täcker ägarinformation som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras på något sätt, varken i sin helhet eller delvis (förutom korta avsnitt i recensioner och vetenskapliga tidskrifter) utan tidigare skriftligt godkännande från tillverkaren. Se till att du läst och förstått alla bruksanvisningar som medföljer produkten.

### Hjälp

Om du har frågor om informationen i dessa instruktioner eller om hur du använder utrustningen på ett säkert sätt bör du kontakta din distributör.

## 15 Teknisk Beskrivning

|  |  |
|--|--|
| <b>Storlek:</b>                            | 249 mm (B), 97 mm (D), 231 mm (H)<br>9.8" (B), 3.8" (D), 9.1" (H)  |
| <b>Enhetsvikt:</b>                         | 2.5 kg (5.5 lbs) (Utan väska)  |
| <b>Strömkrav:</b>                          | Växelströmsadapter: 100–240 V växelström (+/- 10 %), 50–60 Hz in, 24 V likström, 5.0 A ut. Likströmsadapter: 11,5-16 V likström in, 24 V, 5.0 A ut<br><i>(Viktig: se tillbehörslistan för modell- och artikelnummer för AC- och DC-strömförsörjnings förpackningar.)</i> |
| <b>Renhet:</b>                             | 87 % – 96 % vid alla flödes hastigheter, över brukstillstånd   |
| <b>Inställning:</b>                        | Justerbar av användaren i steg om 0.5 från 1.0 till 5.0.   |
| <b>Känslighet för inandningsindikator:</b> | -0.12 cm/H <sub>2</sub> O  |
| <b>Inställningsindikator:</b>              | LCD  |
| <b>Maximalt tryck för syrgasutlösning:</b> | 20.5 psi   |
| <b>Luftfuktighetsspann:</b>                | 5% to 93% ± 2% icke-kondenserande  |
| <b>Stäng av enheten:</b>                   | Ingång strömförsörjning  |
| <b>Driftshöjd:</b>                         | 0 ft till 13 000 ft (0 m till 4 000 m) relativt till havsytan, 1 060 ner till 575 mbar   |
| <b>Ljudtrycksnivå:</b>                     | 44dBA vid inställning 2 och 18 BPM<br>(Vid mätning 1m från framsidan av utrustningen)  |

Maximal ljudtrycksnivå på 52,5dBA enligt ISO 80601-2-69

## Teknisk Beskrivning (fortsättning)

|  |  |
|--|--|
| <b>Skyddstyp (elektrisk):</b>                                      | Klass II   |
| <b>Skyddsgrad (elektrisk):</b>                                     | Typ BF   |
| <b>Skyddsgrad (vatten):</b>  | IP22 i bärväskan (skyddar mot små föremål och vinklat dropande vatten)<br>IP20 utanför bärväskan (skyddar mot små föremål och inget skydd mot vattenintrång i koncentratorn) |
| <b>Säkerhetsgrad (lät-<br/>tantändliga bedövn-<br/>ingsmedel):</b> | Inte avsedd för användning nära lättantändliga<br>bedövningsmedel  |
| <b>Användningstempera-<br/>tur:</b>                                | Fortgående användning vid temperaturer mellan 5 °C (41 °F) och<br>40 °C (104 °F).  |
| <b>Förvaringstemperatur:</b>                                       | Mellan -20 °C (-4 °F) och 60 °C (140 °F).  |
| <b>Ljudtrycksnivå på<br/>alarm:</b>                                | 65 till 85 dB(A)   |
| <b>Alarmfördröjningar:</b>   | Mindre än tio sekunder efter upptäckt (alarm för låg syrgas-<br>nivå om syrgasens volym är mindre än 82 % i den specificerade<br>miljön)                                     |
| <b>Syrgaskoncentratorns<br/>statusindikator:</b>                   | Högprioritetsalarm som indikerar när syrgaskoncentrationen<br>sjunker under 82 %   |

## Bolusstorlek (ml/andetag) för pulsläge gentemot inställning och andningstakt

|                   | Inställning |    |      |      |      |
|-------------------|-------------|----|------|------|------|
| Andetag per minut | 1           | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 15                | 11          | 22 | 33   | 44   | 55   |
| 20                | 11          | 22 | 33   | 44   | 52.5 |
| 25                | 11          | 22 | 33   | 42   | 42   |
| 30                | 11          | 22 | 33   | 35   | 35   |
| 35                | 11          | 22 | 30   | 30   | 30   |
| 40                | 11          | 22 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |

\* Alla värden är +/- 15 % i alla bruksmiljöer



## 15.1. Information om Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

Medicinsk elektrisk utrustning kräver speciella försiktighetsåtgärder angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Bärbara och mobila radiofrekvenskommunikationsutrustningar kan påverka utrustning som den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™. Därför bör utrustningen inte användas i närheten av annan utrustning. Om detta inte är möjligt ska du observera utrustningen för att säkerställa att den alltid fungerar korrekt.

### 15.1.1. Vägledning och Tillverkarens Förklaring: Elektromagnetisk Strålning

Den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™ är till för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av koncentratoren bör säkerställa att den används i en sådan miljö.


| Strålningstest                                 | Överensstämmelse | Elektromagnetisk miljö/vägledning   |
|--|------------------|---|
| Radiofrekvensstrålning CISPR 11                | Grupp 1          | Den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™ använder endast radiofrekvensenergi för dess interna funktioner. Därför är dess radiofrekvensstrålning mycket låg och kommer troligtvis inte att orsaka störning hos närliggande elektronisk utrustning. |
| Radiofrekvensstrålning CISPR 11                | Klass B          | Koncentratoren är avsedd för användning i alla inrättningar. Detta inkluderar hemmiljöer och miljöer direkt kopplade till det offentliga lågvoltsnätverket som tillhandahåller byggnader för användning i hemmet.                                     |
| Harmonisk strålning IEC 61000-3-2              | Klass A          |   |
| Voltsvängningar/flimmerstrålning IEC 61000-3-3 | Uppfyller        |   |

### 15.1.2. Vägledning och Tillverkarens Förklaring: Elektromagnetisk Immunitet

Zen-O lite™ är till för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av koncentratorn bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

| Immunitetstest  | IEC 60601 testnivå   | Uppfyllningsnivå   | Elektromagnetisk miljö/vägledning   |
|---|--|--|---|
| Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2                                       | ± 2, 4, 6, 8kV kontakt<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV luft   | ± 2, 4, 6, 8kV kontakt<br>± 2, 4, 8, 10, 15kV luft   | Golv bör vara av trä, betong eller kakel.<br>Om golvet är täckt av syntetiska material bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.  |
| Elektrisk snabbt utlopp/utbrott IEC 61000-4-4                                       | ± 2 kV för strömledningar<br>± 1 kV för inlopps-/utloppsledningar  | ± 2 kV för strömledningar<br>± 1 kV för inlopps-/utloppsledningar  | Huvudströmkällan bör vara i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.   |
| Strömtopp IEC 61000-4-5   | ± 1 kV differensläge<br>± 2 kV vanligt läge  | ± 1 kV differensläge<br>± 2 kV vanligt läge  | Huvudströmkällan bör vara i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.   |
| Voltsänkor, korta avbrott och voltvariationer på strömkällans inlopp IEC 61000-4-11 | < 5 % UT (>95 % sänka i UT) för 0,5 cykel<br>40 % UT (60 % sänka i UT) för 5 cykler<br>70 % UT (30 % sänka i UT) för 25 cykler<br>5 % UT (>95 % sänka i UT) för 5 cykler | < 5 % UT (>95 % sänka i UT) för 0,5 cykel<br>40 % UT (60 % sänka i UT) för 5 cykler<br>70 % UT (30 % sänka i UT) för 25 cykler<br>5 % UT (>95 % sänka i UT) för 5 cykler | Huvudströmkällan bör vara i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö. Om användaren av den bärbara syrgaskoncentratorn Zen-O lite™ behöver fortsatt användning under strömavbrott rekommenderas det att koncentratorn drivs av en strömkälla som inte kan avbrytas eller ett batteri. |

## Vägledning och Tillverkarens Förklaring: Elektromagnetisk Immunitet (fortsättning)

| Immunitetstest   | IEC 60601 testnivå                          | Uppfyllningsnivå         | Elektromagnetisk miljö/vägledning   |
|--|---|--------------------------|---|
| Strömfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8  | 30 A/m                                      | 30 A/m                   | Strömfrekvensens magnetfält bör vara på en nivå typisk för kommersiell eller sjukhusmiljö.  |
| Ledd radiofrekvens IEC 61000-4-6   | 3 Vrms 150 kHz till 80 MHz; 6Vrms ISM Bands | 3 Vrms (6Vrms ISM Bands) | Bärbar och mobil radiofrekvensutrustning bör inte användas närmare någon del av utrustningen (inklusive sladdar) än det rekommenderade avståndet som beräknats från den tillämpliga ekvationen för sändarens frekvens. Rekommenderat separationsavstånd:<br>$a = 1,2 \sqrt{P}$ 150 kHz till 80 MHz<br>$a = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz<br>$a = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz till 2,5 GHz<br>där P är de maximala strömutloppet för sändaren i Watt (W) växelström enligt sändarens tillverkare och a är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). Fältstyrkor från fasta radiofrekvensutrustningar (som uppmätts av en elektromagnetisk fältundersökning) <sup>a</sup> bör vara mindre än uppfyllningsnivån i varje frekvensradie <sup>b</sup> .<br>Störningar kan inträffa i närheten av utrustning märkt med följande symbol:  |
| Radiofrekvensstrålning IEC 61000-4-3   | 10 V/m 80 MHz till 2,5 GHz                  | 10 V/m                   |   |
| <p><i>VIKTIGT: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller den högre frekvensradien.</i></p> <p><i>VIKTIGT: Dessa riktlinjer kanske inte gäller för alla situationer. Den elektromagnetiska spridningen påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.</i></p> <p><sup>a</sup>Fältstyrkor från fasta sändare som basstationer för radiotelefoner (mobil/trådlös) och landmobilradio, amatör-radio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas med säkerhet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön med hänsyn till radiofrekvenssändare bör en elektromagnetisk fältstudie övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där Zen-O lite™ används överstiger den tillämpliga radiofrekvensnivån ovan bör koncentratorn hållas under uppsikt för att bekräfta att utrustningen fungerar normalt. Om utrustningen inte fungerar normalt kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, som att flytta på koncentratorn.</p> <p><sup>b</sup>Över frekvensradien 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara mindre än 6 V/m.</p> |   |                          |   |

SV

### 15.1.3. Rekommenderat Avstånd Mellan Bärbar och Mobil Radiofrekvensutrustning och den Bärbara Syrgaskoncentratoren Zen-O lite™

Den bärbara syrgaskoncentratoren Zen-O lite™ är till för användning i en elektromagnetisk miljö med kontrollerade radiofrekvensstörningar. Användare av monitorn kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk störning genom att hålla avståndet mellan bärbar och mobil radiofrekvenskommunikationsutrustning (sändare) och monitorn enligt rekommendationerna nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala utgående strömstyrka.







| Uppmätt maximal strömstyrka hos sändaren (W) | Avstånd (m) enligt sändarens frekvens     |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 150 kHz till 80 MHz<br>$a = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz till 800 MHz<br>$a = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz till 2,5 GHz<br>$a = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0.01   | 0.12                                      | 0.12                                      | 0.23                                       |
| 0.1  | 0.38                                      | 0.38                                      | 0.73                                       |
| 10   | 3.8                                       | 3.8                                       | 7.3  |
| 100  | 12  | 12  | 23   |

För sändare med uppmätt maximal strömstyrka som inte listas ovan kan det rekommenderade avståndet (a) i meter (m) uppskattas genom att använda ekvationen som är applicerbar på sändarens frekvens, där P är den uppmätta maximala strömstyrkan för sändaren i Watt (W) enligt sändarens tillverkare.

*Viktigt: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för den högre frekvensradien.*

*Viktigt: Dessa riktlinjer kanske inte gäller för alla situationer. Den elektromagnetiska spridningen påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.*

## 16 Ordlista – Förklaring av Symboler på Förpackning och Etiketter
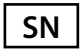
|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Läs instruktionerna före användning         |  | Atmosfäriskt tryck vid användning begränsas till mellan 4 000 m (0 ft och 13 000 ft) |
|  | Typ BF enligt kraven för elektrisk säkerhet |  | Lagringstemperatur begränsas till mellan -20 °C och 60 °C (-4 °F och 140 °F)         |
|  | Serienummer                                 |  | Luftfuktighet begränsas till mellan 5 % och 93 % ± 2 % icke-kondenserande            |

SV

## Ordlista – Förklaring av Symboler på Förpackning och Etiketter (fortsättning)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|                       | Katalognummer   |    | Hanteras varsamt  |
|                       | USA:s federala lagar begränsar försäljningen av denna utrustning till att endast säljas av eller enligt beställning av en ordinerande vårdgivare. |    | Tillverkningsdatum  |
|                       | Använd inte om förpackningen är skadad. Se kapitel 6.   |    | Tillverkare   |
| <br>No Open<br>Flames | Ingen öppen eld när utrustningen används eller bränn inte utrustningen  | <br>Do not<br>get wet<br><b>IP20</b>       | Håll utrustningen torr (symbolen hänvisar till utrustningens IPX2-klassificering) |
| <br>No<br>Smoking     | Rökning förbjuden   | <br>DISPOSE OF<br>USED BATTERY<br>PROPERLY | Avyttra det använda batteriet korrekt   |
|                       | Separera återvinning för elektrisk och elektronisk utrustning   |    | Klass II-symbol   |
|                       | I enlighet med applicerbara EU-direktiv inklusive direktiv för medicintekniska produkter  |    | Lämplig för hemsjukvård   |

SV



GCE Ltd  
100 Empress Park, Penny Lane, Haydock,  
St Helens WA11 9DB  
United Kingdom




Tillverkad för: GCE  
2676 Paldan Dr, Auburn Hills,  
MI 48326  
United States









Gas Control Equipment  
<http://www.gcegroup.com>